

ACTIVESHOP[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG

Podologie-Rollwagen 984

HZ-984 grau / weiß



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2026



Scannen für
verschieden
Sprachen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für später auf.


Der Podologie-Rollwagen 984 ist ein einfaches und funktionales Möbelstück für Podologiepraxen, Kosmetiksalons und andere Behandlungsräume, in denen eine gute Organisation des Arbeitsplatzes wichtig ist. Er erleichtert die Aufbewahrung von Werkzeugen, Kosmetika und Geräten und sorgt für Ordnung und Ästhetik im Raum.

Technische Daten	
Leistung der UV-Lampe	6 W
Spannung	230 V ~ / 50 Hz
Maximale Tragkraft	30 kg

Integrierter UV-Sterilisator in der Schublade

Die Schublade mit eingebauter UV-Lampe ermöglicht eine hygienische Aufbewahrung der Instrumente zwischen den Behandlungen. Die verspiegelte Innenausstattung unterstützt die gleichmäßige Wirkung der UV-Strahlung und erhöht so die Wirksamkeit der Sterilisation.

- Das System wird erst nach vollständigem Schließen der Schublade aktiviert,
- Das Herausziehen der Schublade führt zur sofortigen Abschaltung der UV-Lampe.

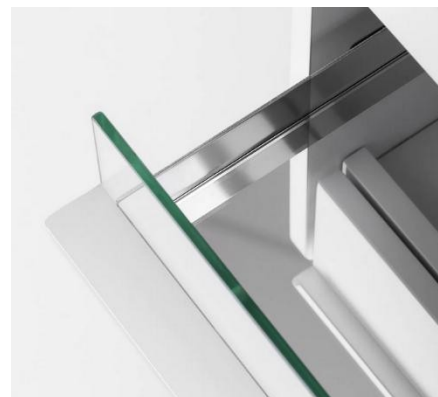

Integrierte Stromanschlüsse

Der Rollwagen verfügt über eine Rückwand mit drei Netzanschlüssen sowie zwei USB-Anschlüssen und einem USB-C-Anschluss, was den bequemen Anschluss verschiedener Geräte ermöglicht.



Ergonomie

- Kabeldurchführungen an den Seitenwänden oberhalb der oberen Schublade.
- Der integrierte Halter für die Lupenleuchte ermöglicht eine stabile Befestigung des Leuchtenarms in der Nähe des Behandlungsfeldes.
- Praktische Rollen erleichtern das reibungslose Verschieben des Schrankes innerhalb der Praxis.

Wartung und Pflege des Produkts

- Leichte Verschmutzungen der Oberfläche sowie Staub sollten regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch entfernt werden.
- Bei fettigen oder hartnäckigen Flecken wischen Sie das Gehäuse zunächst mit einem in einer Lösung aus einem milden Reinigungsmittel getränkten Tuch ab und trocknen Sie anschließend die gesamte Oberfläche.
- Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel wie Benzol, Benzin oder Verdünner, da diese die Struktur der Lackschicht irreversibel beschädigen können.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es nicht in Räumen mit zu hoher Luftfeuchtigkeit.
- Das Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -5 °C bis +50 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 85 % ausgelegt.

Produktabmessungen



Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, um die Gefahr eines Sturzes und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Anleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es keinen direkten Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung

Sollten Funktionsstörungen des Schrankes auftreten, führen Sie bitte die folgenden Überprüfungen durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Symptom	Mögliche Ursache	Behebungsmaßnahme
Aus dem Inneren des Gehäuses sind ungewöhnliche Geräusche zu hören, und die Konstruktion vibriert merklich.	Lockerung der Befestigungsschrauben während des Betriebs.	Alle Schrauben, die die Konstruktionselemente des Schrankes verbinden, müssen sorgfältig überprüft und festgezogen werden.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Bedienung dieses Geräts nicht vertraut sind, verwendet werden, sofern eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährleistet ist und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen in der Nähe befinden, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser

Gerätetyps zu befolgen und es nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen $(-20\text{ }^{\circ}\text{C})$ und $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$ ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von $(+10\text{ }^{\circ}\text{C})$ bis $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$. Während der Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.