

ACTIVESHOP[®]

Gebrauchsanweisung

Azzurro Lux Kosmetikstuhl 3m




Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Scan für
verschiede
ne
Sprachen

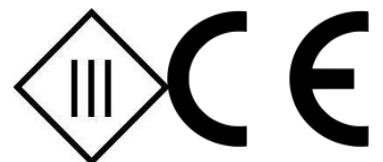

Bitte beachten Sie!

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne oder die Fußstütze.
3. Heben Sie nicht mehr Gewicht, als der Sitz tragen kann.
4. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
5. Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in einer Notsituation leicht entfernt werden kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Stuhls eingeklemmt wird.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
8. Lassen Sie nicht zu, dass eine Person, die die Behandlung nicht durchführt, die Fernbedienung bedient.
9. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
10. Vergewissern Sie sich, dass um den Sitz herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er ungehindert ein- und ausgeklappt werden kann.
11. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Sitzes keine scharfen oder schädlichen Gegenstände befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
12. Nehmen Sie keine eigenen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Stuhl nicht richtig funktioniert, nehmen Sie ihn nicht mehr in Betrieb und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
13. Werfen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sitz und springen Sie nicht auf ihn.

Montage

1. Stecken Sie die Kopfstütze in die Öffnung oben an der Rückenlehne (Abb.1).
2. Positionieren Sie die linke und rechte Armlehne, verbinden Sie sie mit dem Sitzstift und drehen Sie sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 2).

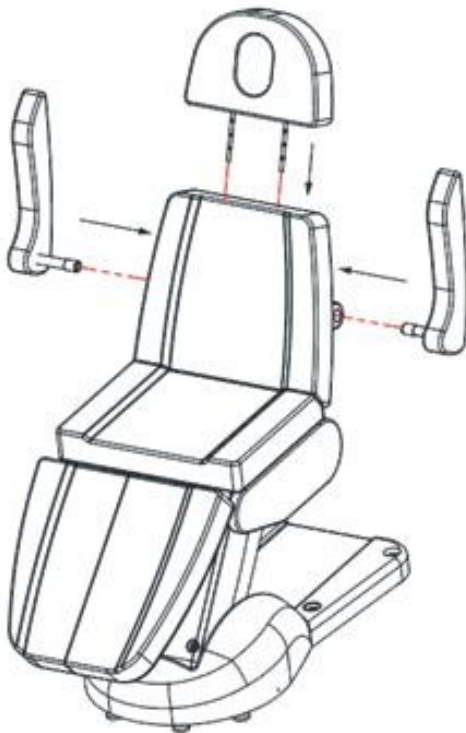


Abb.1



Abb.2


Fernsteuerung




1. Drücken Sie die Taste , um den Sitz anzuheben.
2. Drücken Sie die Taste , zum Absenken des Sitzes.
3. Drücken Sie die Taste , um den Winkel der Rückenlehne zu erhöhen.
4. Drücken Sie den Klappentaste, um den Winkel der Rückenlehne zu verringern.
5. Drücken Sie auf , um den Winkel der Fußstütze zu vergrößern.
6. Drücken Sie auf , um den Winkel der Fußstütze zu verringern.
7. Drücken Sie  oder , um die Sitz-/Rückenheizung zu aktivieren.

Zusätzliche Funktionen

- Ziehen Sie den Griff zurück und halten Sie ihn gedrückt, um den Winkel der Fußstütze einzustellen.

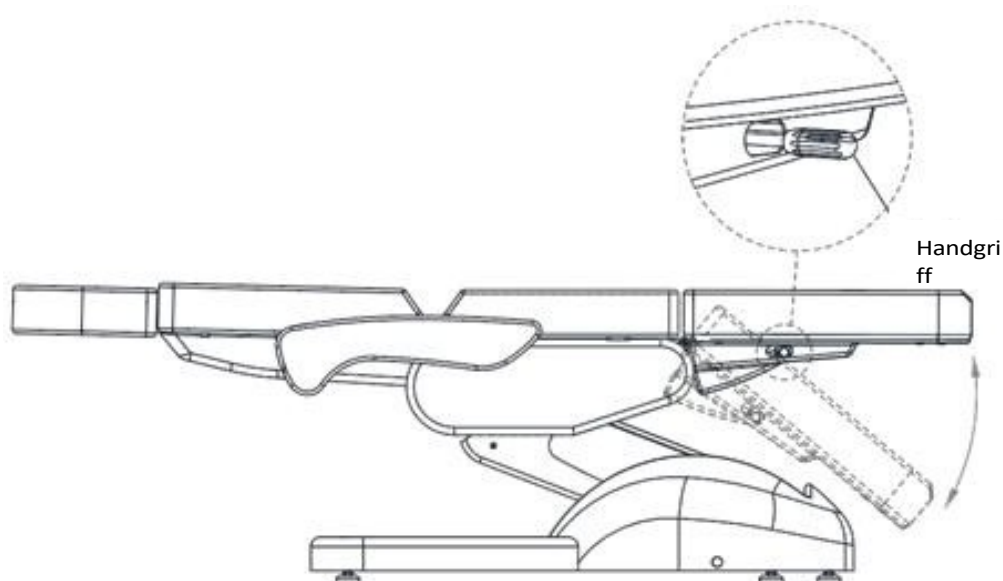

- Die Höhe der Kopfstütze kann durch Hochziehen oder Herunterdrücken eingestellt werden.

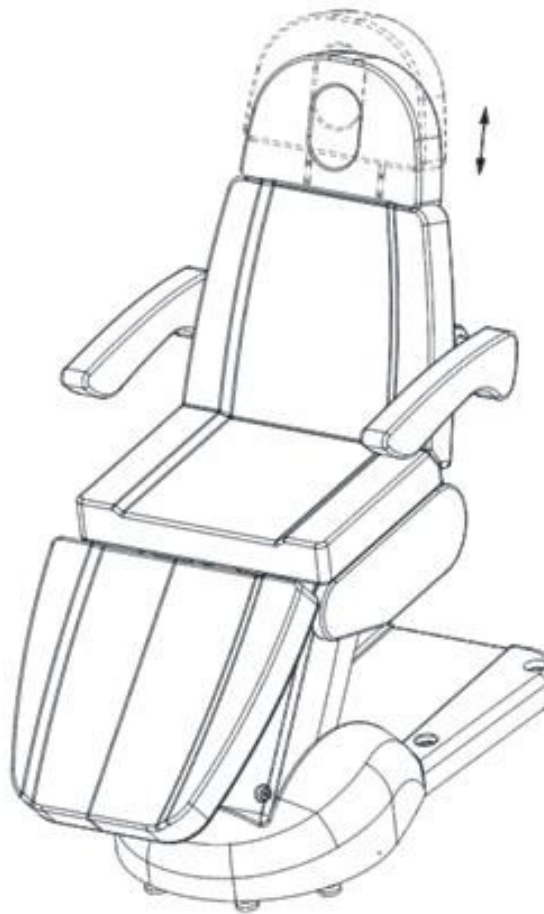

Pflegemaßnahmen:

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

– Zur Reinigung von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

– Die Reinigung mit einer milden Spülmittellösung funktioniert am besten. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät nicht Bedingungen aus, die zu einer Überflutung mit Flüssigkeit führen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

IV Sitzoberfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

- Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
- Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Achtung!

- Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Servicezentrum. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb / Steuereinheit öffnen oder austauschen.
- Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Fehlersuche:

Problem	Erkennung	Lösung
Die Tasten reagieren nicht	<ul style="list-style-type: none">- Prüfen Sie, ob der Netzstecker angeschlossen ist.- Prüfen Sie, ob alle Stecker zum Anschluss des Transformators richtig angeschlossen sind	<ul style="list-style-type: none">- Ziehen Sie den Netzstecker ab und schließen Sie ihn wieder an- Ziehen Sie alle Anschlussstecker ab und schließen Sie sie wieder an.
Beim Anheben des Stuhls treten Geräusche und Vibrationen auf	<ul style="list-style-type: none">- Lose Schrauben	<ul style="list-style-type: none">- Ziehen Sie die Schrauben fest
Die LED leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none">- Das Fernbedienungskabel ist nicht richtig angeschlossen oder die Fernbedienung Fernbedienung ist defekt	<ul style="list-style-type: none">- Schließen Sie das Kabel wieder an, wenn es immer noch nicht funktioniert, tauschen Sie die Fernbedienung aus.

Technische Daten:

Abmessungen: 2000 x 810 x 610-910 mm

Maximale Belastung: 140 kg

Nettogewicht: 76 kg

Höhenverstellbarer Bereich: 610-910 mm

Eingangsspannung: AC 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: DC 24 V

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.

2. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Jegliche Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk, wenn: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch abgibt, raucht oder merkwürdige Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt Umwelt in Übereinstimmung mit Richtlinie 2012/19/EC betreffend Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten.

müssen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

