

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

Azzurro Lux kosmeetikatool 3m



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine




Ettevaatust!

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käe- või jalatoele.
3. Ärge tõstke suuremat kaalu, kui iste suudab kanda.
4. Ohutuse tagamiseks ühendage toitejuhe alati maandatud pistikupessa.
5. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
6. Enne elektrilise ilutooli teisaldamist eemaldage toitejuhe, et see ei jääks tooli osade vahele kinni.
7. Kui toitejuhe on kahjustatud, ühendage juhe kohe lahti, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.
8. Ärge lubage raviga mitteseotud isikul juhtida juhtpulti.
9. Ärge asetage tooli alla mingeid esemeid.
10. Veenduge, et istme ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.
11. Veenduge, et istme ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
12. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
13. Ärge visake raskeid esemeid istmele ega hüpake selle peal.

Paigaldamine

1. Sisestage peatugi seljatoe ülaosas asuvasse auku (joonis 1).
2. Asetage ja ühendage vasak ja parem käetugi istmetapiga ning pöörake seda 90° vastupäeva (joonis2).

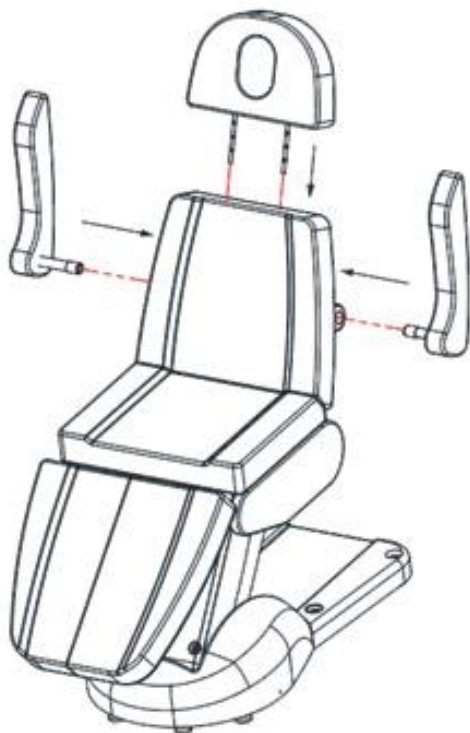

Joonis 1



Joonis 2


Kaugjuhtimispult




1. Vajutage nuppu , et istet tõsta.
2. Vajutage nuppu  nuppu, et istet langetada.
3. Vajutage nuppu  nuppu, et suurendada seljatoe nurka.
4. Vajutage nuppu  nuppu, et vähendada seljatoe nurka.
5. Vajutage nuppu , et suurendada jalatoe nurka.
6. Vajutage nuppu , et vähendada jalatoe nurka.
7. Vajutage  või , et aktiveerida istme/ seljatoe soojendus.

Lisafunktsioonid

- Jalatoe nurga reguleerimiseks tõmmake käepidet tagasi ja hoidke seda all.

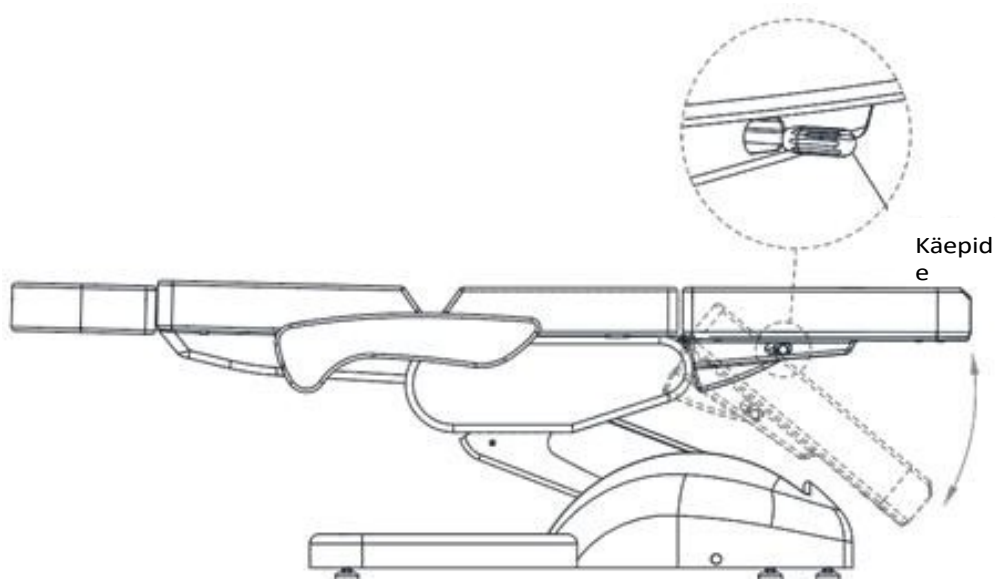

- Peatoe kõrgust saab reguleerida, tõmmates seda üles või lükates seda alla.

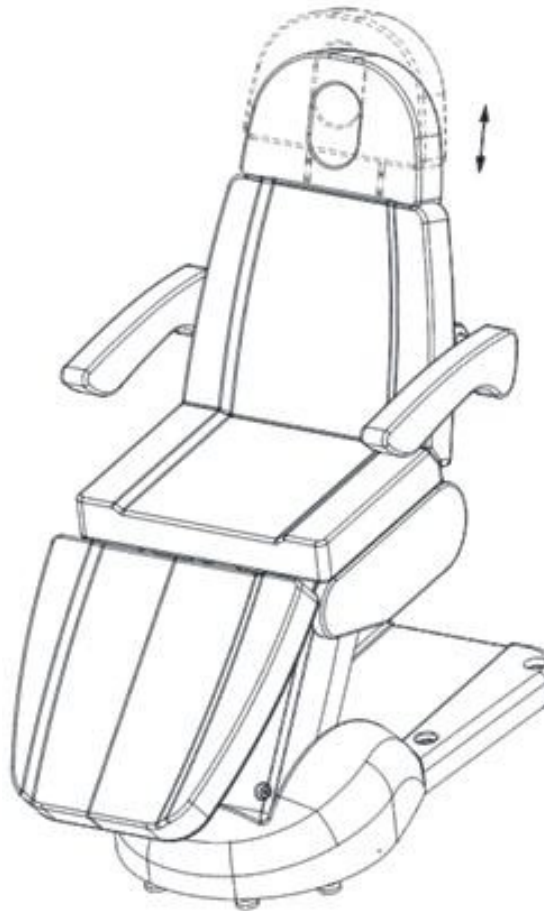

Hooldusmeetmed:

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Tooli pinna heas korras hoidmiseks tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli puhastada ja desinfitseerida pärast iga kasutamist. Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

– Metall- ja plastpindade ning juhtimisseadiste puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike hari sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

– Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahuseid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee pihustid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedelikuga üleujutamist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja pühkige seejärel puhta pehme lapiga.

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

- Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal.
- Autoriseerimata töötajate teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
- Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
- Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Tähelepanu.

- Kui avastate defekte, lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust volitatud esindajaga. teeninduskeskusesse. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või asendada ajami / juhtseadet.
- Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teatage sellest teenindusele.

Veaotsing:

Probleem	Tuvastamine	Lahendus
Nupud ei reageeri	- Kontrollige, kas toitepistik on ühendatud - Kontrollige, et kõik trafot ühendavad pistikud on korralikult ühendatud	- Ühendage toitepistik lahti ja ühendage see uuesti. - Ühendage kõik ühenduspistikud lahti ja ühendage uuesti.
Tooli töstmisel esineb müra ja vibratsioon.	- Lahtised kruvid	- Pingutage kruvisid
LED ei põle	- Kaugjuhtimispuldi kaabel ei ole korralikult ühendatud või kaugjuhtimispuldi kaugjuhtimispuul on vigane	- Ühendage kaabel uuesti, kui see ikka veel ei tööta, vahetage kaugjuhtimispuul välja

Tehnilised andmed:

Mõõtmed: 2000 x 810 x 610-910 mm

Maksimaalne koormus: 140 kg

Netokaal: 76 kg

Reguleeritav kõrgusvahemik: 610-910 mm

Sisendpinge: AC 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Väljundpinge:

DC 24 V

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

2. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõik hooldus- ja remonditööd peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kättega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnanakaitseseeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks keskkonna vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid.

tuleb kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed koguda eraldi ja anda üle kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktidest ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

