

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

Sedia cosmetica elettrica SILLON Eclipse 4 sil.



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scansione
per
diverse
lingue




Dimensioni:



Funzioni e caratteristiche:

- **REGOLAZIONE FACILE:** lo schienale e il sedile della poltrona estetica si regolano facilmente grazie al pulsante laterale Effortless, consentendo di regolare comodamente la posizione del cliente durante il trattamento.
- **Design completo:** la poltrona è composta da un controller, motori, componenti metallici e pelle. Il controller è progettato per essere combinato con un pannello di controllo manuale e quattro motori.
- **Funzionalità integrata:** comprende quattro sezioni: regolazione dell'angolo dello schienale, regolazione dell'angolo sedile, regolazione dell'angolo del poggiatesta e regolazione dell'altezza del sedile, il tutto integrato in un'unica struttura.
- **Funzionamento facile da usare:** la sedia ha un design elegante e facile da usare, che garantisce semplicità di utilizzo e comfort.
- **Elevata stabilità:** la sedia offre una grande stabilità e un elevato livello di sicurezza, senza oscillazioni evidenti a qualsiasi angolo o altezza.

Telecomando:

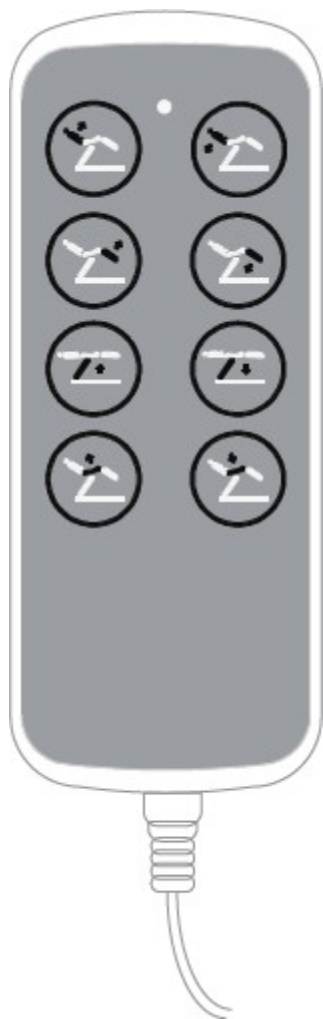

Premere  o  per controllare l'angolo di sollevamento dello schienale della poltrona.
dello schienale della poltrona spa.

Premere il pulsante  o  per controllare l'angolo di sollevamento del poggiatesta della poltrona spa.

Premere  o  per controllare il sollevamento o l'abbassamento dell'intera poltrona.

Premere il tasto  o  per controllare l'angolo del sedile della poltrona spa.

Attenzione:

1. Il poggiatesta non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo o sul poggiatesta.
3. Assicurarsi che la distanza tra le prese non superi i 2 metri.

Attenzione!

- Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
- Non legare il cavo di alimentazione all'apparecchio. Sollevando o tirando il cavo di alimentazione si rischia di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
- Prima di spostare la poltrona elettrica, rimuovere il cavo di alimentazione per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo il cavo di alimentazione originale.
- Non permettere a una persona che non esegue il trattamento di controllare il telecomando.
- Non collocare oggetti sotto la poltrona.
- Assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente intorno alla poltrona.
- Assicurarsi che intorno alla poltrona non vi siano oggetti appuntiti o dannosi che potrebbero danneggiare l'unità.
- Non modificare il dispositivo da soli. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Pulizia e disinfezione dell'unità:

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'unità dall'alimentazione.

Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

La pulizia migliore è quella con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.

Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.

Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo fissaggio
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. Se gli accessori sono montati
5. Funzionamento normale del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso della sedia e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Se una parte dell'unità è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'uso. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Dati tecnici:

- Dimensioni del sedile: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Angolo di regolazione dello schienale: circa 85° massimo
- Angolo di regolazione del sedile: circa 12° massimo
- Angolo di regolazione del poggiatesta: circa 90° massimo
- Peso netto: 96 kg
- Peso lordo: 110 kg
- Carico massimo: 200 kg (in uso normale)
- Alimentazione: CA 100-120 V, 50 Hz/60 Hz o CA 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Potenza massima: 300 W

Problema	Causa	Soluzione
Il sedile non reagisce quando si fa clic su un qualsiasi pulsante	a) La funzione del pulsante premuto è stata commutata su un valore estremo b) Controllare che la spina di alimentazione sia collegata correttamente c) Problema di qualità del pannello di controllo manuale	a) Provare a premere altri pulsanti b) Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione c) Sostituire il pannello di controllo manuale
Strano suono e vibrazione quando si solleva e si abbassa il sedile.	a) I bulloni sono allentati b) Le parti rotanti non sono sufficientemente lubrificate c) Problema di qualità Motore	a) Serrare tutti i bulloni b) Aggiungere del grasso c) Sostituire il motore

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che i liquidi non possano penetrare nell'unità.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta
si possono verificare danni.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri m a l f u n z i o n a m e n t i , rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela a m b i e n t a l e . Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta per apparecchiature usate.

consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato solo a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C nell'imballaggio originale.

imballaggio originale. Conservare l'apparecchio in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

