

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

Elektrické kosmetické křeslo SILLON Eclipse 4 sil.



Dovozce:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skenován
í pro
různé
jazyky




Rozměry:



Funkce a vlastnosti:

- **SNADNÉ NASTAVENÍ:** Opěradlo a sedadlo kosmetického křesla lze snadno nastavit pomocí bočního tlačítka Effortless, což umožňuje pohodlné nastavení polohy klienta během ošetření.
- **Komplexní konstrukce:** Křeslo se skládá z ovladače, motorů, kovových součástí a kůže. Ovladač je navržen pro kombinaci s ručním ovládacím panelem a čtyřmi motory.
- **Integrovaná funkčnost:** Obsahuje čtyři sekce: nastavení úhlu opěradla, nastavení úhlu sedadlo, nastavení úhlu opěrky nohou a nastavení výšky sedadla - vše integrované do jedné konstrukce.
- **Uživatelsky přívětivé ovládání:** Židle má elegantní a uživatelsky přívětivý design, který zajišťuje jednoduché ovládání a pohodlí.
- **Vysoká stabilita:** Židle nabízí velkou stabilitu a vysokou úroveň bezpečnosti, bez znatelného viklání v jakémkoli úhlu nebo výšce.

Dálkové ovládání:

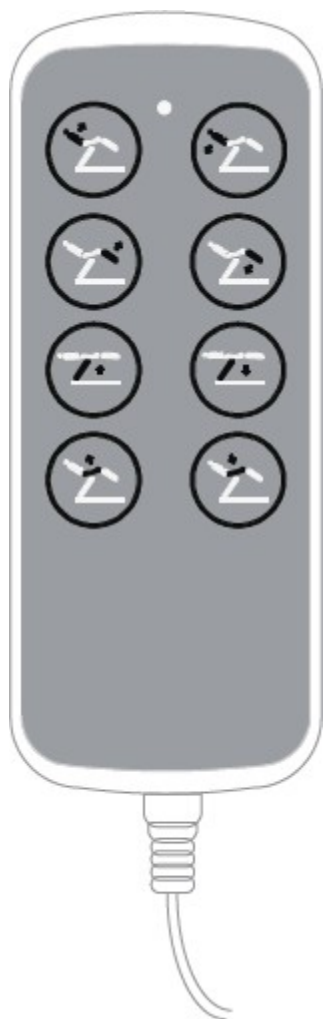

Stisknutím tlačítka  nebo  , můžete ovládat úhel zvednutí židle.  opěradla lázeňského křesla.

Stiskněte tlačítko  nebo  pro ovládání úhlu zdvihu opěrky nohou lázeňského křesla.

Stisknutím tlačítka  nebo  ovládáte zvedání nebo spouštění celého lázeňského křesla.

Stiskněte tlačítko  nebo  pro ovládání úhlu sedadla lázeňského křesla.

Upozornění:

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou nebo nohou.
3. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Pozor!

- Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
- Napájecí kabel nepřivazujte ke spotřebiči. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Zajistěte, aby bylo možné napájecí kabel v případě nouze snadno odpojit.
- Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
- Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
- Pod křeslo neumísťujte žádné předměty.
- Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor.
- Ujistěte se, že v okolí křesla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly přístroj poškodit.
- Zařízení sami neupravujte. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Čištění a dezinfekce přístroje:

Před čištěním odpojte přístroj od napájení.

Chcete-li udržet povrch křesla v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte křeslo vyčistit a vydezinfikovat po každém použití. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).

Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti, n e v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.

K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození spotřebiče, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte nějaké závady, přestaňte židli používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon / řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část jednotky poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte křeslo používat. Poté informujte servisní oddělení.

Technické údaje: V případě, že se jedná o pohon, je třeba provést jeho údržbu:

- Rozměry sedadla: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Úhel nastavení opěradla: maximálně cca 85°.
- Úhel nastavení sedadla: maximálně cca 12°.
- Úhel nastavení opěrky nohou: maximálně cca 90°.
- Čistá hmotnost: 96 kg
- Hrubá hmotnost: 110 kg
- Maximální zatížení: 110 kg 200 kg (při běžném používání)
- Napájení: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz nebo AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Maximální výkon: 300 W

Problém	Příčina	Řešení
Sedačka nereaguje na kliknutí na jakékoli tlačítko.	a) Funkce stisknutého tlačítka byla přepnuta na extrémní hodnotu b) Zkontrolujte, zda je správně připojena síťová zástrčka c) Problém s kvalitou ovládacího panelu ruční	a) Zkuste stisknout jiné tlačítek b) Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení c) Vyměňte ruční ovládací panel
Podivný zvuk a vibrace při zvedání a spouštění sedadla.	a) Šrouby jsou uvolněné b) Rotující části nejsou dostatečně promazány c) Problém s kvalitou Motor	a) Utáhněte všechny šrouby b) Přidejte trochu maziva c) Vyměňte motor

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
- Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - tzv, aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
- Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do zařízení se dostala tekutina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.
- Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
- Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
- Do otvoru přístroje nic nevrhujte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
- Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje může dojít k poškození.
- Aby byla zaručena pevná životnost přístroje, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
- Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

- V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h se obraťte na autorizovaného servisního pracovníka. servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika.
- Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
- Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použít elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován pouze při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C v prostoru, kde se nachází.

v originálním obalu. Přístroj skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

