

ACTIVESHOP[®]

Mode d'emploi

Fauteuil cosmétique électrique SILLON Eclipse 4 sil.



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scanner
pour
différentes
langues




Dimensions :



Fonctions et caractéristiques :

- **AJUSTEMENT FACILE** : le dossier et l'assise du fauteuil cosmétique se règlent facilement à l'aide du bouton latéral Effortless, ce qui vous permet d'ajuster confortablement la position du client pendant le traitement.
- **Conception globale** : le fauteuil se compose d'un contrôleur, de moteurs, de composants métalliques et de cuir. Le contrôleur est conçu pour être associé à un panneau de commande manuel et à quatre moteurs.
- **Fonctionnalité intégrée** : comprend quatre sections : réglage de l'angle du dossier, réglage de l'angle du dossier, réglage de l'angle du dossier. Le fauteuil est équipé d'un système de réglage de la hauteur du siège, de l'angle du repose-pieds et de la hauteur du siège, le tout intégré dans une seule structure.
- **Utilisation conviviale** : la chaise présente une conception élégante et conviviale, offrant une utilisation simple et un grand confort.
- **Grande stabilité** : la chaise offre une grande stabilité et un haut niveau de sécurité, sans oscillation notable, quel que soit l'angle ou la hauteur.

Télécommande :

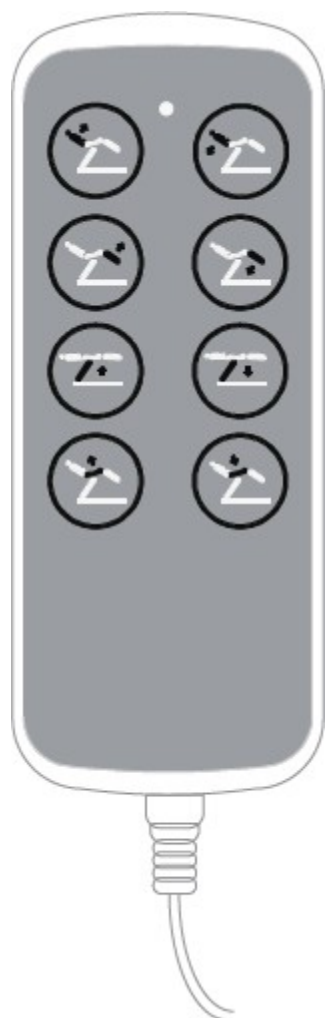

Appuyez sur  ou  , pour contrôler l'angle de levage du dossier du fauteuil spa.

du dossier du fauteuil spa.

Appuyez sur  ou  pour contrôler l'angle de levage du repose-pieds du fauteuil spa.

Appuyez sur  ou  pour contrôler l'élévation ou l'abaissement de l'ensemble du fauteuil spa.

Appuyez sur les touches  ou  pour contrôler l'angle du du siège du spa.

Avertissement :

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne vous asseyez pas directement sur l'accoudoir ou le repose-pieds.
3. Veillez à ce que la distance entre les prises ne dépasse pas 2 mètres.

Attention !

- Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
- Ne pas attacher le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veillez à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
- Avant de déplacer le fauteuil cosmétique électrique, retirer le cordon d'alimentation afin qu'il ne se coince pas entre certaines parties du fauteuil.
- Si le c o r d o n d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et contactez un centre de service agréé. N'utilisez que le cordon d'alimentation d'origine.
- Ne permettez pas à une personne qui n'effectue pas le traitement de contrôler la télécommande.
- Ne placez aucun objet sous le fauteuil.
- Veillez à ce que l'espace autour du fauteuil soit suffisant.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets pointus ou dangereux autour du fauteuil qui pourraient endommager l'appareil.
- Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, nettoyez-la régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.

Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.

Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Ne pas utiliser le fauteuil de beauté électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Mesures d'entretien

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifier l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Le boîtier de commande et son câblage
4. La présence d'accessoires
5. Fonctionnement normal du système de verrouillage

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser le fauteuil et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'unité de commande/actionnement.

Si une partie de l'unité est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez d'utiliser le fauteuil. Puis informez le service après-vente.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du siège : 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Angle de réglage du dossier : environ 85° maximum
- Angle de réglage de l'assise : environ 12° maximum
- Angle de réglage du repose-pieds : environ 90° maximum
- Poids net : 96 kg
- Poids brut : 110 kg
- Charge maximale : 200 kg (en utilisation normale)
- Alimentation : AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz ou AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Puissance maximale : 300 W

Problème	Cause du problème	Solution
Le siège ne réagit pas lorsque l'on clique sur un bouton.	a) La fonction du bouton pressé a été commutée sur une valeur extrême. b) Vérifier que la fiche d'alimentation est correctement branchée c) Problème de qualité du panneau de commande manuel	a) Essayez d'appuyer sur d'autres boutons b) Débrancher et rebrancher la prise d'alimentation c) Remplacer le panneau de commande manuel
Bruit et vibration étranges lors de l'élévation et de l'abaissement du siège.	a) Les boulons sont desserrés b) Les pièces rotatives ne sont pas suffisamment lubrifiées c) Problème de qualité Moteur	a) Serrer tous les boulons b) Ajouter de la graisse c) Remplacer le moteur

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - ainsi, de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez l'entreprise de service agréée ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe des dommages peuvent survenir.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé pour éviter tout danger.

pour éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et ensuite

être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil ne doit être transporté qu'à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, dans son emballage d'origine.

dans son emballage d'origine. Stockez l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.

