

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Scaun cosmetic electric SILLON Eclipse 4 sil.



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Scanare
pentru
diferite
limbi




Dimensiuni:



Funcții și caracteristici:

- **REGLAJ UȘOR:** Spătarul și scaunul scaunului cosmetic sunt ușor de reglat cu ajutorul butonului lateral Effortless, permițându-vă să ajustați confortabil poziția clientului în timpul tratamentului.
- **Design cuprinzător:** scaunul este format dintr-un controler, motoare, componente metalice și piele. Controlerul este conceput pentru a fi combinat cu un panou de control manual și patru motoare.
- **Funcționalitate integrată:** include patru secțiuni: reglarea unghiului spatelui, reglarea unghiului scaun, reglarea unghiului suportului pentru picioare și reglarea înălțimii scaunului - toate integrate într-o singură structură.
- **Funcționare prietenoasă:** Scaunul are un design elegant și ușor de utilizat, oferind o funcționare simplă și confort.
- **Stabilitate ridicată:** Scaunul oferă o stabilitate mare și un nivel ridicat de siguranță, fără oscilații vizibile la orice unghi sau înălțime.

Telecomandă:

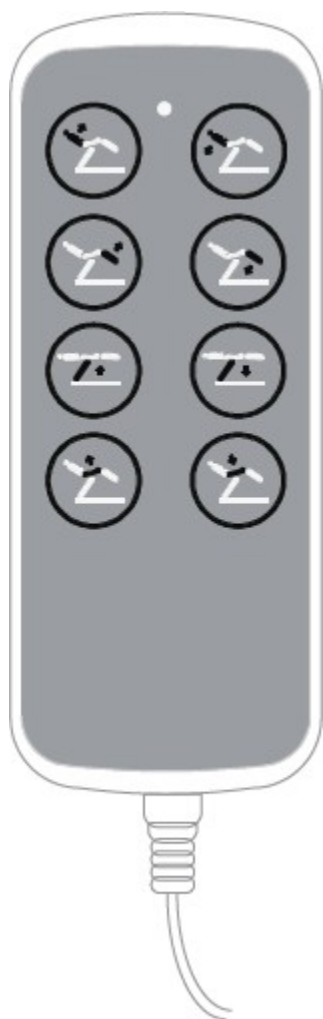

Apăsați  sau , pentru a controla unghiul de ridicare a spătarului scaunului spa.

Apăsați butonul  sau  pentru a controla unghiul de ridicare al suportului pentru picioare al scaunului spa.

Apăsați  sau  pentru a controla ridicarea sau coborârea întregului scaun spa.

Apăsați butonul  sau  pentru a controla unghiul scaunului scaunului spa.

Avertisment:

1. Suportul pentru picioare nu este proiectat să susțină întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră sau pe suportul pentru picioare.
3. Asigurați-vă că distanța dintre prize nu depășește 2 metri.

Atenție!

- Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
- Nu legați cablul de alimentare de aparat. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință în caz de urgență.
- Înainte de a muta scaunul cosmetic electric, scoateți cablul de alimentare, astfel încât acesta să nu rămână blocat între unele părți ale scaunului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat cablul, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
- Nu permiteți unei persoane care nu efectuează tratamentul să controleze telecomanda.
- Nu așezați niciun obiect sub scaun.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului.
- Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora unitatea.
- Nu modificați singur dispozitivul. Dacă scaunul nu funcționează corect, nu îl mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.

Curățarea și dezinfectarea aparatului:

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe din metal și plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va funcționa cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.

Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.

Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablajul motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă observați defecte, nu mai utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul cu experiență sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare / control.

Dacă orice parte a unității este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu îl mai utilizați. Apoi anunțați departamentul de service.

Date tehnice:

- Dimensiunile scaunului: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Unghi de reglare a spătarului: aprox. 85° maxim
- Unghi de reglare a scaunului: aprox. 12° maxim
- Unghi de reglare a suportului pentru picioare: aprox. 90° maxim
- Greutate netă: 96 kg
- Greutate brută: 110 kg
- Sarcina maximă: 200 kg (în condiții normale de utilizare)
- Alimentare: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz sau AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Putere maximă: 300 W

Problemă	Cauza	Soluție
Scaunul nu reacționează atunci când este apăsat orice buton	a) Funcția butonului apăsat a fost comutată la o valoare extremă b) Verificați dacă fișa de alimentare este conectată corect c) Problemă de calitate a panoului de comandă manual	a) Încercați să apăsați alte butoane b) Deconectați și reconectați fișa de alimentare c) Înlocuiți panoul de control manual
Sunet și vibrații ciudate la ridicarea și coborârea scaunului.	a) Șuruburile sunt slăbite b) Piese rotative nu sunt lubrificate suficient c) Problemă de calitate Motor	a) Strângeți toate șuruburile b) Adăugați puțină unsoare c) Înlocuiți motorul

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel, astfel încât să nu poată pătrunde lichide în unitate.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade pot apărea daune.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor d i s f u n c ț i o n a l i t ă ț i , contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi

predați la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat numai la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C în

ambalajul original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.

