

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

Elektrické kozmetické kreslo SILLON Eclipse 4 sil.



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skenovan
ie pre
rôzne
jazyky




Rozmery:



Funkcie a vlastnosti:

- Jednoduché nastavenie: Operadlo a sedadlo kozmetického kresla sa ľahko nastavujú pomocou bočného tlačidla Effortless, čo umožňuje pohodlne upraviť polohu klienta počas ošetrovania.
- Komplexný dizajn: Kreslo sa skladá z ovládača, motorov, kovových komponentov a kože. Ovládač je určený na kombináciu s ručným ovládacím panelom a štyrmi motormi.
- Integrovaná funkčnosť: Obsahuje štyri časti: nastavenie uhla chrbta, nastavenie uhla sedadla, nastavenie uhla opierky nôh a nastavenie výšky sedadla - všetko integrované do jednej konštrukcie.
- Používateľsky prívetivé ovládanie: Stolička má elegantný a používateľsky prívetivý dizajn, ktorý poskytuje jednoduché ovládanie a pohodlie.
- Vysoká stabilita: Stolička ponúka skvelú stabilitu a vysokú úroveň bezpečnosti, bez výrazného kolísania v akomkoľvek uhle alebo výške.

Diaľkové ovládanie:

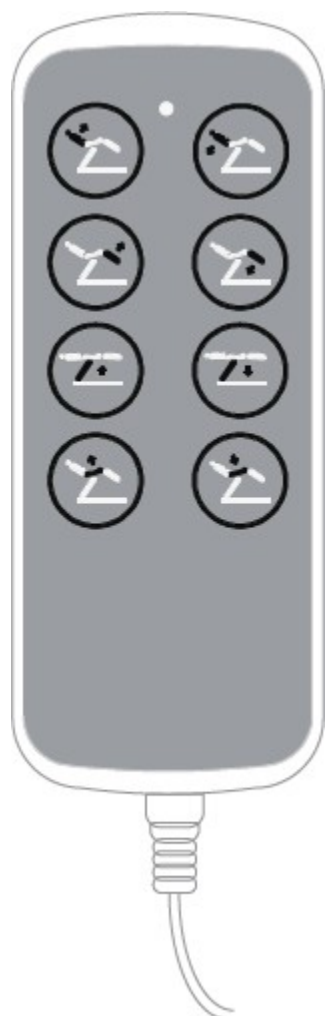

Stlačením tlačidla  alebo  , môžete ovládať uhol zdvihu stoličky. operadla kúpeľného kresla.

Stlačte  alebo  na ovládanie uhla zdvihu opierky nôh kúpeľného kresla.

Stlačením tlačidla  alebo  ovládate zdvihnutie alebo spustenie celého kúpeľného kresla.

Stlačte tlačidlo  alebo  na ovládanie uhla sedadla kúpeľného kresla.

Upozornenie:

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby udržala plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesedajte si priamo na opierku rúk alebo nôh.
3. Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi zásuvkami nepresiahla 2 metre.

Pozor!

- Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
- Nepripájajte napájací kábel k spotrebiču. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Zabezpečte, aby sa napájací kábel dal v prípade núdze ľahko odpojiť.
- Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, kreslo nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
- Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrovanie, ovládala diaľkový ovládač.
- Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
- Uistite sa, že je okolo kresla dostatočný voľný priestor.
- Uistite sa, že v okolí kresla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli prístroj poškodiť.
- Zariadenie sami neupravujte. Ak stolička nefunguje správne, prestaňte ju používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

Aby ste udržali povrch kresla v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezabudnite stoličku vyčistiť a vydezinfikovať po každom použití. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz z a mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

Ak chcete čistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku bude najlepšie. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).

Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, n e v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.

Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek poruchy, prestaňte stoličku používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Otvoriť alebo vymeniť pohon/riadiacu jednotku môže len skúsený alebo autorizovaný personál.

Ak je niektorá časť jednotky poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ju používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

Technické údaje:

- Rozmery sedadla: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Uhol nastavenia operadla: maximálne približne 85°.
- Uhol nastavenia sedadla: max. cca 12°
- Uhol nastavenia opierky nôh: max. cca 90°
- Čistá hmotnosť: 96 kg
- Hrubá hmotnosť: 110 kg
- Maximálne zaťaženie: 200 kg (pri bežnom používaní)
- Napájanie: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz alebo AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Maximálny výkon: 300 W

Problém	Príčina	Riešenie
Sedadlo nereaguje na kliknutie na akékoľvek tlačidlo	a) Funkcia stlačeného tlačidla bola prepnutá na extrémnu hodnotu b) Skontrolujte, či je správne pripojená zástrčka napájania c) Problém s kvalitou ovládacieho panela manuál	a) Skúste stlačiť iné tlačidlá b) Odpojte a znovu pripojte zástrčku napájania c) Vymeňte manuálny ovládací panel
Zvláštny zvuk a vibrácie pri zdvíhaní a spúšťaní sedadla.	a) Sú uvoľnené skrutky b) Rotujúce časti nie sú dostatočne namazané c) Problém s kvalitou Motor	a) Uťahnite všetky skrutky b) Pridajte trochu maziva c) Vymeňte motor

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - tzv, aby sa do jednotky nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže poškodiť, ak spadne môže dôjsť k poškodeniu.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných p o r ú c h kontaktujte autorizovaného servisného stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použitie elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a potom

odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdávať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať len pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C v

v pôvodnom obale. Prístroj skladujte na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

