

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline tugitool hyd. Basic 210



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege lisatud kasutusjuhendi sisu ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakendid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage tool kohale, kus seda kasutatakse.

Ettevaatust.

Lapsed ja kõrvalised isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:



Pikkus täielikult välja tõmmatud asendis: 184 cm,


kõrgus min. 65cm,

Maksimaalne kõrgus 79cm

Toolsi maksimaalne koormus: 150kg.


- Tugitool on käsitsi reguleeritav all asuvate hoobade abil. Nii saab reguleerida jalatoe ja seljatoe nurka.
- Toolsi kõrgus on reguleeritav istme reguleerimise käepideme abil.
- Lisaks on käetoed eemaldatavad, et pääseda hõlpsasti ravialadele.
- Peatoel asuv padi on samuti eemaldatav, mis lihtsustab raviprotseduuride läbiviimist, kui inimene lamab kõhuli.
- Toolsi saab lahti keerata lamamisasendisse.
- Toolsi saab pöörata 360°.

Seljatoe/jalatoe asendi reguleerimiseks tõmmake toolsi all olevast hoovast ja seejärel kallutage seljatugi/jalatugi õigesse asendisse.

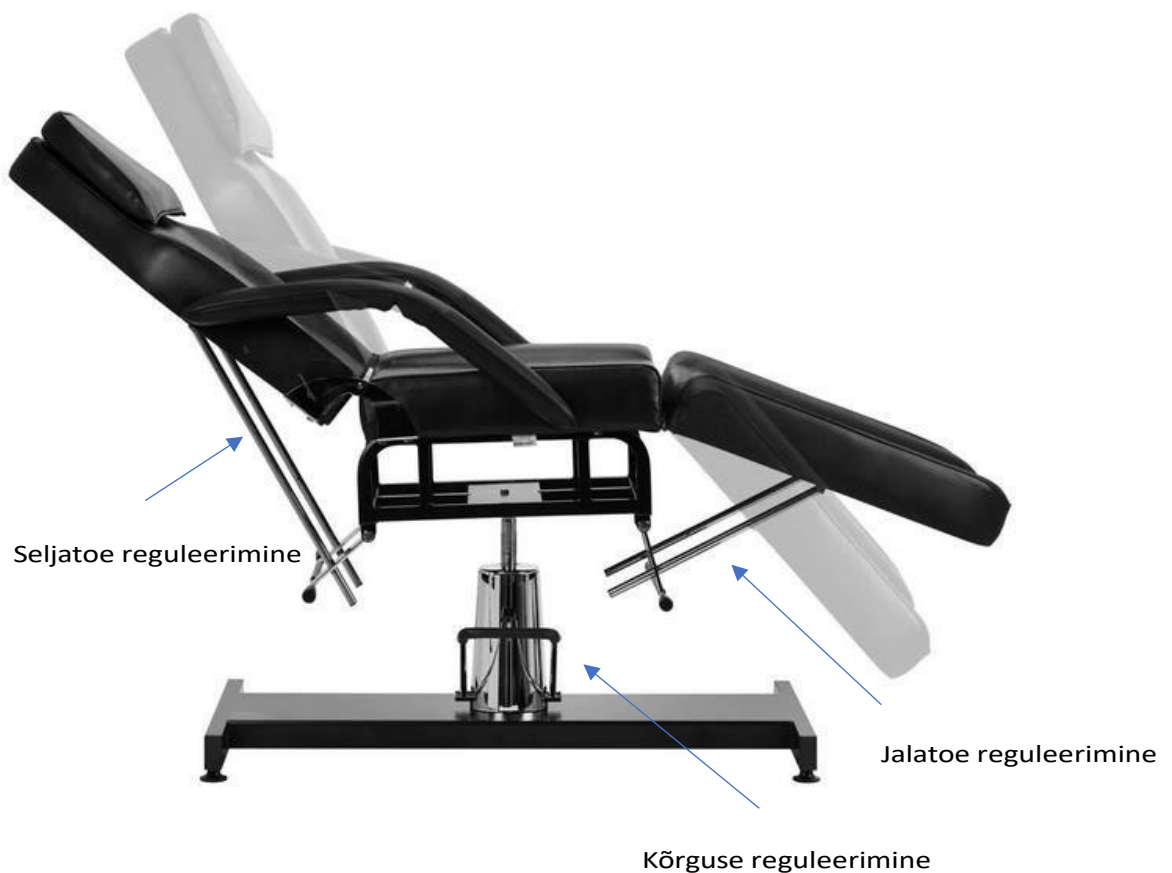


Kokkupanek:

1. Kruvige iste raami külge.
2. Paigaldage iste silindrile "push fit" abil.
3. Pingutage käivitaja-istme lukustuskrugi.
4. Paigaldage klambrid seljatoele ja istmele.
5. Paigaldage klambrid jalatoele ja istmele.

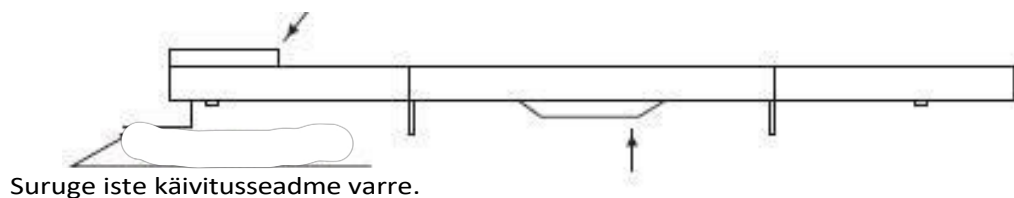

Suruge iste käivitusseadme varre.

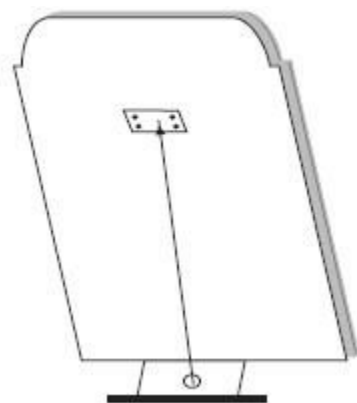

Viige tugi läbi augu ja pingutage poldiga.

Paigaldage seljatoele klamber, kinnitades selle augu kaudu kruviga (sama kehtib ka jalatugede kohta).

Puhastamine ja hooldus:

- Et tooli pind oleks heas korras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raske ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib kõige paremini väike harja.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahuseid. Klooripõhiseid lahuseid ei tohiks vältida.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee pihustid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral. Ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahuseid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada seadmele vigastusi või kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord kuue kuu jooksul järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi tavapärane toimimine

Kui avastate defekte, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada käivitusseadme/juhtimisseadme.

Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teatage sellest teenindusele.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP OÜ poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage mingeid esemeid kaablitele. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse s a t u b vöörikeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.

2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.

3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile

2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, tuleks elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.