

ACTIVESHOP[®]


KASUTUSJUHEND

Azzurro 891 elektriline kosmeetikatool



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

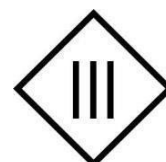


Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.

Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Lastele tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:

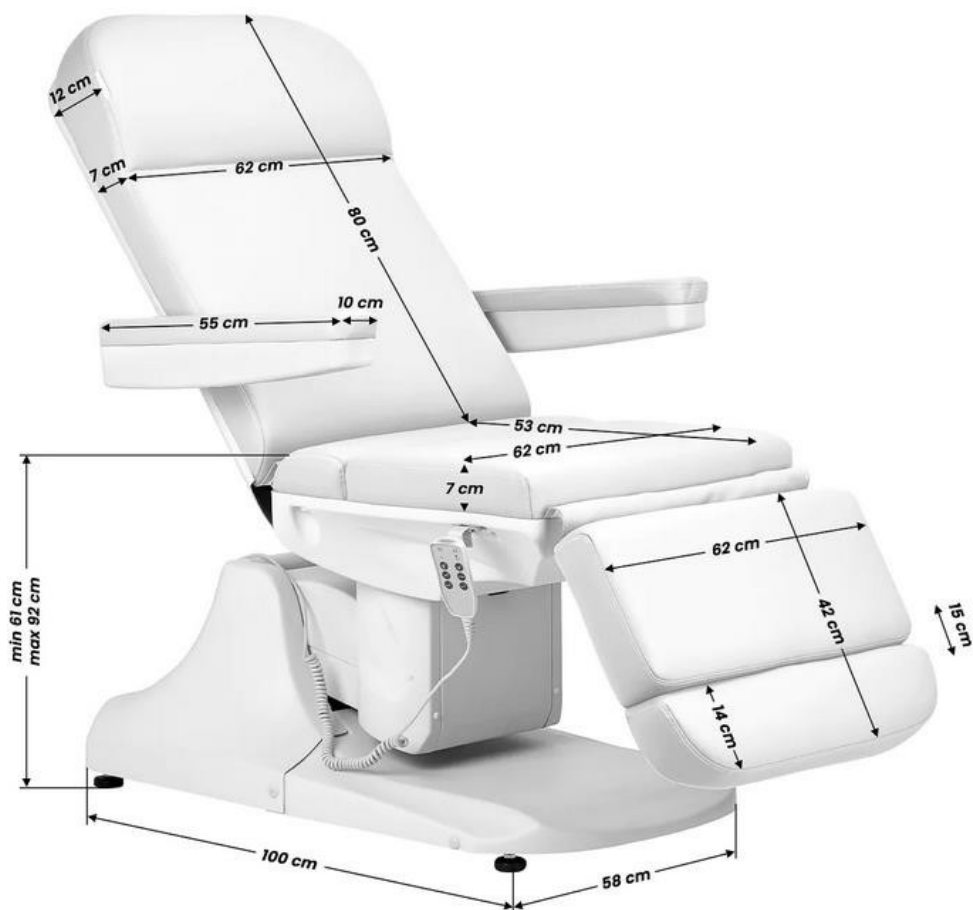

Seadet juhitakse kaugjuhtimispuldiga.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:



1. Istme kõrguse reguleerimine vahemikus 61-92 cm (istme tõstmiseks või langetamiseks vajutage).
2. Seljatoe nurga reguleerimine
3. Jalatoe reguleerimine (vajutage, et muuta jalatoe asendit).

Jalatoe reguleerimine:

Jalatoel on reguleerimisvõimalus ja seda saab pikendada vahemikus 0-15cm. Jalatoe pikendamiseks keerake allosas olevat nuppu ja pikendage jalatuge soovitud pikkusele.



Masina puhastamine ja desinfitseerimine

Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.

Tools pinna heas seisukorras hoidmiseks puhastage seda regulaarselt. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike hari sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Parim töötab kõige paremini on puhastamine maheda lahusega puhastusvahendiga. Ammoniaak i kõige rohkem lahusteid võib kasutada raskete plekkide eemaldamiseks. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee püstol).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord kuue kuu jooksul järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme.

Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage teenindusosakonda.

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendusmeetod
Kui kaugjuhtimispuldi nuppu vajutatakse, ei reageeri kaugjuhtimispult	Kõnealuse nupu funktsioon on juba saavutanud oma maksimumi.	1. Proovige vajutada mõnda teist nuppu
Seade teeb seadme reguleerimisel kummalisi helisid kõrguse	Kruvi on lahti	Pingutage kõiki kruvisid