

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Azzurro 891



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2024




Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.

Poznámka! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery spotrebiča:

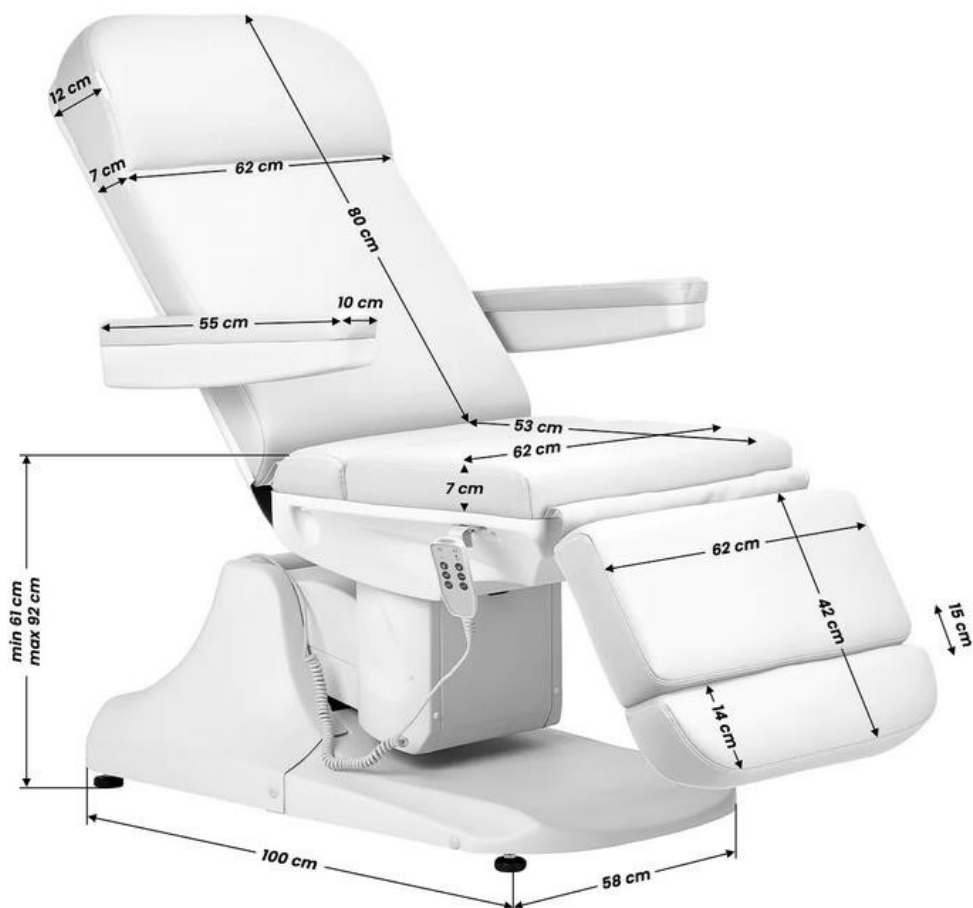

Spotřebič sa ovláda diaľkovým ovládaním.

Funkcie diaľkového ovládania:



1. Nastavenie výšky sedadla v rozsahu 61-92 cm (stlačením zdvihnete alebo spustíte sedadlo).

2. Nastavenie uhla operadla

3. Nastavenie opierky nôh (stlačením zmeníte polohu opierky nôh)

Nastavenie opierky nôh:

Opierka na nohy má možnosť nastavenia a možno ju predĺžiť v rozsahu 0-15 cm. Ak chcete predĺžiť opierku nôh, otočte gombíkom na spodnej strane a predĺžte opierku nôh na požadovanú dĺžku.



Čistenie a dezinfekcia stroja

Pred čistením prístroj odpojte od elektrickej siete.

Aby ste udržali povrch stoličky v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz z a mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

Ak chcete čistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotřebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Najlepšie funguje najlepšie je čistenie s jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Amoniak i na odstránenie odolných škvŕn možno použiť väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a nevystavujte prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Aspoň raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. Napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.

Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Spôsob riešenia
Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači diaľkový ovládač nereaguje	Funkcia príslušného tlačidla už dosiahla svoje maximum.	1. Skúste stlačiť iné tlačidlo
Prístroj vydáva zvláštne zvuky pri nastavovaní výšky	Uvoľnená skrutka	Utiahnite všetky skrutky