

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

Cosmetische fauteuil hyd. Sillon 210



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025


Scannen
voor
verschille
nde talen




Afmetingen:





Montage:

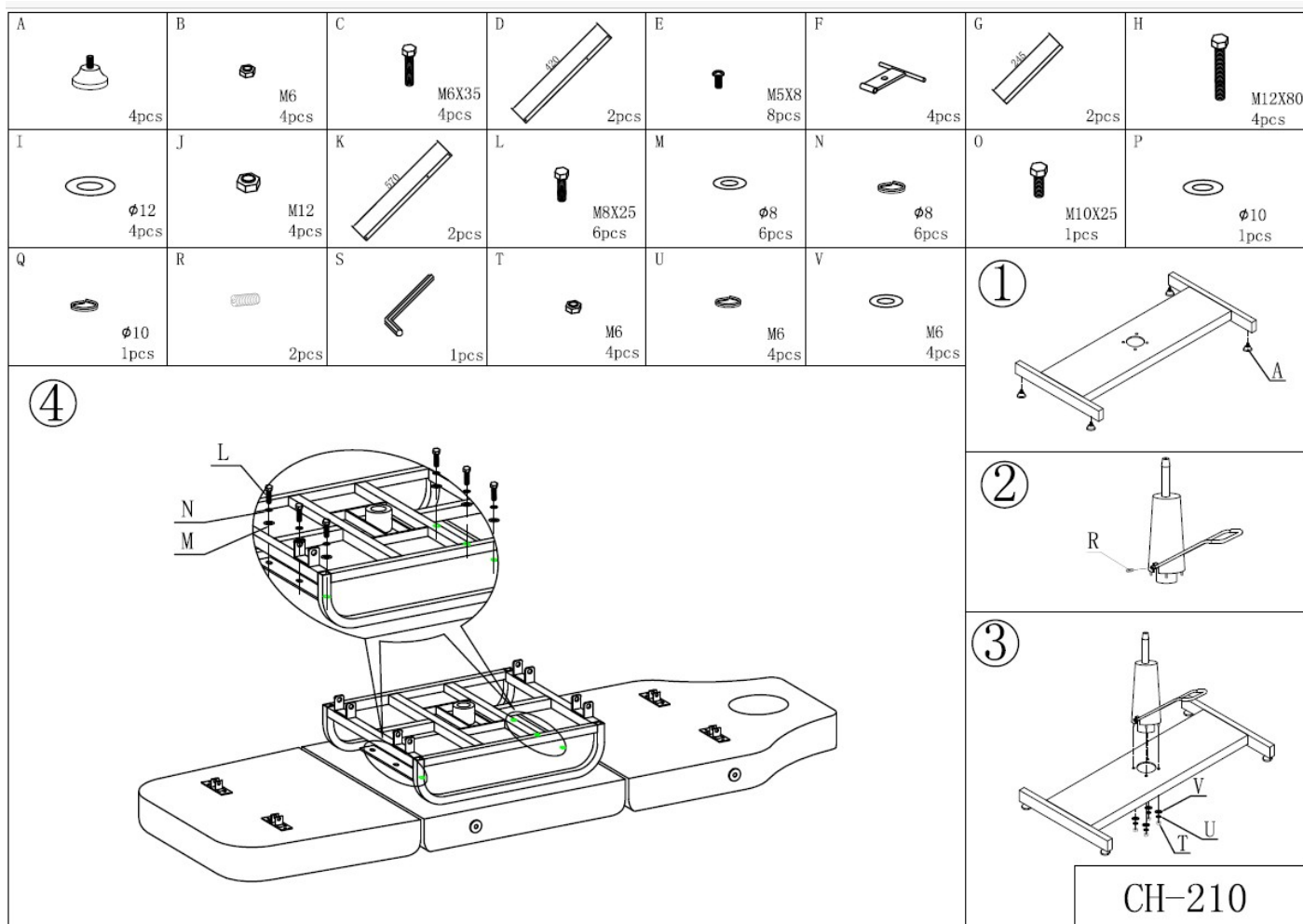


1. Schuif de kussentjes in de stoelbasis.
2. Plaats de hendel voor de hoogteverstelling op de actuator met behulp van het R-element.
3. Plaats de actuator op de stoelbasis en zet hem vast met de V, U en T elementen.
4. Plaats het metalen stoelframe op de stoelbasis en zet het vast met L, M en N.

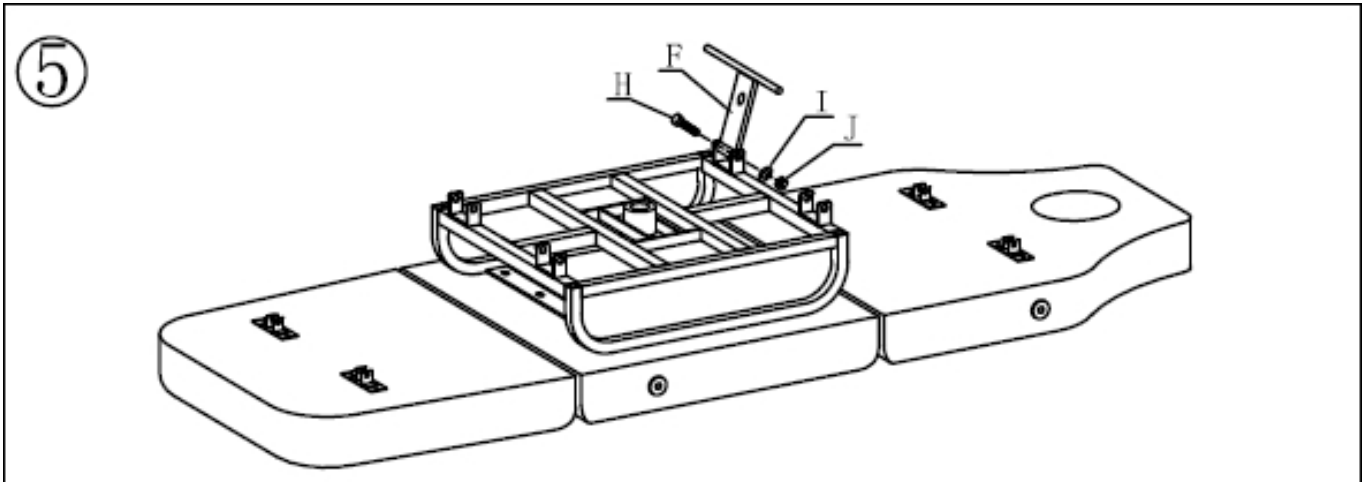


5. Monteer element F door het vast te draaien met elementen I, J en H.

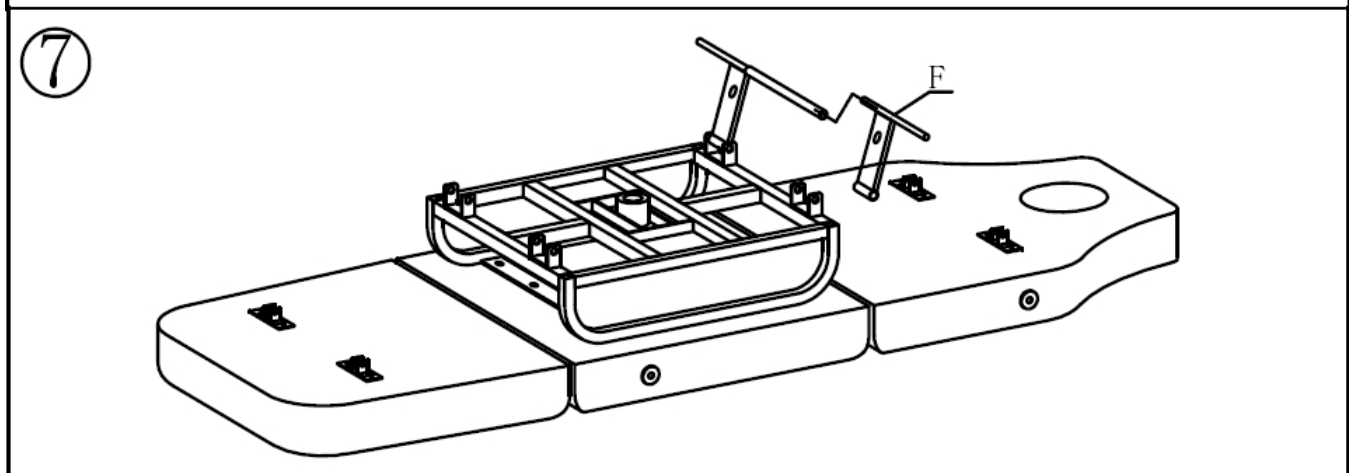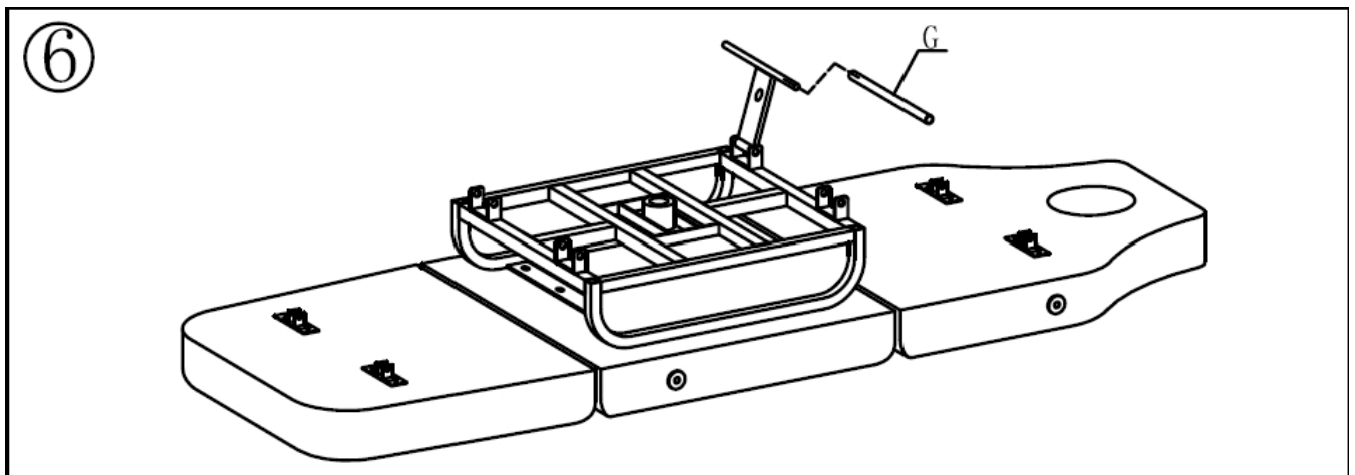


- 6.7 Gebruik element G om de twee F-elementen samen te voegen.

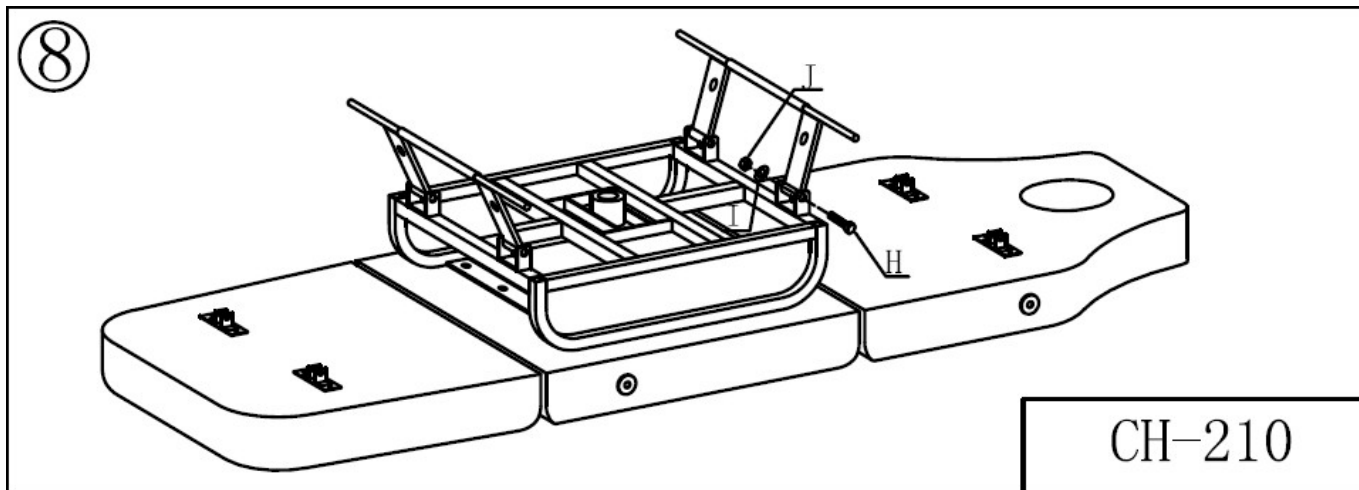


8. Draai vast met J en H en herhaal dit aan de andere kant.

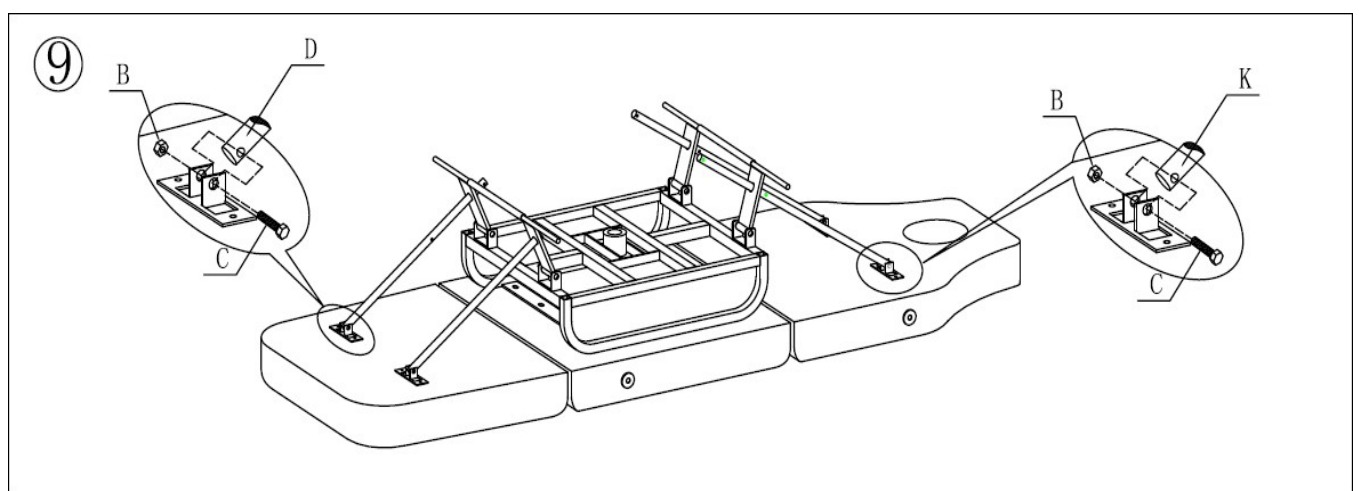

9. Plaats de elementen D en K en schroef ze vast met B en C.

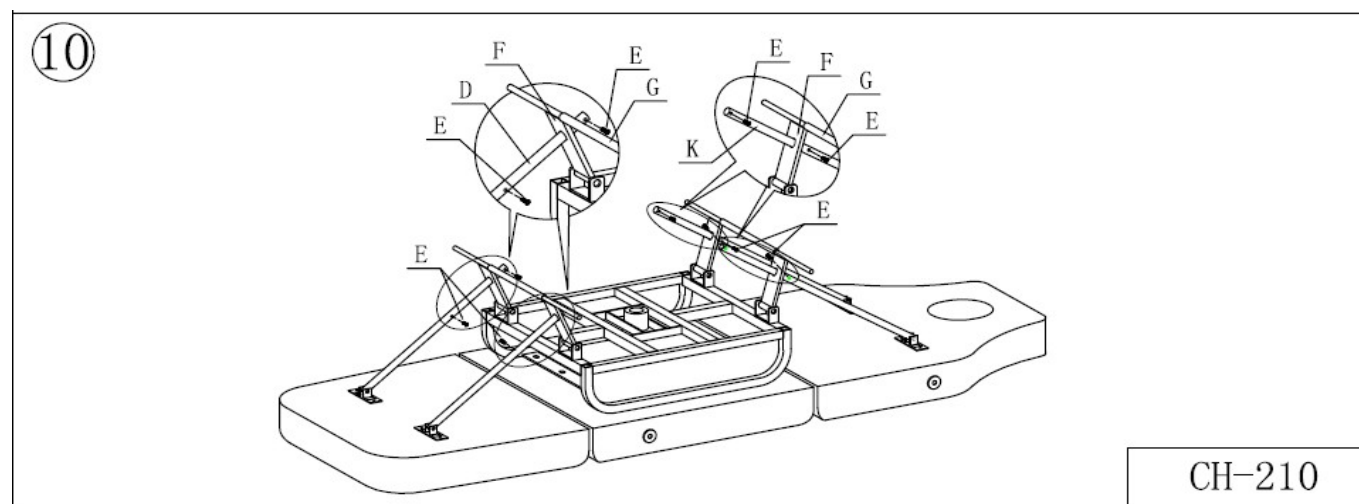

10. Zet de steunpoten vast met E.

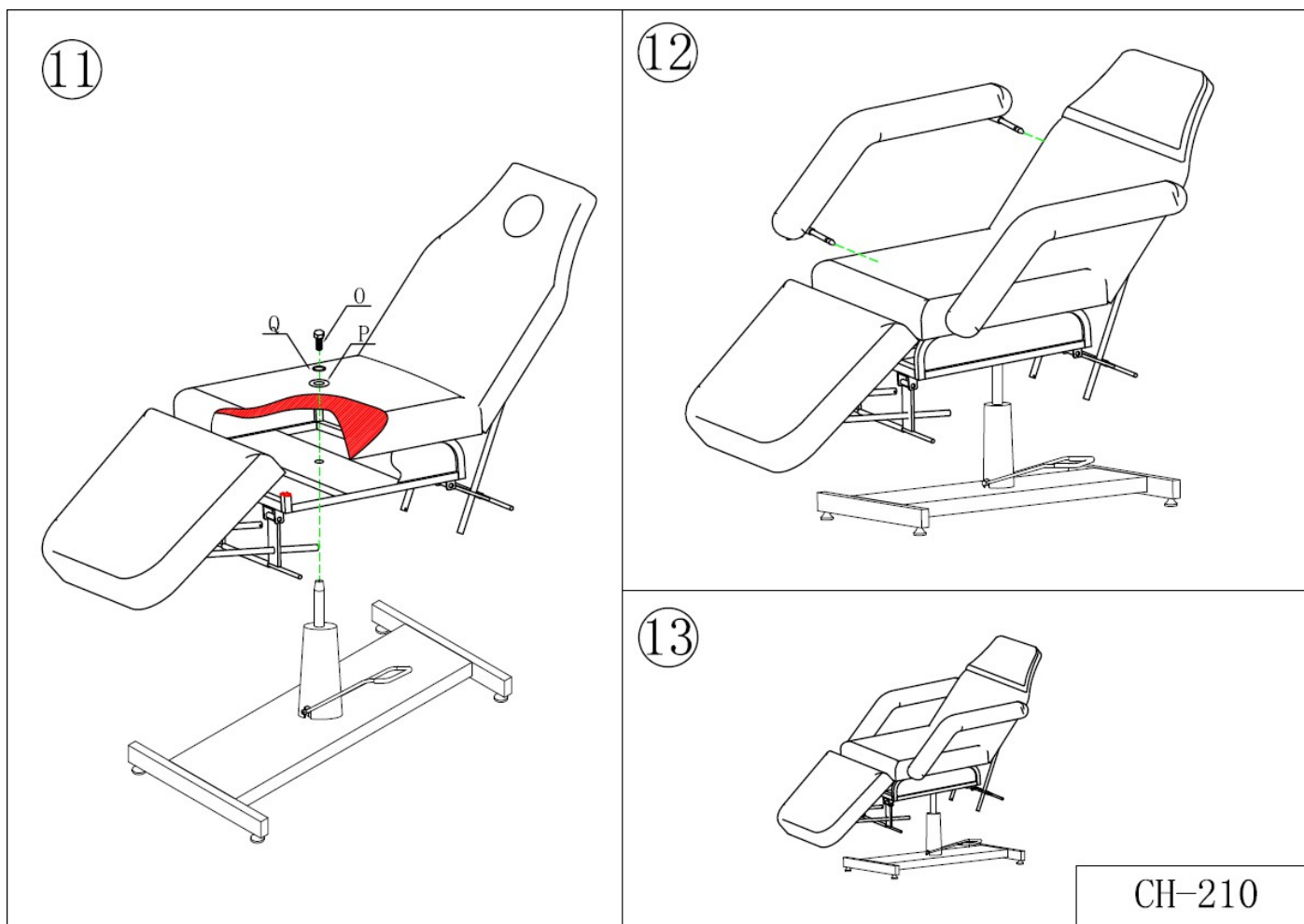

11. Plaats de zitting op de aandrijfstang en draai hem vast met Q, P en O.

12. Schuif de armleuningen in zoals aangegeven in de illustratie.

Functies van de zitting:

- Stoel omhoogbrengen: zet de stoel omhoog door op de hendel te drukken
- Verlagen van de stoel: duw naar beneden totdat de stoel helemaal naar beneden komt
- Kantelvergrendeling van de stoel: til de hendel zo ver mogelijk omhoog

Let op!

Ga niet abrupt zitten en werp uw gewicht niet op de stoel. Verplaats of verplaats de stoel niet met mensen of lasten erop. Ga niet met uw voeten of knieën op de stoel staan, schommel niet, ga niet op de armleuningen zitten en ga niet op meer dan één persoon zitten.

Het apparaat reinigen en desinfecteren

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om de stoel eenmaal per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud:

- 1. Dagelijks reinigen**
Stof verwijderen met een zachte, droge doek.
- 2. Hardnekkig vuil verwijderen**
Zoals je weet, is het moeilijk om hardnekkig vuil te verwijderen met een normale droge doek. Gebruik in dit geval eerst een zachte doek met verdund neutraal reinigingsmiddel en veeg het daarna af met een droge doek.
- 3. Het gebruik van benzeen, verdunners, benzine of andere oplosmiddelen is verboden.**
Deze middelen kunnen de huid beschadigen of het product aantasten.
- 4. Opslag- en gebruiksomstandigheden**
Stel het product niet bloot aan sterk zonlicht of vocht. Doet u dit niet, dan kan het product beschadigd raken.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.

Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Ltd:

(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte

elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en vervolgens naar inzamelpunten voor

inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

