

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona cosmetica hyd. Basic 210



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere il contenuto delle istruzioni allegate ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti gli elementi dell'imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona nell'area in cui verrà utilizzata.

Attenzione.

I bambini e le persone non autorizzate non devono utilizzare questo dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona cosmetica.

Dimensioni dell'apparecchio:



Lunghezza quando è completamente estesa: 184


cm, altezza min. 65 cm,

Altezza massima 79 cm

Carico massimo della sedia: 150 kg.



- La poltrona è regolabile manualmente tramite le leve sottostanti. In questo modo è possibile regolare l'angolo del poggiatesta e dello schienale.
- L'altezza della poltrona è regolabile tramite la maniglia di regolazione del sedile.
- Inoltre, i braccioli sono rimovibili per facilitare l'accesso alle aree di trattamento.
- Anche il cuscino situato sul poggiatesta è rimovibile, per facilitare l'esecuzione dei trattamenti quando la persona è sdraiata a pancia in giù.
- La poltrona può essere dispiegata in posizione reclinabile.
- La poltrona può essere ruotata di 360°.

Per regolare la posizione dello schienale/pedana, tirare la leva sotto la poltrona e poi inclinare lo schienale/pedana nella posizione corretta.

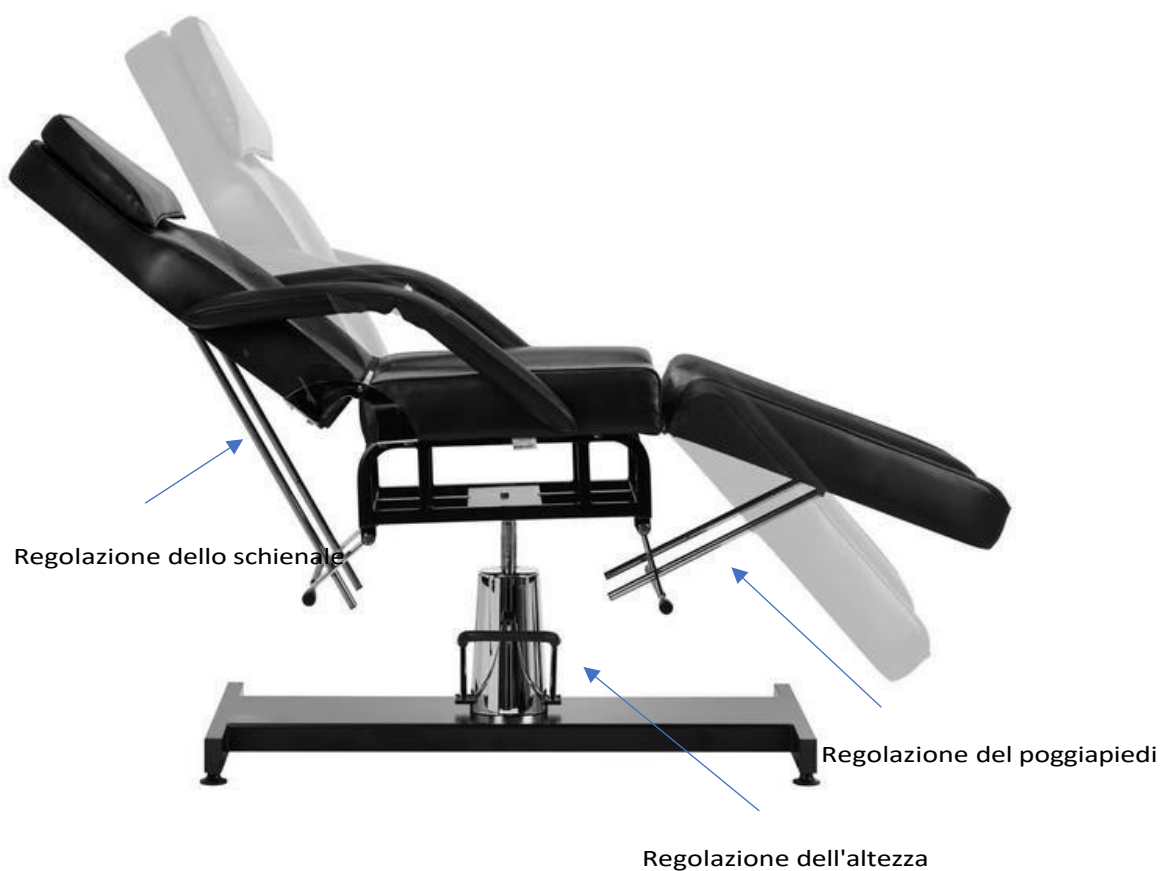

Montaggio:

1. Avvitare il sedile al telaio.
2. Montare il sedile sul cilindro con un "push fit".
3. Serrare la vite di bloccaggio attuatore-sedile.
4. Inserire le staffe nello schienale e nel sedile.
5. Inserire le staffe nel poggiatesta e nel sedile.

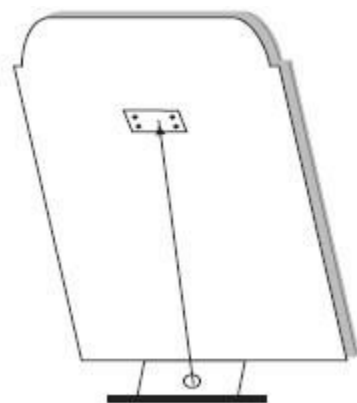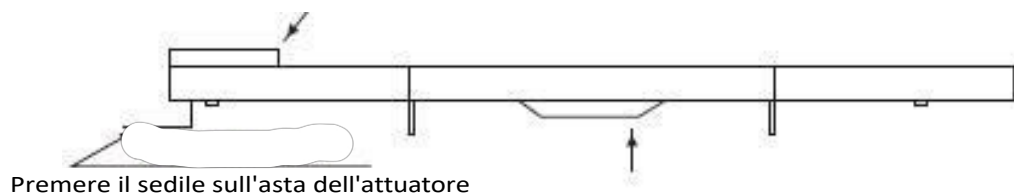

Far passare il supporto attraverso il foro e serrare con il bullone.

Sullo schienale, avvitare la staffa fissandola attraverso il foro con una vite (lo stesso vale per le pedane).

Pulizia e manutenzione:

- Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è preferibile utilizzare una piccola spazzola.
- Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- La pulizia migliore è quella con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Le soluzioni a base di cloro non devono essere evitate.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate. Non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo fissaggio
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. Se gli accessori sono collegati
5. Funzionamento normale del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'utilizzo. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva

2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e dovrebbero quindi essere inviati al trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.