

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo hyd. Basic 210



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2024

Před použitím kosmetického křesla si přečtete obsah přiloženého návodu a proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny součásti obalu.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte křeslo na místo, kde bude používáno.

Pozor.

Toto zařízení by neměly používat děti a nepovolané osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry přístroje: Křeslo je vybaveno dvěma přídavnými zařízeními, které jsou součástí balení:




Délka v úplném roztažení: 184 cm, výška min. 65
cm,

Maximální výška 79 cm

Maximální zatížení židle: 150kg.



- Křeslo je ručně nastavitelné pomocí páček pod ním. Tímto způsobem lze nastavit úhel opěrky nohou a opěradla.
- Výška křesla je nastavitelná pomocí páčky pro nastavení sedáku.
- Kromě toho jsou područky odnímatelné pro snadný přístup k ošetřovacím plochám.
- Polštář umístěný na opěrci hlavy je rovněž odnímatelný, což usnadňuje provádění ošetření, když osoba leží na břiše.
- Křeslo lze rozložit do polohy na ležení.
- Křeslo lze otáčet o 360°.

Chcete-li nastavit polohu opěradla/podnožky, zatáhněte za páčku pod křeslem a poté opěradlo/podnožku sklopte do správné polohy.

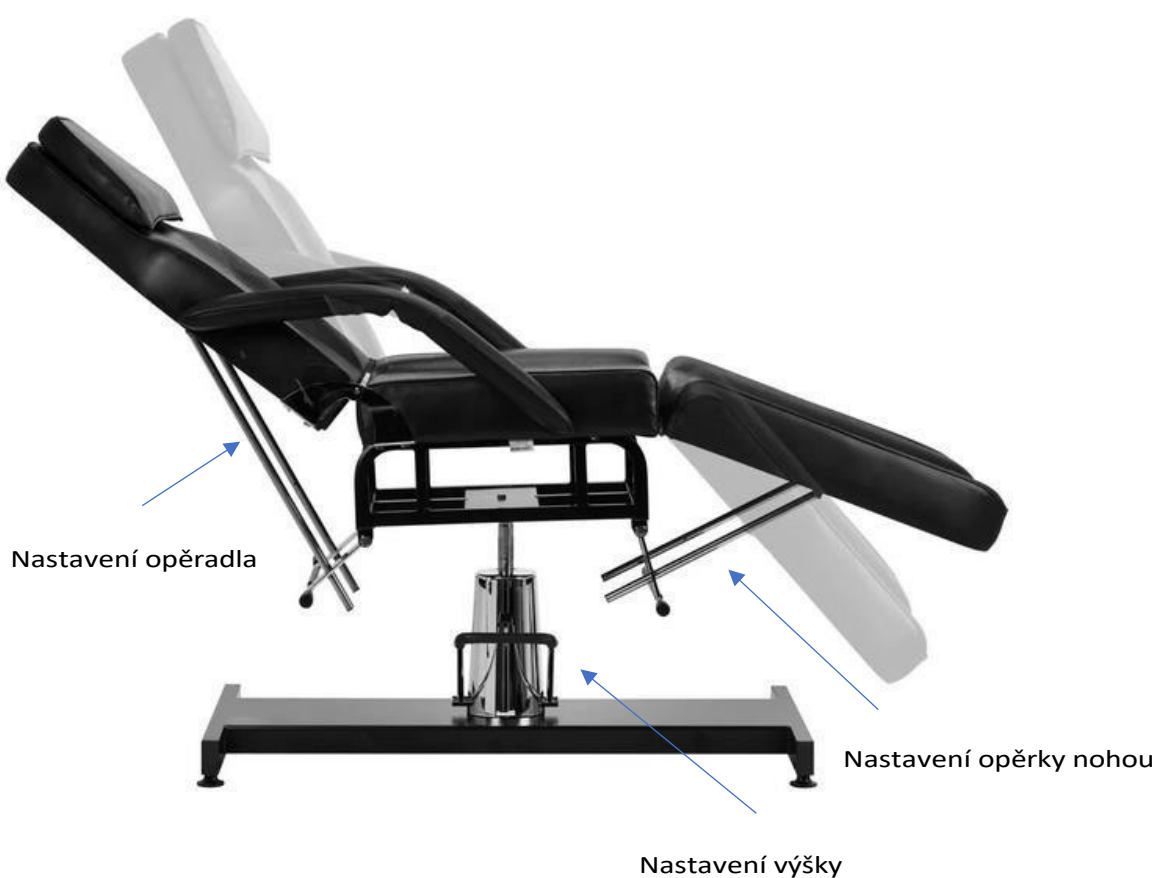

Montáž:

1. Přišroubujte sedadlo k rámu.
2. Sedadlo nasadíte na válec pomocí "push fit".
3. Utáhněte zajišťovací šroub pohonu a sedadla.
4. Namontujte držáky do opěradla a sedadla.
5. Namontujte držáky do opěrky nohou a sedadla.

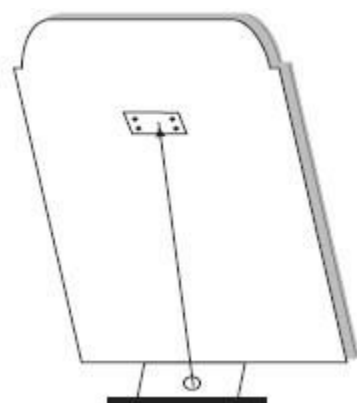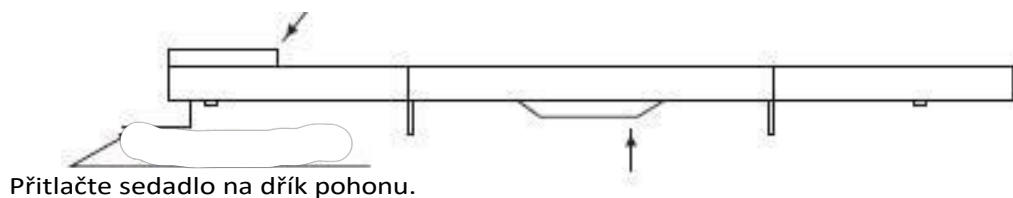

Protáhněte opěrku otvorem a utáhněte ji šroubem.

Na místě na opěradle přišroubujte držák tak, že jej zajistíte otvorem pomocí šroubu (totéž platí pro opěrky nohou).

Čištění a údržba:

- Aby byl povrch židle v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů se nejlépe hodí malý kartáček.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Neměli byste se vyhýbat ani roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).

- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti. Ne v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.

- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození spotřebiče, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. Normální provoz uzamykacího systému

Pokud zjistíte závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizovaný servis. Otevřít nebo vyměnit pohon / řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha zařízení pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) byl poškozen napájecí kabel, d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí

2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, by se odpadní elektrická zařízení měla sbírat odděleně a poté předávat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.