

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kozmetikai karosszék hyd. Basic 210



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2024

A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a mellékelt használati utasítás tartalmát, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóelemet eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a széket arra a helyre, ahol használni fogja.

Vigyázat!

Gyermekek és illetéktelen személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

A készülék méretei:



Hosszúság teljesen kinyújtott állapotban: 184 cm,


magasság min. 65cm,

Max. magasság 79cm

A szék maximális terhelhetősége: 150kg.


- A karosszék kézzel állítható az alatta lévő karok segítségével. Így a lábtartó és a háttámla szöge állítható.
- A szék magassága az ülésállító fogantyú segítségével állítható.
- Ezenkívül a karfák levehetőek, hogy a kezelési területekhez könnyedén hozzáférhessenek.
- A fejtámlán található párna szintén kivehető, így a kezelések könnyebben elvégezhetők, ha a személy hason fekszik.
- A szék kinyitható fekvőhelyzetbe is kihajtható.
- A szék 360° fordítható.

A háttámla/lábtartó helyzetének beállításához húzza meg a szék alatt lévő kart, majd döntse a háttámlát/lábtartót a megfelelő pozícióba.

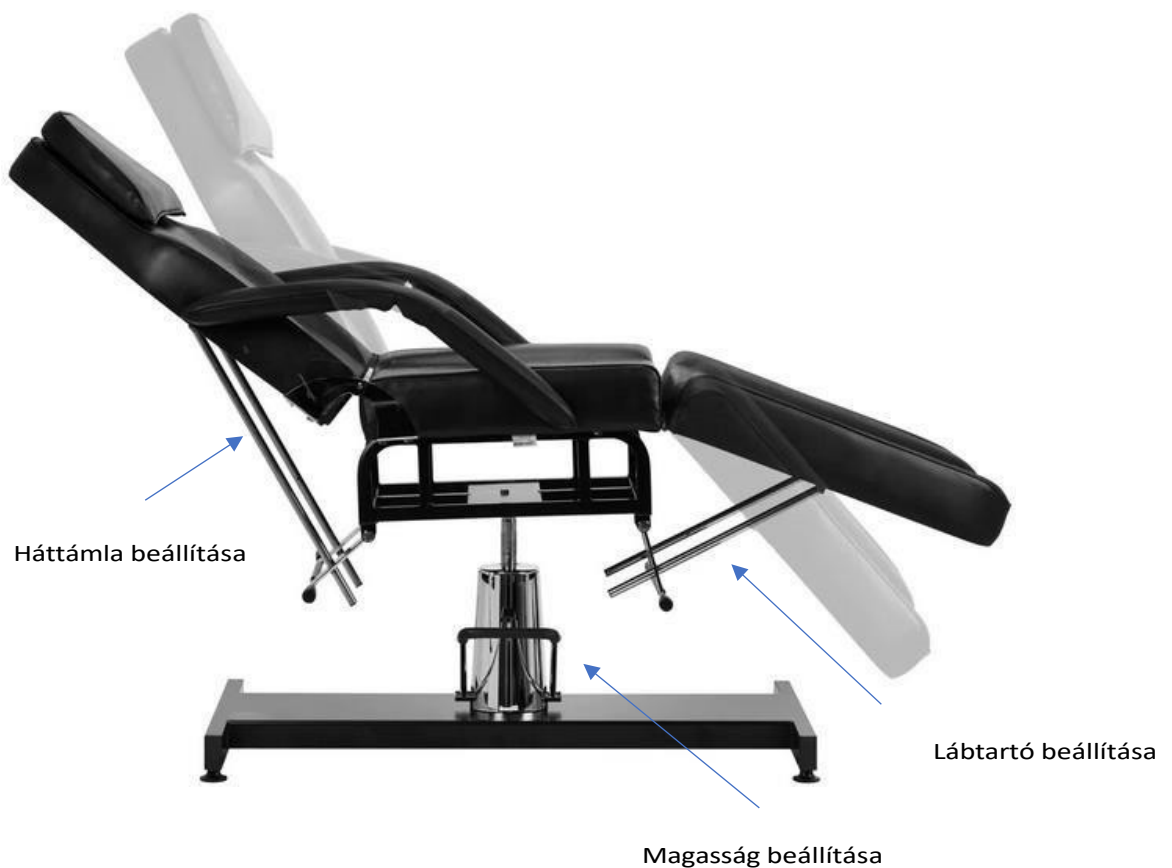


Összeszerelés:

1. Csavarozza az ülést a kerethez.
2. Illessze az ülést a hengerre "tolóillesztéssel".
3. Húzza meg a működtető-ülés rögzítőcsavart.
4. Szerelje be a konzolokat a háttámlába és az ülésbe.
5. Szerelje be a konzolokat a lábtartóba és az ülésbe.

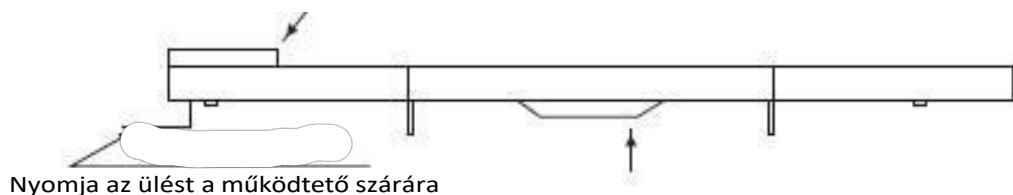

1. lépés: az ülést a működtető szára

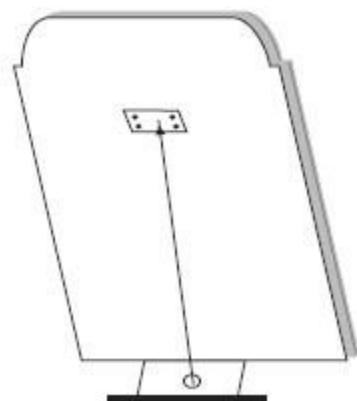

Vezesse át a tartót a lyukon, és húzza meg a csavarral.

A háttámlán a helyére csavarja a tartót a lyukon keresztül egy csavarral rögzítve (ugyanaz vonatkozik a lábtartókra is).

Tisztítás és karbantartás:

- Annak érdekében, hogy a szék felülete jó állapotban maradjon, rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítsa a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe válik be a legjobban.
- Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítsa a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A tisztítás enyhe tisztítószeres oldattal a legjobb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. A klór alapú oldatokat nem szabad kerülni.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett. Ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai székot vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékezése
3. A vezérlődoboz és annak kábelezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát észlel, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizhez. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki. Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.

9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az irányelvvel összhangban

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni, majd át kell adni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.