

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo Azzurro Special 152



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Tento návod obsahuje podrobné informace o obsluze a údržbě zařízení. Před použitím zařízení si přečtěte přiložený návod. Zařízení používejte v souladu s popisem. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že jsou s ním seznámeny všechny osoby, které mohou zařízení používat.

Technické údaje:

Rozměry: 119 x 60 x 53 cm

Hmotnost: 14 kg

Maximální zatížení: 150 kg Nastavení


výšky: 55 - 75 cm Nastavení opěradla

vpředu a vzadu: 0 - 5 cm Nastavení

úhlu sklonu: 10°

Konstrukce:

1. Opěradlo a sedák židle
2. Plynový píst
3. Podstavec židle
4. Kolečka

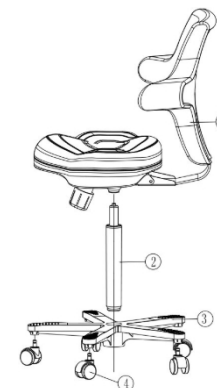

Montáž:

1. U některých modelů nejsou opěradlo a sedák židle smontovány dohromady. V takovém případě zasuňte opěradlo do úchyty v sedáku a přišroubujte pomocí 3 přiložených šroubů.
2. Namontujte kolečka do základny tak, že je zatlačíte.
3. Zasuňte silnější stranu válce do základny.
4. Nasaďte sedák na píst.

Pozor. U některých modelů je píst zajištěn plastovým krytem.

(v místě spojení se sedadlem). Před nasazením sedadla zkontrolujte, zda byla odstraněna plastová krytka. V opačném případě nebude po montáži možné změnit vertikální polohu.

Obsluha:

Vertikální nastavení:

Chcete-li sedadlo spustit dolů, stiskněte páčku označenou na obrázku, zatímco sedíte na sedadle nebo na něj jinak zatěžujete.


Chcete-li sedadlo zvednout nahoru, stiskněte páčku označenou na obrázku, aniž byste sedadlo zatěžovali.



Nastavení sklonu opěradla:


Vysuňte konec páčky ven, abyste odblokovali možnost nastavení sklonu. Stiskněte opěradlo a nastavte jej do požadované polohy. Poté zasuňte konec páčky, aby se poloha opěradla zablokovala. Pozor, vzhledem k typu použitého

blokovacího mechanismu je třeba, aby se opěradlo nastavilo blíže k sedadlu, nejprve zatlačit v opačném směru (podle šipky na přiložené ilustraci).

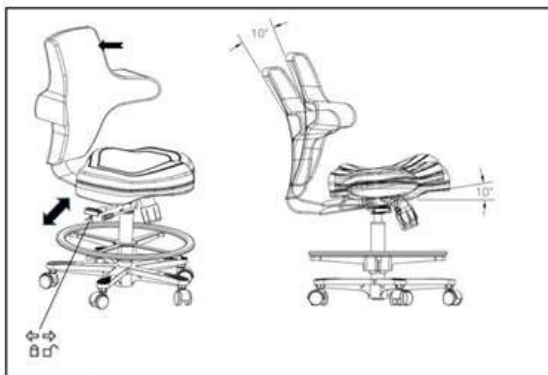

Horizontální nastavení sedáku:

Pro posunutí sedáku dopředu nebo dozadu je třeba zvednout označenou na obrázku a posuňte sedadlo do požadované polohy. Po uvolnění páčky zůstane sedadlo v zvolené poloze.

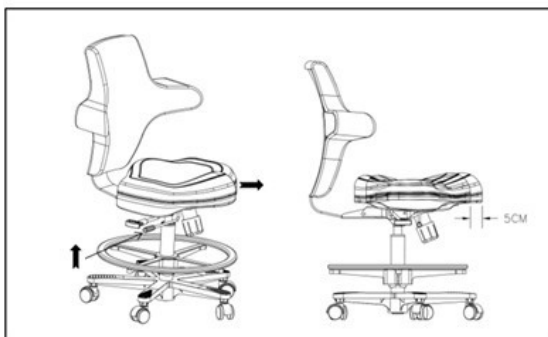

Doporučení:

1. Nepřekračujte doporučené zatížení sedadla, překročení doporučené hmotnosti může způsobit trvalé poškození (max. 150 kg).
2. K čištění sedadla nepoužívejte produkty obsahující žíraviny a barviva, ani olejové čisticí prostředky.
3. Nevhodné čisticí prostředky mohou způsobit poškození materiálu, korozi nebo jiné jevy.
4. Sedadlo je třeba pravidelně čistit, aby se na něm neusazovaly nečistoty. V případě znečištění čalounění je nejbezpečnější použít vlažnou vodu s mýdlem.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (-) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení by mělo být skladováno v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení házeno ani upuštěno, vystaveno mechanickým otřesům nebo povětrnostním vlivům.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený pro použití v kosmetických salonech. Pouze kvalifikovaný kosmetický personál smí zařízení obsluhovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, mokřích míst nebo mokřima rukama, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky po každém použití zařízení.
7. Do otvoru v zařízení nevkládejte žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce. 8. Zařízení neumísťujte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související nebezpečí.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko pro zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Použité elektrické zařízení, přístroje a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do kontejnerů na domácí odpad. Je třeba postupovat v souladu s pravidly týkajícími se vyhazování tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí

✓ souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité elektrické zařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Na konci své životnosti obsahují i stará zařízení plnohodnotné prvky vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k opětovnému zpracování. Proto je třeba je odevzdat do příslušných sběrných míst, stejně jako je lze odevzdat společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.