

ACTIVESHOP®

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Azzurro Special 152 szépségszék



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

*A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a készülék működéséről és karbantartásáról. A készülék használata előtt olvassa el a mellékelt kézikönyvet. Használja a készüléket a leírásnak megfelelően. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy minden, a készüléket használó személy ismerje annak tartalmát.

Műszaki adatok:

Méretetek: 119 x 60 x 53 cm


Súly: 14 kg

Maximális terhelés: 150 kg

Magasságállítás: 55–75 cm Hattámla-
állítás: 0–5 cm Szögállítás: 10°

Felépítés:

1. Szék háttámla és ülés
2. Gázrugó
3. Szék alapja
4. Görgők

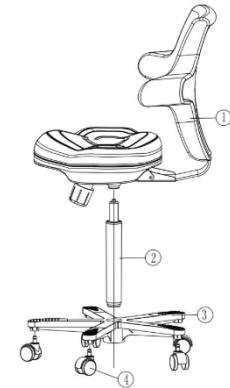

Összeszerelés:

1. Egyes modelleknél a szék háttámlája és ülése nincs egymáshoz rögzítve. Ebben az esetben csúsztassa a háttámlát az ülés rögzítésébe, és húzza meg a mellékelt 3 csavarral.
2. A görgőket nyomja be az alapba.
3. Helyezze be a működtető szerkezet vastagabb oldalát az alapba.
4. Helyezze az ülést a hengerre.

Megjegyzés: Egyes modelleknél a henger műanyag burkolattal van védve.

(az ülés csatlakozási pontjánál). Az ülés rögzítése előtt ellenőrizze, hogy a műanyag burkolat eltávolításra került-e. Ellenkező esetben a szerelés után nem lehet megváltoztatni a függőleges helyzetet.

Működés:

Függőleges beállítás:

Az ülés leengedéséhez nyomja meg a képen jelzett kart, miközben az ülésen ül, vagy más módon nehezíti azt.


Az ülés emeléséhez nyomja meg a képen jelzett kart anélkül, hogy súlyát az ülésre helyezné.



A háttámla dőlésszögének beállítása:


Húzza ki a kar végét kifelé, hogy feloldja a dőlésszög-beállítást. Nyomja meg a háttámlát, és állítsa be a kívánt pozícióba. Ezután nyomja be a kar végét, hogy rögzítse a háttámla helyzetét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a használt reteszelő mechanizmus típusa miatt zárszerkezet típusának, ahhoz, hogy a háttámlát közelebb lehessen állítani az üléshez, először az ellenkező irányba kell nyomni (a nyíl jelzi a ábra).

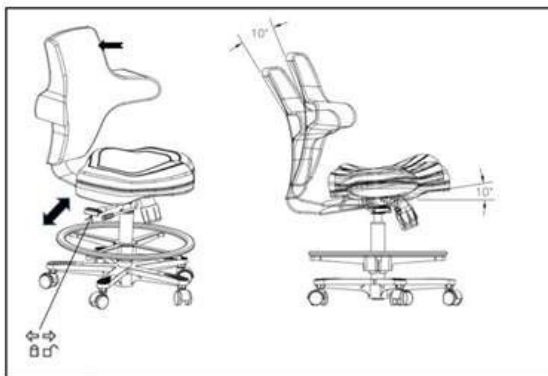

Vízszintes ülésállítás:

Az ülés előre vagy hátra, emelje meg a jelölt a , majd mozgassa az ülést a kívánt pozícióba. Amikor elengedi a kart, az ülés a kiválasztott pozícióban marad.

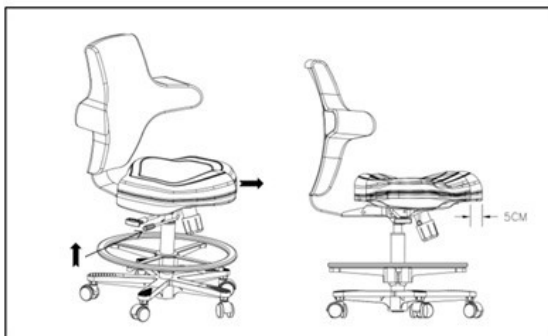

Ajánlások:

1. Ne haladja meg a szék ajánlott terhelhetőségét, mivel az ajánlott súly túllépése maradandó károsodást okozhat (max. 150 kg).
2. Ne használjon maró hatású anyagokat és festékeket tartalmazó termékeket, valamint olajos tisztítószerket a szék tisztításához.
3. A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja az anyagot, korróziót vagy egyéb jelenségeket okozhatnak.
4. A széket rendszeresen tisztítsa meg, hogy a szennyeződések ne tapadjanak rá véglegesen. Ha a kárpit piszkos lesz, a legbiztonságosabb langyos víz és szappan használata.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten, kizárólag eredeti csomagolásában szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, 75% relatív páratartalom feletti hőmérsékleten tárolja. Üzemi hőmérséklet-tartomány: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben ne dobja el és ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A készüléket kizárólag képzett szépségápolási szakemberek használhatják, hogy elkerüljék a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a használati utasítás megad. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy hivatalos szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) végezhet.
3. Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által kijelölt szervizközponttal:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden h a s s z n á l a t után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval. 8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsiba, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlatos egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (bekapcsolás és kikapcsolás között, illetve fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, megrongálódásának vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉS:

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodás esetén a veszély elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, hogy megértsék a vele járó kockázatokat.
3. A készülék nem gyermekek számára készült. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy olyan személyek tartózkodnak a közelében, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a készülék használatáról.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezéseket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosító központokba kell vinni. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Kövesse a vonatkozó szabályokat.

Az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítása. A környezet védelme érdekében

a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeire kell szállítani. Élettartamuk végén a régi készülékek értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért újrahasznosításra kell őket küldeni. Ezért azokat megfelelő gyűjtőhelyekre kell vinni, vagy elküldhetik az ACTIVESHOP Sp. z o.o. cégnek is.