

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## MODE D'EMPLOI

MILLER JD308

Modèle JD308



**Importateur :**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Poland  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.  
A/05/2024



**Caractéristiques techniques :**

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tension nominale</b>                       | <b>12.6V 1A</b>                             |
| <b>Puissance électrique</b>                   | <b>35W</b>                                  |
| <b>Durée de fonctionnement de la batterie</b> | <b>12 heures (en fonction de la charge)</b> |
| <b>Temps de charge</b>                        | <b>3-4 heures</b>                           |
| <b>Capacité de la batterie</b>                | <b>2200mAh</b>                              |
| <b>Couple</b>                                 | <b>2,2 cNm</b>                              |
| <b>Poids de la tête</b>                       | <b>115 g</b>                                |
| <b>Dimensions de la tête</b>                  | <b>13,5 cm x Ø 2,5 cm</b>                   |

**Remarque**

1. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saletés, de poussières et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, voire l'endommager.
2. Il est interdit d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement du cordon.
3. Veillez toujours à ce que l'appareil soit alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures.
4. Le câble ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive.
5. Rien de lourd ne doit être placé sur le cordon.
6. Empêchez la poussière ou d'autres éléments nocifs de pénétrer dans la fiche, la base ou la tête en utilisant des absorbeurs de poussière.
7. Ne frappez pas et ne lancez pas l'appareil. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, vous ne pourrez plus l'utiliser.
8. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour les réparations, contactez votre distributeur, à partir de l'appareil a été acheté auprès de ou d'un centre de service agréé.

**Montage**

1. Identifier la position de tous les connecteurs
2. Insérez la fiche du câble de la tête en respectant la position des broches dans la prise.
3. Assurez-vous que la base est éteinte avant de brancher la tête.

**Préparation avant utilisation**

1. Assurez-vous que la vitesse de la tête a été réglée au niveau minimum.
2. Assurez-vous que le cutter a été correctement verrouillé en place. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'interrupteur "twist lock".
3. Tout en tenant la tête, allumez le bouton d'alimentation.

**Utilisation du produit**

1. Utiliser le potentiomètre pour régler la vitesse souhaitée.
2. Pour augmenter la vitesse de travail, déplacez le potentiomètre vers la droite.
3. Si vous souhaitez réduire la vitesse de travail, déplacez le potentiomètre vers la gauche.
4. Le bouton de droite vous permet d'arrêter la fraiseuse à tout moment. A la reprise, la défonceuse fonctionnera à la même vitesse.

**Réglage de la vitesse gauche/droite**


Le sens de rotation de la pièce à usiner peut être modifié à l'aide d'un interrupteur situé sur la base (FOR/REV). Le changement du sens de rotation est possible lorsque le moteur est en marche.

### Changement de mode

- Sélectionnez le mode souhaité à l'aide du bouton HAND/FOOT, situé sur la base.



MAIN - fonctionne tête derrière à l'aide du potentiomètre.

PIED - commande de la tête au moyen d'une pédale, après avoir préalablement réglé la vitesse sur un potentiomètre, connecté à la base.

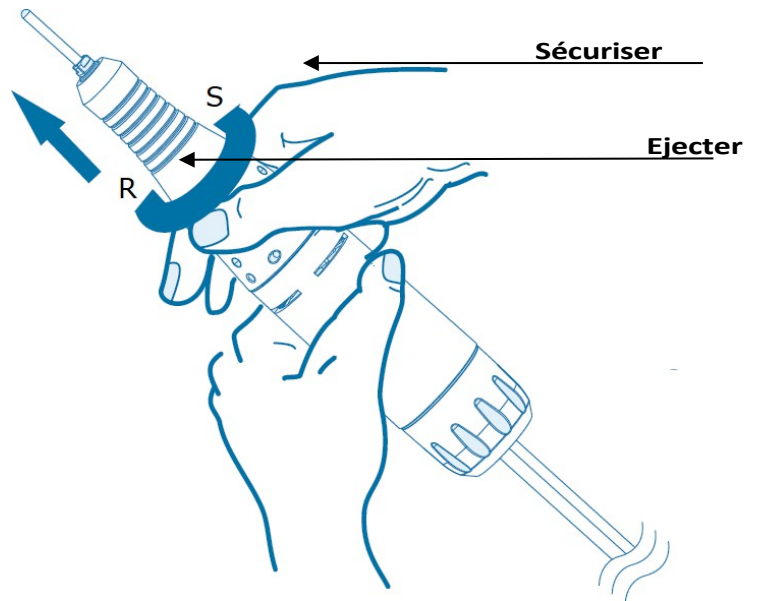


### Changement d'outil de coupe

1. Pour remplacer la fraise, tournez le bouton Twist Lock dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le "R".
2. À ce stade, vous pouvez retirer la fraise de l'axe et la remplacer par une neuve.
3. Une fois la fraise en place, tournez le bouton Twist Lock dans le sens des aiguilles d'une montre en direction de la lettre "S" jusqu'à ce que vous entendiez le son caractéristique de la fraise. "S" jusqu'à ce que vous entendiez le "clac" caractéristique.
4. La vitesse de rotation de la fraise dépend du type et du matériau de la fraise. A cet égard, veuillez vous référer aux informations fournies par le fabricant.

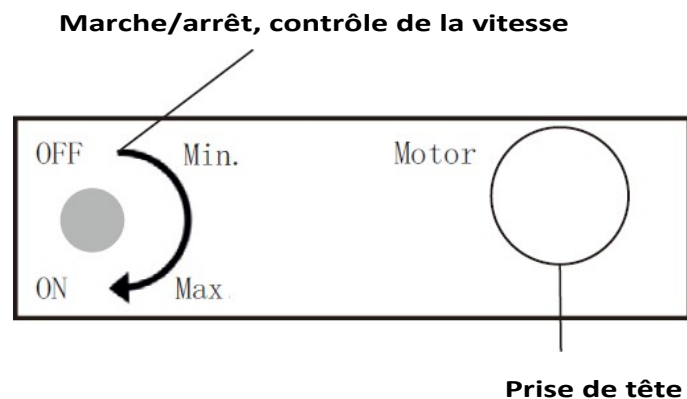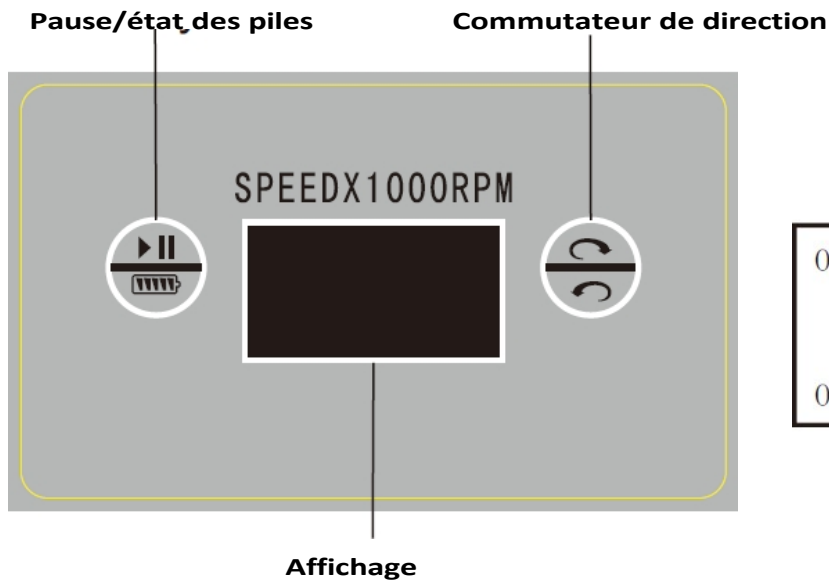

**Diamètre de la fraise      Rotation max.**

|      |       |
|------|-------|
| 5mm  | 41000 |
| 7mm  | 30000 |
| 10mm | 20000 |
| 13mm | 16000 |

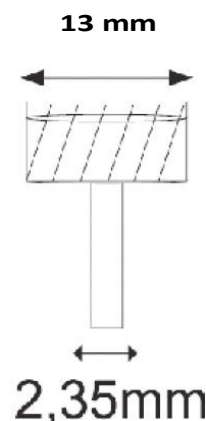

## MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :  
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,  
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

## ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements , contacter un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies pour l'utilisation de l'équipement en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



### **ÉLIMINATION DE L'APPAREIL**

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE

concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis au recyclage. C'est pourquoi ils doivent être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

### **STOCKAGE ET TRANSPORT**

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.