

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Kozmetické kreslo Azzurro Special 152



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod obsahuje podrobné informácie týkajúce sa obsluhy a údržby zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte obsah priloženého návodu. Zariadenie používajte v súlade s popisom. Tento návod si uchovajte a uistite sa, že všetky osoby, ktoré môžu zariadenie používať, sú s ním oboznámené.

Technické údaje:

Rozmery: 119 x 60 x 53 cm
Hmotnosť: 14 kg
Maximálne zaťaženie: 150 kg
Nastavenie výšky: 55 – 75 cm
Nastavenie sklonu operadla dopredu/dozadu: 0 – 5 cm
Nastavenie uhla sklonu: 10°

Konštrukcia:

1. Operadlo a sedadlo stoličky
2. Plynová pružina
3. Podstavec stoličky
4. Koleska



Montáž:

1. V niektorých modeloch nie sú operadlo a sedadlo stoličky zmontované spolu. V takom prípade je potrebné zasunúť operadlo do úchyty v sedadle a priskrutkovať 3 priloženými skrutkami.
2. Namontujte koleska na podstavec tak, že ich zatlačíte.
3. Zasuňte zdvihák hrubšou stranou do podstavca.
4. Nasadte sedadlo na zdvihák


Poznámka: V niektorých modeloch je zdvihák chránený plastovým krytom (v mieste spojenia so sedadlom). Pred nasadením sedadla skontrolujte, či bol plastový kryt odstránený. V opačnom prípade nebude po montáži možné zmeniť polohu vo vertikálnom smere.

Obsluha:

Vertikálne nastavenie:

Na spustenie sedadla nadol je potrebné stlačiť páčku označenú na obrázku, pričom sedíte na sedadle alebo ho iným spôsobom zaťažujete.

Na zdvihnutie sedadla nahor stlačte páčku označenú na obrázku bez súčasného zaťaženia sedadla.

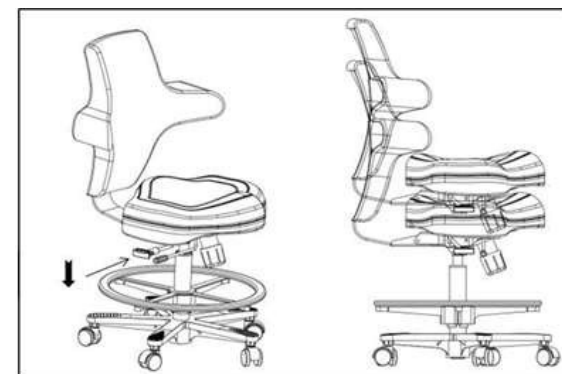


Nastavenie sklonu operadla:

Vysuňte koniec páky von, aby ste odblokovali možnosť nastavenia sklonu. Stlačte operadlo a nastavte ho do požadovanej polohy.


Potom zasunite koniec páky, aby ste polohu operadla zaфикovali. Pozor, vzhľadom na typ použitého

blokovacieho mechanizmu, aby ste mohli nastaviť operadlo bližšie k sedadlu – je potrebné ho najprv stlačiť v opačnom smere (podľa šípky na priloženom obrázku.)

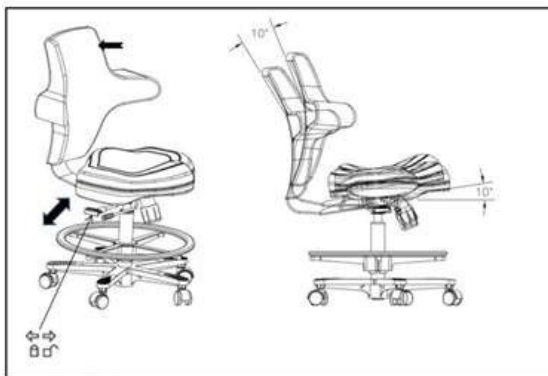

Nastavenie sedadla v horizontálnej polohe

Ak chcete posunúť sedadlo dopredu alebo dozadu, je potrebné zdvihnúť označenú časť na obrázku a potom posuňte sedadlo do požadovanej polohy. Po uvoľnení páky zostane sedadlo v zvolenej polohe.

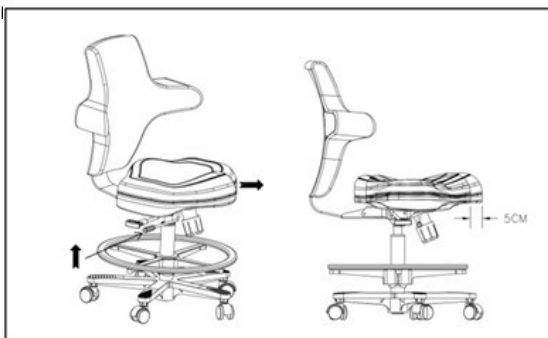

Odporúčania:

1. Neprekračujte odporúčané zaťaženie kresla, prekročenie odporúčanej hmotnosti môže spôsobiť trvalé poškodenie (max. 150 kg).
2. Na čistenie kresla nepoužívajte prostriedky obsahujúce žieraviny a farbivá, ani mastné čistiace prostriedky.
3. Nevhodné čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie materiálu, koróziu alebo iné javy.
4. Kreslo je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo trvalému usadzovaniu nečistôt. V prípade znečistenia čalúnenia je najbezpečnejšie použiť vlažnú vodu s mydlom.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C výlučne v originálnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Prevádzková teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Toto zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným kozmetickým personálom pomáha predísť nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne zamestnanec autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie sa nesmie inštalovať ani obsluhovať v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo s mokрыmi rukami – aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú klásiť žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by niekto mohol šliapnúť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvoru v zariadení nesmie byť vložený žiadny predmet. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať prestávku v dĺžke jednej minúty.
10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej funkcie zariadenia, jeho poškodenia alebo dokonca spálenia.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž týkajúca sa bezpečného používania zariadenia, aby boli súvisiace riziká zrozumiteľné.
3. Toto zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú s týmto zariadením hrať.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Použitie elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly je potrebné odovzdať do zariadení na recykláciu surovín v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia sa nesmú vyhazovať do kontajnerov na domový odpad. Je potrebné postupovať v súlade s pravidlami týkajúcimi sa likvidácie tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia

v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné vyradované elektrické zariadenia zbierať oddelene a následne odovzdať do zberných miest pre vyradované elektronické a elektrické zariadenia.

Na konci životnosti, ako aj staré zariadenia obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na opätovné spracovanie. Preto je potrebné ich odovzdať do príslušných zberných miest, ako aj do spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.