

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Zvětšovací lampa S4+ stativ



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



Zvětšovací lampa na čtyřramenném stativu umožňuje detailní prohlížení kůže a kožních lézí a osvětluje ošetřovanou oblast. Používá se také pro ošetření manikúry a pedikúry a permanentní make-up. LED diody svítí jasným světlem, které zvyšuje komfort práce.

Technické údaje: Vnitřní osvětlení: 1. Vnitřní osvětlení: 2. Vnitřní osvětlení: 3:

Napětí	220-240V
Napájení	22W
Frekvence	50/60Hz
Zvětšení	5 dioptrií

Rozměry zařízení:




Bezpečnostní opatření:

1. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné vodní plochy.
2. Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
3. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot. Spotřebič čistěte nejlépe vlhkým hadříkem.
4. Napájecí kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
5. Ujistěte se, že je spotřebič připojen ke správnému napájení a že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
6. Spotřebič nezapojujte mokřýma nebo vlhkýma rukama.
7. Nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka horká nebo poškozená.
8. Neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných místnostech s vysokou vlhkostí.
9. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek.
10. Do přístroje nenarážejte a neházejte s ním.


Technické údaje zařízení:

1. Napájecí zástrčka
2. Rameno zařízení
3. Lampička
4. Vypínač
5. Nastavení lampy
6. Stativ
7. Základna
8. Kolečko

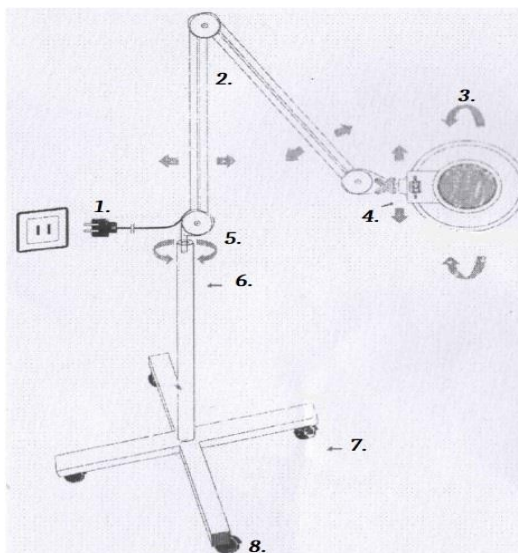

Montáž:

1. Nejprve sestavte základnu a stativ. Spojte obě nohy a stativ dohromady pomocí podložky a šroubu, jak je znázorněno na obrázku 1. Poté připojte lampu ke stativu (obrázek 2).

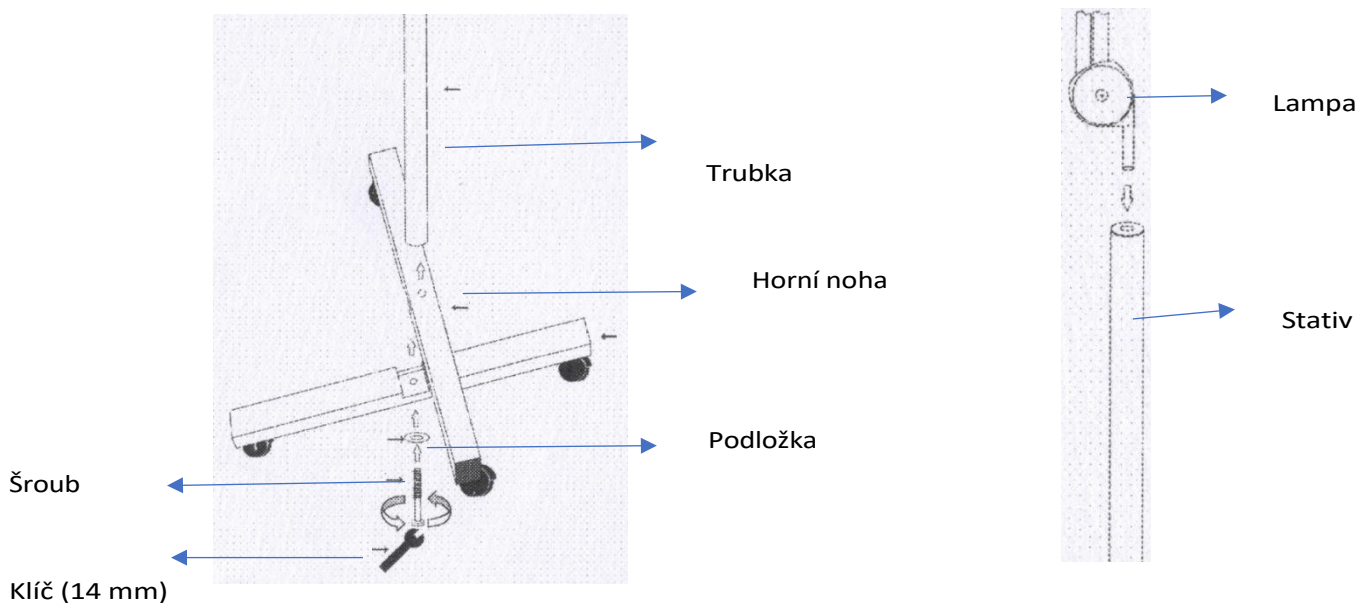

Návod k použití:

1. Sestavte jednotku.
2. Připojte ji k vhodnému zdroji napájení.
3. Spusťte lampu.
4. Nastavte polohu svítiny podle potřeby.
5. Po dokončení nezapomeňte jednotku odpojit od sítě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřými rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů.

musí být elektrozařízení shromažďována odděleně a odevzdávána na následujících sběrných místech

sběr odpadních elektronických a elektrických zařízení. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.