

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline tool Azzurro Special 152



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KÄSITLUSJUHENDIT

Käesolev juhend sisaldab üksikasjalikku teavet seadme kasutamise ja hooldamise kohta. Enne seadme kasutamist tutvuge lisatud juhendiga. Kasutage seadet vastavalt kirjeldusele. Säilitage käesolev juhend ja veenduge, et kõik seadme kasutajad on sellega tutvunud.

Tehnilised andmed:

Mõõtmed: 119 x 60 x 53 cm

Kaal: 14 kg

Maksimaalne koormus: 150 kg


Kõrguse reguleerimine: 55–75 cm

Seljatoe reguleerimine ette-taha: 0–5°

cm Kaldenurga reguleerimine: 10°

Konstruksioon:

1. Tooli seljatugi ja iste
2. Gaasilõõr
3. Tooli alus
4. Rattad

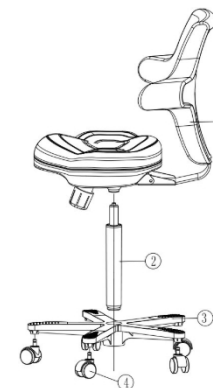

Paigaldamine:

1. Mõnel mudelil ei ole tooli seljatugi ja iste kokku monteeritud. Sellisel juhul tuleb seljatugi istme kinnitusse lükata ja 3 kaasasoleva kruviga kinni keerata.
2. Paigaldage rattad alusele, surudes need sisse.
3. Lükake silinder paksema poolega alusesse.
4. Asetage iste silindrile.

Tähelepanu. Mõnel mudelil on silinder kaitstud plastikkattega.


(istme ühenduskohas). Enne istme paigaldamist tuleb kontrollida, kas plastikkate on eemaldatud. Vastasel juhul ei ole pärast paigaldamist võimalik istme vertikaalset asendit muuta.

Kasutamine:

Vertikaalne reguleerimine:

Istme allalaskmiseks tuleb istmel istudes või muul viisil istmele koormust avaldades vajutada pildil märgitud kangi.


Istme ülespoole tõstmiseks tuleb vajutada pildil märgitud kangi, ilma istmele koormust avaldamata.

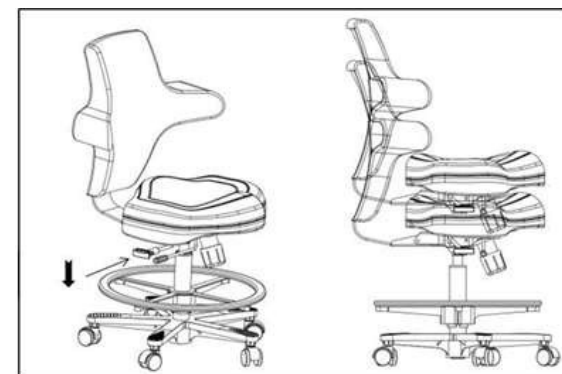

Seljatoe kaldenurga reguleerimine:


Tõmmake käepideme ots välja, et vabastada kaldenurga reguleerimise võimalus. Suruge seljatuge ja seadke see soovitud asendisse. Seejärel lükake käepideme ots sisse, et lukustada seljatoe asend.

Tähelepanu, kasutatava lukustusmehhanismi, et seljatuge istmele lähemale seada, tuleb seda esmalt vastassuunas (noole suunas) suruda lisatud illustratsioonil lisatud joonisel).

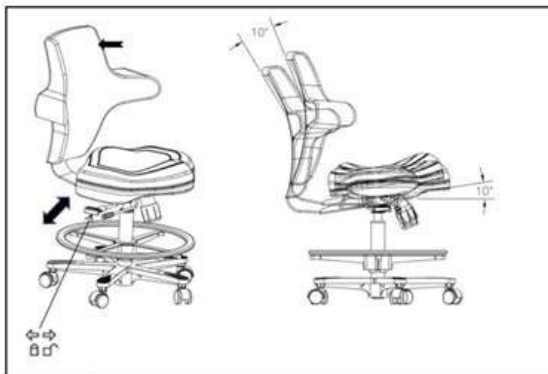

Istme horisontaalne reguleerimine:

Istme ette- või tahapoole nihutamise ette või tahapoole, tõstke märgitud pildil kujutatud kangid ja liigutage istet soovitud asendisse. Kui vabastate kangid, jääb iste valitud asendisse.

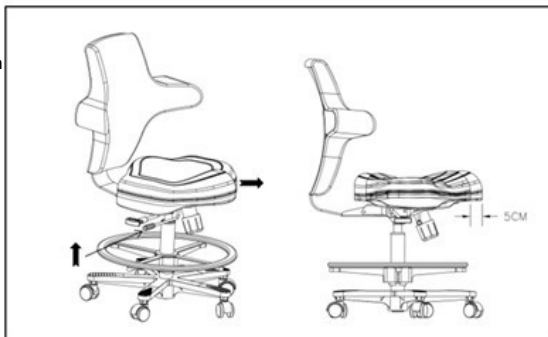

Soovitused:

1. Ärge ületage istme soovitatavat koormust, soovitatava kaalu ületamine võib põhjustada püsivaid kahjustusi (max 150 kg).
2. Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad söövitavaid aineid ja värvaineid, ega õliseid puhastusvahendeid tooli puhastamiseks.
3. Ebasobivad puhastusvahendid võivad põhjustada materjali kahjustusi, korrosiooni või muid nähtusi.
4. Istet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse püsivat kinnitumist. Istmepolstri puhastamiseks on kõige ohutum kasutada leiget seebivett.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Kasutustemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avaldada.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) töötaja.
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.
4. Järgmistes juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega:
a) vedelik on sattunud seadmesse, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Ärge pistke midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga. 8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärele, riulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme kindlaksmääratud kasutusaja tagamiseks on soovitatav hoida üheminutilise vahe enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toide peab vastama nimikilbil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib see rikkuda või isegi põleda.

TÄHELEPANU:

1. Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise või vaimse puudega inimesed ning inimesed, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui neile tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta, viibivad selle läheduses.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutamine või sellega kokkupuutumine võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.

SEADME KÄITLEMINE



Kasutatud elektriseadmed, tööriistad ja pakendid tuleb viia ringlussevõtu keskustesse vastavalt keskkonnakaitse nõuetele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Järgige järgmisi nõudeid sellise seadmete äraviskamist. Keskkonna kaitsmiseks

vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel viia kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidest. Kasutusaja lõpus ja ka vanad seadmed sisaldavad täisväärtuslikke ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõttu. Seetõttu tuleb need suunata asjakohastesse kogumispunktidest, samuti võib need suunata ka ettevõttele ACTIVESHOP Sp. z o.o.