

ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun de cosmetică Azzurro Special 152



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

Acest manual conține informații detaliate privind funcționarea și întreținerea dispozitivului. Vă rugăm să citiți manualul atașat înainte de a utiliza dispozitivul. Utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor. Păstrați acest manual și asigurați-vă că toate persoanele care pot utiliza dispozitivul sunt familiarizate cu acesta.

Date tehnice:

Dimensiuni: 119 x 60 x 53 cm
Greutate: 14 kg
Sarcina maximă: 150 kg Reglare înălțime:
55–75 cm Reglare spătar: 0–5 cm
Reglare unghi: 10°

Construcție:

1. Scaun spătar și șezut
2. Arc cu gaz
3. Baza scaunului
4. Rolete



Asamblare:

1. La unele modele, spătarul și scaunul scaunului nu sunt asamblate împreună. În acest caz, glisați spătarul în suportul scaunului și strângeți cu cele 3 șuruburi furnizate.
2. Fixați roțile la bază apăsându-le.
3. Introduceți partea mai groasă a actuatorului în bază.
4. Așezați scaunul pe cilindru.


Notă: În unele modele, cilindrul este protejat de un capac din plastic.
(la punctul de conectare cu scaunul). Înainte de a fixa scaunul, verificați dacă capacul din plastic a fost îndepărtat. În caz contrar, nu va fi posibilă modificarea poziției verticale după asamblare.

Funcționare:

Reglare verticală:

Pentru a coborî scaunul, apăsați maneta marcată în imagine în timp ce stați pe scaun sau în alt mod apăsați pe acesta.

Pentru a ridica scaunul, apăsați maneta marcată în imagine fără a aplica greutate pe scaun.

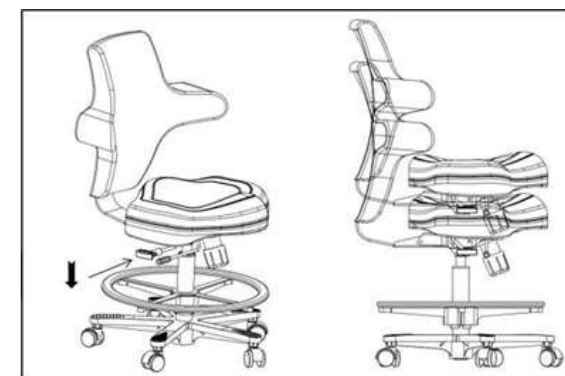


Reglarea înclinării spătarului:

Trageți capătul manetei spre exterior pentru a debloca reglarea înclinării. Apăsați spătarul și reglați-l în poziția dorită.

Apoi împingeți vârful manetei spre interior pentru a bloca poziția spătarului.


Vă rugăm să rețineți că, datorită tipului de mecanism de blocare utilizat

mecanismului de blocare, pentru a apropia spătarul de scaun, trebuie mai întâi să îl împingeți în direcția opusă (așa cum indică săgeata în ilustrație).

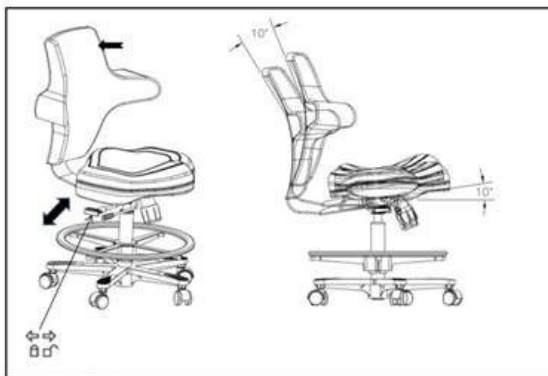

Reglarea orizontală a scaunului:

Pentru a deplasa scaunul înainte sau înapoi, ridicați marcajul în și apoi deplasați scaunul în poziția dorită. Când eliberați maneta, scaunul va rămâne în poziția selectată.

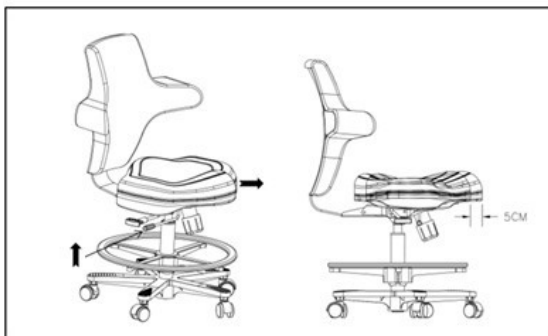

Recomandări:

1. Nu depășiți capacitatea de încărcare recomandată a scaunului, deoarece depășirea greutateii recomandate poate provoca daune permanente (max. 150 kg).
2. Nu utilizați produse care conțin agenți corozivi și coloranți, precum și agenți de curățare uleioși pentru a curăța scaunul.
3. Agenții de curățare necorespunzători pot provoca deteriorarea materialului, coroziune sau alte fenomene.
4. Curățați scaunul în mod regulat pentru a preveni în crustarea permanentă a murdăriei. Dacă tapițeria se murdărește, cel mai sigur este să folosiți apă caldă și săpun.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Depozitați dispozitivul într-o zonă bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, nu aruncați și nu scăpați dispozitivul, nu îl expuneți la șocuri mecanice sau factori atmosferici.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Aparatul trebuie utilizat numai de personal calificat din domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, pentru a evita pătrunderea lichidelor în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service autorizat furnizat de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) lichid a pătruns în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.
7. Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul. 8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dispozitivul se poate deteriora dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul să funcționeze defectuos, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.
2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a dispozitivului, astfel încât să înțeleagă riscurile asociate.
3. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în prezența copiilor sau a persoanelor care nu cunosc suficient modul de utilizare al acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, astfel încât aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI



Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie duse la centrele de reciclare, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Respectați regulile privind eliminarea acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul

în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi transferate la punctele de colectare pentru deșuri de echipamente electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utile, aparatele vechi conțin componente reciclabile valoroase și, prin urmare, trebuie trimise la reciclare. Acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi returnate la ACTIVESHOP Sp. z o.o.