

ACTIVESHOP[®]

Manuale d'uso

Sterilizzatore UV-C Germix singolo HQ YM9001A



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, ed. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2026



Lo sterilizzatore Germix è un modo sicuro per una disinfezione sicura ed efficace senza l'uso di soluzioni chimiche o alte temperature. Il funzionamento dell'apparecchio si basa sull'azione battericida dei raggi UV – luce ultravioletta con lunghezza d'onda compresa tra 100 e 280 nm, in particolare 254 nm ovvero UV-C, che, incidendo direttamente sulla superficie, distrugge efficacemente le forme viventi dei microrganismi. Consente un'efficace disinfezione a secco, durante la quale l'attrezzatura non è esposta a danni meccanici o usura. Pulisce perfettamente le superfici di strumenti quali forbici, pettini, spazzole, tronchesine, pinzette o lame per rasoi.

Dati tecnici	
Potenza	220 W
Tensione	220-240 V 50 Hz
Tempo di sterilizzazione	30-45 min

Applicazione

1. Lo sterilizzatore UV serve a disinfettare strumenti in metallo, plastica, legno e materiali compositi (forbici, pettini, pinzette, ecc.)
2. La disinfezione viene effettuata con raggi UV, grazie ai quali l'attrezzatura non è soggetta a danni meccanici. La sterilizzazione UV consiste nell'irradiazione del materiale con raggi ultravioletti.
3. Questa radiazione modifica la struttura degli acidi nucleici, pertanto agisce con maggiore efficacia sulle forme vegetative dei microrganismi.
4. Il dispositivo è ideale per centri estetici, SPA, medicina estetica e saloni di parrucchiere.

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, quindi inserire gli strumenti e chiudere lo sterilizzatore UV. Gli strumenti inseriti nel cassetto dello sterilizzatore devono essere puliti, asciutti e precedentemente lavati. Inoltre, non devono sovrapporsi.
2. Collegare lo sterilizzatore alla corrente. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione/spengimento.
3. Il tempo di sterilizzazione è di circa 30-45 minuti.
4. Trascorso il tempo desiderato, spegnere lo sterilizzatore premendo il pulsante di accensione/spengimento.
5. Aprire lo sterilizzatore e rimuovere gli oggetti (non è obbligatorio: è possibile lasciarli nel contenitore).
6. Gli strumenti sono pronti per l'uso.

Importante

1. Il coperchio dello sterilizzatore deve essere sempre chiuso quando è in funzione.
2. È vietato aprire l'apparecchio prima che il processo di sterilizzazione sia terminato e che le spie LED si siano spente.
3. Non deve entrare in contatto con acqua o sostanze chimiche corrosive.
4. Gli elementi di struttura complessa devono essere aperti e smontati il più possibile, affinché la sterilizzazione degli strumenti avvenga nel modo più efficace possibile.


Raccomandazioni

1. Assicurarsi di aver installato l'apparecchio su una superficie piana e stabile, per ridurre il rischio di cadute e danni.
2. Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla corrente senza sorveglianza.
3. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni riportate nel manuale.
4. Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.
5. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto, è danneggiato o è finito

in acqua.

6. Non tirare direttamente il cavo per staccare la spina dalla presa.
7. Prodotto da utilizzare esclusivamente in ambienti interni. Non esporlo all'azione diretta degli agenti atmosferici.
8. Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporcizia. Si consiglia di pulire l'apparecchio con un panno umido.
9. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

Dimensioni

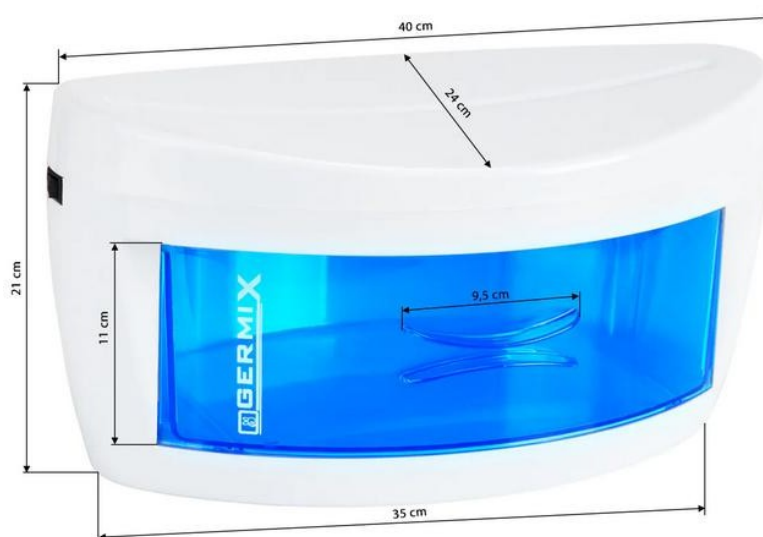

Misure di sicurezza

1. L'apparecchio è un dispositivo professionale destinato all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate. Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'apparecchio.
4. Staccare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana un odore strano, produce fumo o emette rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare alcun oggetto sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo penetri all'interno, scollegare il cavo dalla presa di alimentazione e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.

9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto dell'apparecchio, di danni allo stesso o addirittura di incendio.

ATTENZIONE

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone da persone con capacità fisiche e mentali ridotte, nonché da persone che non hanno familiarità con il funzionamento di tale apparecchiatura, purché venga loro garantita un'adeguata supervisione o istruzione sul corretto utilizzo in modo sicuro e purché i rischi connessi siano chiari.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone prive di conoscenze sufficienti sul suo utilizzo si trovano nelle vicinanze.
4. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
5. Questo dispositivo elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con il dispositivo elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento dell'apparecchio



Al fine di tutelare l'ambiente, in conformità con la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo

tipo di apparecchiature e non gettarle nei contenitori dei rifiuti domestici.

Al termine del loro ciclo di vita, questi dispositivi contengono ancora componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio presso i punti di raccolta appropriati o alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Conservazione e trasporto

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-)20 °C e (+)40 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio da (+)10 °C a (+)40 °C. Durante i processi
Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare né far cadere l'apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.