

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Stolná ošetrovacia lampa Glow MX6 / MX3



Dovozca:

Z o.o.

Graniczna 8b, budova DC 2a

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl




Technické údaje:

Model	HD-M3X	HD-M6X
Vstupné napätie	220-240 V 50 Hz	220-240V 50Hz
Vstupné napätie	12V 2A	24V 1,5A
Maximálny výkon	20W	36W
Farba	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Svetelný tok	1800LM	2800LM
Rozmery	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
Hmotnosť	1,4 kg	4,6 kg

Konštrukcia a montáž svietidla HD-M6X


1. Naskrutkujte spodnú časť statívu (časť D) do základne. Potom priskrutkujte hornú časť statívu (časť C) do spodnej časti (časť D).

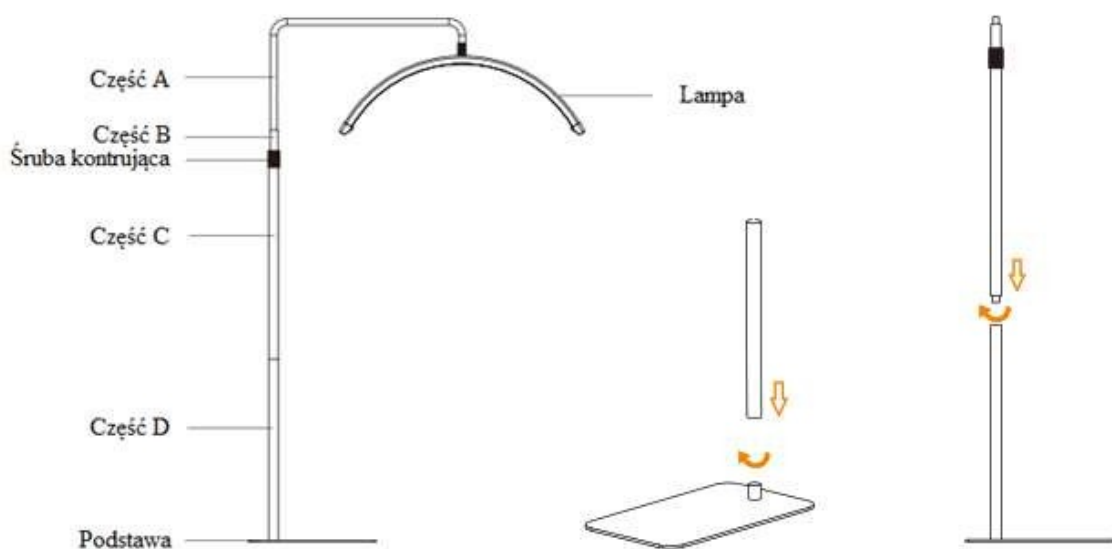


2. Montáž lampy na statív

- Uvoľnite upevňovaciu skrutku.
- Vytiahnite časť B z časti C.
- Otočte časť A s časťou B.
- Vložte časť B do časti C.
- Utiahnite upevňovaciu skrutku.
- Pripojte káble na napájanie.

Poznámka: Umiestnenie dokovacej stanice lampy pekne nad pätku statívu poskytuje lampe najväčšiu stabilitu.

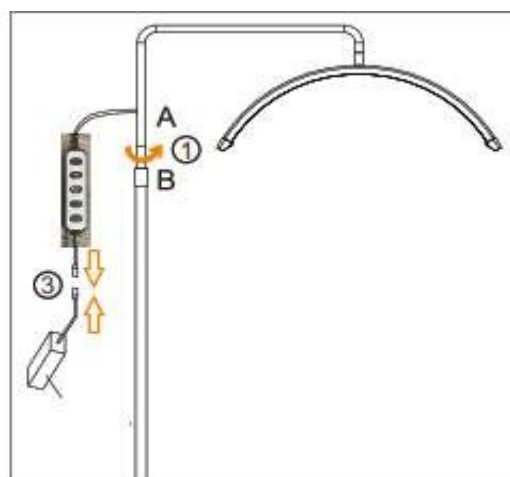


Konštrukcia a montáž svetidla HD-M3X

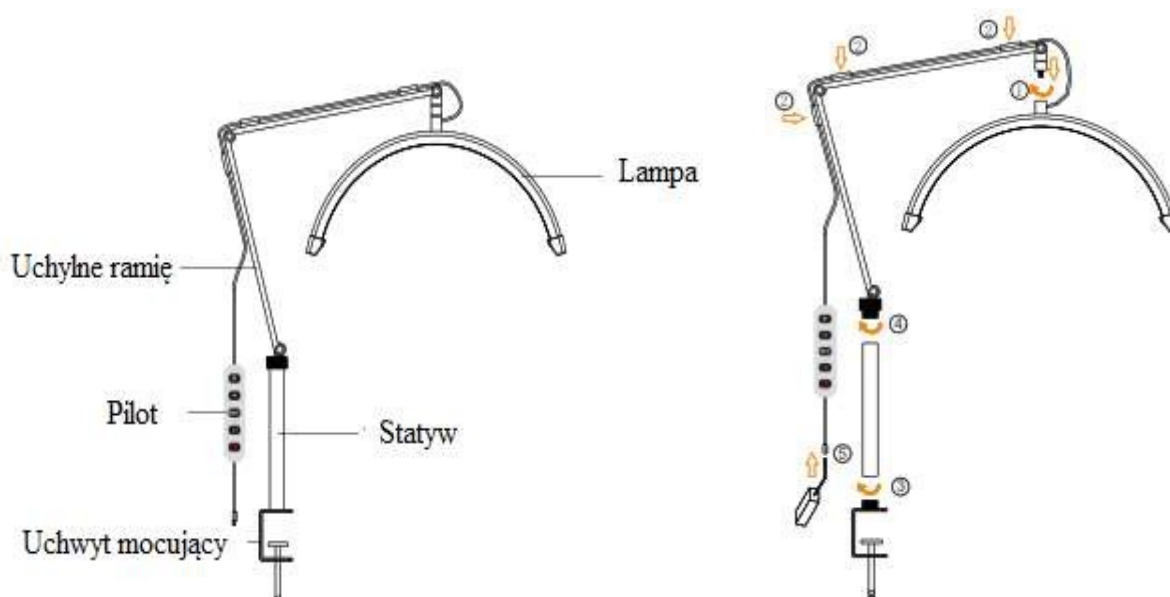

1. Zaskrutkujte lampu do hornej časti výklopného ramena.
2. Namontujte kábel do špeciálnych vodiacich držiakov
3. Namontujte stojan lampy na montážnu konzolu
4. Pripojenie svetidla k statívu
5. Pripojte napájací kábel k zdroju napájania

Poznámka: Tuhosť kĺbov otočných ramien je možné nastaviť pomocou imbusového kľúča. Po dlhšom alebo intenzívnom používaní ramena svetidla môže dôjsť k nadmernej vôli kĺbov. Tuhosť kĺbov zlepšíte dotiahnutím upevňovacích skrutiek.

Pozor! Skrutky nedoťahujte príliš silno. Pri nadmernom utiahnutí upevňovacích skrutiek hrozí riziko poškodenia ramena svetidla.

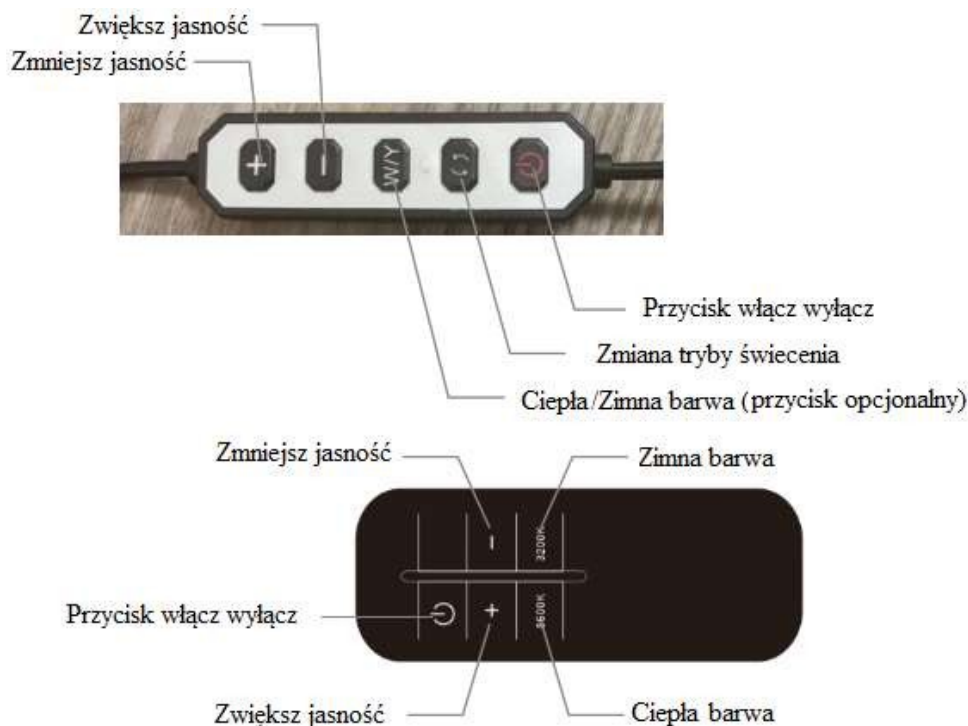

Používanie svetidla HD-M3X/ HD-M6X

Poznámka: Diaľkové ovládanie je na lampe voliteľné (niektoré modely diaľkové ovládanie neobsahujú).

Poznámka: Tlačidlo na zmenu režimu svetlenia je na ovládači lampy voliteľné (niektoré modely toto tlačidlo nemajú).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko poskytnuté spoločnosťou ACTIVESHOP SP. Z O.O.) v nasledujúcich prípadoch:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použitie elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení

sa použité elektrické a elektronické zariadenia musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre použité elektronické a elektrické zariadenia.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v ACTIVESHOP SP. Z O.O.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.