

ACTIVESHOP[®]


ISTRUZIONI PER L'USO

Sedia estetica elettrica Azzurro 708A



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

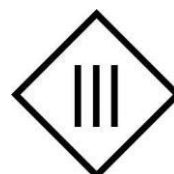


Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nell'area in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa adeguata.


Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.

Dimensioni dell'apparecchio:

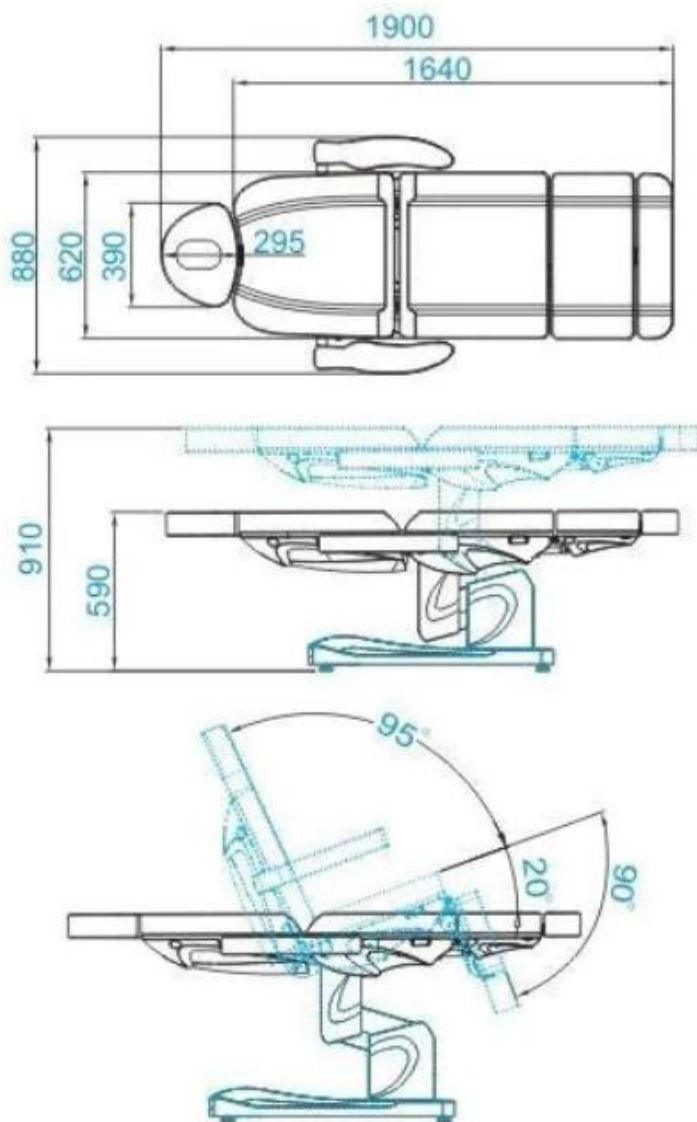

Carico massimo della poltrona: 140 kg

Struttura dell'apparecchio:

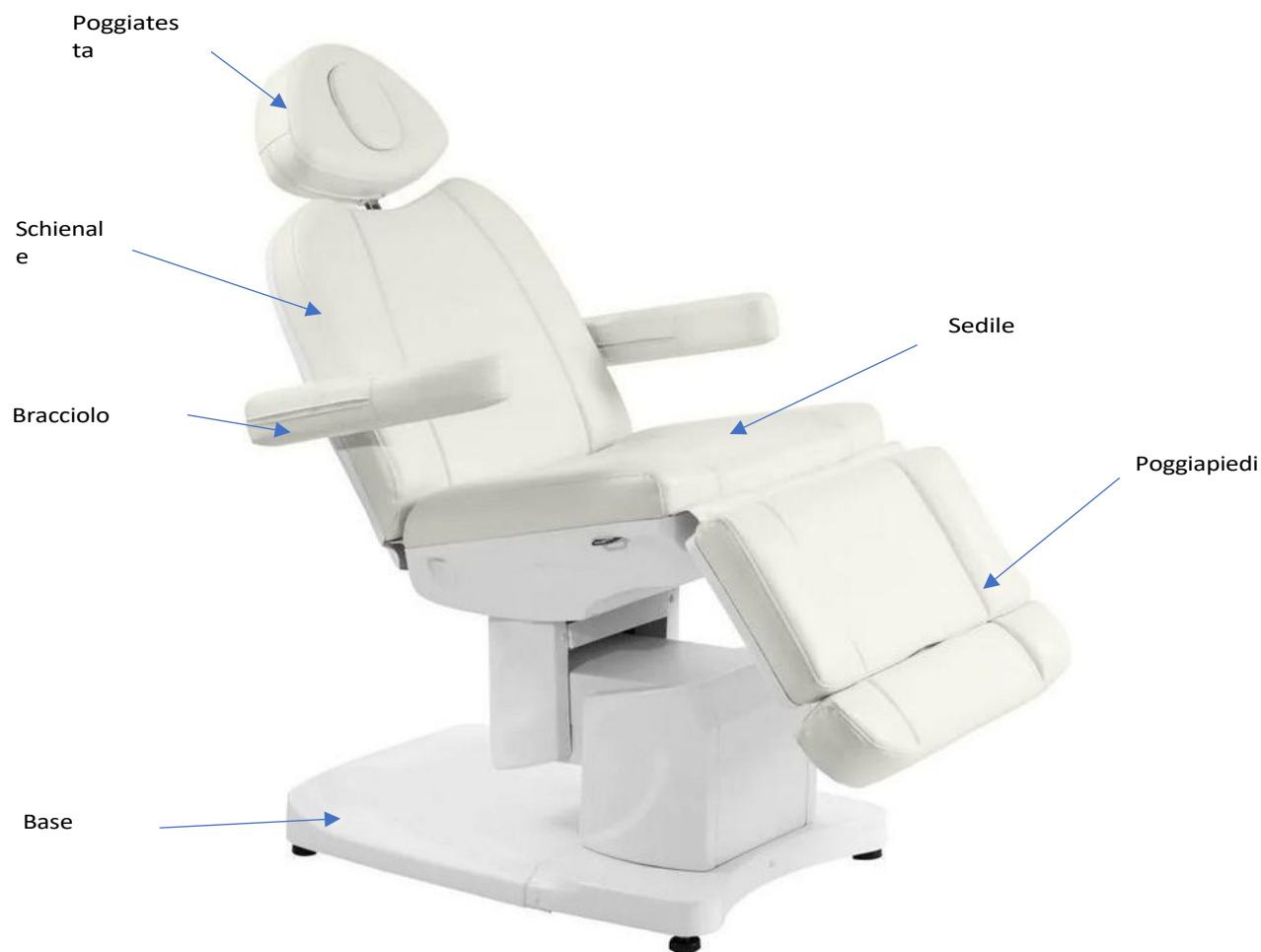

Utilizzo del dispositivo:

Il sedile è regolabile tramite il telecomando, con il quale è possibile regolare l'altezza del sedile, l'inclinazione dello schienale e dei poggiapiedi, nonché impostare il sedile in posizione di culla.


1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentazione esterna 110V~240V.

Installazione del poggiatesta


Per montare il poggiatesta, farlo scorrere nell'apposito spazio nella parte superiore dello schienale. Una volta posizionato il poggiatesta all'altezza corretta, stringere la manopola in modo che il poggiatesta sia ben saldo. Per abbassare il poggiatesta, svitare leggermente la manopola, abbassare il poggiatesta e stringere la manopola.

Installazione del bracciolo

Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo in senso orario o antiorario in modo che si inserisca correttamente.

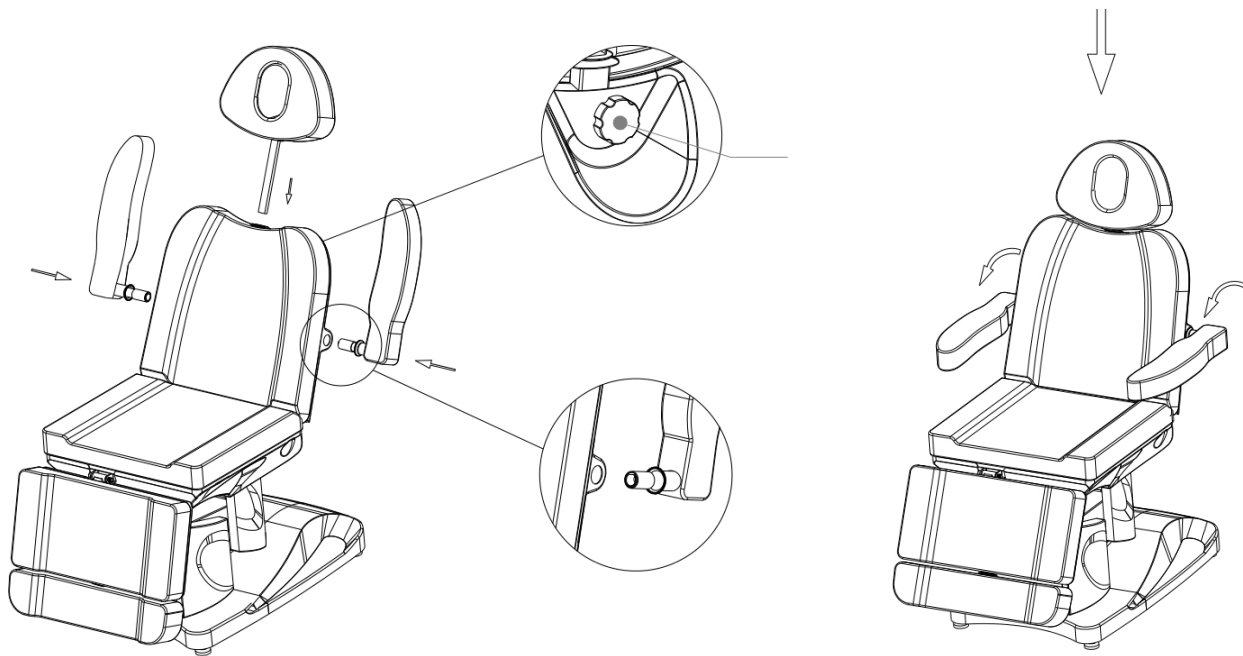


Funzioni del telecomando:

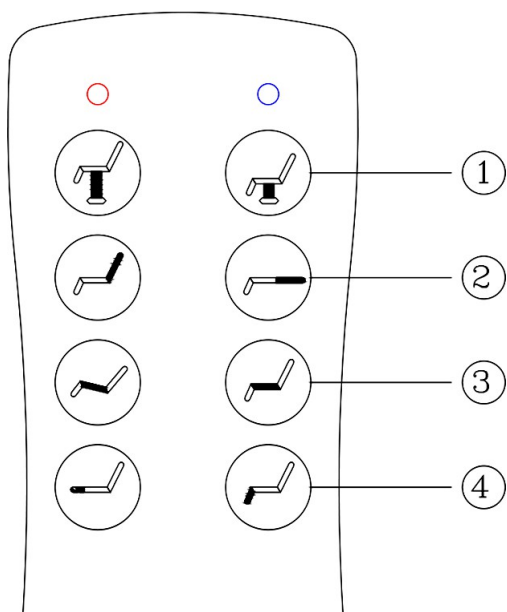

1. Premere  per alzare il sedile o  per abbassarlo.
2. Premere  o  per regolare l'angolo dello schienale.
3. Premere  o  per regolare l'angolo del sedile.
4. Premere  o  per regolare l'angolo del poggiatesta.


Regolare l'altezza del sedile:

Premere  per sollevare il sedile (che è in posizione reclinabile). Il pulsante  abbassa il sedile.

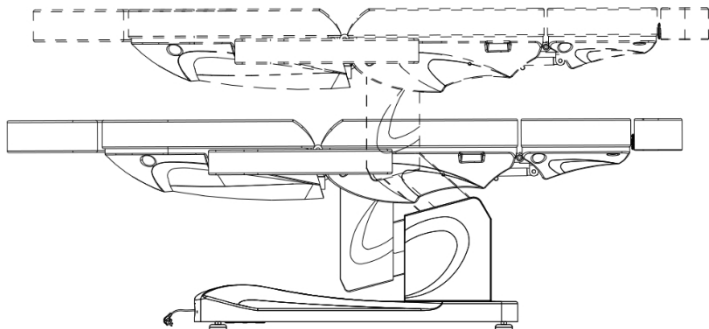


Regolazione dello schienale:

Premere  per regolare lo schienale in posizione seduta o per alzarlo, oppure  per abbassare lo schienale (ad esempio in posizione reclinabile).

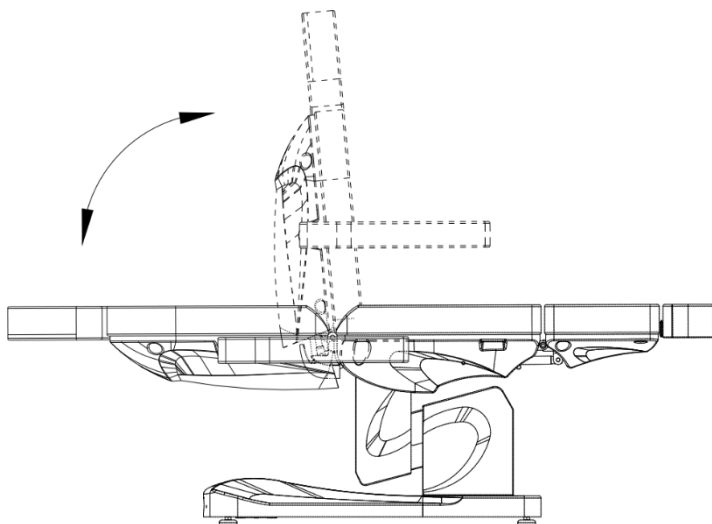

Regolazione dell'angolo di seduta:


Premere  o  per regolare l'angolo di inclinazione del sedile.

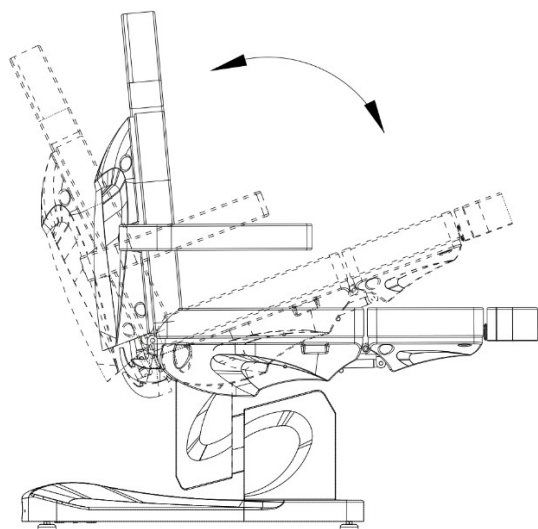

Regolazione del poggiapiedi:



Premere  per mettere il poggiapiedi in posizione orizzontale (o sollevarlo), oppure abbassare il poggiapiedi.

 per

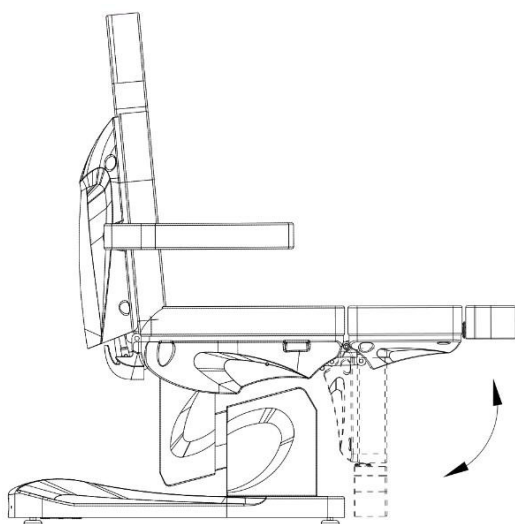

Regolazione del poggiapiedi:

Allentare la manopola alla base del poggiapiedi ed estenderlo alla lunghezza corretta, quindi serrare la manopola.

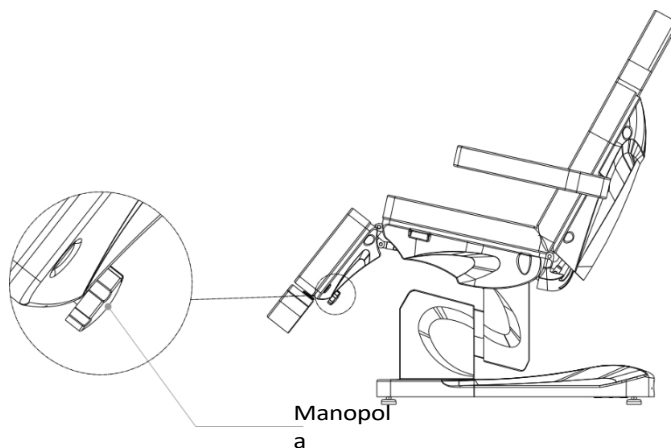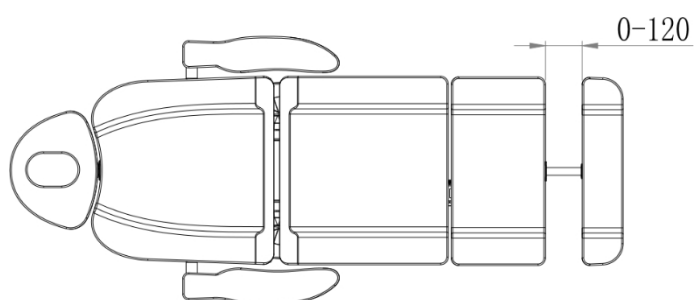

Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la sedia dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Una piccola spazzola è utile per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- La pulizia migliore è quella con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di procedere alla manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.

1. Le riparazioni devono essere eseguite da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Metodo di soluzione
I pulsanti del telecomando non rispondono.	1. Interruttore di alimentazione si attiva o non si attiva. 2. La sede potrebbe essere già nella posizione massima. 3. L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	1. Provare ad accendere e spegnere l'apparecchio. 2. Controllare che gli altri pulsanti funzionino. 3. Verificare che il dispositivo sia collegato. In caso contrario, collegarlo.
L'apparecchio emette strani rumori durante il sollevamento e l'abbassamento.	Vite allentata.	Controllare i serrare tutte le viti.
La luce non si accende anche se l'interruttore è acceso.	Fusibile bruciato.	Sostituire il fusibile.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso in studi cosmetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri **m a l f u n z i o n a m e n t i**, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai seguenti punti di raccolta centri di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Gli apparecchi fuori uso e quelli vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati ai centri di raccolta per il trattamento.

per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai centri di raccolta appropriati, oltre che alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.