

ACTIVESHOP[®]


INSTRUCCIONES DE USO

Sillón de estética eléctrico Azzurro 708A



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

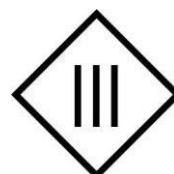


Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y realice los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón cosmético en el lugar donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.


Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón cosmético.

Dimensiones del aparato:

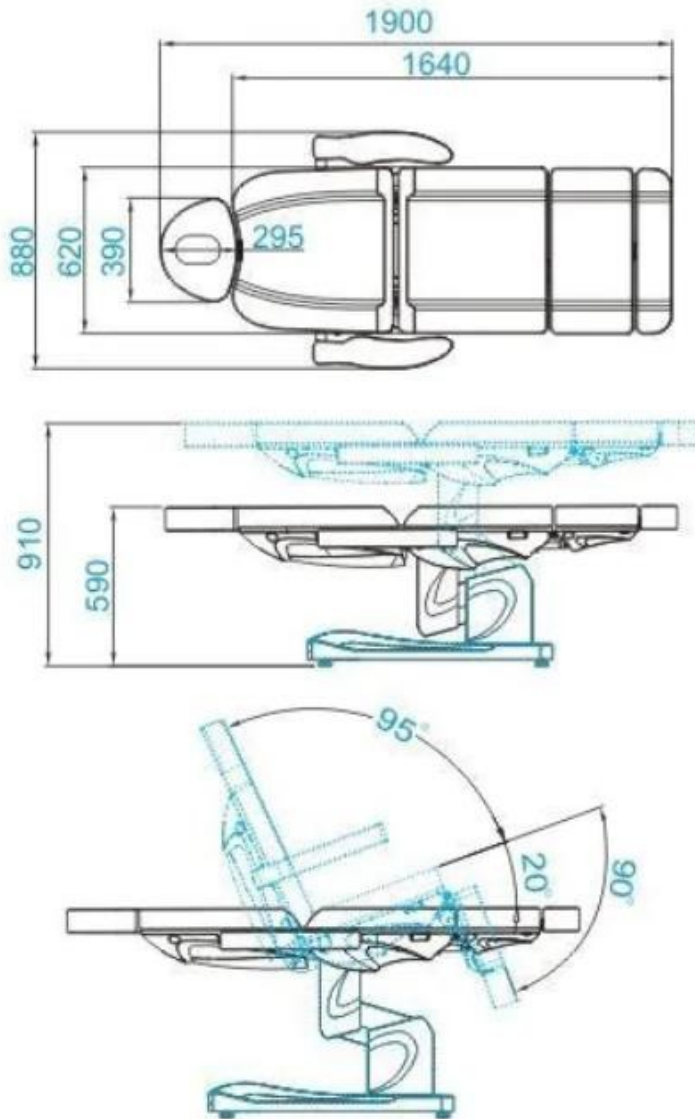

Carga máxima del sillón: 140kg

Construcción del aparato:

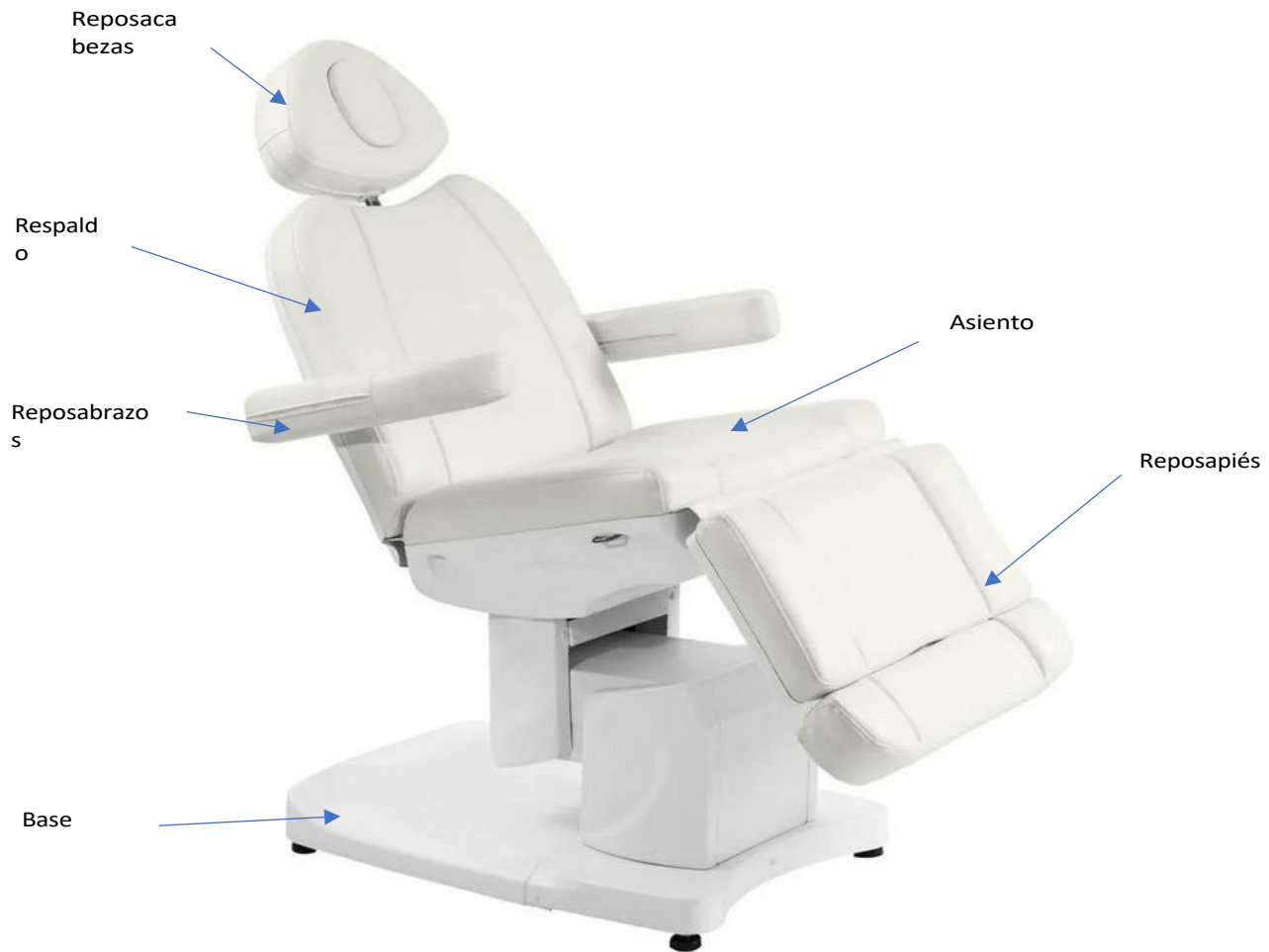

Uso del dispositivo:

El asiento es regulable mediante el mando a distancia, con el que podrá ajustar la altura del asiento, la inclinación del respaldo y de los reposapiés, así como poner el asiento en posición de cuna.


1. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación externa 110V~240V.

Instalación del reposacabezas


Para colocar el reposacabezas, deslícelo en el hueco correspondiente de la parte superior del respaldo. Cuando haya colocado el reposacabezas a la altura correcta, apriete el pomo para que el reposacabezas quede bien sujeto. Para bajar el reposacabezas, desenrosque ligeramente el pomo, baje el reposacabezas y apriete el pomo.

Instalación del reposabrazos

Deslice el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar firmemente sujeto. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para que encaje correctamente.

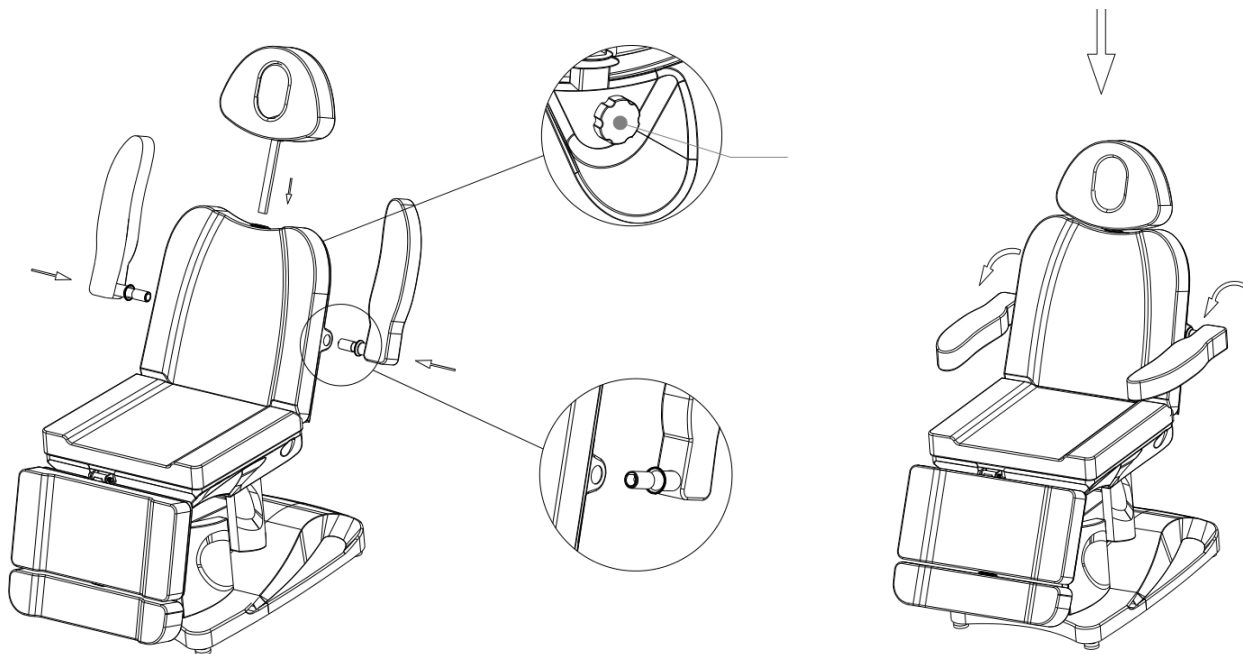


Funciones del mando a distancia:

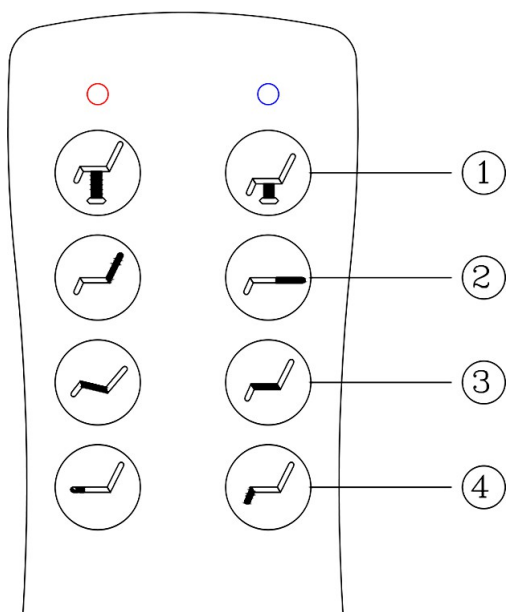

1. Pulse  para subir el asiento o  para bajarlo.
2. Pulse  o  para ajustar el ángulo del respaldo.
3. Pulse  o  para ajustar el ángulo del asiento.
4. Pulse  o  para ajustar el ángulo del reposapiés.


Ajuste la altura del asiento:

Pulse  para elevar el asiento (que se encuentra en posición reclinada). El botón  bajará el asiento.

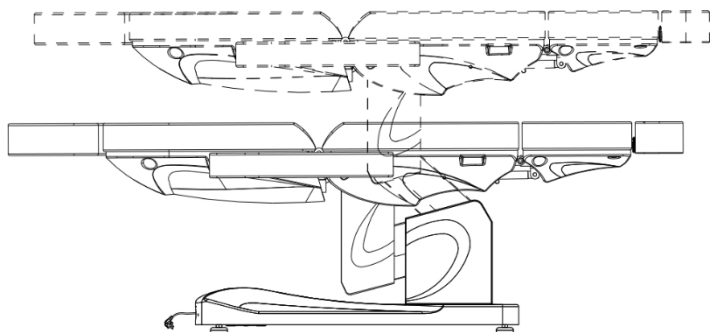


Ajuste del respaldo:

Pulse  para ajustar el respaldo a la posición de sentado o para elevarlo, o  para bajar el respaldo (por ejemplo, a la posición de reclinado).

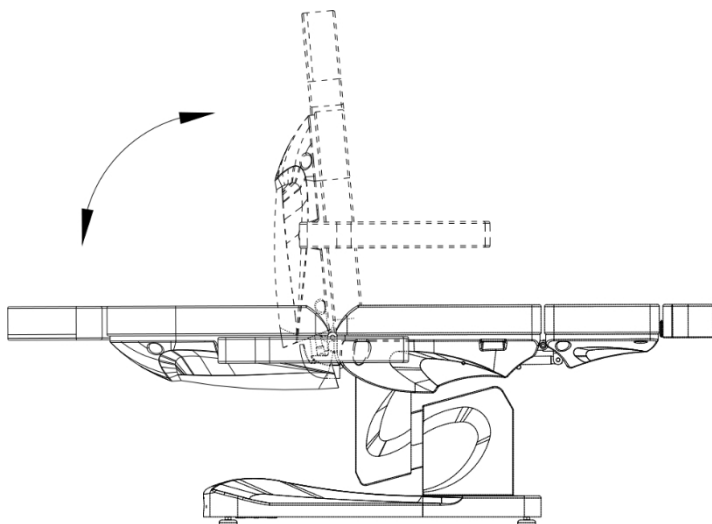

Ajuste del ángulo del asiento:


Pulse  o  para ajustar el ángulo de inclinación del asiento.

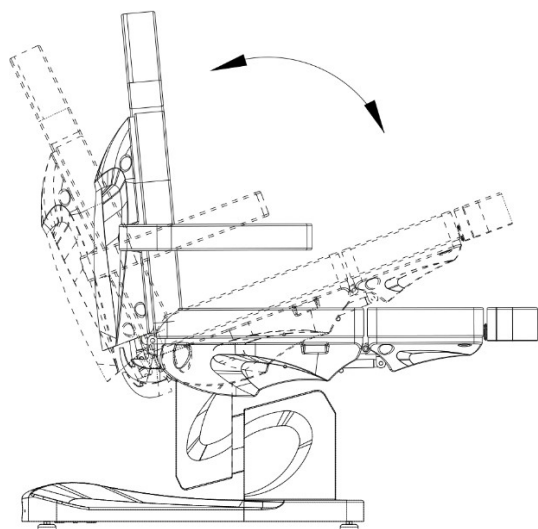

Ajuste del reposapiés:



Pulse  para poner el reposapiés en posición horizontal (o elevarlo), o

 para bajar el

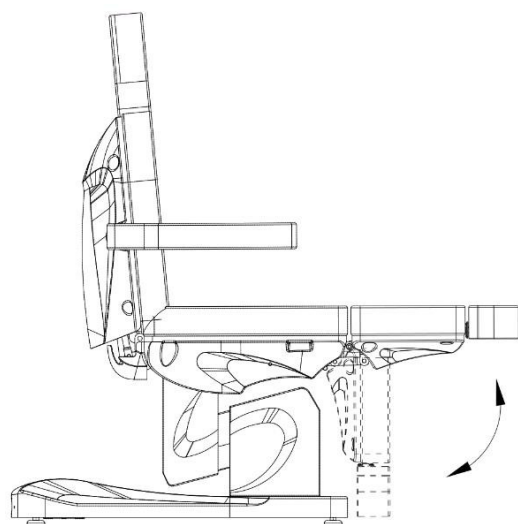

Ajuste del reposapiés:

Afloje el pomo situado en la parte inferior del reposapiés y extiéndalo hasta la longitud correcta; a continuación, apriete el pomo.

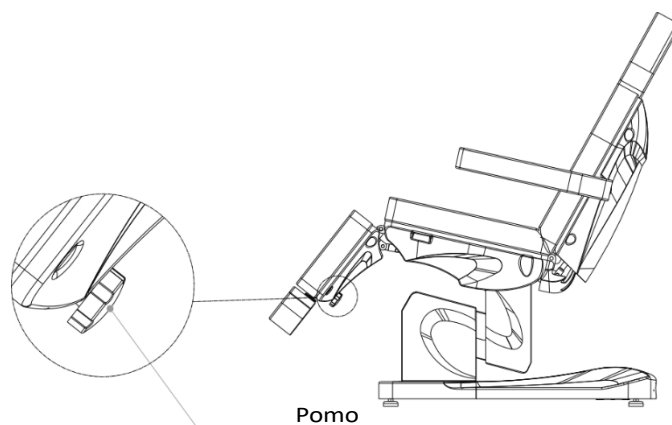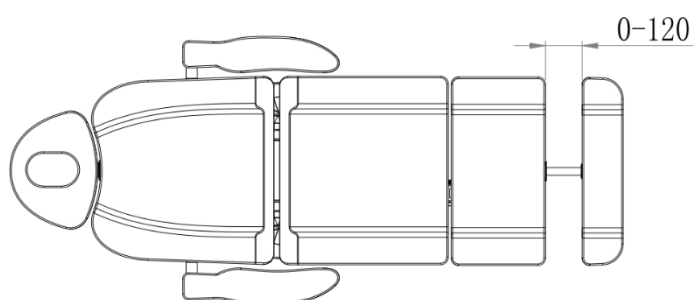

Limpieza y desinfección del aparato

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Un cepillo pequeño funcionará bien para limpiar zonas o rincones de difícil acceso. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

El aparato debe desconectarse de la red eléctrica antes de proceder a su mantenimiento.

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón de belleza eléctrico ni los accesorios si no funcionan correctamente. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Los botones del mando a distancia no responden.	1. Interruptor del mando a distancia no se acciona. 2. Asiento puede estar ya en posición máxima. 3. El aparato no está conectado a la red eléctrica.	1. Pruebe a encenderlo y apagarlo. 2. Compruebe que los demás botones funcionan. 3. Compruebe que el aparato está enchufado. Si no lo está, enchúfelo.
El aparato hace ruidos extraños al subir y bajar.	Tornillo flojo.	Compruebe y apriete todos los tornillos.
La luz no se enciende aunque el interruptor esté encendido.	Fusible quemado.	Sustituya el fusible.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías cosméticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. El aparato podría dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos de recogida:
instalaciones de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Los aparatos al final de su vida útil y los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse a

para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.