

ACTIVESHOP®


KASUTUSJUHEND

Azzurro 708A elektriline kosmeetikatool



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

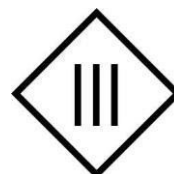


Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et tool on töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.


Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:

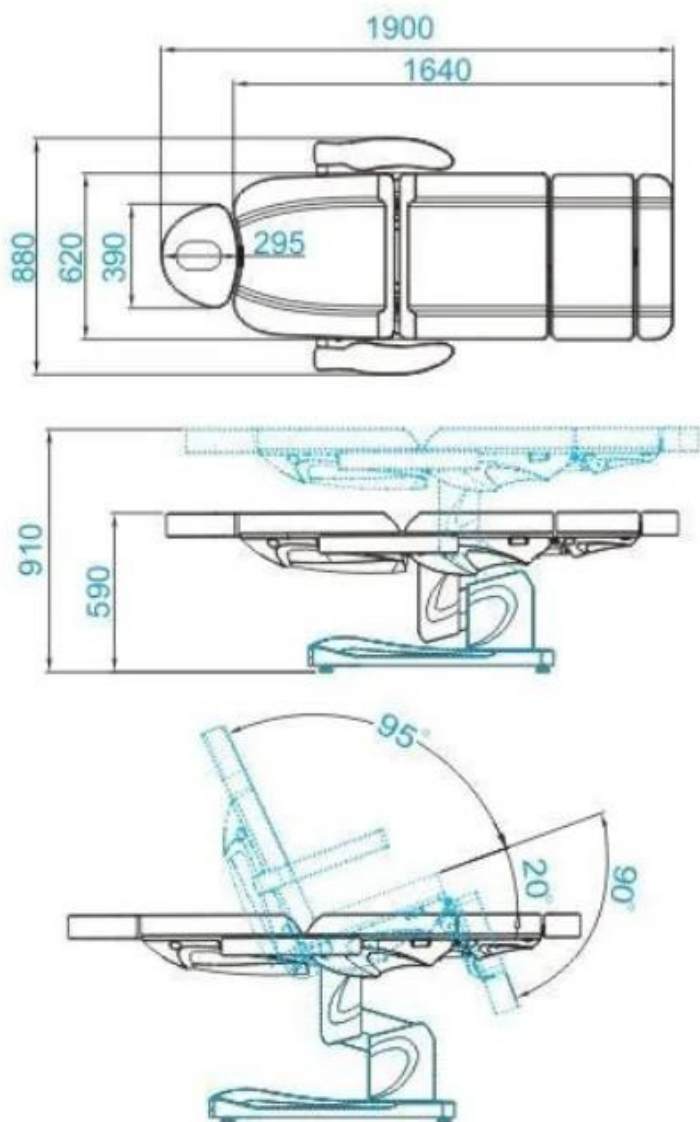

Toolsi maksimaalne koormus: 140kg

Seadme ehitus:

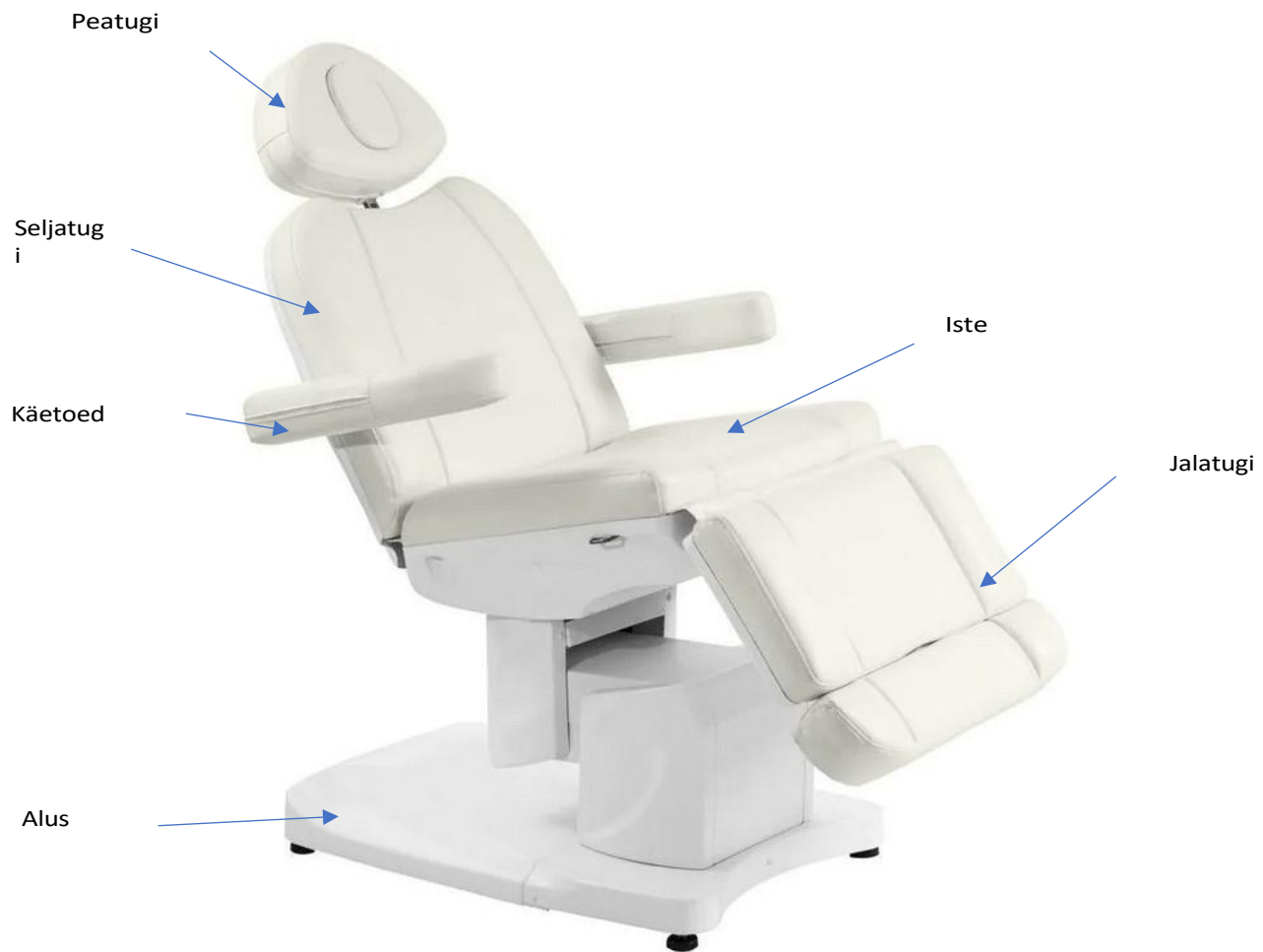

Seadme kasutamine:

Selle abil saab reguleerida istme kõrgust, seljatoe ja jalatugede kallet ning seada iste hällilisse asendisse.


1. Ühendage toitejuhe välise toiteallikaga 110V~240V.

Peatoe paigaldamine


Peatoe paigaldamiseks lükake see sobiva lõhega seljatoe ülemisse ossa. Kui olete peatoe õigele kõrgusele paigutanud, pingutage nuppu nii, et peatugi hoiaks kindlalt kinni. Peatoe alandamiseks keerake nuppu veidi lahti, laske peatugi alla ja pingutage nuppu.

Käetoe paigaldamine

Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse auku. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda päripäeva või vastupäeva, nii et see läheks õigesti paika.

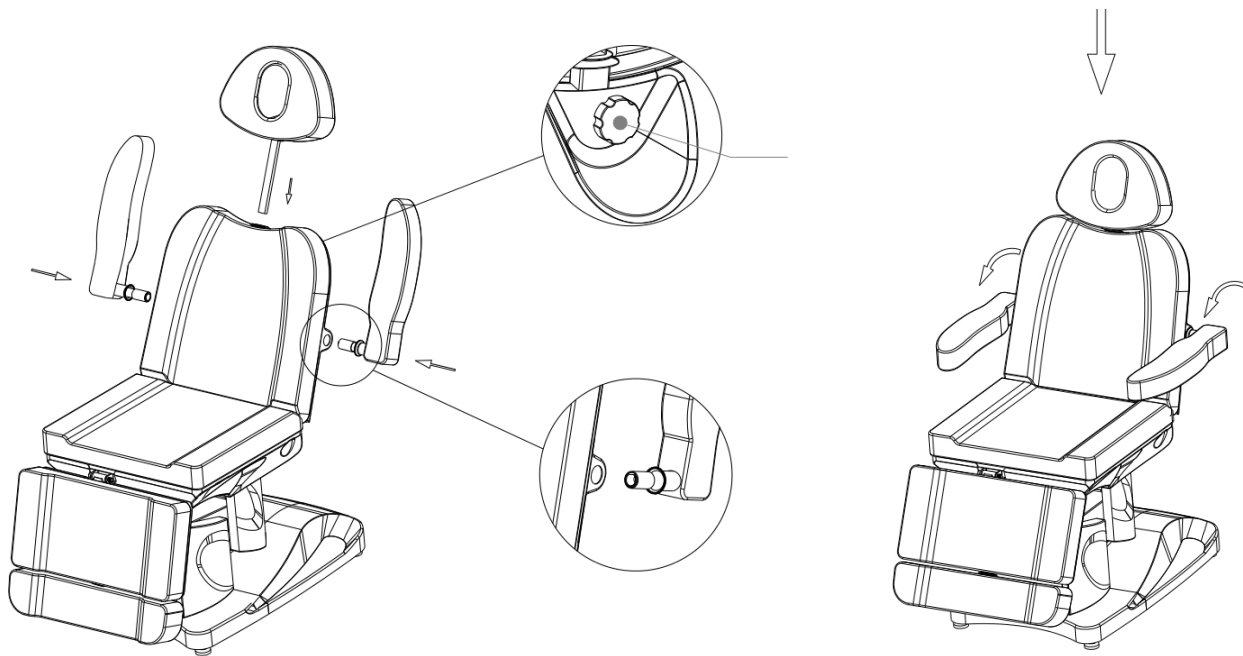

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:

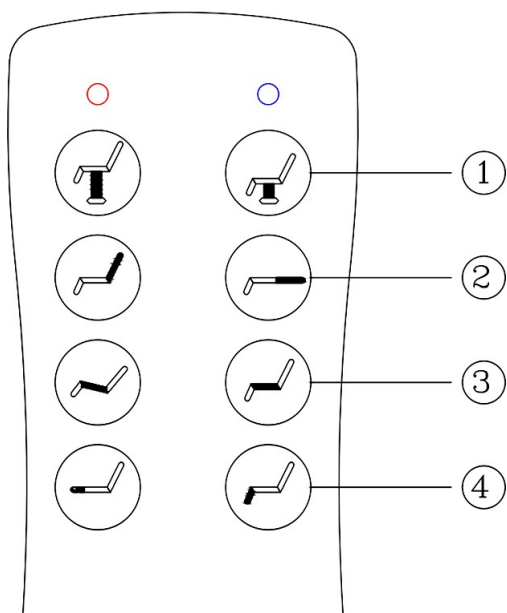

1. Istme tõstmiseks vajutage või istme langetamiseks .


2. Vajutage või , et reguleerida seljatoe nurka.

3. Vajutage või , et reguleerida istme nurka.

4. Vajutage või et reguleerida jalatoe nurka.


Reguleerige istme kõrgust:

Vajutage  , et tõsta istet (mis on lamamisasendis). Nuppu  vajutades saab istme alla lasta.

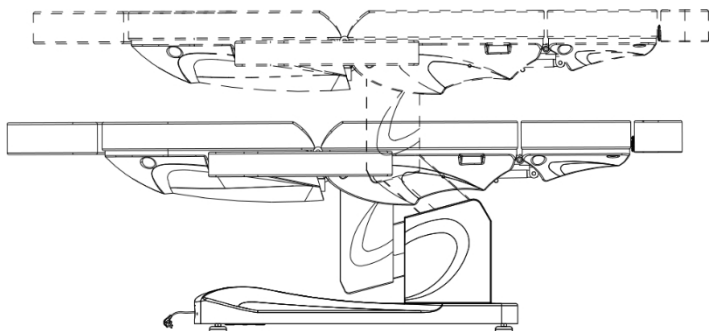


Seljatoe reguleerimine:

Vajutage  , et reguleerida seljatugi istumisasendisse või tõsta seda, või  , et alandada seljatuge (nt lamamisasendisse).

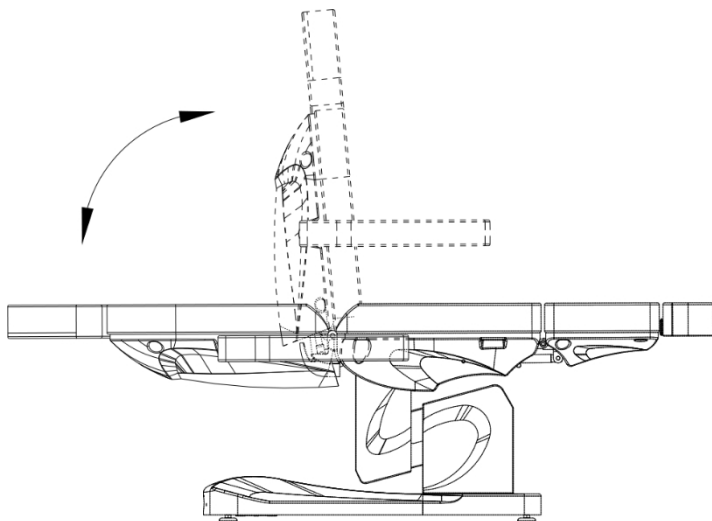

Istme nurga reguleerimine:


Vajutage  või  , et reguleerida istme kaldenurka.

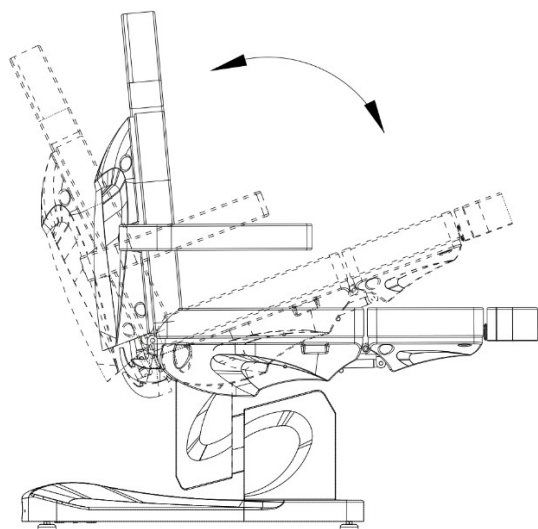

Jalatoe reguleerimine:



Vajutage .  et viia jalatugi horisontaalsesse asendisse (või tõsta seda) või alandamiseks.

 jalatoe

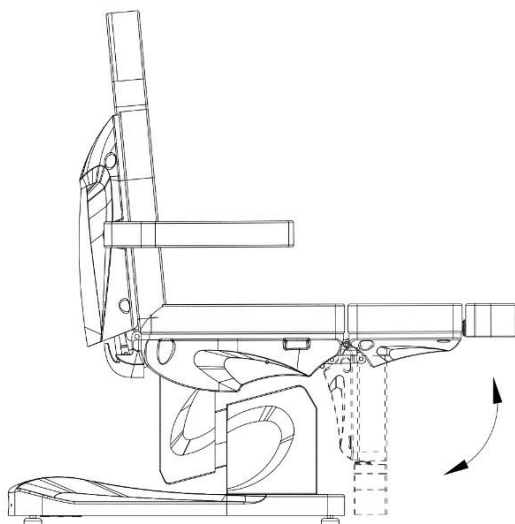

Jalatoe reguleerimine:

Lõdvendage nuppu jalatoe allosas ja pikendage seda õigesse pikkusesse, seejärel pingutage nuppu.

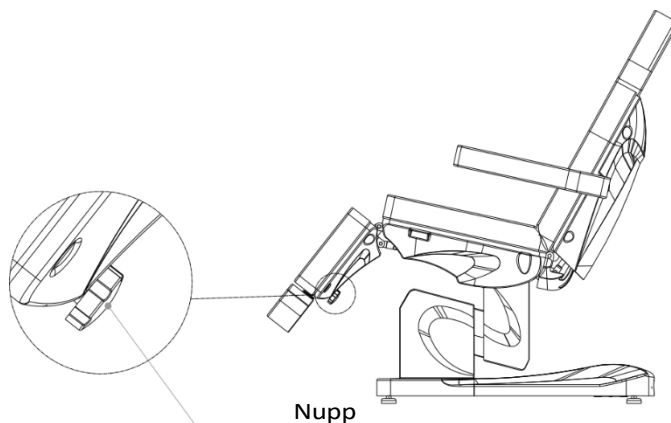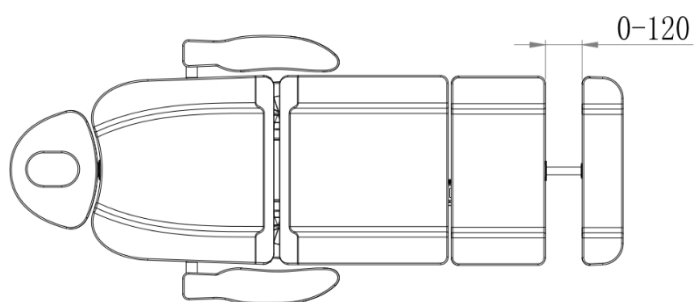

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike harja sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevetekahurid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus

Seade tuleb enne hooldustöid vooluvõrgust lahti ühendada.

1. Remonti peab teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Volitamata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada seadme vigastusi või kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult. Kõik hooldus- ja remonditööd peavad olema dokumenteeritud

Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendusmeetod
Puldi nupud ei reageeri.	1. Lülita toitejuhtimine ei aktiveeru või ei aktiveeru. 2. Istme võib olla olla juba maksimaalses asendis. 3. Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	1. Proovige seda sisse ja välja lülitada. 2. Kontrollige, kas teised nupud töötavad. 3. Kontrollige, et seade oleks ühendatud. Kui ei ole, siis ühendage see.
Seade teeb tõstmisel ja langetamisel kummalist müra.	Lahtine kruvi.	Kontrollige pingutage kõik kruvid.
Valgus ei lülitu sisse, kuigi lüliti on sisse lülitatud.	Põlenud kaitselüliti.	Vahetage kaitselüliti välja.

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude r i k e t e korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida l a s t e l e kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda kogumispunktides üle kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need üle anda

neile ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.