

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Elektriline kosmeetikatool Sillon Luxury 3 mootorit
C502 3 mootorit / 150222



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Scan for
erinev
keeled



Täname, et valisite meie toote.

Palun lugege enne esmakordset kasutamist kasutusjuhendit ja hoidke see alles.

Kosmeetiline tool Sillon Luxury ühendab endas kaasaegse välimuse, intuitiivse kasutamise ja laia funktsionaalsuse. Varustatud kolme juhtimispuldiga, mis on ühendatud juhtme abil, võimaldab see täpselt kohandada individuaalsete eelistustega. Ergonoomiline iste tagab mugavuse ja komforti, mis teeb sellest ideaalse lahenduseks igasse salongi.

Tehnilised andmed	
Sissetulev pinge	220–230 V
Elektriline võimsus	200 W
Nimissagedus	50 Hz
Polematerjal	Sünteetiline nahk
Juhtimine	Juhtmega pult
Ruumi temperatuur	(+)10 °C – (+)40 °C
Õhuniiskus	30% - 75

Märkus

Toote nõuetekohase kaitse tagamiseks transpordi ajal on tool pakitud kokku 10 kihi paberist kartongi. Soovitame originaalpakendi alles hoida tulevikus kasutamiseks, eriti tagastamise korral garantiiperioodi jooksul.

Tugitooli võib tõsta ainult peatoe ja jalatoe positsioonist, mitte mõlemalt küljelt käetoest. Ohutuse tagamiseks on tugitooli kartongist väljavõtmiseks vaja kaht inimest.

Elektrilist kosmeetikatooli tuleb kasutada suletud, kuivades ruumides. Temperatuur ruumis peaks temperatuur olema vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C ja suhteline õhuniiskus 30% kuni 75%. Kui kosmeetikatool on olnud alla 0 °C temperatuuri mõjualas, näiteks transpordi ajal, tuleb enne kasutamist oodata vähemalt 5 tundi, et seade jõuaks saavutada toatemperatuuri.

Seadme ehitus:

1. Peatugi
2. Padi
3. Seljatugi
4. Käetoed
5. Istmikuosa
6. Jalatoe
7. Juhtpult
8. Tõstemehhanism
9. Plastikkate




Istme paigaldusjuhend

- Asetage tool kasutuspaika
- Ühendage toitepistik pistikupesaga


Puldiga juhtimise funktsioonide kirjeldus

1. Istme kõrguse reguleerimine.

Kõrguse reguleerimisvahemik on 60 cm – 82 cm põrandast

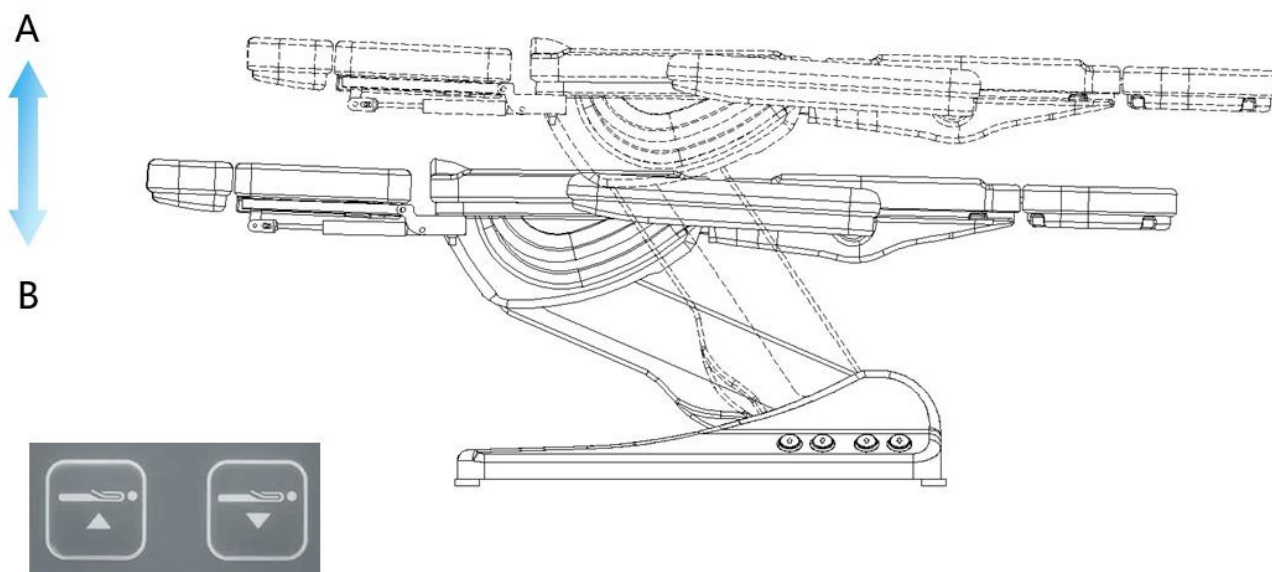


2. Seljatoe kaldenurga reguleerimine – vahemik 0–80°

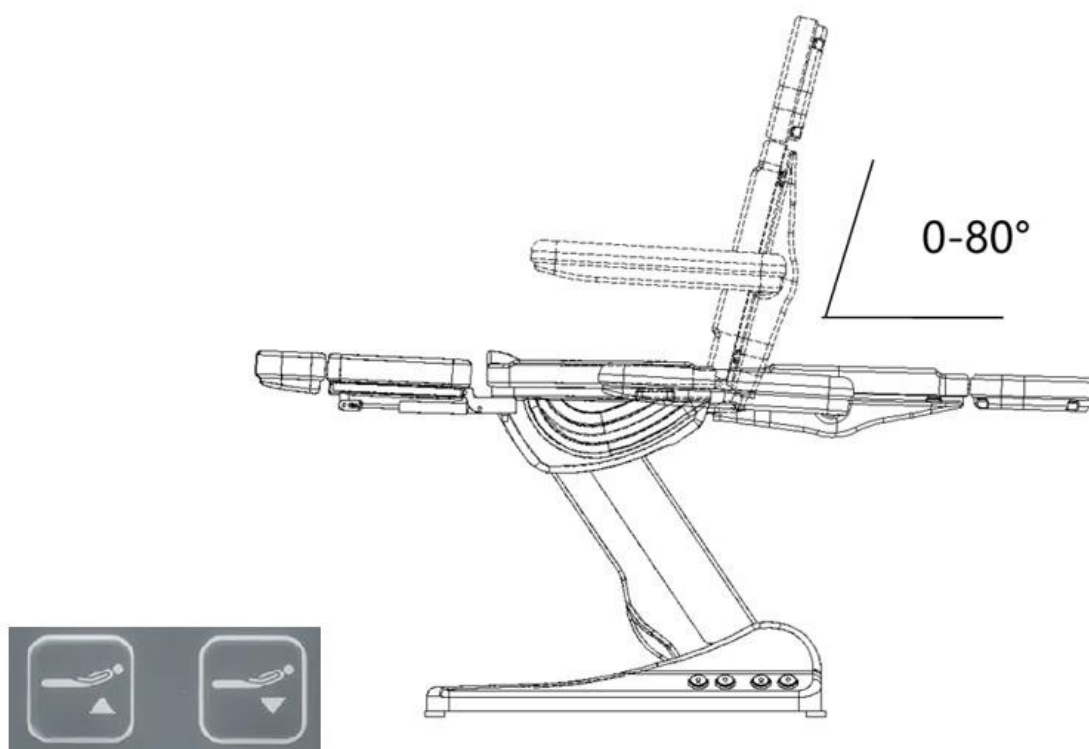

3. Jalgade kaldenurga reguleerimine – vahemik 0~90°

Vajutage pneumaatilise varraste käepidemeid, et muuta jalatoe asendit.

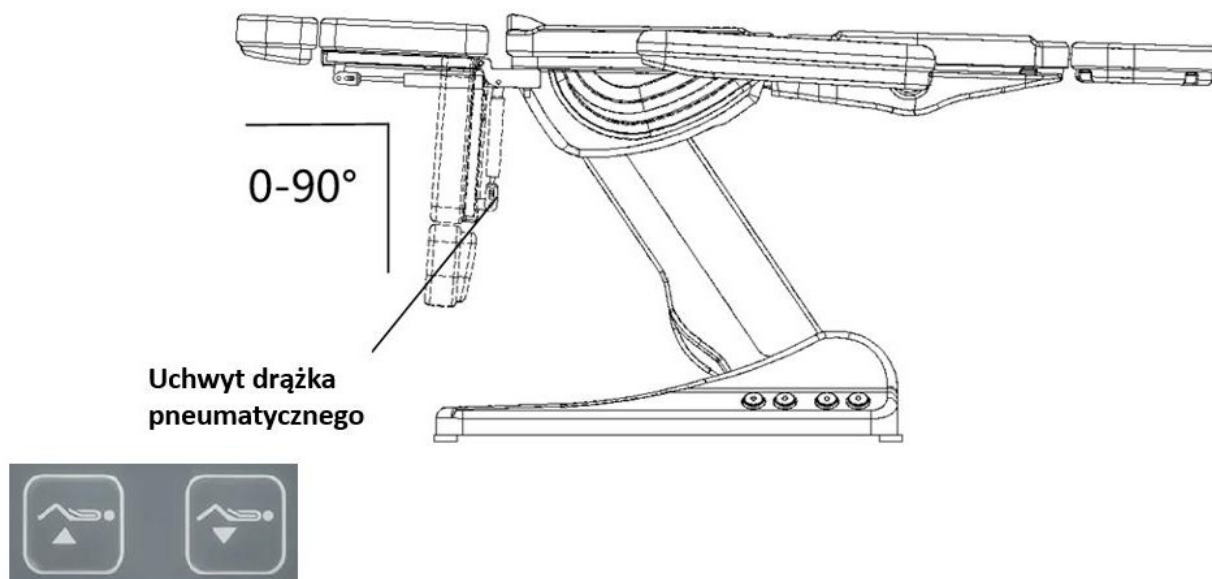


4. Aluse ala valgustus



5. Tähelepanu! Selles mudelis ei ole soojendusfunktsioon aktiivne. Pult on universaalne ja sobib paljudele mudelitele.

Teleskoopiline peatoe ja jalatoe väljatõmbefunktsioon – pikendamine 12 cm

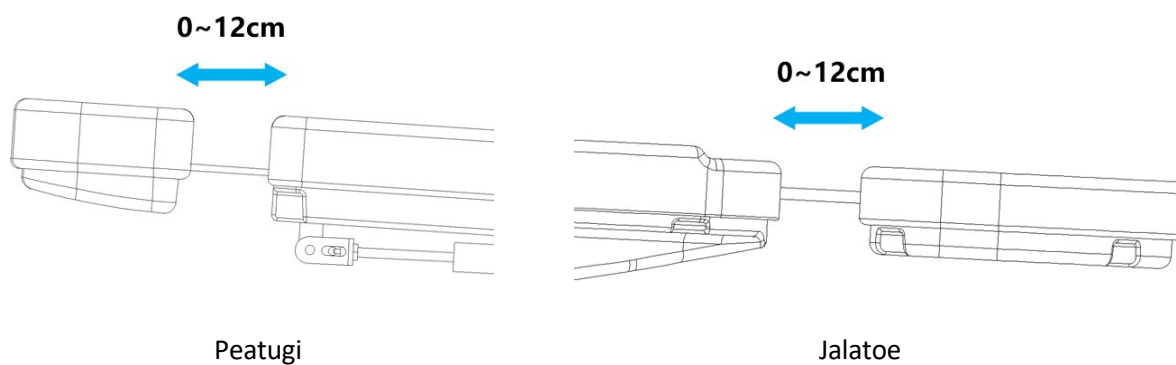


Käetoestete paigaldamine

Tugitool peab olema horisontaalses asendis. Lükake käetugi küljele asuvasse avasse, liigutage seda paremale ja vasakule, et see sobiks õigesse asendisse. Tehke sama teise käetoega.

Käetugi on alusega risti, sõltumata istme kaldenurgast. Selle liikumisulatus on 180°.

Tähelepanu

Maksimaalne koormus on 150 kg. Palun ärge istuge otse lahtivõetud seljatoele, käetoele ja jalatoele.

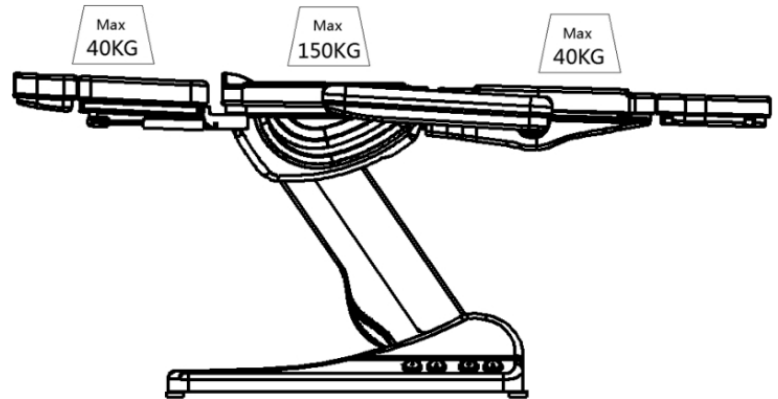

Hooldus

Kosmeetikatooli pinna heas seisukorras hoidmiseks tuleb seda regulaarselt puhastada ja hooldada. Enne puhastamist tuleb vooluvõrgust pistik välja tõmmata.

- Metall- ja plastpinnad ning juhtimiseadmed tuleb puhastada niiske lapiga ja delikatnym roztworem czyszczącym. Nurgades ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades tuleb kasutada väikest harja. Puhastamise ajal soovitame mitte kasutada liiga palju vedelikku
- Roostevabast terasest pinnad – puhastada pehme detergendlahusega. Raske ja püsiva mustuse eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältida kloori sisaldavaid lahuseid.
- Värvitud või kroomitud metallpinnad – puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega happeid.
- Voodi pind – kasutage puhast, pehmet lappi. Võite kasutada väikest kogust spetsiaalset puhastus- ja impregneerimisvahendit sünteetilise naha jaoks.

Kõik pinnad peavad olema kuivad enne toiteallika ühendamist ja uuesti kasutamist. Ärge puhastage kõrge temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures.


Ärge asetage seadet keskkonda, kus see võib vedelikega kokku puutuda.

Soovitused:

1. Veenduge, et seade on paigaldatud tasasele ja stabiilsele pinnale, et vähendada kukkumise ja kahjustuste ohtu.
2. Ärge jätke ühendatud seadet kunagi järelevalveta.
3. Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbele.
4. Ärge kasutage seda seadet kunagi, kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
5. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on kukkunud, kahjustunud või vette kukkunud.
6. Ärge tõmmake pistikupesast pistikupesast välja otse juhtme kaudu.
7. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke seda otsese ilmastiku mõju alla.

8. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse kogunemist. Seadet on soovitatav puhastada niiske lapiga.
9. Ärge mähkige toitejuhet seadme ümber.

Seadme mõõtmed

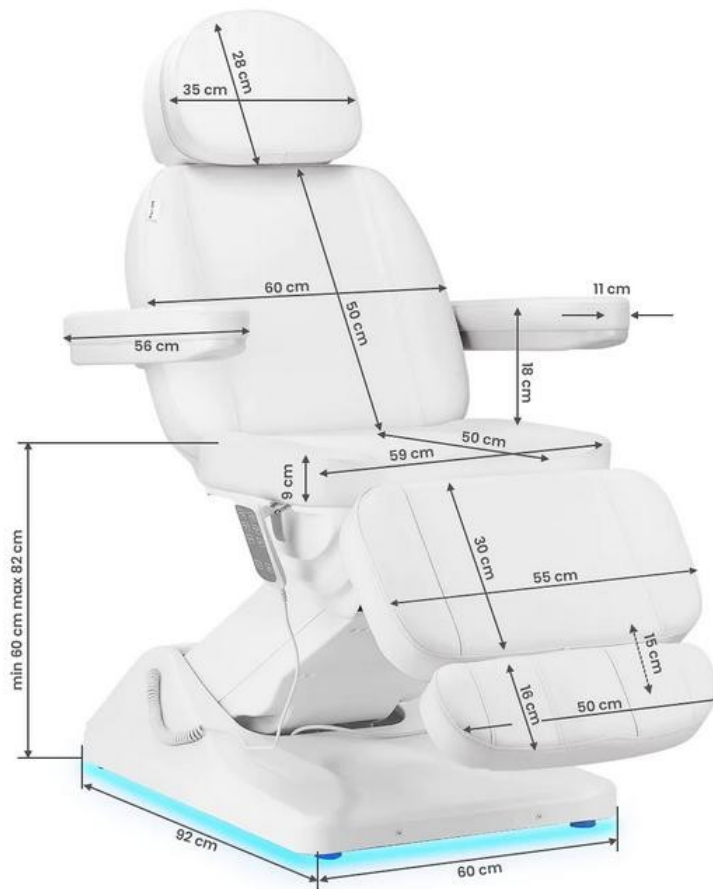

Ohutusmeetmed:

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) töötaja.
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seade on sattunud kokkupuutesse vedelikuga, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pistikupesast välja tõmmata pärast iga seadme kasutamist.
7. Ärge asetage seadme sisse võõraid esemeid. Kui soovimatu ese satub seadme sisse, eemaldage toitekaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade

võib see kahjustuda.

9. Seadme kindlaksmääratud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisse- ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toide peab vastama nimikilbil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib see rikkuda või isegi põlema süttida.

TÄHELEPANU

1. Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, füüsilise ja vaimse võimekusega ning ka isikud, kes ei ole seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme ohutu ja nõuetekohase kasutamise kohta ning kui neile on selgitatud sellega seotud ohud.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lastel ei tohi seadmega mängida lasta.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib põhjustada tervise kahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonna kaitsmiseks tuleb vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Järgige selle ja mitte visata seda olmejäätmete konteineritesse.

Kui seadme kasutamisega on lõppenud, sisaldab see endiselt täisväärtuslikke ja ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need viia ringlussevõtuks asjakohastes kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ladustamine ja transport

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C. Protsesside ajal ladustamisel ja transportimisel ei tohi seadet visata ega kukutada, seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.