

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique électrique Sillon Luxury 3 moteurs
C502 3 moteurs / 150222



Importateur :
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Scan for
différent
langues



Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Le **fauteuil cosmétique Sillon Luxury** allie un design moderne, une utilisation intuitive et une grande fonctionnalité. Équipé de trois vérins commandés par une télécommande filaire, il permet un réglage précis en fonction des préférences individuelles. Son siège ergonomique offre confort et commodité, ce qui en fait la solution idéale pour tout salon de beauté.

Caractéristiques techniques	
Tension d'entrée	220-230 V
Puissance électrique	200 W
Fréquence nominale	50 Hz
Matériau du revêtement	Cuir synthétique
Commande	Télécommande filaire
Température ambiante	(+)10 °C – (+)40 °C
Humidité ambiante	30 % - 75

Remarque

Afin de garantir une protection adéquate du produit pendant le transport, le fauteuil est emballé dans des cartons composés de 10 couches de papier au total. Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine pour une utilisation future, en particulier en cas de retour pendant la période de garantie.

Le fauteuil ne peut être soulevé qu'à partir de l'appui-tête et du repose-pieds, et non à partir des deux côtés des accoudoirs. Pour des raisons de sécurité, deux personnes sont nécessaires pour sortir le fauteuil du carton.

Le fauteuil de beauté électrique doit être utilisé dans des pièces fermées et sèches. Température dans la pièce doit être comprise entre (+)10 °C et (+)40 °C, et l'humidité relative entre 30 % et 75 %. Si ce fauteuil cosmétique a été exposé à une température inférieure à 0 °C, par exemple pendant le transport, il faut attendre au moins 5 heures avant de le mettre en marche afin qu'il atteigne la température ambiante.

Structure de l'appareil :

1. Appuie-tête
2. Coussin
3. Dossier
4. Accoudoir
5. Assise
6. Repose-pieds
7. Télécommande filaire
8. Vérin de levage
9. Couvercle en plastique




Notice de montage du fauteuil

- Placez le fauteuil à l'endroit où il sera utilisé
- Branchez la fiche secteur dans une prise électrique


Description des fonctions de la télécommande

1. Réglage de la hauteur du siège.

La plage de réglage de la hauteur est comprise entre 60 cm et 82 cm à partir du sol

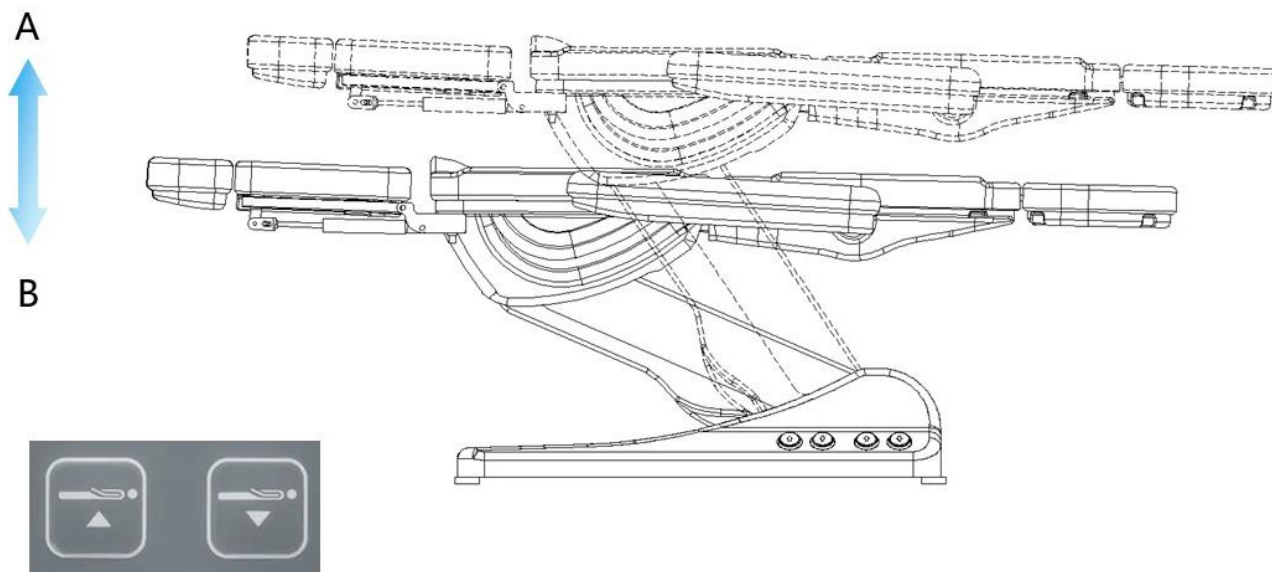


2. Réglage de l'inclinaison du dossier – plage de 0 à 80°

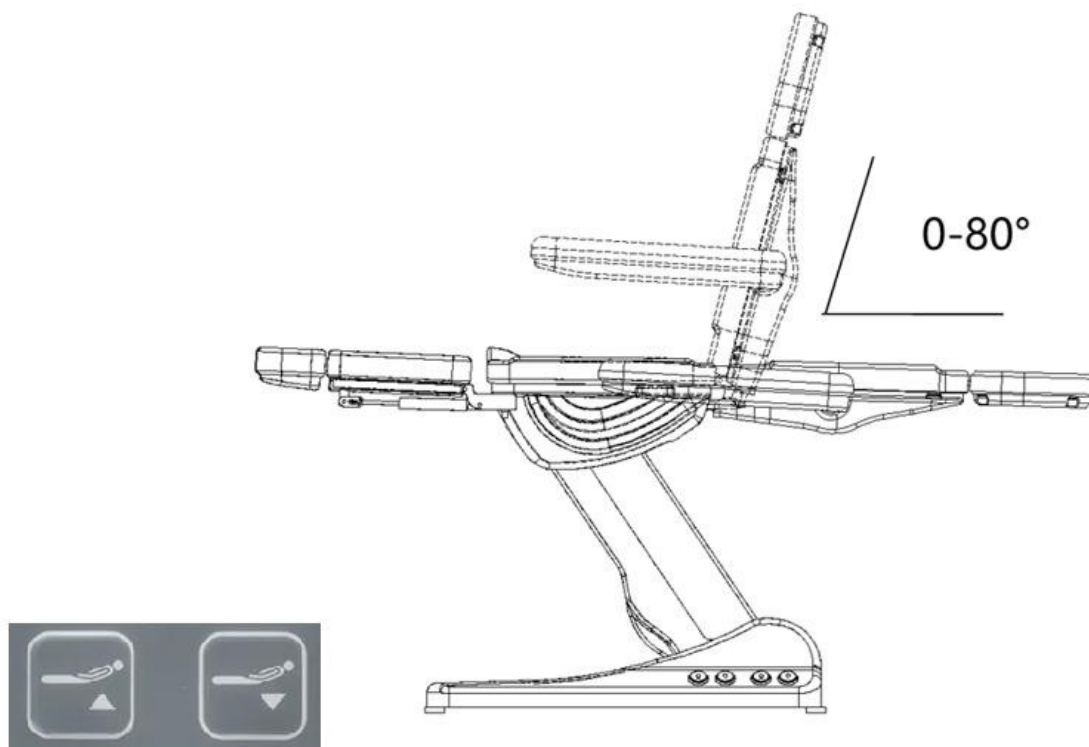

3. Réglage de l'angle d'inclinaison des jambes – plage 0~90°

Appuyez sur la poignée de la barre pneumatique pour modifier la position du repose-pieds.

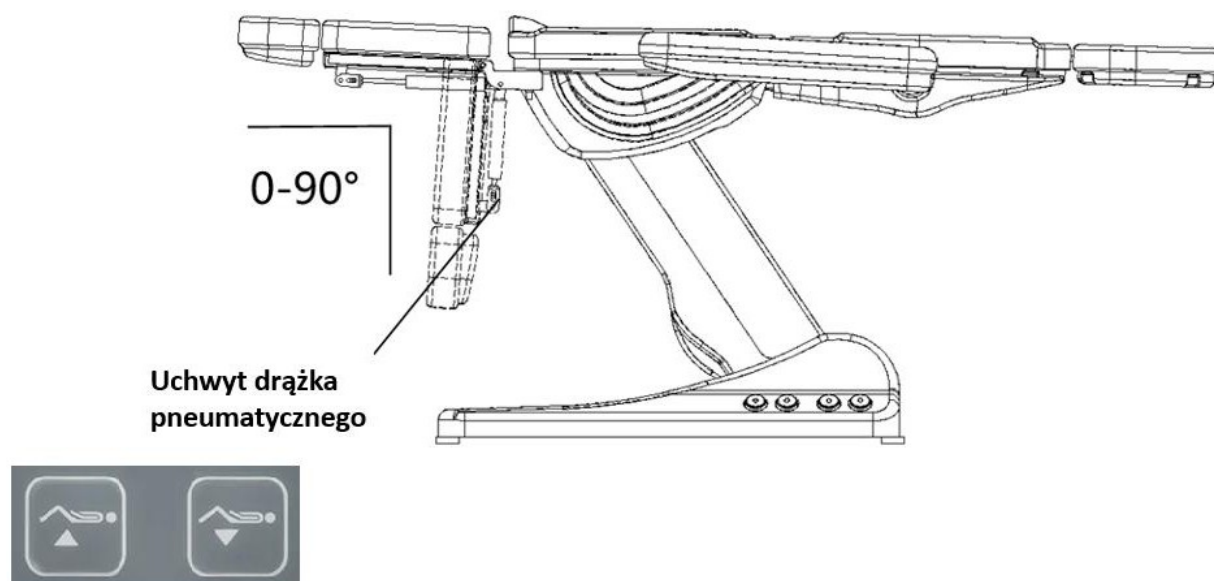


4. Éclairage du dessous de la base



5. Attention ! La fonction de chauffage n'est pas disponible sur ce modèle. La télécommande est universelle et peut être utilisée sur de nombreux modèles.

Fonction télescopique d'extension de l'appuie-tête et du repose-pieds – extension de 12 cm

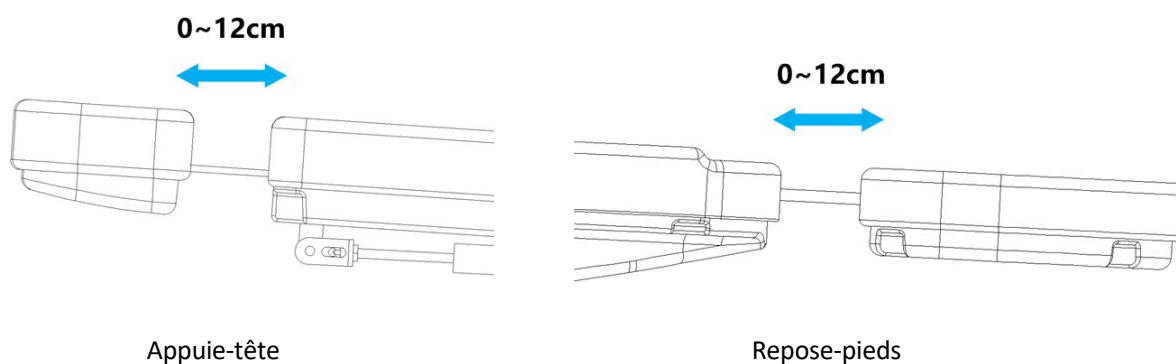


Montage des accoudoirs

Le fauteuil doit être en position horizontale. Insérez l'accoudoir dans l'ouverture située sur le côté du dossier, déplacez-le vers la droite et vers la gauche pour qu'il s'enclenche correctement. Procédez de la même manière avec le deuxième accoudoir.

L'accoudoir est perpendiculaire au sol, quel que soit l'angle d'inclinaison du siège. Son amplitude de mouvement est de 180°.

Remarque

La charge maximale est de 150 kg. Veuillez ne pas vous asseoir directement sur le dossier rabattu, les accoudoirs et le repose-pieds.

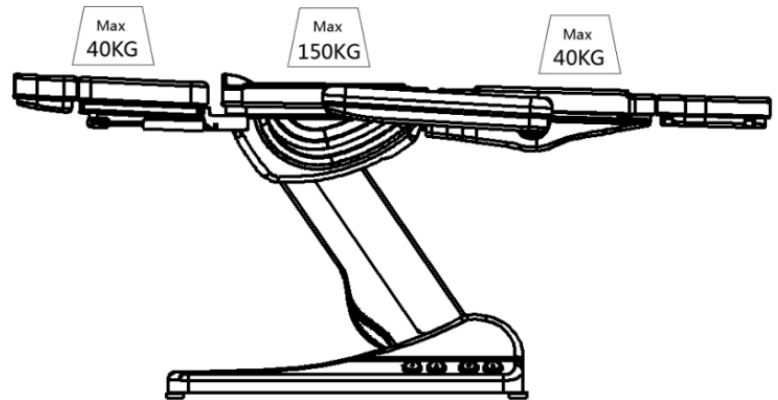

Entretien

Pour maintenir la surface du lit de beauté en bon état, il convient de la nettoyer et de l'entretenir régulièrement.

Avant de procéder au nettoyage, n'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation.

- Les surfaces métalliques et plastiques, ainsi que les éléments de commande, doivent être nettoyés avec un chiffon humide et d'une solution nettoyante douce. Utilisez une petite brosse pour nettoyer les coins et autres endroits difficiles d'accès. Lors du nettoyage, nous vous recommandons de ne pas utiliser trop de liquide
- Surfaces en acier inoxydable : nettoyer avec une solution détergente douce. Pour éliminer les taches difficiles et tenaces, vous pouvez utiliser de l'ammoniaque et la plupart des solvants. Éviter les solutions à base de chlore.
- Surfaces métalliques peintes ou chromées - ne pas utiliser de solvants ni d'acides pour le nettoyage.
- Surface du lit - utilisez un chiffon propre et doux. Vous pouvez utiliser une petite quantité de produit spécial pour nettoyer et imprégner les cuirs synthétiques.

Toutes les surfaces doivent être sèches avant de brancher l'appareil et de le réutiliser. Ne pas nettoyer à haute température et dans des conditions d'humidité élevée.


N'exposez pas l'appareil à des facteurs pouvant entraîner une contamination par des liquides.

Recommandations :

1. Assurez-vous d'avoir installé l'appareil sur une surface plane et stable afin de réduire le risque de chute et de dommages.
2. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
3. Utilisez l'appareil conformément à l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
5. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou est tombé dans l'eau.
6. Ne tirez pas directement sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise.
7. Produit destiné à un usage exclusivement intérieur. Ne l'exposez pas directement aux intempéries.

8. Nettoyez régulièrement l'appareil afin d'éviter toute accumulation de saleté. Il est préférable de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
9. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Dimensions de l'appareil

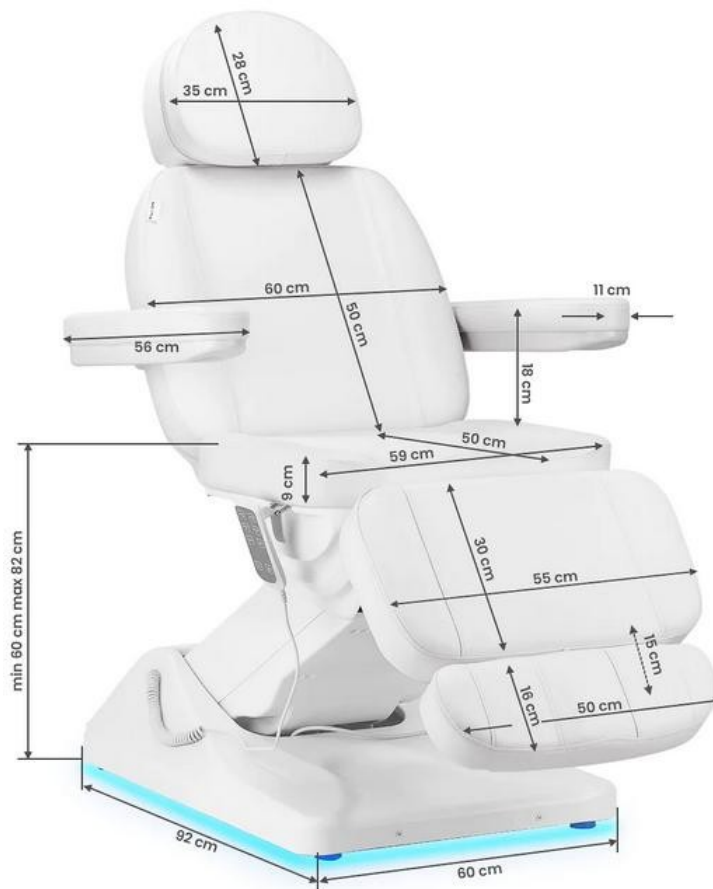

Mesures de sécurité :

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. L'utilisation de l'appareil par du personnel cosmétique qualifié permet d'éviter les effets indésirables pendant le traitement.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou d'essayer de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un employé d'un service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec les mains mouillées. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants : a) du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Ne placez aucun objet étranger à l'intérieur de l'appareil. Si un objet indésirable pénètre à l'intérieur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil

pourrait être endommagé.

9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement, d'être endommagé, voire de brûler.

ATTENTION

1. En cas de dommage du cordon d'alimentation ou d'autres pannes, contactez un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites, ainsi que par des personnes non familiarisées avec le fonctionnement de cet équipement, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur son utilisation correcte et sûre et qu'elles comprennent les dangers associés.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. C'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

Mise au rebut de l'appareil



Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis à des points de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement et ne pas les jeter dans les poubelles ménagères.

À la fin de leur durée de vie, ces appareils contiennent encore des composants recyclables de grande valeur. Ils doivent donc être remis à des points de collecte appropriés ou à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. en vue de leur recyclage.

Stockage et transport

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-)20 °C et (+)40 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. Il doit être stocké dans un local bien ventilé et à une humidité relative ne dépassant pas 90 %. Température de fonctionnement de (+)10 °C à (+)40 °C. Pendant les processus stockage et transport, ne pas jeter ni laisser tomber l'appareil, ne pas l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.