

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Elektriline kosmeetikatool Sillon Classic 3 mootoriga

Mudel: C501A



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



*** ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHENDIT*.**


See kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikku teavet seadme toimimise ja hoolduse kohta. Enne seadme kasutamist lugege kaasasolevat kasutusjuhendit. Kasutage seadet kirjeldatud viisil. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et kõik isikud, kes võivad seadet kasutada, on sellega kursis.

Elektriline kosmeetikatool Sillon on professionaalne seade, mis sobib ideaalselt igasse ilusalongi. See sobib ideaalselt massaažiks, kosmeetiliseks ja ka füsioteraapiahoolduseks. Tool on konstrueeritud nii, et sellel lamades oleks ravi ajal täielik mugavus. Tool koosneb neljast osast ja eemaldatavast padjast. Istme mõlemal küljel on käepidemed, kuhu saab puldi üles riputada, et see oleks alati käepärast.

Toote kandevõime: 150 kg


Istmekorpuse maksimaalne kandevõime on 150 kg. Ärge tõstke rohkem kui antud kaalu, mida iste suudab kanda.

Ärge hüpake seljatoele ega avaldage suurt survet käetugedele, et vältida toote konstruktsiooni kahjustamist.

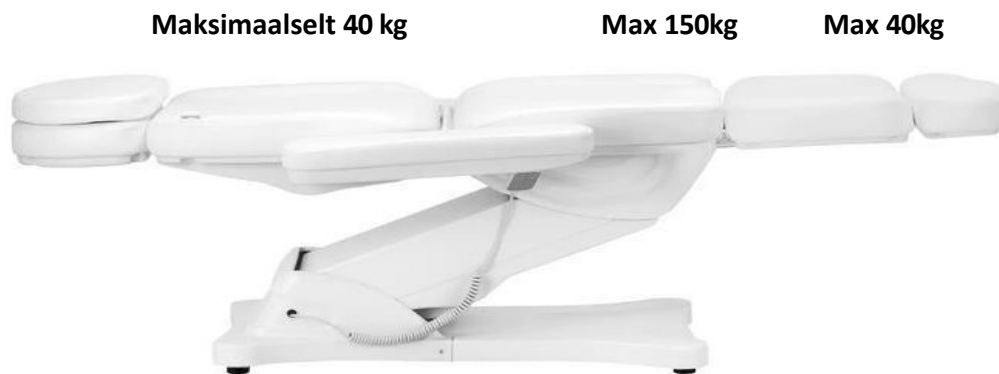

Märkus

Pakendamiseks kasutatakse pappi ja väliskarpe, milles on kokku 10 paberikihti, et tagada teie toodete kaitse. Soovitame säilitada originaalpakendid edaspidiseks kasutamiseks, eriti tagastamiseks garantiiperioodi jooksul. Turvalisuse huvides on tooli pappkarbist välja tõstmiseks vaja kahte inimest. Tõstmisel seiske mõlemal pool tooli pea- ja jalatoest. Pidage meeles, et tooli saab tõsta ainult pea- ja jalatoe positsioonidest, mitte käetugede kummaltki küljelt.

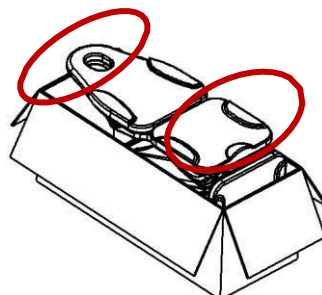

Enne tugitooli kasutamist kontrollige, et pakend oleks terve ja ei oleks transpordi ajal kahjustatud. Probleemide korral teavitage transpordifirmat või

Müügi järgne teenindus 2 päeva jooksul pärast seadme kättesaamist. Veenduge, et kõik lisaseadmed on tarnimise ajal täielikud. Kui leiate, et tarvikud on tarnimise ajal puudu, võtke õigeaegselt ühendust müügi järgse teeninduse töötajatega.


Elektrilist kosmeetikatooli tuleb kasutada suletud ja kuivas ruumis. Ruumi temperatuur peaks olema vahemikus +10° kuni -40 ° ja suhteline õhuniiskus vahemikus 30% kuni 75%. Kui elektriline kosmeetikatool on puutunud kokku temperatuuriga alla 0°, oodake enne kasutamist vähemalt 5 tundi, et seade jõuaks toatemperatuurini.

Enne elektrilise kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

- (1) Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
- (2) Veenduge, et tool on töökorras.
- (3) Asetage elektriline ilutool kohale, kus seda kasutatakse.
- (4) Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupesasse.

Näpunäide! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi elektrilise kosmeetikatooli läheduses mängida. Turvalisuse huvides tõmmake seade pistikupesast välja ja ärge jätke seda järelevalveta. Tõmmake ka toitejuhe välja.

Seadme mõõtmed:

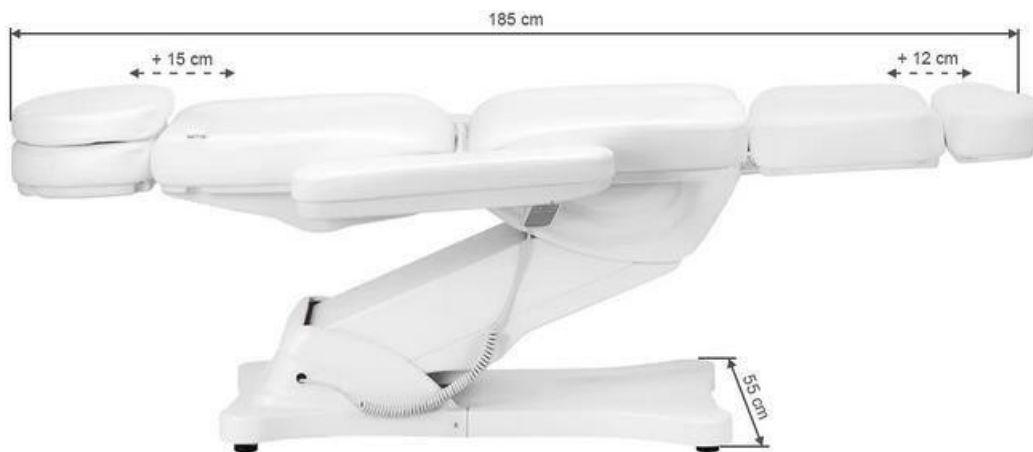



Seadme ehitus:



Hoiatus

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käe- ja jalatoele.
3. Ärge kasutage elektrilist günekoloogilist läbivaatustooli tuleohtlike gaaside läheduses.
4. Ärge tõstke suuremat kaalu, kui tool suudab kanda.
5. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei ületaks 2 meetrit.

Ettevaatust

1. Ohutuse tagamiseks ühendage toolijuhe alati maandatud pistikupessa.
2. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
3. Eemaldage toitejuhe enne elektrilise ilutooli liigutamist, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, ühendage juhe kohe lahti, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.
5. Ärge lubage raviga mitteseotud isikul juhtida kaugjuhtimispuhki.
6. Ärge asetage tooli alla mingeid esemeid.
7. Veenduge, et tooli ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti voltida.
8. Veenduge, et tooli ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
9. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.


Seadme kasutamine:

1. Ühendage toitejuhe välise 110V~240V toiteallikaga.

Käetoet paigaldamise meetod:

Käetoet paigaldamiseks peab iste olema horisontaalses asendis. Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse auku. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda paremale või vasakule, nii et see läheks õigesti paika. Tehke sama ka teise käetoega.


Käetugi on maapinnaga risti (sõltumata istme nurgast). Seda saab pöörata 180°.

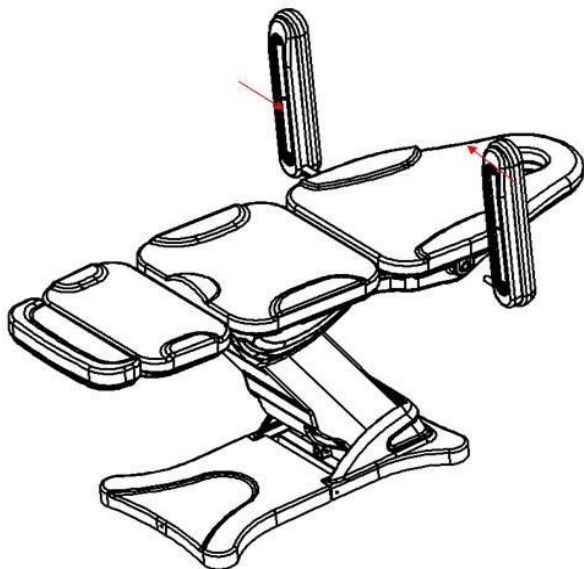

1. Käsitsi juhitud funktsioon (tõstekõrgus: voodi on 58~ 82 cm kõrgusel maapinnast).




2. Käsitsi juhitud funktsioon (selja kõrgusnurk 0-80 °, jala kõrgusnurk 0-90 °)

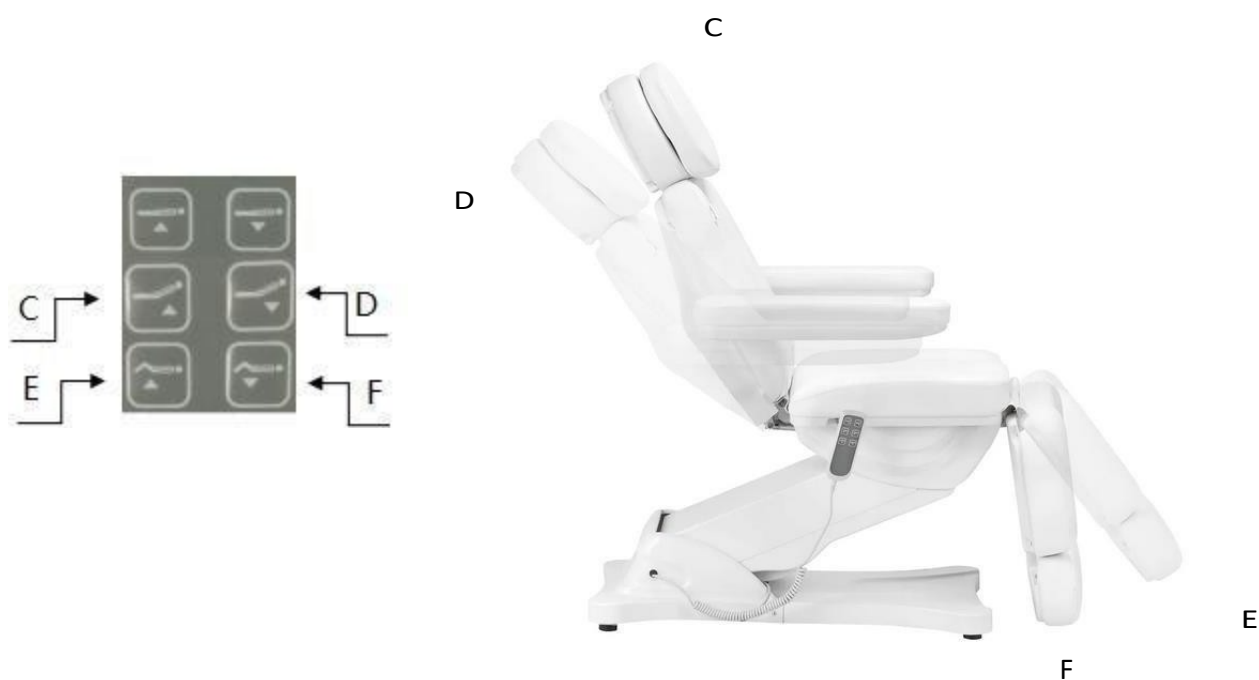

3. Jalatõmbamisfunktsioon (jalatugi, pikkus: 0~ 12cm)

0~ 12cm

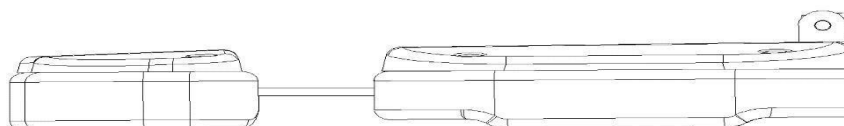

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.
- Tooli pinna heas korras hoidmiseks puhastage seda regulaarselt. Ärge unustage puhastada ja desinfitseerida tooli pärast iga kasutamist. Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee pihustid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist ilutooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord kuue kuu jooksul järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiате puudusi, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisseadme. Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage teenindusosakonda.

Veaotsing

Probleem	Lahendusmeetodid
Käsitsi juhtimine ei reageeri	Kontrollige, et käsitsijuhtimise liini ühendav liides on lahti (Kontrollige, et ei ole probleeme trükkplaadiga), ärge unustage märkida pistiku algset asukohta.
Mootor ei reageeri	Vahetage mootori pistiku asendit

Juhtkarbi väljavahetamiseks ja muude varuosade tellimiseks võtke ühendust teenindusosakonnaga, kirjeldage probleemi enne ühendust võtmist:

1. Mudel
2. Ostukuupäev

OHUTUSNÕUDED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis näidatud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutud volitatud teeninduskeskusesse:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avasse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Kui seadme avasse satub võõrkeha, eemaldage see pistikupesast.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid keskkonnasõbralikesse ringlussevõtukeskustesse. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige eeskirju

seadme tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks

Vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidest. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

