

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Sillon Classic 3 motoare

Model: C501A



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



***ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI*.**


Acest manual conține informații detaliate privind funcționarea și întreținerea unității. Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile de însoțire. Utilizați aparatul conform descrierii. Păstrați acest manual și asigurați-vă că toate persoanele care pot utiliza aparatul sunt familiarizate cu el.

Scaunul cosmetic electric Sillon este un echipament profesional perfect pentru orice salon de înfrumusețare. Este ideal pentru masaje, tratamente cosmetice și, de asemenea, pentru fizioterapie. Fotoliul a fost conceput pentru a asigura un confort complet atunci când vă întindeți pe el în timpul tratamentului. Fotoliul este format din patru părți și o pernă detașabilă. Există mânere pe ambele părți ale scaunului, unde telecomanda poate fi agățată, astfel încât să fie întotdeauna la îndemână.

Capacitatea de încărcare a produsului: 150 kg


Capacitatea maximă de încărcare a corpului scaunului este de 150 kg. Nu ridicați mai mult decât greutatea dată pe care o poate suporta scaunul.

Nu săriți pe spătar și nu puneți multă presiune pe cotiere pentru a evita deteriorarea structurii produsului.

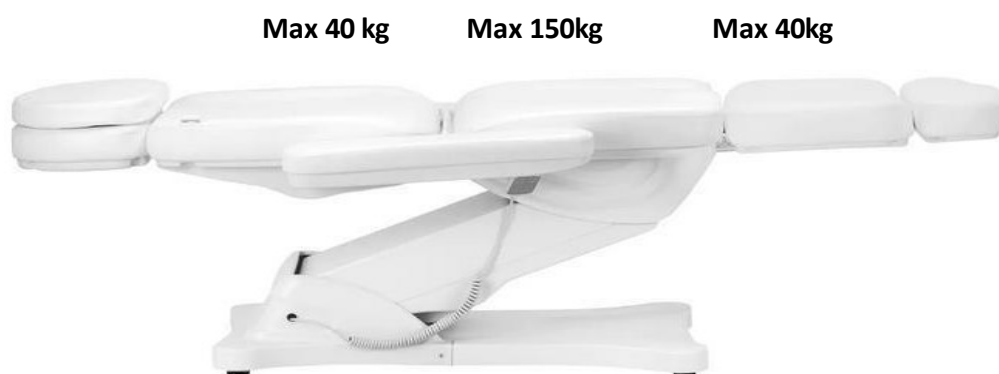

Notă

Cartonul și cutiile exterioare sunt folosite pentru ambalare, cu un total de 10 straturi de hârtie pentru a asigura protecția produselor dvs. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru utilizare ulterioară, în special pentru returnări în timpul perioadei de garanție. Din motive de siguranță, sunt necesare două persoane pentru a ridica scaunul din cutia de carton. Atunci când ridicați scaunul, stați pe ambele părți ale tetierei și ale suportului pentru picioare ale scaunului. Nu uitați, fotoliul poate fi ridicat numai din pozițiile tetieră și de picioare, nu și de pe oricare dintre părțile cotierelor.

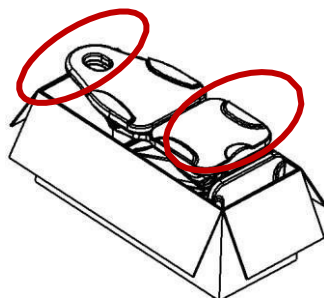

Înainte de a utiliza fotoliul, verificați dacă ambalajul este intact și nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă există vreo problemă, vă rugăm să notificați compania de transport sau

Personalul post-vânzare în termen de 2 zile de la primirea unității. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt complete la momentul livrării. Dacă constatați că lipsesc accesorii la momentul livrării, contactați din timp personalul post-vânzare.

Scaunul cosmetic electric trebuie utilizat într-o cameră închisă și uscată. Temperatura din încăpere trebuie să fie între +10° și -40°, iar umiditatea relativă între 30% și 75%. Dacă scaunul cosmetic electric a fost expus la temperaturi sub 0°, așteptați cel puțin 5 ore înainte de a-l utiliza, astfel încât unitatea să aibă timp să ajungă la temperatura camerei.

Înainte de a utiliza fotoliul cosmetic electric, citiți instrucțiunile și efectuați următorii pași:

- (1) Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
- (2) Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
- (3) Așezați scaunul electric de înfrumusețare în zona în care va fi utilizat.
- (4) Conectați ștecherul la o priză adecvată.


Sfat! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului electric de înfrumusețare. Din motive de siguranță, scoateți aparatul din priză și nu îl lăsați nesupravegheat. De asemenea, scoateți din priză cablul de alimentare.

Dimensiunile aparatului:





Construcția aparatului:

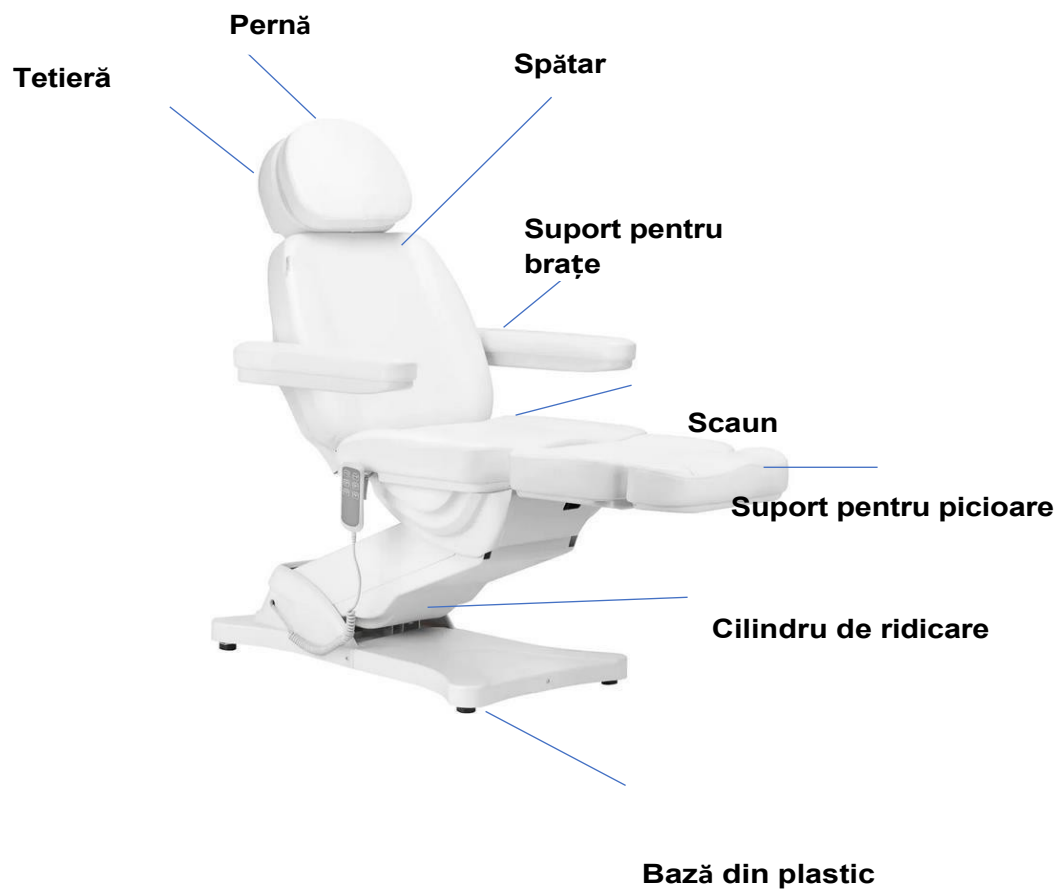

Avertisment

1. Suportul pentru picioare nu este proiectat să susțină întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră și pe suportul pentru picioare.
3. Nu utilizați scaunul electric de examinare ginecologică în apropierea gazelor inflamabile.
4. Nu ridicați o greutate mai mare decât poate suporta scaunul.
5. Asigurați-vă că distanța dintre prize nu depășește 2 metri.

Atenție

1. Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
2. Nu legați cablul de alimentare de unitate. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință într-o situație de urgență.
3. Scoateți cablul de alimentare înainte de a muta scaunul electric de înfrumusețare, astfel încât acesta să nu rămână blocat între unele părți ale scaunului.
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat cablul, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
5. Nu permiteți unei persoane care nu efectuează tratamentul să controleze telecomanda.
6. Nu așezați niciun obiect sub scaun.
7. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului pentru a-i permite acestuia să fie pliat și desfășurat liber.
8. Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora unitatea.
9. Nu modificați singur unitatea. Dacă scaunul nu funcționează corect, nu îl mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.


Utilizarea dispozitivului:

1. Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare externă de 110V ~ 240V.

Metoda de instalare a cotierei:

Scaunul trebuie să fie în poziție orizontală pentru a putea instala cotiera pe acesta. Glisați cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Răsuciți-l la dreapta sau la stânga, astfel încât să intre în poziție corect. Procedați la fel cu celălalt cotieră.


Cotiera este perpendiculară pe sol (indiferent de unghiul scaunului). Acesta poate fi rotit la 180°.

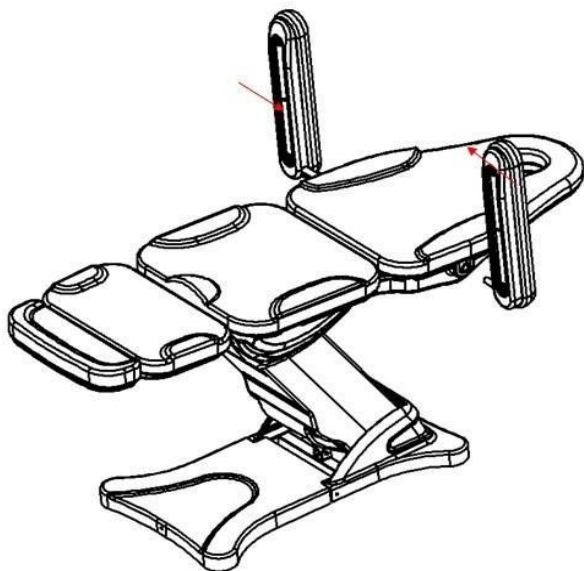


1. Funcția de control manual (înălțimea de ridicare: patul se află la 58~ 82 cm de la sol)



2. Funcție de control manual (unghi de înălțare a spatelui 0-80 °, unghi de înălțare a piciorului 0-90 °)

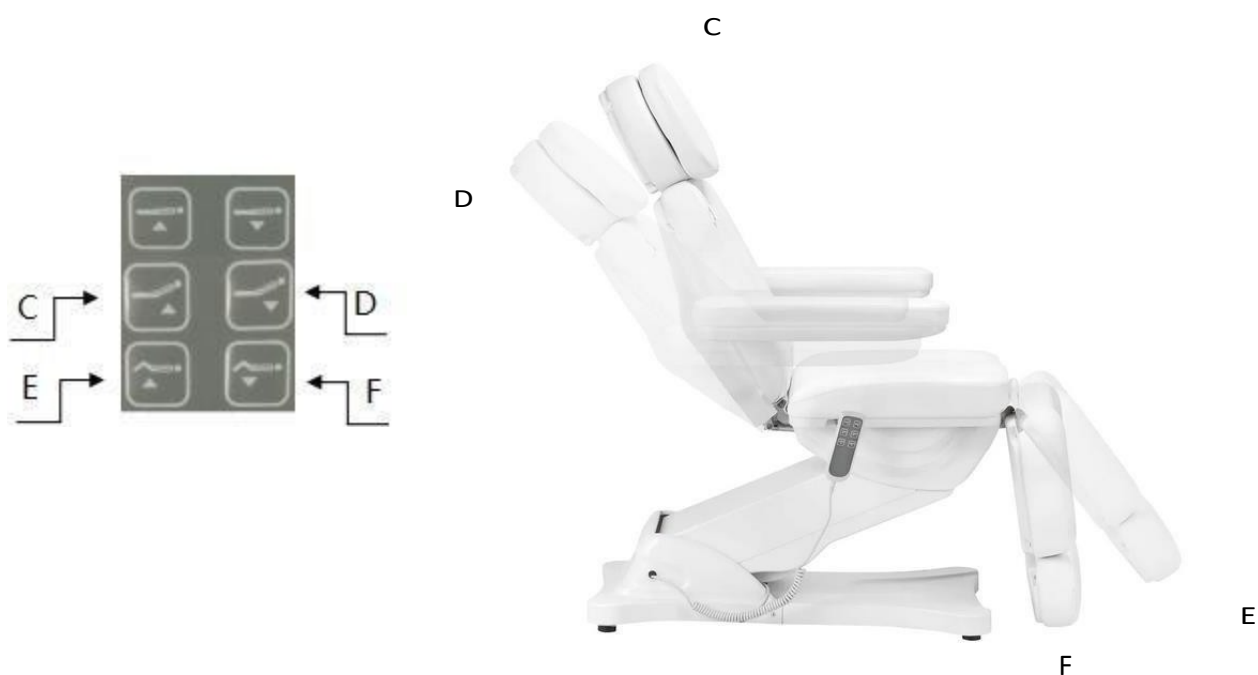

3. Funcția de retragere a suportului pentru picioare (suport pentru picioare, lungime: 0~ 12cm)
0~ 12cm

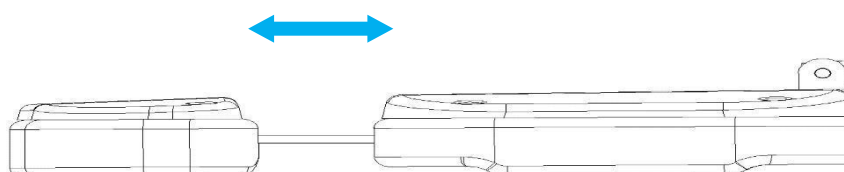

Curățarea și dezinfectarea aparatului:

- Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele greu accesibile sau colțurile, o perie mică va funcționa bine. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau placate cu crom

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablajul motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă observați defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare/control.

Dacă orice parte a echipamentului este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu îl mai utilizați. Apoi anunțați departamentul de service.

Rezolvarea problemelor

Problema	Metode de rezolvare
Controlul manual nu răspunde	Verificați dacă interfața care conectează linia de control manual este slăbită (Verificați dacă nu există probleme cu placa de circuit) nu uitați să marcați poziția originală a fișei.
Motorul nu răspunde	Comutați poziția fișei motorului

Pentru a înlocui cutia de comandă și a comanda alte piese de schimb, contactați departamentul de service, descrieți problema înainte de a contacta:

1. Model
2. Data achiziției

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centre de reciclare compatibile cu mediul. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de

regul de eliminare pentru acest tip de aparat. Pentru a proteja mediul înconjurător

În conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.

