

ACTIVESHOP®

Használati utasítás

SILLON Eclipse 4 sil elektromos kozmetikai szék.



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Különböző
nyelvek
beolvasás
a




Méretetek:



Funkciók és jellemzők:

- **EGYSZERŰ ÁLLÍTÁS:** A kozmetikai szék háttámlája és ülése az Effortless oldalsó gomb segítségével könnyen állítható, így kényelmesen beállíthatja az ügyfél helyzetét kezelés közben.
- **Átfogó kialakítás:** A szék vezérlőből, motorokból, fém alkatrészekből és bőrből áll. A vezérlő egy kézi vezérlőpanellel és négy motorral kombinálható.
- **Integrált funkcionalitás:** Négy részből áll: a háttámla dőlésszögének beállítása, dőlésszög-beállítás ülés, lábtartó szögbeállítás és ülésmagasság-állítás - mindez egyetlen szerkezetbe integrálva.
- **Felhasználóbarát működés:** A szék elegáns és felhasználóbarát kialakítással rendelkezik, amely egyszerű kezelhetőséget és kényelmet biztosít.
- **Nagy stabilitás:** A szék nagy stabilitást és magas szintű biztonságot nyújt, semmilyen szögben vagy magasságban nem észlelhető ingadozás.

Távírányító:

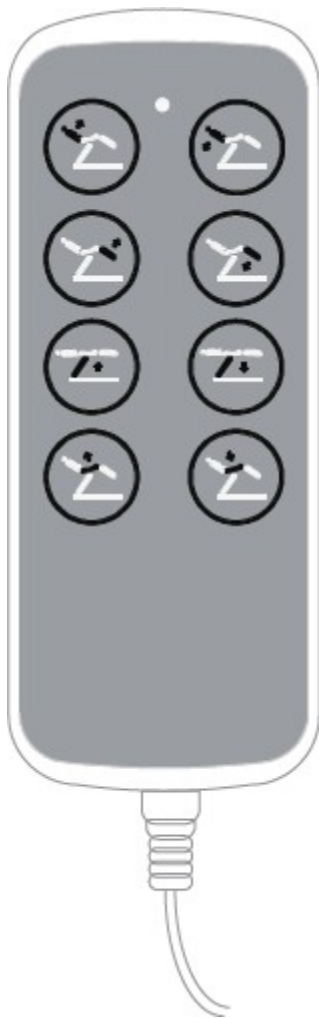

Nyomja meg a  vagy a  gombot , hogy szabályozza az emelési szöget a gyógyfürdőszék háttámlájának emelését.

Nyomja meg a  vagy  gombot a gyógyfürdőszék lábtartójának emelési szögének szabályozásához.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a teljes gyógyfürdőszék emelésének vagy süllyesztésének vezérléséhez.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a szög beállításához a gyógyfürdőszék ülésének dőlésszögét.

Figyelmeztetés:

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára vagy a lábtartóra.
3. Ügyeljen arra, hogy az aljzatok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Vigyázat!

- Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.
- Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Gondoskodjon arról, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.
- Az elektromos kozmetikai szék mozgatása előtt távolítsa el a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
- Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
- Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a kezelő távirányítót.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
- Ügyeljen arra, hogy a szék körül elegendő szabad tér legyen.
- Győződjön meg arról, hogy a szék körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
- Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről.

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne felejtse el minden használat után megtisztítani és fertőtleníteni a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítsa a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

A tisztítás enyhe tisztítószeres oldattal a legjobb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.

Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.

Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. a vezérlődoboz és annak kábelezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. a zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a szék használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Ha a készülék bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

Műszaki adatok:

- Ülőméretek: (mm): 1930× 820× 670W~870 (mm)
- A háttámla állítási szöge: kb. 85° maximum
- Ülő beállítási szöge: kb. legfeljebb 12°
- Lábtámasz beállítási szöge: kb. legfeljebb 90°
- Nettó súly: 96 kg
- Bruttó súly: 110 kg
- Maximális terhelés: 200 kg (normál használat esetén)
- Tápegység: 100-120 V AC, 50 Hz/60 Hz vagy 220-240 V AC, 50 Hz/60 Hz
- Maximális teljesítmény: 300 W

Probléma	Ok	Megoldás
Az ülés nem reagál, ha bármelyik gombot megnyomják	a) A megnyomott gomb funkciója szélsőséges értékre változott b) Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva c) Minőségi probléma a kezelőpanel kézi	a) Próbálja meg más gombokat b) Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót c) Cserélje ki a kézi vezérlőpanelt
Furcsa hang és rezgés az ülés felemelésekor és leeresztésekor.	a) A csavarok meglazultak b) A forgó alkatrészek nincsenek kellően megolajozva c) Minőségi probléma Motor	a) Húzza meg az összes csavart b) Adjon hozzá némi zsírt c) Cserélje ki a motort

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel - így, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik sérülés következhet be.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozottan képzett személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd

a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasznált és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani a

eredeti csomagolásban. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

