

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Električni kozmetični stol SILLON Eclipse 4 sil.



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skeniranj
e za
različne
jezike




Dimenzije:



Funkcije in lastnosti:

- Enostavna nastavitve: Naslonjalo in sedež kozmetičnega stola se enostavno nastavljata s stranskim gumbom Effortless, kar omogoča udobno prilagoditev položaja stranke med zdravljenjem.
- Celovita zasnova: stol je sestavljen iz krmilnika, motorjev, kovinskih sestavnih delov in usnja. Krmilnik je zasnovan tako, da ga je mogoče kombinirati z ročno nadzorno ploščo in štirimi motorji.
- Integrirana funkcionalnost: vključuje štiri dele: nastavitev naklona hrbta, nastavitev naklona sedeža, nastavitev naklona podnožja in nastavitev višine sedeža - vse to je integrirano v eno konstrukcijo.
- Uporabniku prijazno upravljanje: Stol odlikuje elegantna in uporabniku prijazna zasnova, ki zagotavlja preprosto upravljanje in udobje.
- Visoka stabilnost: Stol zagotavlja veliko stabilnost in visoko raven varnosti, saj se ne ziblje pod nobenim kotom ali na nobeni višini.

Daljinski upravljalnik:

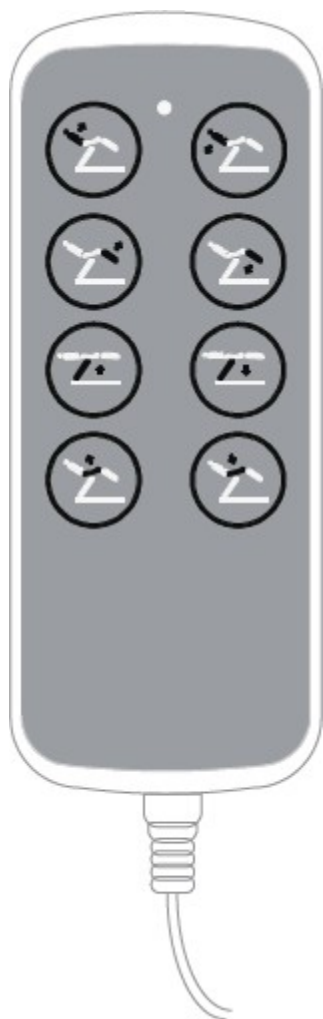

Stisnite  ali  , da uravnate kot dviga stola.
naslonjala zdraviliškega stola.

Pritisnite  ali  za upravljanje kota dviga
naslona za noge spa stola.

Pritisnite  ali  , da upravljate dviganje ali spuščanje
celotnega spa stola.

Pritisnite  ali  , da nastavite kot
sedeža zdraviliškega stola.

Opozorilo:

1. Naslon za noge ni zasnovan tako, da bi podpiral celotno težo odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslonu za roke ali naslonu za noge.
3. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Pozor!

- Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne privezujte na napravo. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Zagotovite, da je napajalni kabel v nujnih primerih mogoče enostavno odstraniti.
- Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
- Osebi, ki ne izvaja zdravljenja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
- Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
- Prepričajte se, da je okoli stola dovolj prostega prostora.
- Prepričajte se, da okoli stola ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali napravo.
- Naprave ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center.

Čiščenje in razkuževanje naprave:

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Če želite ohraniti površino stola v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih predelov ali kotov se bo dobro obnesla majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klor.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).

Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, enote ne postavljajte pogojem, ki lahko povzročijo onesnaženje s tekočino.

Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite upravljalne elemente in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati stol in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogonsko/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščen osebje.

Če je kateri koli del enote poškodovan, izključite napajalni kabel in ga prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Tehnični podatki:

- Mere sedeža: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Kot nastavitve naslonjala: približno 85° največ
- Kot nastavitve sedeža: največ približno 12°.
- Kot nastavitve naslona za noge: največ približno 90°.
- Neto teža: 96 kg
- Bruto teža: 110 kg
- Največja obremenitev: 200 kg (pri normalni uporabi)
- Napajanje: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz ali AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Največja moč: 300 W

Težava	Vzrok	Rešitev
Sedež se ne odzove, ko kliknete kateri koli gumb	a) Funkcija pritisnjenega gumba je preklopljena na skrajno vrednost b) Preverite, ali je vtič pravilno priključen c) Težava s kakovostjo nadzorne plošče Priročnik	a) Poskusite pritisniti druge gumbov b) Odklopite in ponovno priključite vtič c) Zamenjajte ročno upravljalno ploščo
Nenavaden zvok in vibracije pri dvigovanju in spuščanju sedeža.	a) Vijaki so zrahljani b) Vrteči se deli niso dovolj namazani c) Težava s kakovostjo Motor	a) Privijte vse vijake b) Dodajte nekaj masti c) Zamenjajte motor

VARNOSTNI UKREPI

- Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
- Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v enoto ne morejo priti tekočine.
- Takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
- Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
- Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
- V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
- Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje. lahko pride do poškodb.
- Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
- Napajanje z električno energijo mora biti v skladu s specifikacijami, navedenimi na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregori.

POZOR:

- V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na pooblaščenega servisni center, da se izognete nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
- Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
- Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in nato

oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo lahko prevažate le pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C v

originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

