

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón cosmético hyd. Sillon 210



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025





Escanear
para
diferentes
idiomas




Dimensiones:





Montaje:

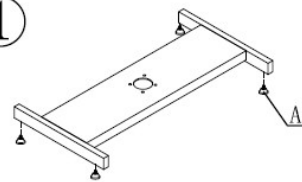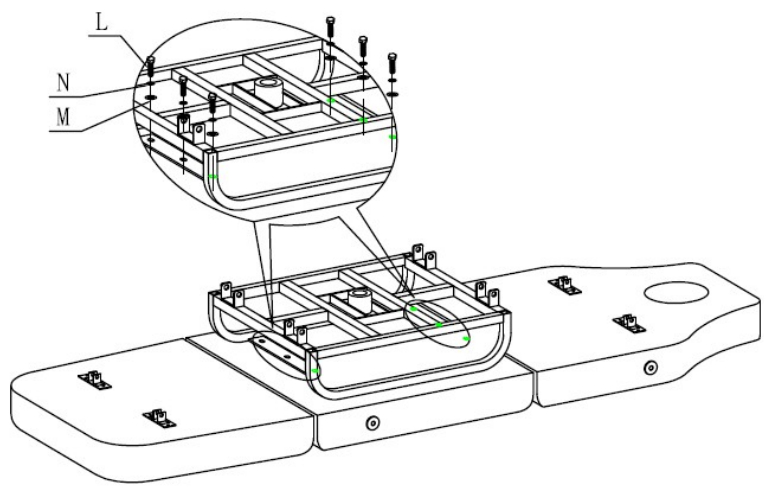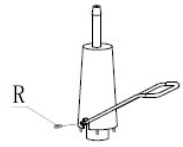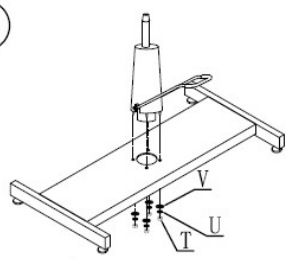A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	<div>①</div> 	
<div>④</div> 						<div>②</div> 	
						<div>③</div> 	
						CH-210	


1. Deslice las almohadillas en la base del asiento.
2. Encaje la palanca de ajuste de altura en el actuador utilizando el elemento R.
3. Coloque el actuador en la base del asiento y fíjelo con los elementos V, U y T.
4. Coloque la estructura metálica del asiento en la base del asiento y fíjela con L, M y N.

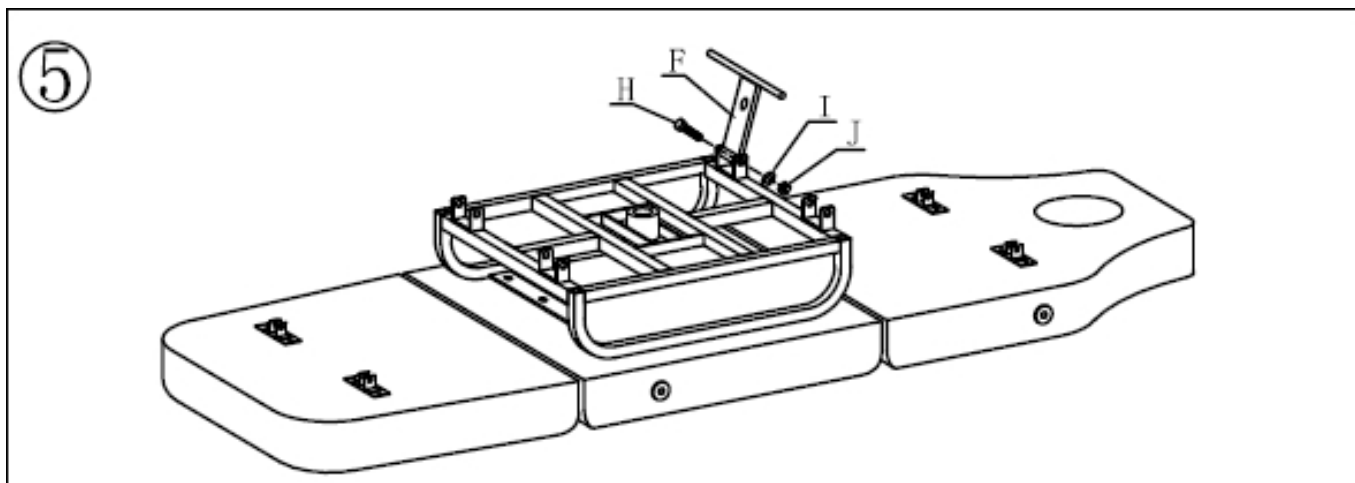


5. Monte el elemento F apretándolo con los elementos I, J y H.

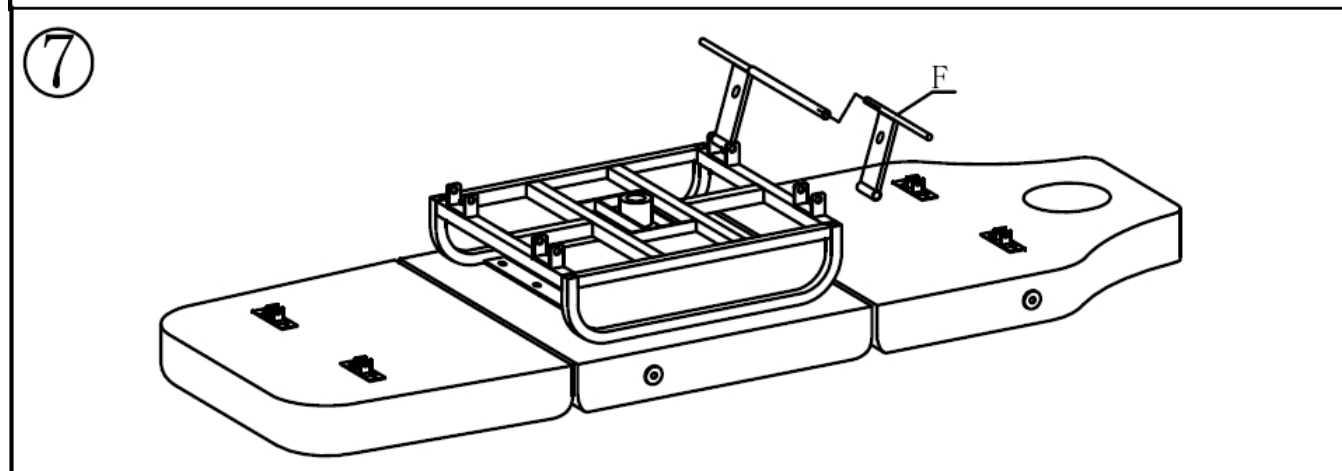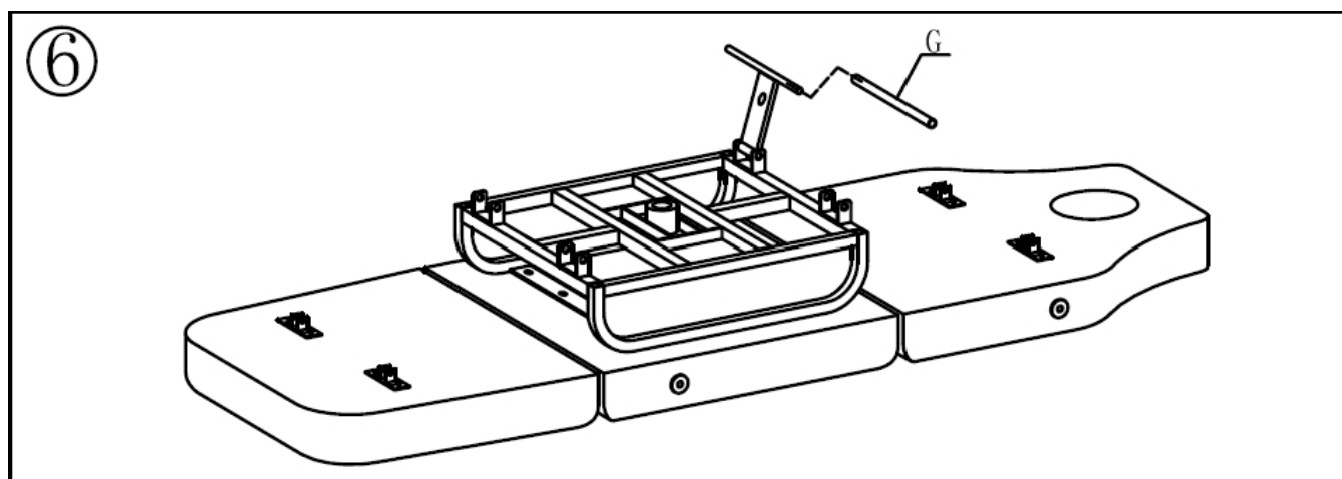


- 6.7 Utilice el elemento G para unir los dos elementos F.

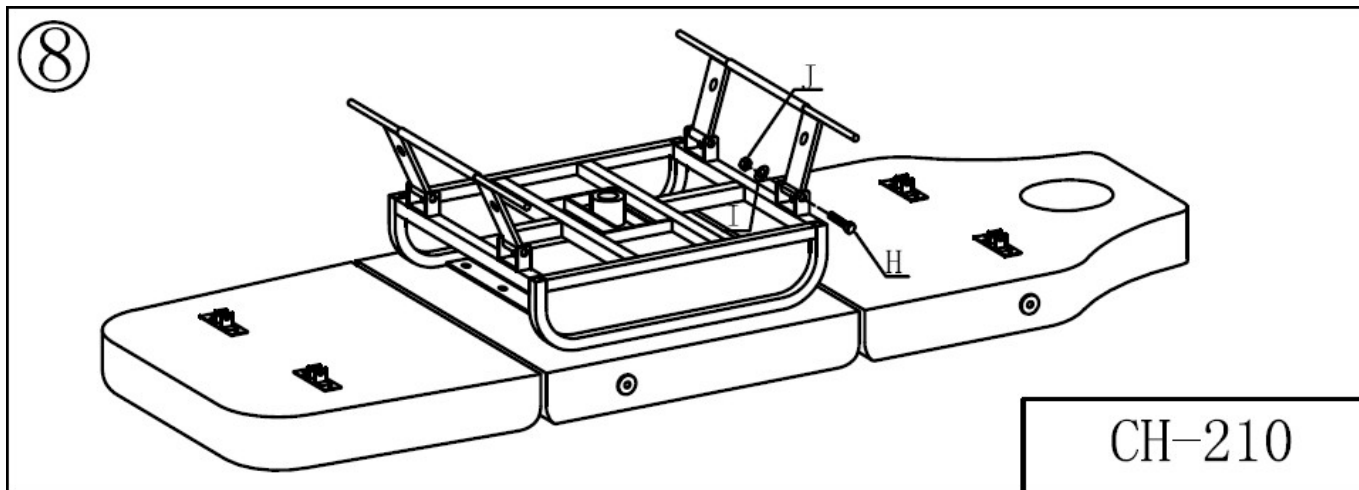

8. Apriete utilizando J y H y repita en el otro lado.

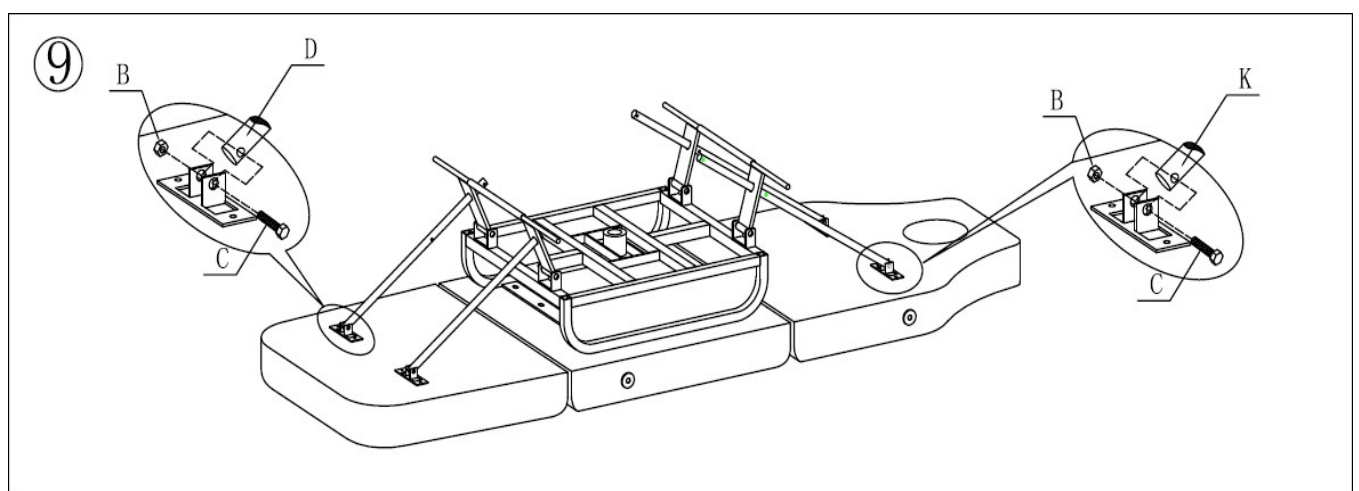


9. Introduzca los elementos D y K, y atorníllelos utilizando B y C.

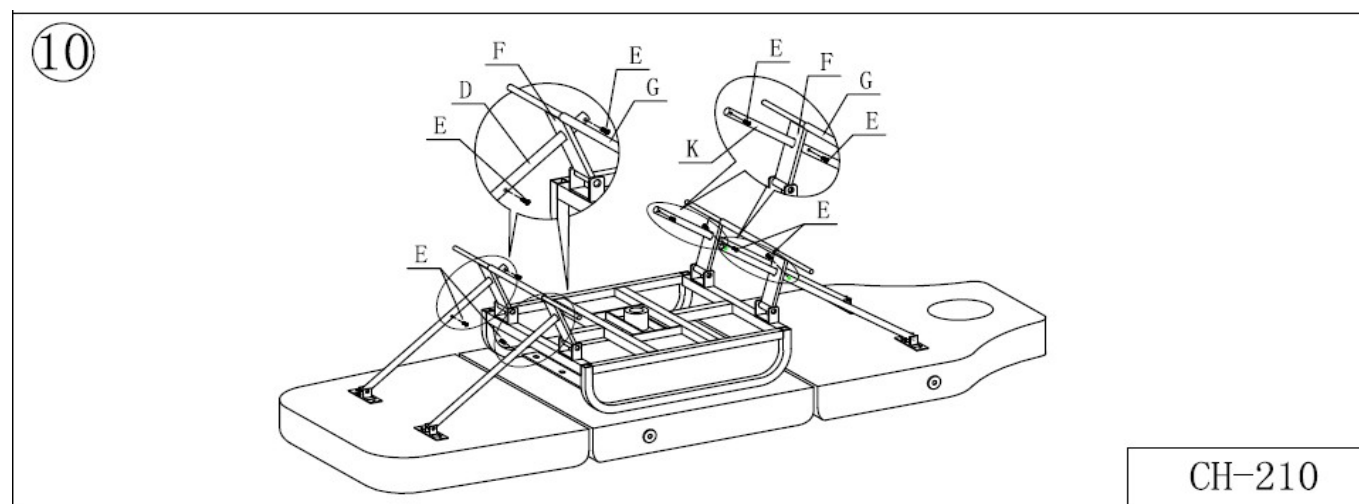


10. Fijar las patas de apoyo con E.


11

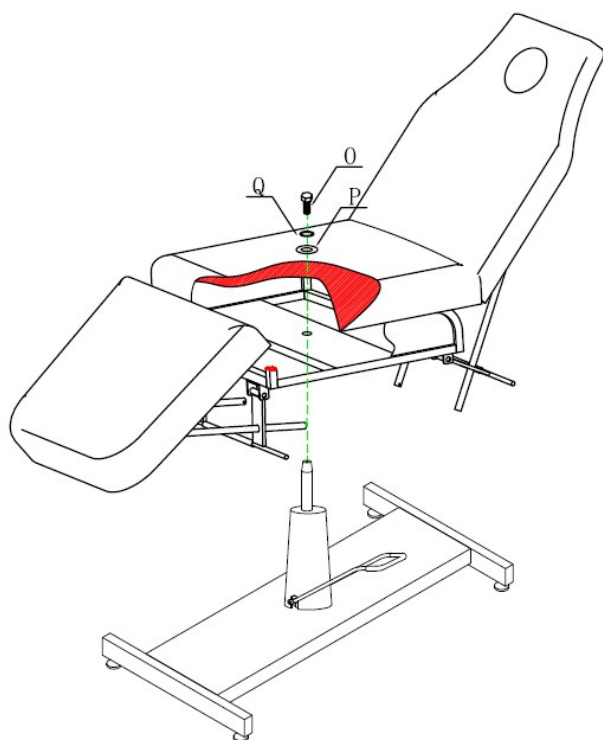

12

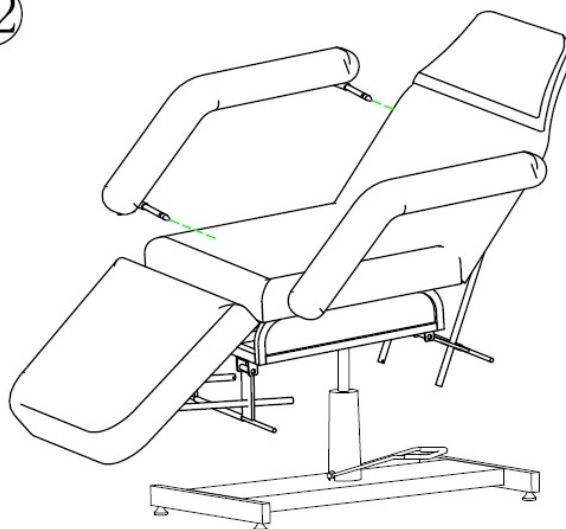

13

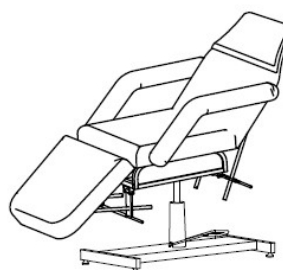

CH-210

11. Encajar el asiento en el vástago del accionamiento y apretarlo con Q, P y O.

12. Deslice los reposabrazos como se muestra en la ilustración.

Funciones del asiento:

- Subir el asiento: levante el asiento presionando la palanca.
- Bajar el asiento: empuje hacia abajo hasta que el asiento descienda por completo.
- Bloqueo del asiento: levante la palanca lo máximo posible

Precaución

No se siente bruscamente ni descargue su peso sobre el asiento. No desplace ni traslade el asiento con personas o cargas encima. No apoye los pies o las rodillas en la silla, ni se balancee, ni se siente en los reposabrazos.

Limpieza y desinfección de la unidad

Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Un cepillo pequeño funcionará bien para limpiar zonas o rincones de difícil acceso. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento:

1. Limpieza diaria

Eliminar el polvo con un paño suave y seco.

2. Eliminación de la suciedad persistente

Como sabe, es difícil eliminar la suciedad persistente con un paño seco normal. En este caso, utilice primero un paño suave con detergente neutro diluido y, a continuación, pase un paño seco.

3. Está prohibido el uso de benceno, diluyentes, gasolina u otros disolventes.

Estos agentes pueden dañar la piel o corroer el producto.

4. Condiciones de almacenamiento y funcionamiento

No exponga el producto a la luz solar intensa ni a la humedad. De lo contrario, el producto podría resultar dañado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.

Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:

(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.

No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.

No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos y electrónicos usados

eléctricos deben recogerse por separado y llevarse a continuación a puntos de recogida de

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojar ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.

