

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Kosmetischer Sessel hyd. Basic 210



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie bitte den Inhalt der beiliegenden Anleitung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungselemente entfernt wurden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Stuhl an den Ort, an dem er verwendet werden soll.

Achtung!

Kinder und unbefugte Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

Abmessungen des Geräts:



Länge im voll ausgefahrenen Zustand: 184cm, Höhe


min. 65cm,

Max. Höhe 79 cm

Maximale Belastung des Stuhls: 150kg.



- Der Sessel ist mit den Hebeln an der Unterseite manuell verstellbar. Auf diese Weise kann der Winkel der Fußstütze und der Rückenlehne eingestellt werden.
- Die Höhe des Sessels ist mit dem Sitzverstellgriff einstellbar.
- Außerdem sind die Armlehnen abnehmbar, um den Zugang zu den Behandlungsbereichen zu erleichtern.
- Das Kissen an der Kopfstütze ist ebenfalls abnehmbar, was die Behandlung in der Bauchlage erleichtert.
- Der Stuhl kann in eine Liegeposition aufgeklappt werden.
- Der Stuhl kann um 360° gedreht werden.

Um die Position der Rückenlehne/Fußstütze einzustellen, ziehen Sie den Hebel an der Unterseite des Stuhls und kippen Sie dann die Rückenlehne/Fußstütze in die richtige Position.

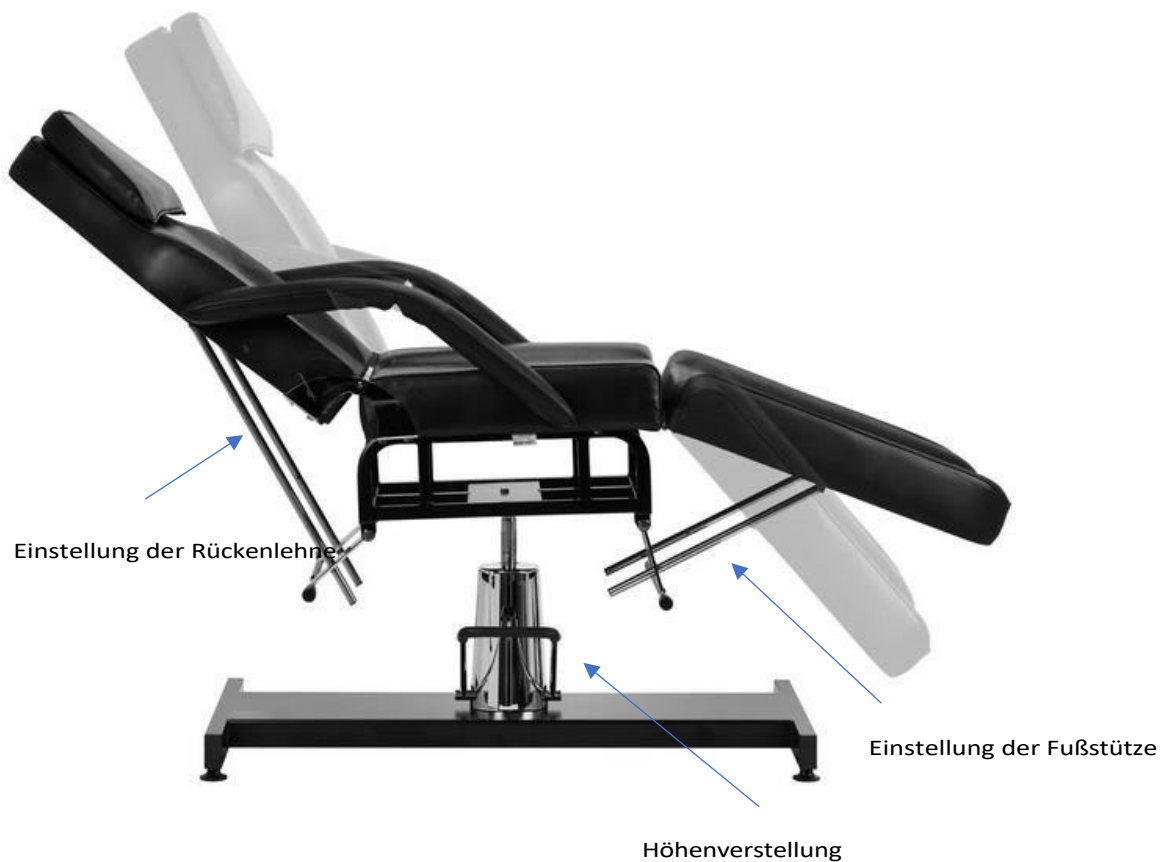

Montage:

1. Schrauben Sie den Sitz an den Rahmen.
2. Setzen Sie den Sitz auf den Zylinder auf und schieben Sie ihn ein.
3. Ziehen Sie die Feststellschraube des Antriebs und des Sitzes fest.
4. Montieren Sie die Halterungen in der Rückenlehne und im Sitz.
5. Halterungen in Fußstütze und Sitz montieren.

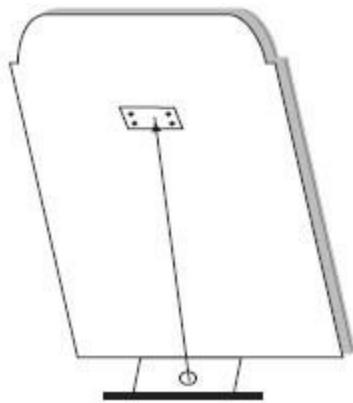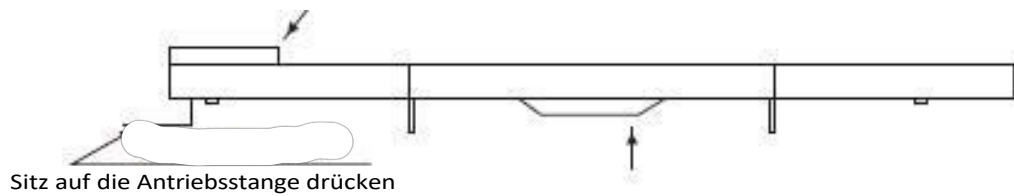

Führen Sie die Halterung durch das Loch und ziehen Sie sie mit der Schraube fest.

Schrauben Sie die Halterung an der Rückenlehne fest, indem Sie sie durch das Loch mit einer Schraube sichern (dasselbe gilt für die Fußstützen).

Reinigung und Wartung:

- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich am besten, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen.
- Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Am besten funktioniert die Reinigung mit einer milden Waschmittellösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Lösungen auf Chlorbasis sollten nicht vermieden werden.

III. Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Wasserstrahl (Brause, Hochdruckreiniger).
- Nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit reinigen. Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren zur Reinigung.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten nur von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

Kontrollieren Sie einmal wöchentlich die Bedienelemente und deren Verkabelung. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:

1. Stromkabel und dessen Befestigung
2. Motorverdrahtung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. Normaler Betrieb des Schließsystems

Wenn Sie einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Benachrichtigen Sie dann den Kundendienst.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP GmbH:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
c) das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt in Übereinstimmung mit der Richtlinie

2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektro-Altgeräte getrennt

gesammelt und dann an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.