

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

Cosmetische fauteuil hyd. Basis 210



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Lees voordat u de cosmeticastoel in gebruik neemt de inhoud van de bijgevoegde instructies en voer de volgende stappen uit:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsonderdelen verwijderd zijn.
2. Zorg ervoor dat de stoel in orde is.
3. Plaats de stoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.

Let op.

Kinderen en onbevoegden mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.

Afmetingen van het apparaat:



Lengte wanneer volledig uitgeschoven: 184cm,


Hoogte min. 65cm,

Max. hoogte 79 cm

Maximale belasting van de stoel: 150kg.


- De fauteuil is handmatig verstelbaar met de hendels aan de onderkant. Zo kan de hoek van de voetensteun en de rugleuning worden versteld.
- De hoogte van de stoel is verstelbaar met de hendel voor de stoelverstelling.
- Bovendien zijn de armleuningen afneembaar voor gemakkelijke toegang tot de behandelgebieden.
- Het kussen op de hoofdsteun is ook afneembaar, waardoor het makkelijker wordt om behandelingen uit te voeren als de persoon op zijn buik ligt.
- De stoel kan worden uitgeklappt tot een liggende positie.
- De stoel kan 360° gedraaid worden.

Om de positie van de rugleuning/voetensteun aan te passen, trek je aan de hendel o n d e r de stoel en kantel je de rugleuning/voetensteun in de juiste positie.

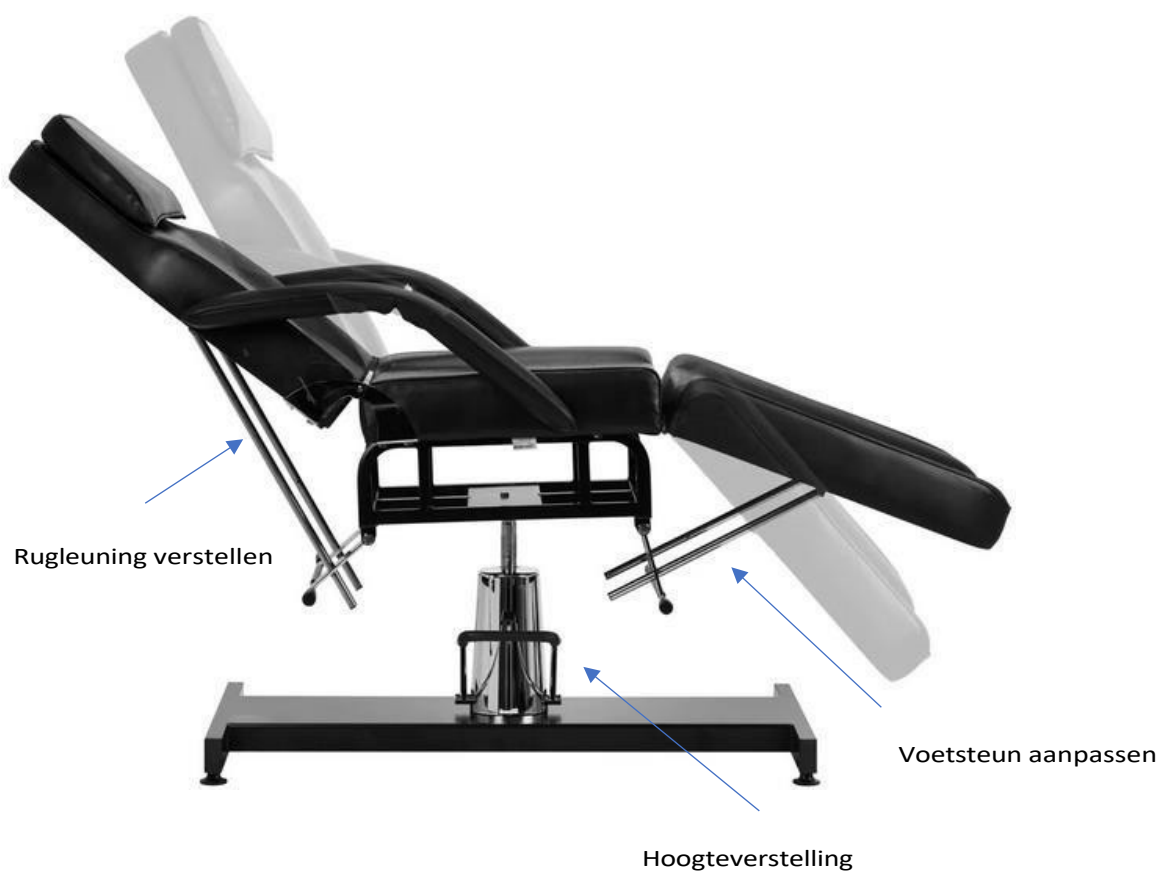


Montage:

1. Schroef de zitting op het frame.
2. Plaats de zitting met een "push fit" op de cilinder.
3. Draai de borgschroef van de actuator/zitting vast.
4. Monteer de beugels in de rugleuning en zitting.
5. Monteer de beugels in de voetensteun en zitting.

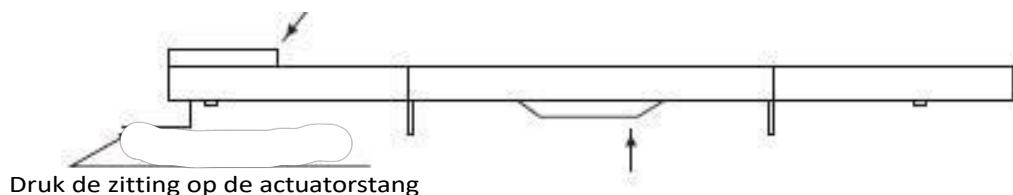

www.ergonomisch.nl

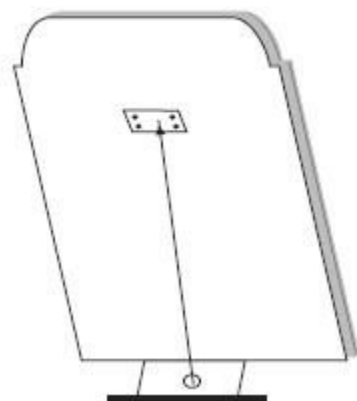

Steek de steun door het gat en draai vast met de bout.

Schroef de steun op zijn plaats op de rugleuning door deze met een schroef door het gat vast te zetten (hetzelfde geldt voor de voetsteunen).

Reiniging en onderhoud:

- Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet het regelmatig worden schoongemaakt. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Wij raden aan om de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

- Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt het beste voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken.
- Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

- Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Oplossingen op chloorbasis moeten niet worden vermeden.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedruk waterkanonnen) voor het reinigen.
- Niet reinigen bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid. Stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische schoonheidsstoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de toestand en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:

1. Stroomkabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. De schakelkast en de bedrading ervan
4. Of er accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/bedieningseenheid openen of vervangen.

Als een onderdeel van de apparatuur beschadigd is, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de apparatuur niet meer gebruiken. Breng vervolgens de servicedienst op de hoogte.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingezonden voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.