

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sillon Lux 273b elektromos kozmetikai szék, 3 motorral
CH-273E/ 148187



Importőr:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, épület DC2A
54-610 Wrocław, Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Keresés
más
nyelvek



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt, és őrizze meg későbbi használatra.

A Lux 273B elektromos kozmetikai szék 3, vezetékes távirányítóval vezérelt hajtóművel van felszerelve.

A könnyű kezelhetőség és az egyéni igényekhez való alkalmazkodás jelentősen megkönnyíti a különféle kezelések elvégzését. A jellegzetes, elegáns kivitel és az egyszerűség megőrzése együttesen azt eredményezi, hogy ez a szék minden szakrendelő vonzó eleme lesz.

Műszaki adatok	
Bemeneti feszültség	~230 V
Teljesítmény	150 W
Névleges frekvencia	50 Hz
Kárpit anyaga	Műbőr
Vezérlés	Vezetékes távirányító
Maximális terhelés	140 kg

A szék felépítése

1. Fejtámla
2. Nyílás a fejtámlában
3. Háttámla
4. Kartámasz
5. Ülészék
6. Lábtartó
7. Vezetékes távirányító
8. Műanyag burkolat



Szerelés

1. Szerelje fel a fejtámlát az alábbi képen látható módon.




2. Szerelje fel a kartámaszokat – hajtsa hátra a szék háttámláját fekvő (vízszintes) helyzetbe, majd csavarozza be a kartámaszt a kijelölt helyre, a képeken látható illusztrációknak megfelelően.

1. lépés



2. lépés

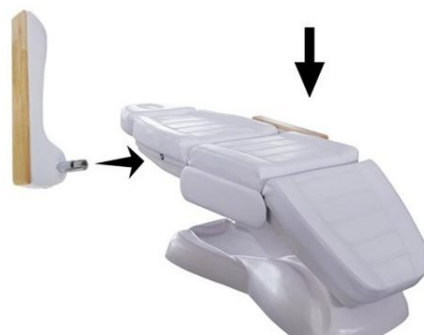

3. lépés



4. lépés



3. Csatlakoztassa a tápkábelt az áramellátáshoz.

A távirányító funkciói

A szék kívánt pozícióba állításához tartsa lenyomva a távirányítón a megfelelő gombot:



← A háttámla dőlésszögének beállítása

← A lábtartó dőlésszögének beállítása

← A szék magasságának beállítása (65–82 cm tartományban)


A nagyobb kényelem érdekében a távirányítót felakaszthatja az ülés jobb oldalán található fém tartóra, így mindig kéznél lesz.



A szék beállítási funkciói:

- A szerkezet lehetővé teszi a szék fekvő helyzetbe állítását.
- Praktikus nyílás a fejtámlában, diszkréten elrejtve a párna alatt.
- 180°-ban mozgatható kartámaszok.
- Kihúzható fejtámla

A készülék méretei

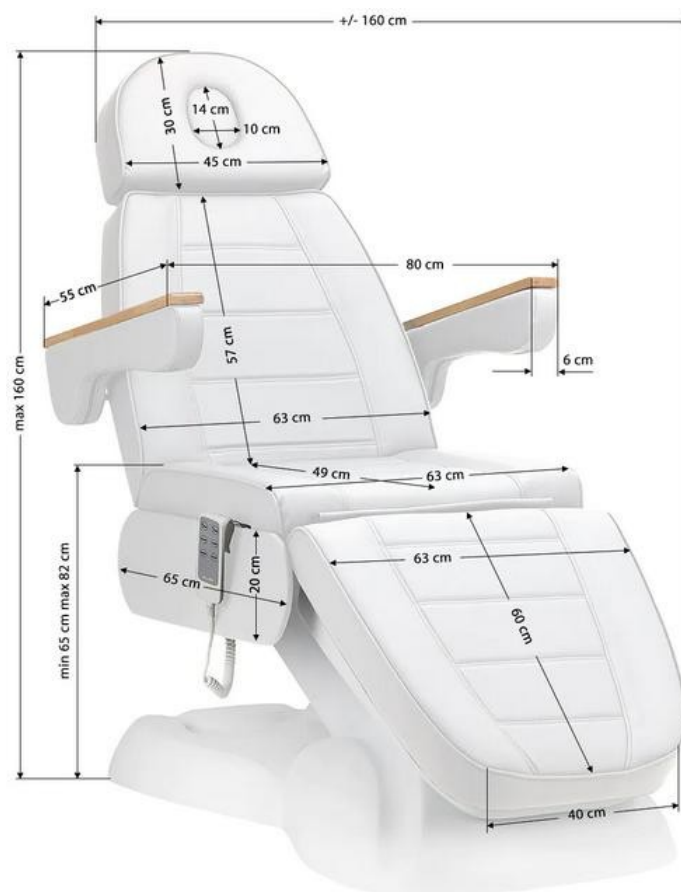

A fotel teljesen kinyitott (fekvő) helyzetben 207 cm hosszú.

Figyelem

A szék maximális terhelhetősége: 140 kg.

Ne lépje túl a szék maximális terhelhetőségét, és ne üljön a kartámaszokra.

Tisztítás és karbantartás

A fotel jó műszaki állapotának fenntartása, hosszú élettartamának biztosítása és a készülék megfelelő működése érdekében javasoljuk a rendszeres karbantartást és az alábbi tisztítási szabályok betartását.

Figyelem: Bármilyen munkálat megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, és húzza ki a dugaszt a konnektorból

- Műbőr felületek tisztítása:
Törölje le a bőrt egy puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószeret, mint például

oldószer, benzin és alkohol alapú készítmények. Használhatja a kereskedelemben kapható műbőr ápolószereket, és kövesse a csomagoláson található utasításokat.

Hagyja a szék kárpitját természetesen megszáradni. Ne használjon fúvókás készülékeket a felület szárításához. Ne használjon farmert vagy színes szövetet a készülék letörléséhez, hogy azok festéke ne hatoljon be a szék felületébe.

- Fém és műanyag felületek tisztítása
Törölje le a felületeket puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. A nehezen elérhető helyek vagy sarkok tisztításához jól jön egy kis kefe. Ne használjon túl sok tisztítófolyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.
- Rozsdamentes acél felületek
A legjobb eredményt enyhe tisztítószer-oldattal érheti el. Az ammónia és a legtöbb oldószer használható a makacs foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.
- Festett vagy krómozott fémfelületek
 - Ne használjon vízsugarat a tisztításhoz.
 - Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett. Ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékkal való szennyeződéshez vezethetnek.
 - Ne használjon oldószereket és savakat a tisztításhoz.

Ha a szék bármely része megsérült, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és értesítse a hivatalos szervizt a hibáról.

Ajánlások

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléket sík és stabil felületre helyezte, hogy csökkentse a leesés és a sérülés kockázatát.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket.
3. Használja a készüléket a használati utasításban leírt rendeltetésszerűen.
4. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült.
5. Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtette, megsérült vagy vízbe esett.
6. Ne a kábelt húzza meg, amikor a dugót kiveszi a konnektorból.
7. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen időjárási hatásoknak.
8. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását. A készüléket leginkább nedves ruhával tisztítsa meg.
9. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

Biztonsági előírások

1. A készülék professzionális berendezés, amelyet kozmetikai szalonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése segít elkerülni a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megjelölt céloktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag az autorizált szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársa végezhet.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni. Gondoskodjon arról, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.
4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel: a) folyadék jutott a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.
5. Tilos bármilyen tárgyat a kábelekre helyezni. Ne helyezze el a készüléket olyan helyen,

ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Tilos idegen tárgyakat helyezni a készülék belsejébe. Amennyiben nem kívánt tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket tilos instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.
9. A készülék meghatározott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsoló gomb ismételt megnyomása előtt (a bekapcsolás és a kikapcsolás között és fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működésének, megrongálódásának, sőt akár kiégésének kockázata.

FIGYELEM

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – ezzel elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a készülék működésével nem ismerős személyek is használhatják, amennyiben megfelelő felügyeletet vagy utasítást kapnak a biztonságos és helyes használatról, és megértik az ezzel kapcsolatos veszélyeket.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.
4. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A készülék ártalmatlanítása



A környezet védelme érdekében, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és azokat a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyeire kell eljuttatni. Kövesse az ilyen típusú készülékek eldobására vonatkozó szabályokat, és ne dobja a háztartási hulladékba.

Élettartamuk végén ezek a készülékek továbbra is teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosítás céljából el kell juttatni a megfelelő gyűjtőpontokra vagy az ACTIVESHOP Sp. z o.o. céghez.

Tárolás és szállítás

A készüléket kizárólag $(-20\text{ °C}$ és $(+40\text{ °C}$ közötti hőmérsékleten szabad szállítani az eredeti csomagolásban. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet: $(+10\text{ °C}$ és $(+40\text{ °C}$ között. A tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad dobálni vagy leejteni, sem mechanikai rázkódásoknak vagy időjárási hatásoknak kitenni.