

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Sillon Lux 273b cu 3 motoare
CH-273E/ 148187



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Scanează pentru
diferit
limbi



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru viitor.

Scaunul electric de cosmetică Lux 273B este echipat cu 3 cilindri hidraulici comandați cu ajutorul unei telecomenzi cu fir.

Ușurința de utilizare și adaptarea la nevoile individuale facilitează semnificativ efectuarea diverselor

. Finisajul caracteristic și elegant, combinat cu simplitatea, face ca acest scaun să devină un element atractiv al oricărui cabinet specializat.

Date tehnice	
Tensiune de intrare	~230 V
Putere electrică	150 W
Frecvență nominală	50 Hz
Materialul tapițeriei	Piele sintetică
Comandă	Telecomandă cu fir
Sarcina maximă	140 kg

Structura scaunului

1. Tetieră
2. Orificiu în tetieră
3. Spătar
4. Cotieră
5. Scaun
6. Suport pentru picioare
7. Telecomandă cu fir
8. Capac din plastic



Montare

1. Montați tetiera conform imaginii de mai jos.




2. Montați cotierele - rabatați spătarul scaunului în poziție culcată (orizontală), apoi înșurubați cotiera în locul indicat, urmând ilustrațiile din imagini.

Pasul 1



Pasul 2

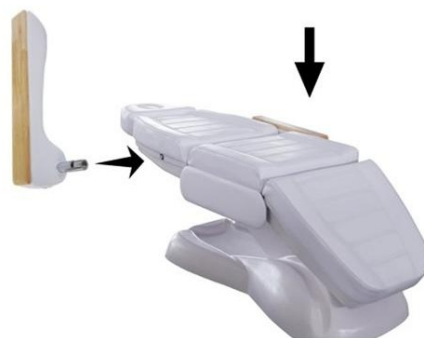

Pasul 3



Pasul 4



3. Conectați cablul de alimentare la curent.

Funcțiile telecomenzii

Pentru a regla scaunul în poziția dorită, țineți apăsat butonul corespunzător de pe telecomandă:



← Reglarea înclinării spătarului

← Reglarea înclinării suportului pentru picioare

← Reglarea înălțimii scaunului (în intervalul 65-82 cm)


Pentru un plus de confort, telecomanda poate fi agățată de suportul metalic situat în partea dreaptă a scaunului, astfel încât să o aveți întotdeauna la îndemână.



Funcții de reglare a fotoliului:

- Construcția permite rabatarea scaunului în poziție de culcare.
- Orificiu practic în tetieră, ascuns discret sub pernă.
- Cotiere mobile în intervalul de 180°.
- Tetieră extensibilă

Dimensiunile dispozitivului

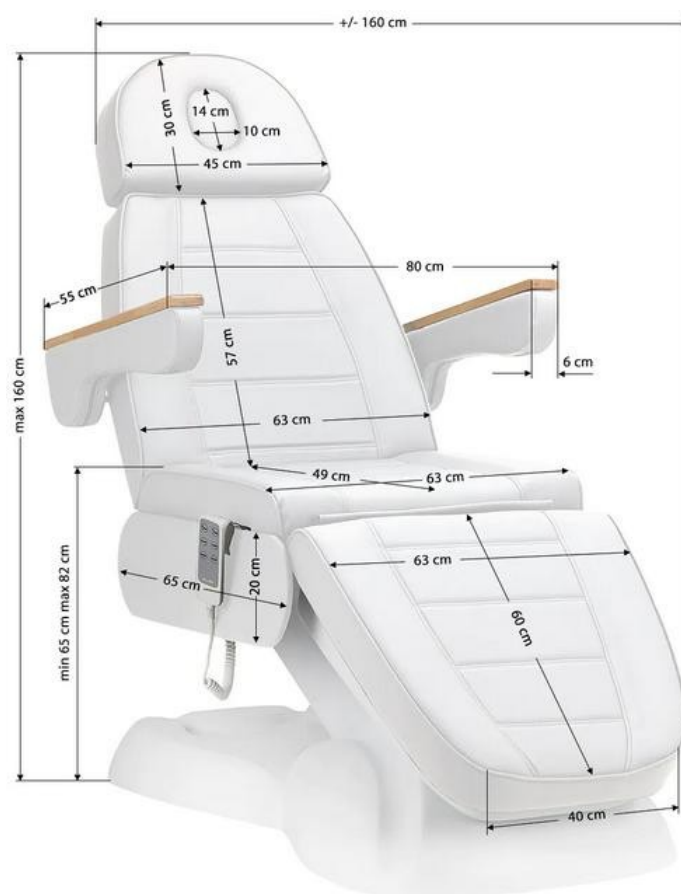

Fotoliul în poziție complet întinsă (șezlong) atinge o lungime de 207 cm.

Atenție

Sarcina maximă a scaunului: 140 kg.

Nu depășiți greutatea maximă a fotoliului și nu vă așezați pe cotiere.

Curățare și întreținere

Pentru a menține fotoliul în stare tehnică bună, a asigura o durată lungă de viață și funcționarea corectă a dispozitivului, recomandăm întreținerea regulată și respectarea următoarelor reguli de curățare.

Atenție: Înainte de a începe orice operațiune, opriți întotdeauna dispozitivul cu comutatorul principal și scoateți ștecherul din priză

- Curățarea suprafețelor din piele sintetică:
Ștergeți pielea cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită. Nu folosiți detergenți puternici, cum ar fi

solvenți, benzină și preparate pe bază de alcool. Puteți utiliza produse disponibile pe piață pentru îngrijirea pielii artificiale și să urmați instrucțiunile de pe ambalajul acestora.

Lăsați tapițeria scaunului să se usuce natural. Nu folosiți aparate de suflat pentru a usca suprafața. Nu folosiți blugi sau țesături colorate pentru a șterge aparatul, pentru a evita ca vopseaua acestora să pătrundă în suprafața scaunului.

- Curățarea suprafețelor metalice și din plastic
Ștergeți suprafețele cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită. Pentru curățarea locurilor greu accesibile sau a colțurilor, o periuță mică este foarte utilă. Nu folosiți o cantitate prea mare de lichid de curățare. Apoi dezinfecțați aparatul cu un lichid adecvat.
- Suprafețe din oțel inoxidabil
Cea mai bună metodă de curățare este folosirea unei soluții ușoare de detergent. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi folosiți pentru îndepărtarea petelor dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.
- Suprafețe metalice vopsite sau cromate
 - Nu folosiți jeturi de apă pentru curățare.
 - Nu curățați aparatul la temperaturi ridicate și umiditate ridicată a aerului. Nu expuneți aparatul la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
 - Nu utilizați solvenți și acizi pentru curățare.

Dacă vreo parte a fotoliului este deteriorată, opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priză și anunțați un service autorizat cu privire la defecțiune.

Recomandări

1. Asigurați-vă că ați instalat dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, pentru a reduce riscul de cădere și deteriorare.
2. Nu lăsați niciodată aparatul conectat la priză fără supraveghere.
3. Utilizați dispozitivul conform destinației descrise în manual.
4. Nu utilizați niciodată acest aparat dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau a căzut în apă.
6. Nu trageți direct de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
7. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Nu-l expune la intemperii.
8. Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie. Cel mai bine este să curățați aparatul cu o cârpă umedă.
9. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

Măsuri de siguranță

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri

în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a garanta durata de viață stabilită a aparatului, se recomandă să se respecte un interval de o minută înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea adecvată sau instruirea cu privire la utilizarea corectă și sigură a acestuia și să înțeleagă riscurile asociate.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



Pentru protejarea mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui tip de echipament și nu le aruncați în containerele pentru deșeuri menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-)20 °C și (+)40 °C, exclusiv în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+)10 °C și (+)40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, nu este permisă aruncarea sau scăparea aparatului, expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la factorii atmosferici