

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Elektrické kozmetické kreslo Sillon Lux 273b s 3 motormi
CH-273E/ 148187



Dovozca:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2026



Naskenujte
iný
jazyky



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Elektrické kozmetické kreslo Lux 273B je vybavené 3 pohonnými jednotkami ovládanými pomocou diaľkového ovládača na kábli.

Jednoduchá obsluha a prispôsobenie individuálnym potrebám výrazne uľahčujú vykonávanie rôznych procedúr. Charakteristické, elegantné vyhotovenie pri zachovaní jednoduchosti robí z tohto kresla atraktívny prvok každého špecializovaného salónu.

Technické údaje	
Vstupné napätie	~230 V
Elektrický príkon	150 W
Menovitá frekvencia	50 Hz
Materiál potahu	Syntetická koža
Ovládanie	Káblové diaľkové ovládanie
Maximálne zaťaženie	140 kg

Konštrukcia kresla

1. Opierka hlavy
2. Otvor v opierke hlavy
3. Operadlo
4. Podrúčka
5. Sedadlo
6. Opierka na nohy
7. Káblové diaľkové ovládanie
8. Plastový kryt



Montáž

1. Namontujte opierku hlavy podľa nižšie uvedenej fotografie.




2. Namontujte podrúčky – sklopte operadlo kresla do ležiacej (horizontálnej) polohy, potom pripevnite podrúčku na určené miesto podľa obrázkov na fotografiách.

Krok 1



Krok 2

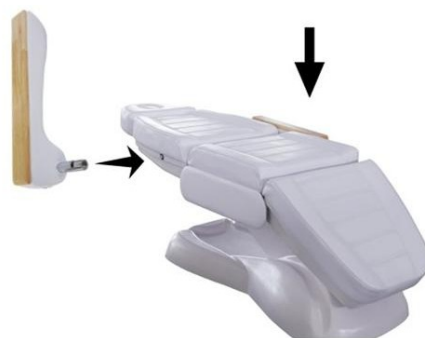

Krok 3



Krok 4



3. Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti.

Funkcie diaľkového ovládača

Ak chcete nastaviť kreslo do zvolenej polohy, podržte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači:



← Nastavenie sklonu operadla

← Nastavenie sklonu opierky nôh

← Nastavenie výšky kresla (v rozmedzí 65–82 cm)


Pre väčšie pohodlie môžete diaľkový ovládač zavesiť na kovový držiak umiestnený na pravej strane sedadla, aby ste ho mali vždy po ruke.



Funkcie nastavenia kresla:

- Konštrukcia umožňuje sklopiť kreslo do polohy na ležanie.
- Praktický otvor v opierke hlavy, diskretné skrytý pod vankúšom.
- Pohyblivé podrúčky v rozsahu 180°.
- Výsuvná opierka hlavy

Rozmery zariadenia

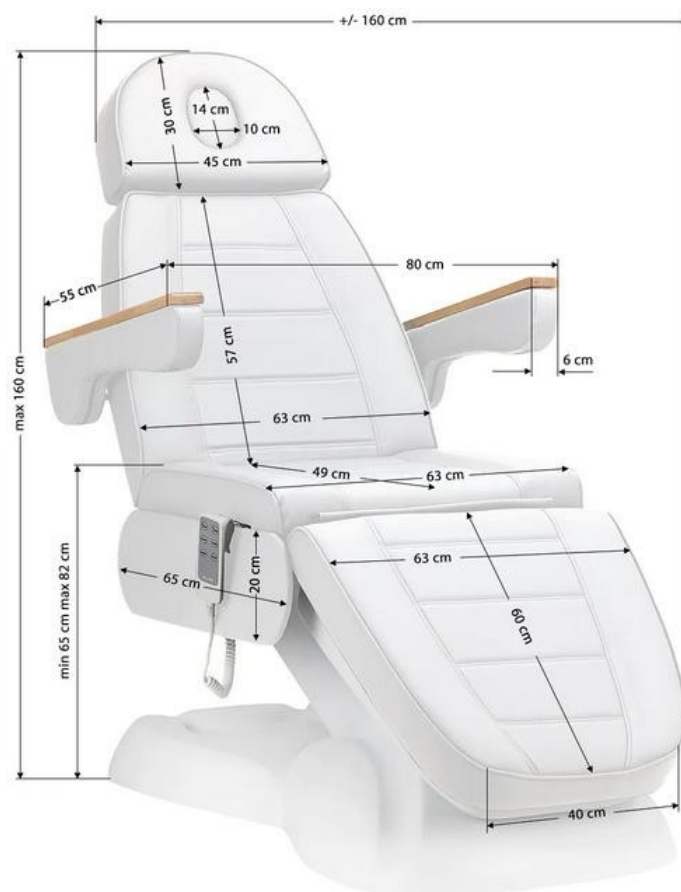

Kreslo v polohe úplne rozloženom (ležadlo) dosahuje dĺžku 207 cm.

Poznámka

Maximálne zaťaženie kresla: 140 kg.

Neprekračujte maximálne zaťaženie kresla a nesadajte si na podrúčky.

Čistenie a údržba

Aby ste udržali kreslo v dobrom technickom stave, zabezpečili jeho dlhú životnosť a správnu funkciu zariadenia, odporúčame pravidelnú údržbu a dodržiavanie nasledujúcich pravidiel čistenia.

Upozornenie: Pred začatím akýchkoľvek prác vždy vypnite zariadenie hlavným vypínačom a vytiahnite zástrčku zo zásuvky

- Čistenie povrchov zo syntetickej kože:
Kožu utrite mäkkou, suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ako sú

rozpúšťadlá, benzín a prípravky na báze alkoholu. Môžete použiť bežne dostupné produkty na starostlivosť o umelú kožu a postupovať podľa pokynov uvedených na obale.

Nechajte čalúnenie kresla prirodzene vyschnúť. Na sušenie povrchu nepoužívajte fúkače. Na utieranie zariadenia nepoužívajte džínsy ani farebné tkaniny, aby sa ich farba neprenikla do povrchu kresla.

- Čistenie kovových a plastových povrchov
Povrchy utrite mäkkou, suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko dostupných miest alebo rohov sa dobre hodí malá kefka. Na čistenie zariadenia nepoužívajte príliš veľké množstvo čistiaceho prostriedku. Následne zariadenie dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom.
- Povrchy z nehrdzavejúcej ocele
Najlepšie je čistiť jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Amoniak a väčšina rozpúšťadiel sa môžu použiť na odstránenie odolných škvŕn. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.
- Lakované alebo chrómované kovové povrchy
 - Na čistenie nepoužívajte vodné trysky.
 - Nečistite pri vysokej teplote a vysokej vlhkosti vzduchu. Nevystavujte zariadenie podmienkam, ktoré môžu viesť k znečisteniu tekutinou.
 - Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

Ak je akákoľvek časť kresla poškodená, vypnite zariadenie, odpojte napájací kábel zo zásuvky a informujte autorizovaný servis o poruche.

Odporúčania

1. Uistite sa, že ste zariadenie nainštalovali na rovnú a stabilnú plochu, aby ste obmedzili riziko pádu a poškodenia.
2. Nikdy nenechávajte pripojené zariadenie bez dozoru.
3. Používajte zariadenie v súlade s účelom uvedeným v návode.
4. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku.
5. Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo ak spadlo, bolo poškodené alebo sa dostalo do vody.
6. Neťahajte priamo za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
7. Produkt je určený výhradne na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov.
8. Zariadenie pravidelne čistite, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt. Najlepšie je zariadenie čistiť vlhkou handričkou.
9. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným kozmetickým personálom umožňuje predísť nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie sa nesmie inštalovať ani obsluhovať v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo s mokрыmi rukami. Je potrebné dbať na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel bol poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú klásať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie inštalovať na miestach,

kde by niekto mohol šliaapnuť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do vnútra zariadenia sa nesmú vkladať cudzie predmety. Ak sa do vnútra dostane nežiaduci predmet, vyberte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna funkcia zariadenia, jeho poškodenie alebo dokonca vznietenie.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami, ktoré nie sú oboznámené s fungovaním tohto zariadenia, ak je im zabezpečený primeraný dohľad alebo inštrukcia o správnom a bezpečnom používaní a ak sú im zrozumiteľné súvisiace riziká.
3. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
4. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú so zariadením hrať.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt so zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia zariadenia



V záujme ochrany životného prostredia je v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení potrebné vyradované elektrické zariadenia zberať oddelene a odovzdať ich do zberných miest pre vyradované elektronické a elektrické zariadenia. Je potrebné postupovať podľa pravidiel týkajúcich sa likvidácie tohto typu zariadení a nevyhadzujte ho do kontajnerov na domový odpad.

Na konci životnosti tieto zariadenia stále obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na recykláciu do príslušných zberných miest alebo spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladovanie a preprava

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–)20 °C do (+)40 °C výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetraných priestoroch pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 90 %. Prevádzková teplota je od (+)10 °C do (+)40 °C. Počas procesov skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom