ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun cosmetic Azzurro Special 152




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Str. Graniczna 8b, cl. DC2A 54-610
Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE

Prezentul manual conține informații detaliate privind utilizarea și întreținerea aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, citiți conținutul manualului atașat. Utilizați aparatul conform descrierii. Păstrați acest manual și asigurați-vă că toate persoanele care pot utiliza aparatul sunt familiarizate cu acesta.

Date tehnice:

Dimensiuni: 119 x 60 x 53 cm
Greutate: 14 kg
Sarcină maximă: 150 kg Reglarea înălțimii: 55 - 75 cm Reglarea spătarului înainte-înapoi: 0 - 5 cm Reglarea unghiului de înclinare: 10°

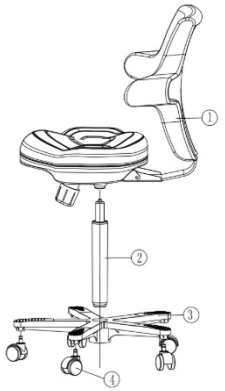

Construcție:

1. Spătarul și scaunul
2. Cilindru cu gaz
3. Baza scaunului
4. Rotițe

Asamblare:

1. La unele modele, spătarul și șezutul scaunului nu sunt asamblate împreună. În acest caz, introduceți spătarul în fixarea din șezut și strângeți-l cu cele 3 șuruburi incluse.
2. Montați roțile pe bază apăsându-le.
3. Introduceți cilindrul cu partea mai groasă în bază.
4. Așezați scaunul pe cilindru


Atenție. La unele modele, cilindrul hidraulic este protejat de un înveliș din plastic (la locul de îmbinare cu scaunul). Înainte de a monta scaunul, verificați dacă a fost îndepărtată protecția din plastic. În caz contrar, după asamblare nu va fi posibilă reglarea înălțimii.

Utilizare:

Reglarea pe verticală:


Pentru a coborî scaunul, apăsați maneta marcată în imagine, stând pe scaun sau aplicând o altă sarcină asupra acestuia.

Pentru a ridica scaunul, apăsați maneta marcată în imagine fără a exercita o presiune asupra scaunului.

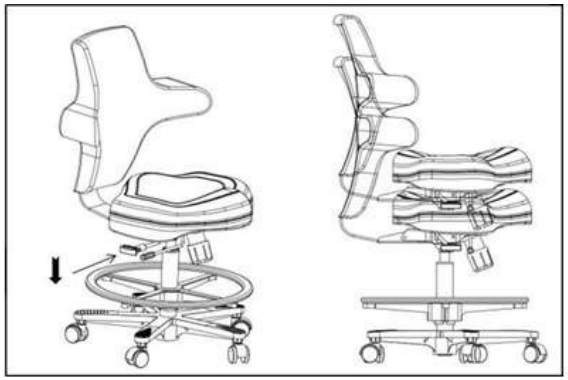


Reglarea înclinării spătarului:

Trageți capătul pârghiei în afară pentru a debloca reglarea înclinării. Apăsați spătarul și reglați-l în poziția dorită.
Apoi, împingeți capătul pârghiei în interior pentru a bloca poziția spătarului.
Atenție, având în vedere tipul , pentru a poziționa spătarul mai aproape de scaun – acesta trebuie mai întâi apăsat în direcția opusă (conform săgeții din ilustrația atașată.)

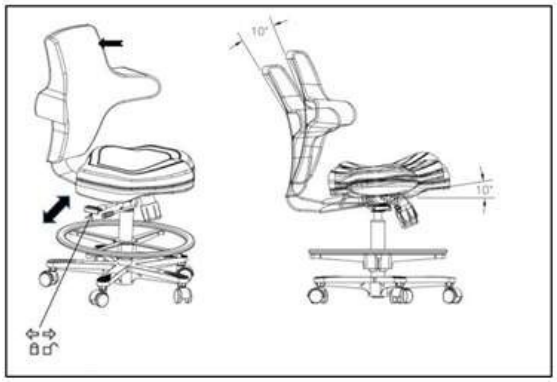

Reglarea orizontală a scaunului:

Pentru a deplasa scaunul înainte sau înapoi, ridicați în imagine, apoi deplasați scaunul în poziția dorită. După eliberarea manetei, scaunul va rămâne în poziția selectată.

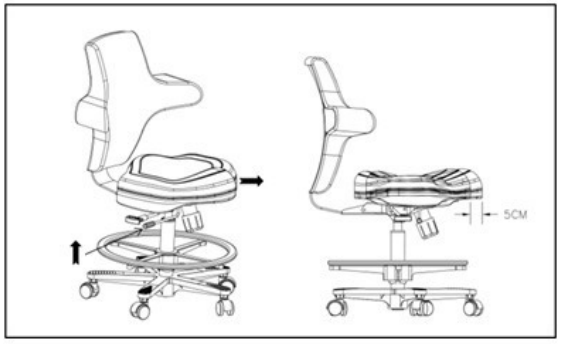

Recomandări:

1. Nu depășiți greutatea maximă recomandată a scaunului, depășirea acesteia poate provoca deteriorări permanente (max. 150 kg).
2. Nu utilizați produse care conțin substanțe corozive și coloranți, precum și agenți de curățare uleioși pentru scaun.
3. Produsele de curățare necorespunzătoare pot provoca deteriorarea materialului, coroziune sau alte fenomene.
4. Scaunul trebuie curățat regulat pentru a preveni depunerea permanentă a murdăriei. În cazul în care tapițeria este murdară, cea mai sigură metodă este utilizarea apei călduțe cu săpun.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Aparatul trebuie depozitat într-un spațiu bine ventilat, cu o umiditate relativă de maximum 75%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, aparatul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau la factorii atmosferici.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude – astfel încât niciun lichid să nu pătrundă în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
   a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare este deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată după ce ați terminat de utilizat aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. În cazul în care un obiect străin pătrunde în orificiu, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul. 8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a asigura durata de viață prevăzută a aparatului, se recomandă să se respecte un interval de o minută înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și cunoștințe privind echipamentul, cu condiția să li se asigure supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropierea acestuia se află copii sau persoane care nu dețin cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie predate la centrele de reciclare a materiilor prime, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Trebuie respectate normele privind de a arunca acest tip de echipamente. În scopul protejării mediului , în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. La sfârșitul duratei de viață, precum și echipamentele vechi conțin componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, dar pot fi predate și firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o.