ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Elektryczny fotel kosmetyczny SILLON Eclipse 4 sil.



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Scan for different languages


Wymiary:



Funkcje i cechy:

- Łatwa regulacja: Oparcie i siedzisko fotela kosmetycznego są łatwo regulowane za pomocą bocznego przycisku Effortless, co umożliwia wygodne dostosowanie pozycji klienta podczas zabiegu.
- Kompleksowa konstrukcja: Fotel składa się z sterownika, silników, elementów metalowych oraz skóry. Sterownik został zaprojektowany do połączenia z ręcznym panelem sterowania oraz czterema silnikami.
- Zintegrowana funkcjonalność: Zawiera cztery sekcje: regulację kąta oparcia, regulację kąta siedziska, regulację kąta podnóżka oraz regulację wysokości fotela — wszystko zintegrowane w jednej strukturze.
- Przyjazna obsługa: Fotel charakteryzuje się eleganckim i przyjaznym dla użytkownika designem, zapewniając prostą obsługę i komfort użytkowania.
- Wysoka stabilność: Fotel oferuje dużą stabilność i wysoki poziom bezpieczeństwa, bez zauważalnego chwiania się przy żadnym kącie ani wysokości.

Pilot sterujący:

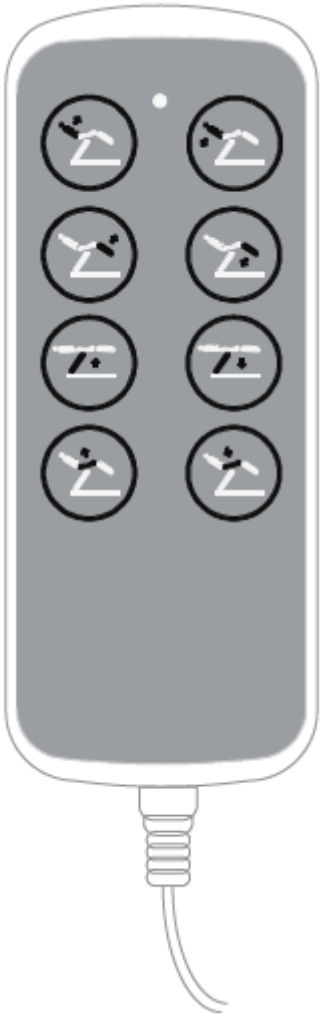

Naciśnij przycisk lub , aby sterować kątem podnoszenia oparcia fotela spa.

Naciśnij przycisk lub , aby sterować kątem podnoszenia podnóżka fotela spa.

Naciśnij przycisk lub , aby sterować podnoszeniem lub opuszczaniem całego fotela spa.

Naciśnij przycisk lub , aby sterować kątem nachylenia siedziska fotela spa.

Ostrzeżenie:

1. Podnóżek nie jest przeznaczony do podtrzymywania pełnego ciężaru osoby dorosłej.
2. Nie wolno siedzieć bezpośrednio na podłokietniku oraz podnóżku.
3. Upewnij się, że odległość między gniazdkami nie przekracza 2 metrów.

Uwaga!

- Ze względów bezpieczeństwa zawsze podłączaj przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem.
- Nie przywiązuj przewodu zasilającego do urządzenia. Podnoszenie lub pociągnie za przewód zasilający może spowodować jego zniszczenie. Upewnij się, że przewód zasilający można łatwo wyjąć w sytuacji awaryjnej.
- Przed przeniesieniem elektrycznego fotela kosmetycznego należy wyjąć przewód zasilający, aby nie utknął on pomiędzy jakimiś częściami fotela.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast odłącz przewód, nie używaj fotela i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Używaj tylko oryginalnego przewodu zasilającego.
- Nie pozwól, aby osoba, która nie wykonuje zabiegu sterowała pilotem sterującym.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod fotelem.
- Upewnij się, że wokół fotela jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że wokół fotela nie znajdują się żadne ostre lub szkodliwe przedmioty, które mogłyby zniszczyć urządzenie.
- Nie modyfikuj samodzielnie urządzenia. Jeśli fotel nie działa prawidłowo, przestań go używać i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia:
Odłącz urządzenie do prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
Aby utrzymać powierzchnię fotela w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić. Pamiętaj, aby czyścić i dezynfekować fotel po każdym użyciu. Zaleca się wykonać dokładną dezynfekcję raz w miesiącu.

I Powierzchnie metalowe i plastikowe
Aby wyczyścić metalowe i plastikowe powierzchnie oraz elementy sterujące przetrzyj je wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.

II Powierzchnie ze stali nierdzewnej
Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Amoniak i większość rozpuszczalników mogą być stosowane do usuwania trudnych plam. Unikaj roztworów na bazie chloru.

III Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe
Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne) do czyszczenia.
Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza, nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia cieczą.
Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

IV Powierzchnia fotela
- Wytrzyj powierzchnię fotela równomiernie specjalnym środkiem do czyszczenia skóry, a następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką.

Konserwacja
Przed konserwacją urządzenia należy odłączyć je od prądu.
1. Naprawy powinny być wykonywane przez doświadczony i upoważniony przez producenta personel. Naprawa przez nieautoryzowany personel może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
3. Nie używaj elektrycznego fotela kosmetycznego ani akcesoriów, jeśli nie działają prawidłowo.
4. Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane.

Środki utrzymania
Sprawdzaj elementy sterujące i ich okablowanie raz w tygodniu. Sprawdzaj stan i funkcję, następujących rzeczy co najmniej raz na sześć miesięcy:
1. Przewód zasilający i jego mocowanie
2. Okablowanie silnika
3. Skrzynka sterownicza i jej okablowanie
4. Czy akcesoria są zamocowane
5. Normalne działanie systemu blokującego

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek wady, zaprzestań używania fotela i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Tylko doświadczony lub autoryzowany personel może otworzyć lub wymienić siłownik / jednostkę sterującą.
Jeśli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, odłącz przewód zasilający i przestań go używać. Następnie powiadom serwis.

Dane techniczne:

- Wymiary fotela: 1930 × 820 × 670W~870 (mm)
- Kąt regulacji oparcia: maksymalnie około 85°
- Kąt nachylenia siedziska: maksymalnie około 12°
- Kąt regulacji podnóżka: maksymalnie około 90°
- Waga netto: 96 kg
- Waga brutto: 110 kg
- Maksymalne obciążenie: 200 kg (przy normalnym użytkowaniu)
- Zasilanie: AC 100–120 V, 50 Hz/60 Hz lub AC 220–240 V, 50 Hz/60 Hz
- Maksymalna moc: 300 W

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Po kliknięciu dowolnego przycisku fotel nie reaguje	a) Funkcja naciśniętego przycisku została przełączona na wartość skrajną b) Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona c) Problem jakościowy panelu sterowania ręcznego	a) Spróbuj nacisnąć inne przyciski b) Odłącz i ponownie podłącz wtyczkę zasilania c) Wymień panel sterowania ręcznego
Dziwny dźwięk i drgania podczas podnoszenia i opuszczania fotela.	a) Śruby są poluzowane b) Elementy obrotowe nie są wystarczająco nasmarowane c) Problem jakościowy silnika	a) Dokręć wszystkie śruby b) Dodaj trochę smaru c) Wymień silnik

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w

oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.