ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Ultrahelipuhasti ACDS-300




Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Tehnilised andmed:

Pinge	220 - 240 V 50Hz
Võimsus	60 W
Vibratsiooni sagedus	42 kHz
Mõõtmed	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Konteineri mõõtmed	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Mahuti mahutavus	800 ml
Minimaalne vedeliku tase	200 ml
Maksimaalne vedeliku tase	650 ml
Kaal	1,27 kg
Taimer	900 - 600 s

- Enne täitmist tõmmake seade vooluvõrgust välja. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
- Ärge täitke paaki abrasiivsete või söövitavate kemikaalidega. See võib põhjustada selle lekkimise, mille tagajärjel võib tekkida kahju.
- Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
- Hoidke pesumasinat turvalises, kuivas ja otsese päikesevalguse eest varjatud kohas.
- Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
- Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
- Tõmmake pesumasin pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilööki.
- Vesi tuleb valada välja pesumasinale märgitud noolega tähistatud koha kaudu.

Pesuri ehitus ja tarvikud:

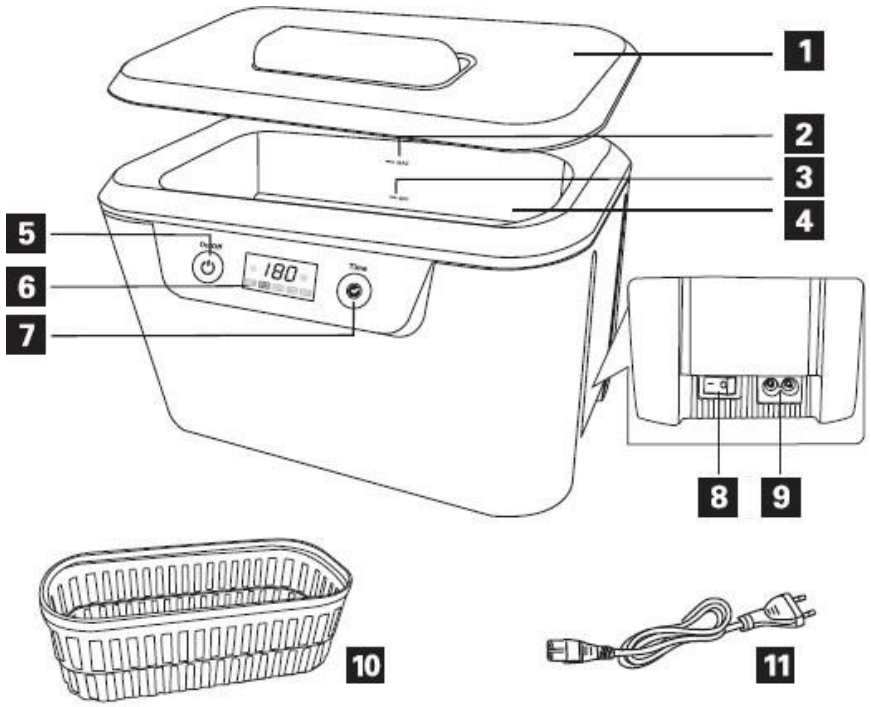

1. Kaane
2. Maksimaalse vedeliku taseme joon
3. Minimaalse vedeliku taseme joon
4. Paak
5. Sisse/välja lüliti
6. Aja näidik
7. Režiimi seadistamise klahv
8. Toitelüliti
9. Toitejuhtme pesa 10.Basket (valikuline)
11.Toitejuhe

HOIUSTAMINE JA KÄSITSEMINE



1. Ärge lülitage pesumasinat sisse, kui selles ei ole vett. Pesumasina sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva tööga üle. Pärast 30 minutit kestnud pidevat tööd jätke pesumasin veel 10 minutiks seisma.
3. Ärge jätke vett püsivalt pesumasinasse. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada.
4. Hoolitsege pesumasina väliskülje eest. Pühkige järelejäänud vesi või lahus kohe ära. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.

KASUTUSJUHEND

1. Eemaldage kaas. Asetage tooted korvi ja seejärel pesumasina paaki.
   Teravate esemete puhul, mis võivad pesumasinat kahjustada, kasutage kindlasti korvi. Pidage ka meeles, et korv neelab 30-40% ultrahelipesuri energiast.

2. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset.

3. Pange kaas peale ja ühendage pesumasin seejärel vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse 180.
   See on pesumasina vaikimisi pesuaeg (antud sekundites).

4. Seadistage valitud aeg, kasutades aja seadistamise klahvi. Võimalikud valikud 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Lülitage pesumasin lülitiga sisse. Puhastusprotsess algab. Aeg loeb tagasi 0-ni.

6. Kui ekraanile ilmub null, peatub pesumasin automaatselt.

7. Kui soovite puhastamise enneaegselt lõpetada, vajutage lülitit. Kui teil on vaja tsüklit korrata või puhastusaega pikendada, vajutage aja seadmise nuppu, valige sobiv aeg ja vajutage lülitit, et seade uuesti käivitada.

8. Tõmmake seade pärast lõpetamist vooluvõrgust välja, pühkige seade kuivaks.

9. Säilitage kuivas ja jahedas kohas.

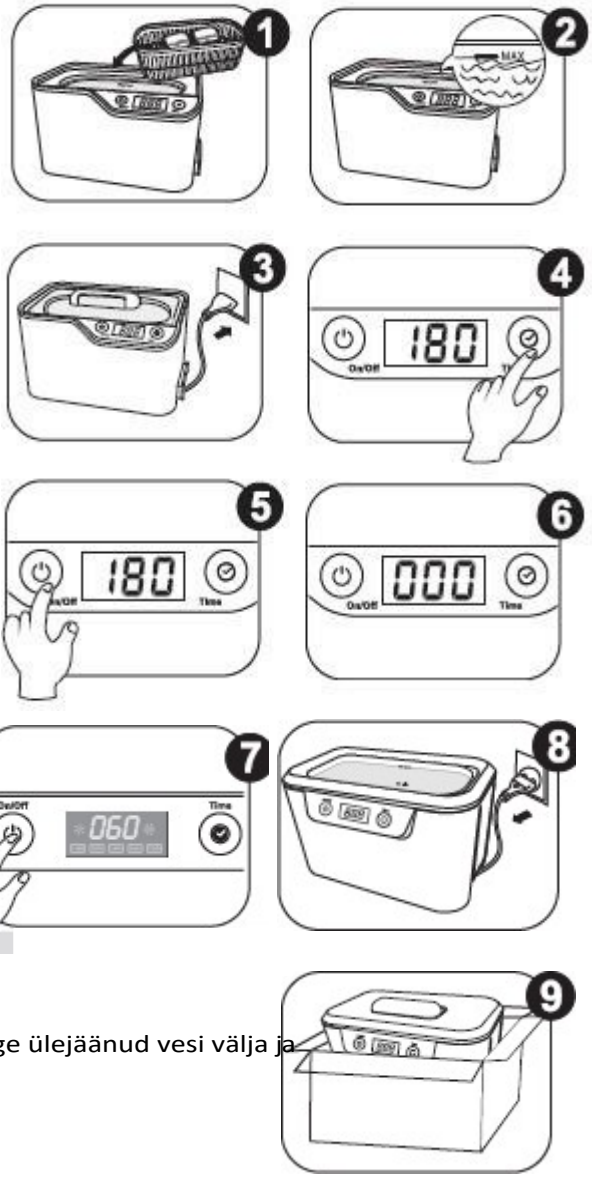

valage ülejäänud vesi välja ja

PUHASTUSMEETODID



1. Tavaline pesemine.

Kasutage vett vastavalt kasutusjuhendile. Valage vesi välja, kui olete lõpetanud.



2. Pesemine lahuses

Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitustele. Olge ettevaatlik, et mitte ületada lahuse kontsentratsiooni. See võib kahjustada pesumasina tihendeid, mille tagajärjel tekib oht, et elektroonikakomponendid võivad üleujutada. Kui olete lõpetanud, täitke pesumasin veega, lülitage see 90 sekundiks sisse ja seejärel valage jäägid pesumasinast välja. See hoiab ära pesumasina kahjustused, mis tulenevad pikast kokkupuutest kemikaalidega.



3. Vahepealne puhastamine

Kui pesete esemeid, mis vajavad erilahuseid, on soovitatav panna need kõigepealt konteinerisse ja seejärel pesumasina paaki. Seejärel valage sisse vesi ja puhastuslahus, mis ei ületa maksimaalset vedelikutaset. Ühendage seade vooluvõrku, valige tööaeg (soovitatav on 10 minutit) ja vajutage käivitamiseks lülitit.

LISATARVIKUTE KASUTUSJUHEND



Korv sobib kõige paremini väikeste esemete puhastamiseks. Asetage esemed korvi ja seejärel sisestage see pesumasina paaki. Püüdke tagada, et esemed ei puutuks üksteisega kokku.


OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme käsitsemine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge Activeshop Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teeninduskeskuse poole:
    a) (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetaks.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE

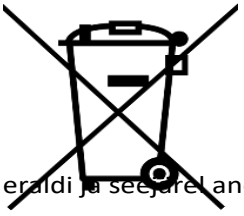

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmeid koguda eraldi ja seejärel anda üle kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need anda üle järgmistele asutustele

asjakohastele kogumispunktidele, samuti võib neid üle anda Activeshop Sp. z o.o.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.