ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Poltrona podologica idraulica Azzurro 713A




Scansione per diverse lingue

CE


Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Dimensioni della sedia:

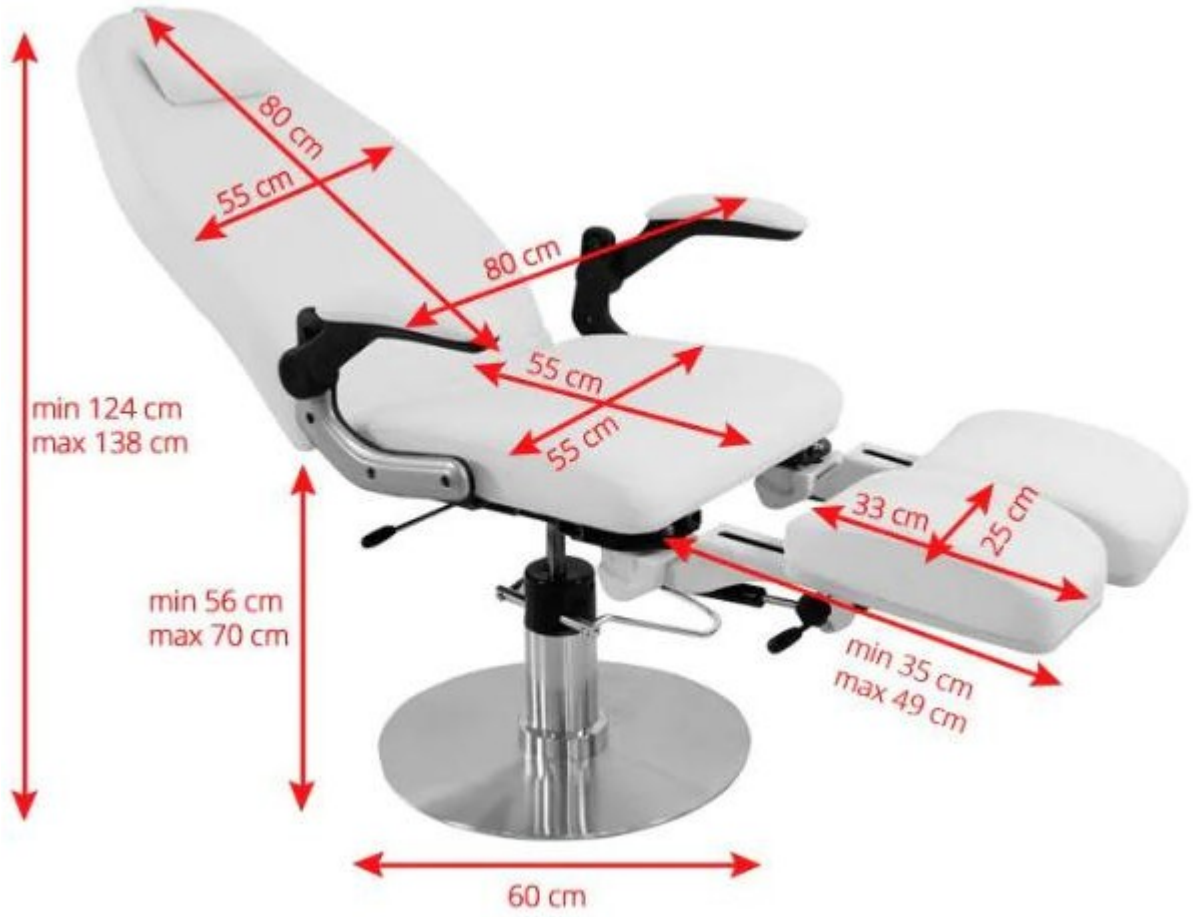


Montaggio:


1. Sollevare la leva dell'attuatore fino alla posizione più alta e poi posizionarla sull'asta dell'attuatore come mostrato.

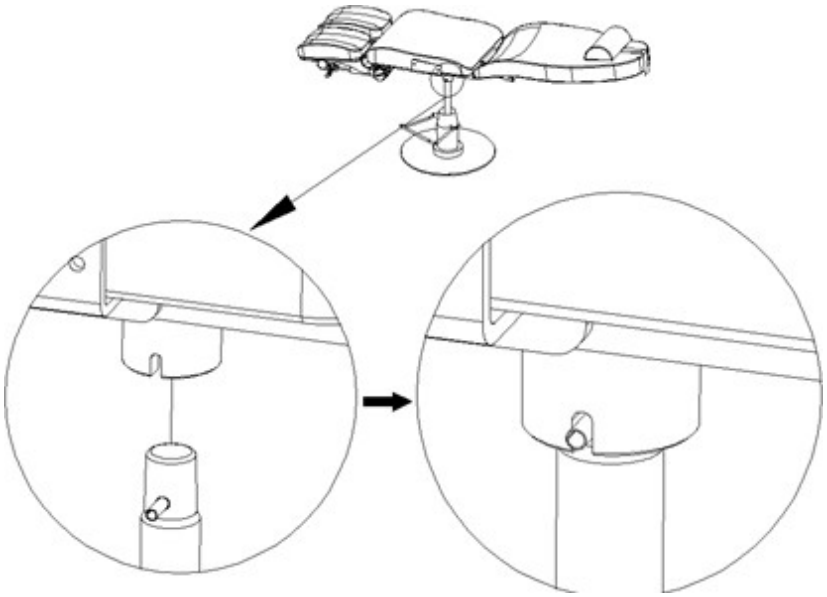

2. Allineare la barra dello schienale con il foro dell'attuatore. Inserire il bullone come mostrato, quindi fissarlo con il morsetto.

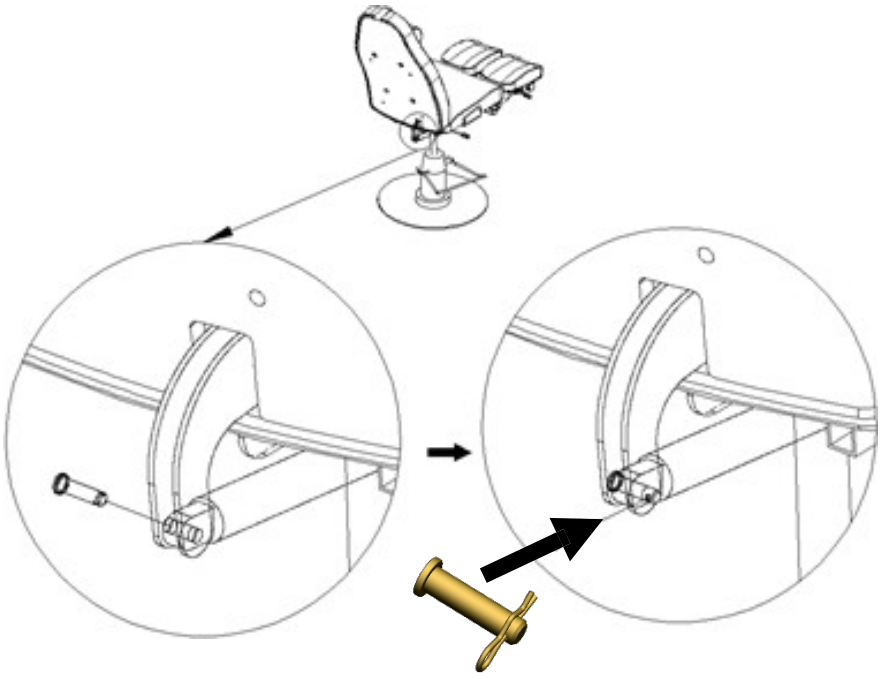


3. Montare i braccioli utilizzando le viti come mostrato nell'illustrazione.

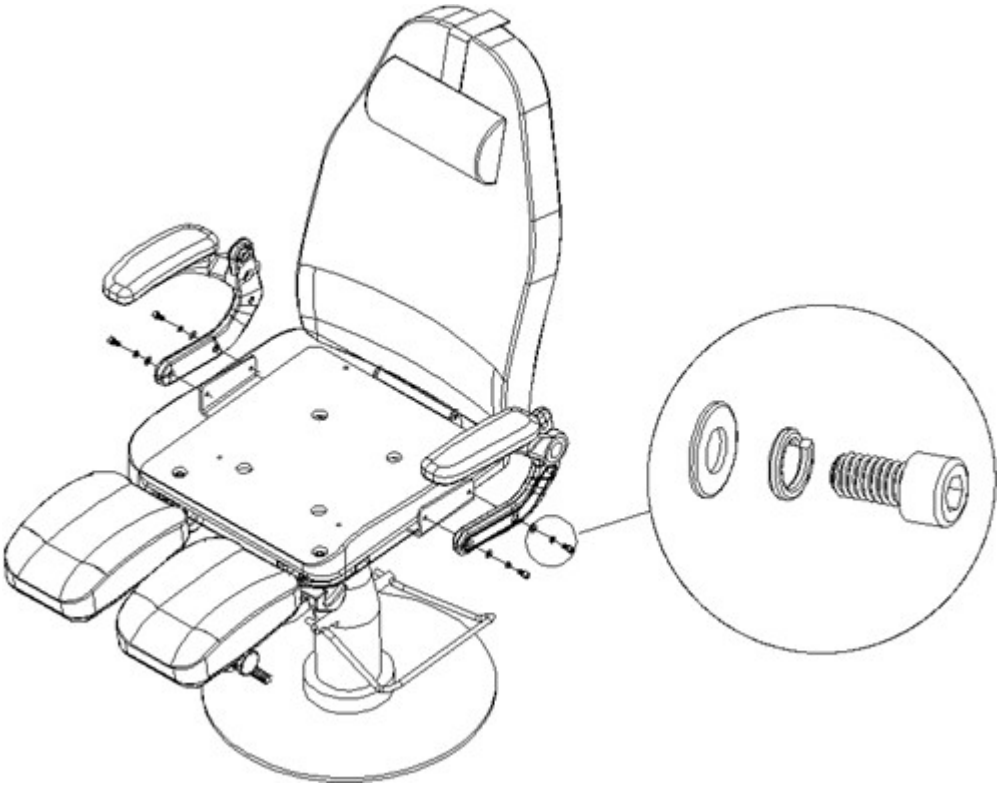


Funzioni:

1. L'altezza del sedile può essere regolata con la leva. Alzando la leva si ottiene
   Bloccando la rotazione del sedile, premendo la leva si abbassa il sedile.

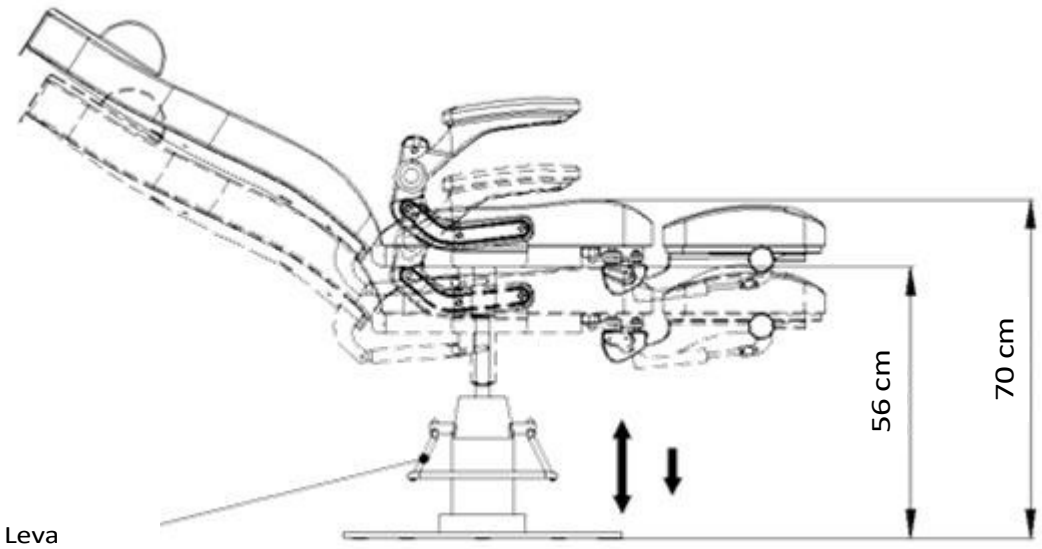

Leva


2. Per inclinare lo schienale, premere la leva e appoggiarsi all'indietro: lo schienale si inclinerà all'angolo desiderato.
   L'inclinazione massima dello schienale è di 45 gradi.

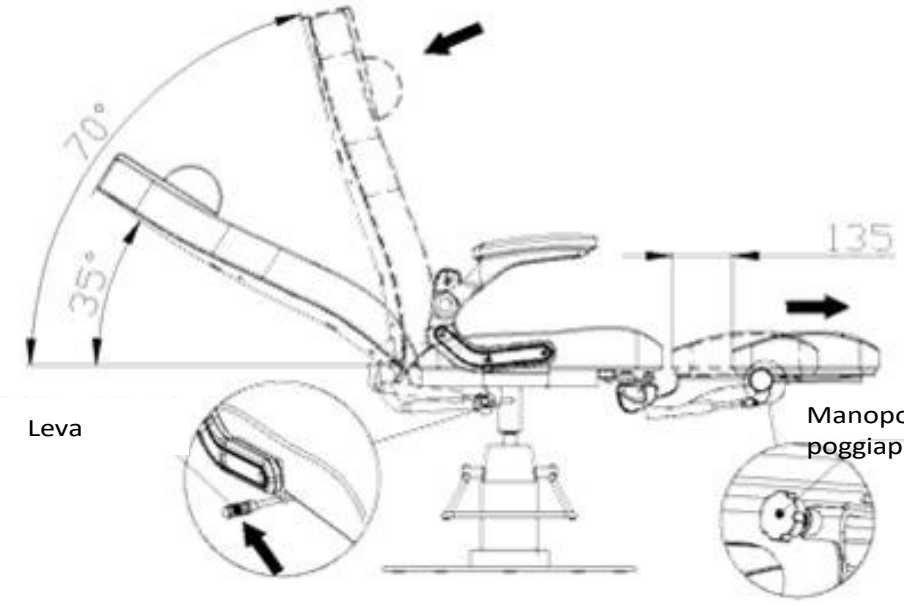

Leva


Manopola di regolazione del poggiapiedi

3. Il poggiapiedi può essere bloccato in posizione di 30°, 60° o 90°.

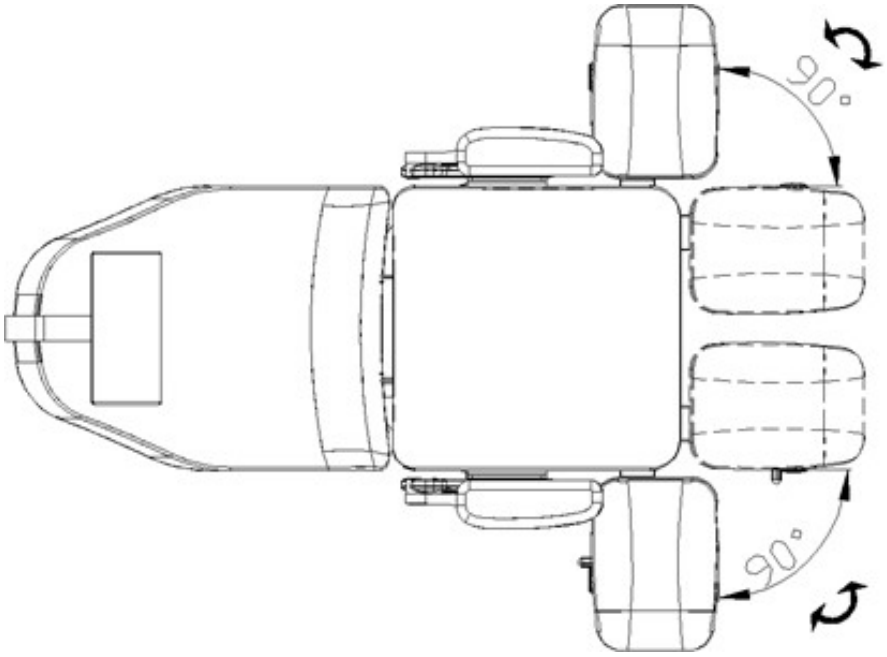

4. a) Utilizzare la manopola e contemporaneamente premere il poggiapiedi per inclinarlo all'angolo desiderato. Campo di inclinazione: fino a 90°.

   b) Il bracciolo può essere regolato da orizzontale a verticale.

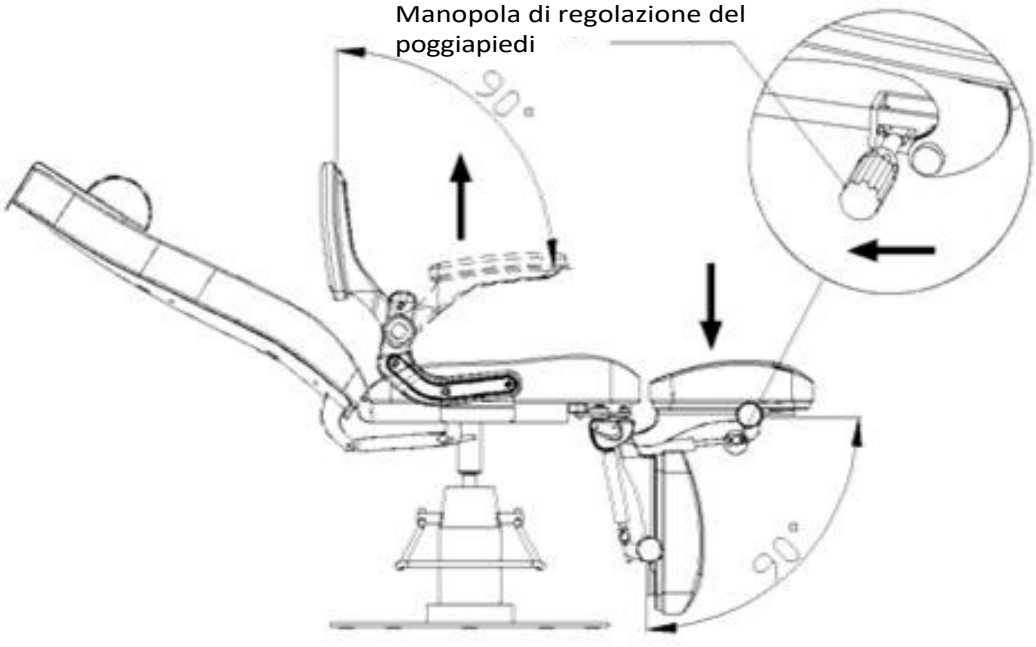

Attenzione.

- Assicurarsi che i bambini non giochino vicino al sedile senza la supervisione di un adulto.
- Non infilare mani o piedi nelle fessure del sedile.
- Non esporre il sedile alla luce diretta del sole.
- Non spingere o tirare la sedia su pavimenti irregolari.
- Non stare in piedi sulla sedia.
- La sedia non deve essere utilizzata da persone con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali.

Pulizia e manutenzione:
- Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la sedia dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica
- Per pulire le superfici in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree difficili da raggiungere o gli angoli con una piccola spazzola.
- Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox
- Il migliore . pulizia con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte deila maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate
- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate. Non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile
- Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per la pelle e poi passarlo con un panno pulito e morbido.

Manutenzione

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'unità per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchio e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Dati tecnici:

- Carico massimo 150 kg
- Peso 56,5 kg
- Pelle PU/PVC

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate,
in modo che i liquidi non possano penetrare nell'unità.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con del liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta
si possono verificare danni.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta per apparecchiature usate.
consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.
Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.