ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

Hydraulischer Fußpflegestuhl Azzurro 713A




Scan für verschiedene Sprachen

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025


CE

Abmessungen des Stuhls:

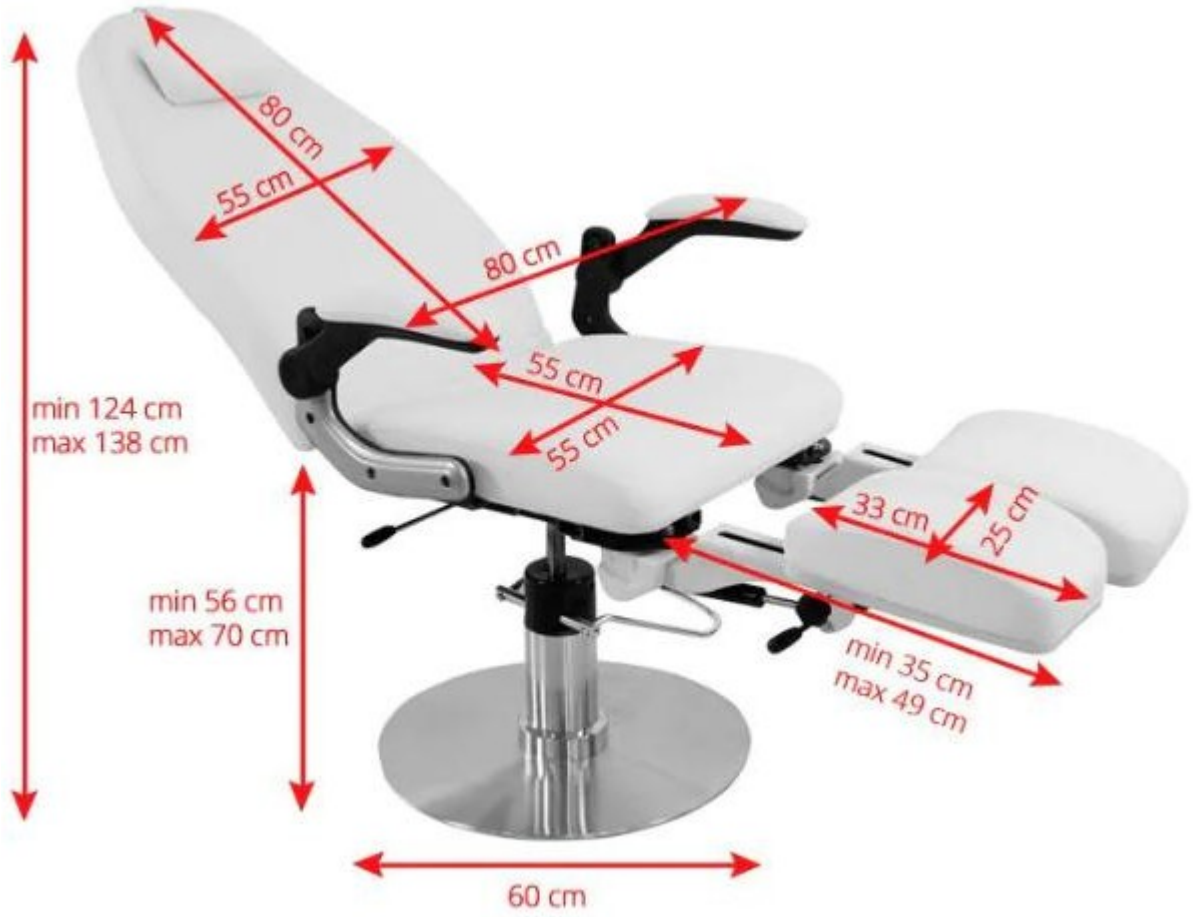


Zusammenbau:


1. Heben Sie den Betätigungshebel in die höchste Position und setzen Sie ihn dann wie abgebildet auf die Betätigungsstange.

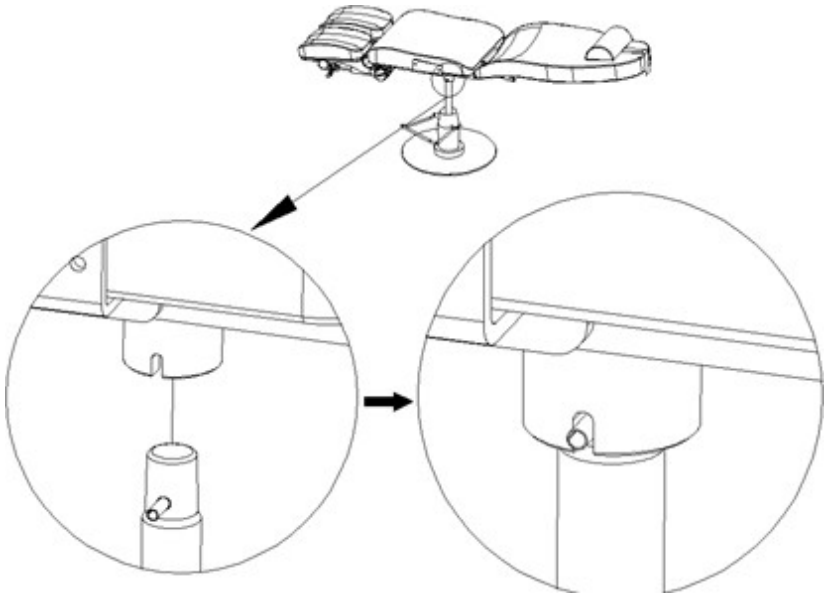

2. Richten Sie die Rückenlehnenstange mit dem Loch im Aktuator aus. Setzen Sie die Schraube wie abgebildet ein und befestigen Sie sie mit der Klemme.

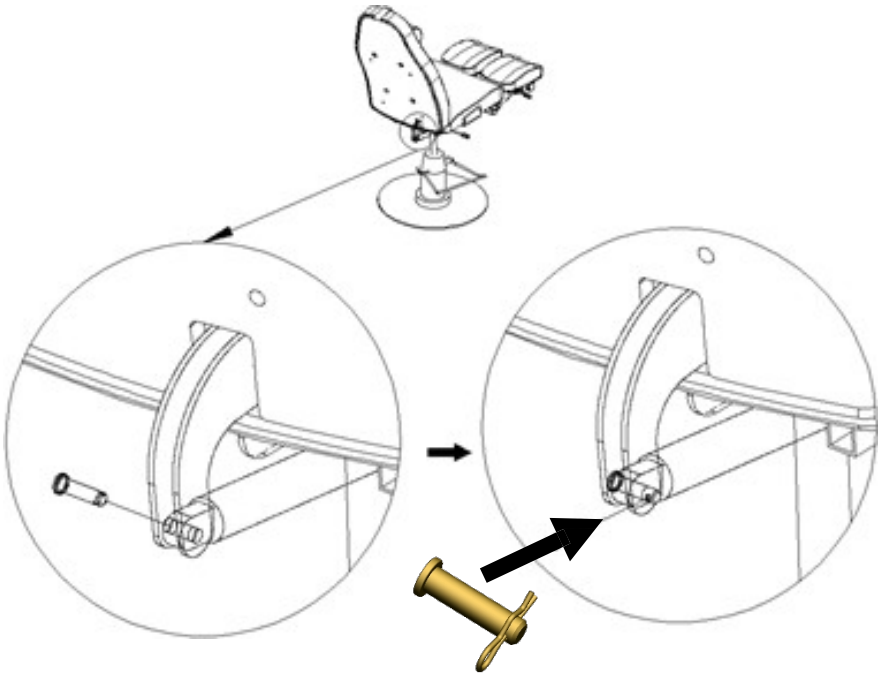


3. Montieren Sie die Armlehnen mit den Schrauben wie in der Abbildung gezeigt.

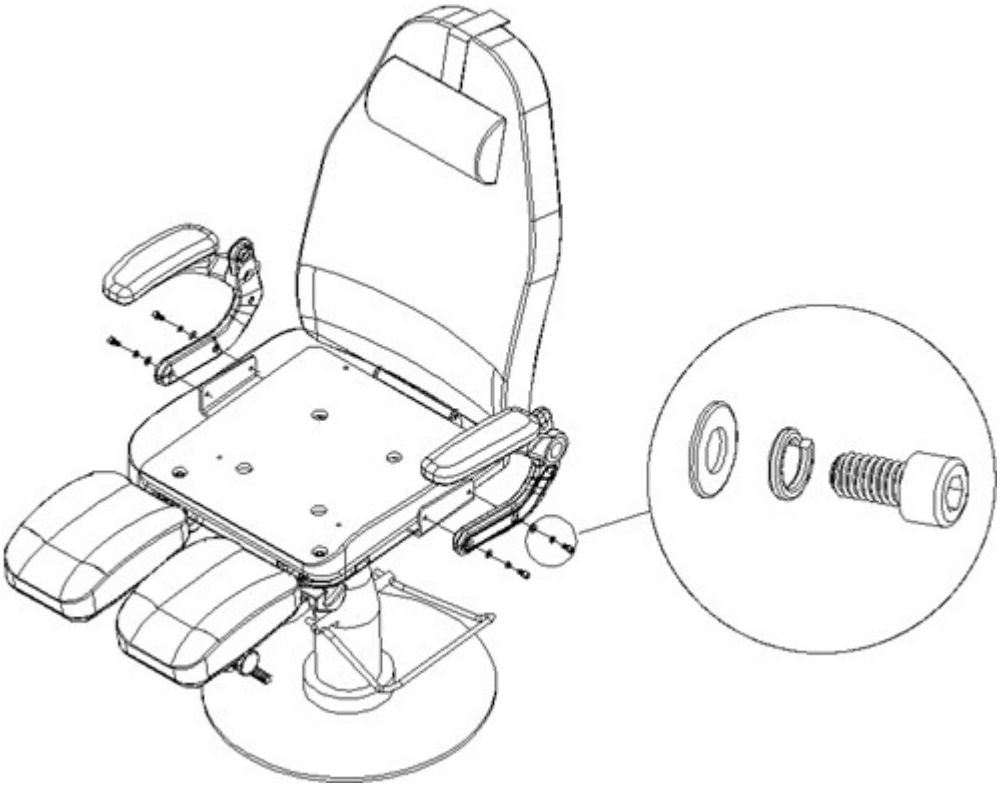


Funktionen:


1. Die Sitzhöhe kann mit dem Hebel eingestellt werden. Das Anheben des Hebels bewirkt
   Durch Drücken des Hebels wird die Drehung des Sitzes blockiert und der Sitz abgesenkt.

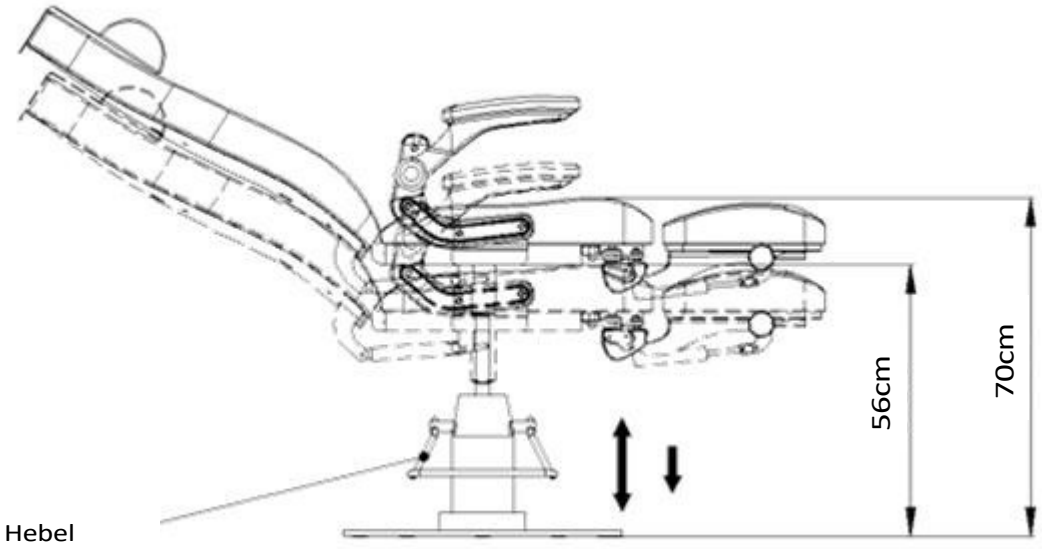

2. Um die Rückenlehne zu kippen, drücken Sie den Hebel und lehnen Sie sich zurück, um die Rückenlehne in einen geeigneten Winkel zu kippen.
   Die maximale Neigung der Rückenlehne beträgt 45 Grad.

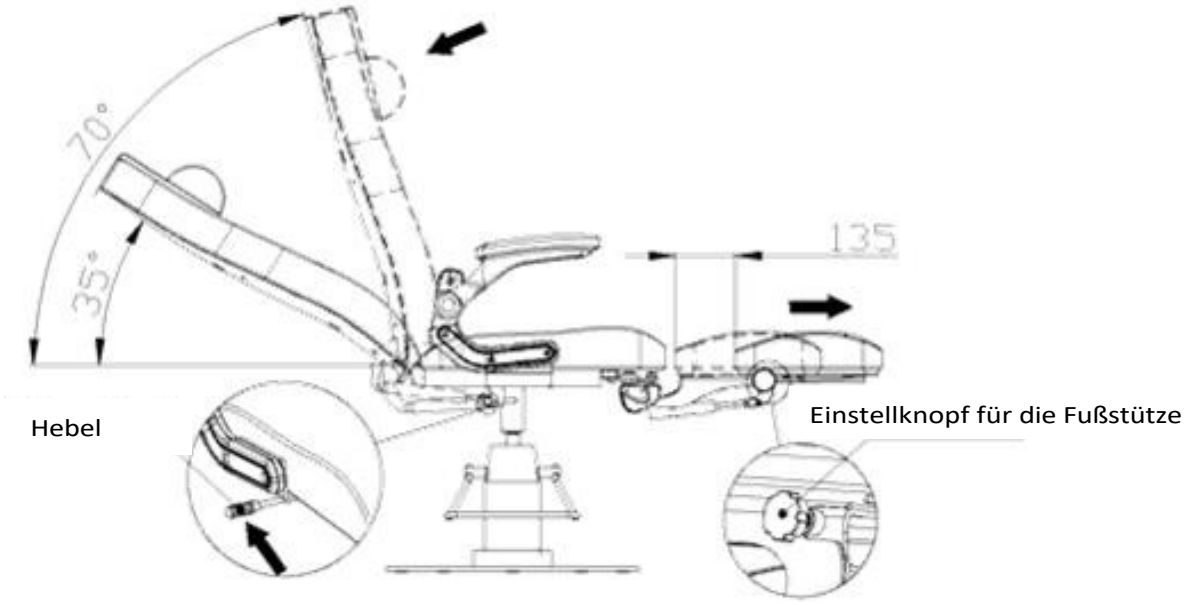


3. Die Fußstütze kann in einer Position von 30°, 60° oder 90° arretiert werden.

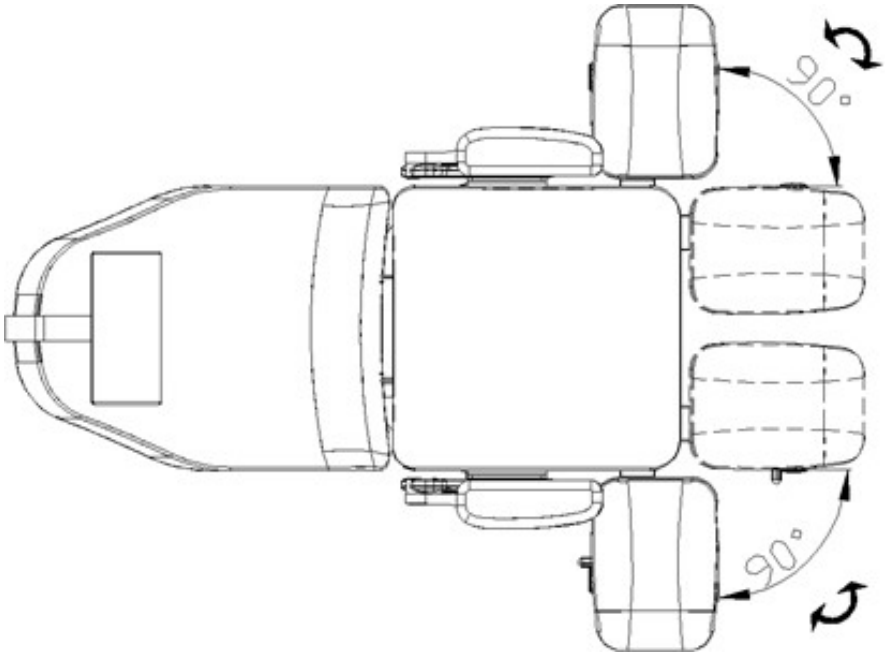

4. a) Verwenden Sie den Drehknopf und drücken Sie gleichzeitig auf die Fußstütze, um sie in den gewünschten Winkel zu kippen. Neigungsbereich: bis zu 90°.

   b) Die Armlehne kann von der horizontalen in die vertikale Position verstellt werden.

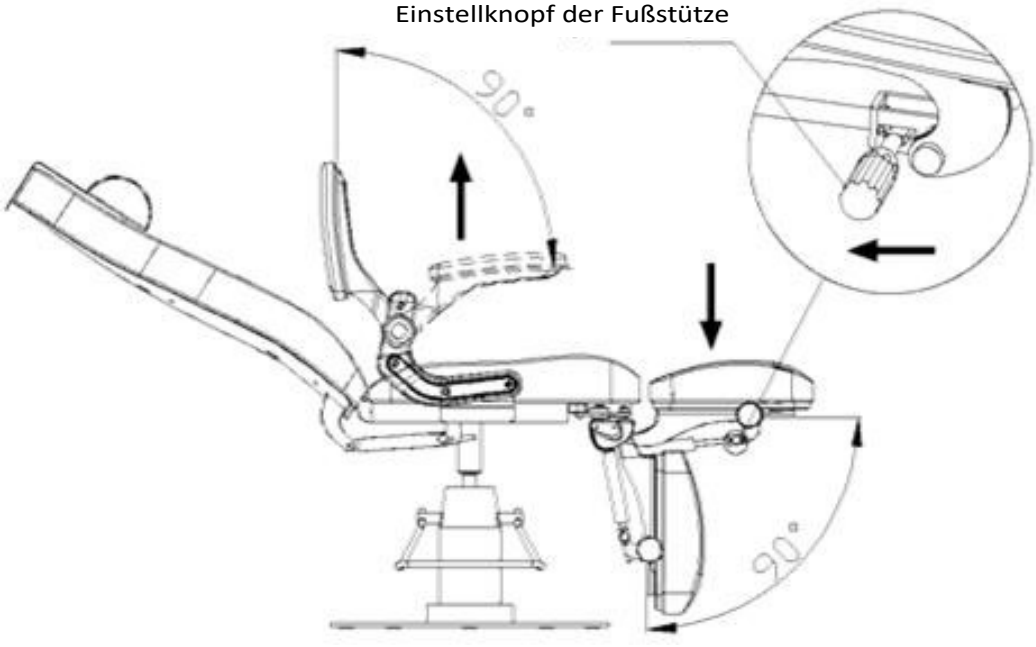

Vorsicht!

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe des Sitzes spielen.
- Stecken Sie Ihre Hand oder Ihren Fuß nicht in die Ritzen des Sitzes.
- Setzen Sie den Sitz nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Schieben oder ziehen Sie den Stuhl nicht auf unebenen Böden.
- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl.
- Der Stuhl sollte nicht von Personen mit körperlichen Einschränkungen, sensorischen Beeinträchtigungen oder geistigen Problemen benutzt werden.

Reinigung und Pflege:

- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Z u s t a n d zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem feuchten Tuch ab, um sie zu reinigen. Zum Reinigen schwer zugängliche Stellen oder Ecken mit einer kleinen Bürste.
- Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Das Beste . Reinigung mit einer milden Waschmittellösung. Ammoniak und Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III. Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Wasserstrahl (Brause, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren zur Reinigung.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzoberfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Wartung

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wenn Sie Mängel feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb / die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Technische Daten:

- Maximale Belastung 150kg
- Gewicht 56,5 kg
- PU/PVC-Leder

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - also,

so dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst ACTIV Tomasz Pacholczyk, wenn: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch abgibt, raucht oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt.

Beschädigungen auftreten können.

9. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut betätigt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte autorisierten Kundendienst, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.