ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Sillón de podología hidráulico Azzurro 713A




Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Escanear para diferentes idiomas


CE

Dimensiones de la silla:

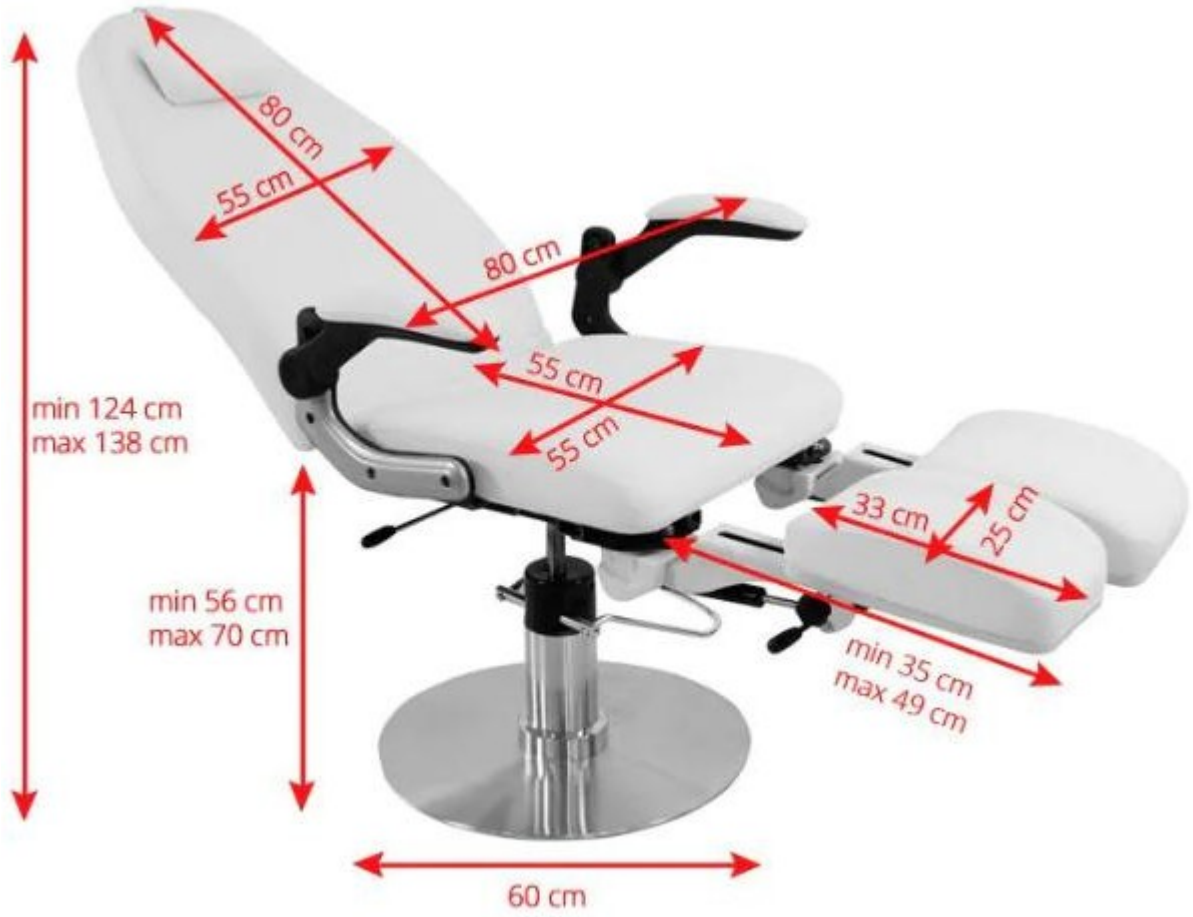


Montaje:


1. Suba la palanca del accionamiento a la posición más alta y, a continuación, asiéntela en el vástago del accionamiento, tal como se muestra en la ilustración.

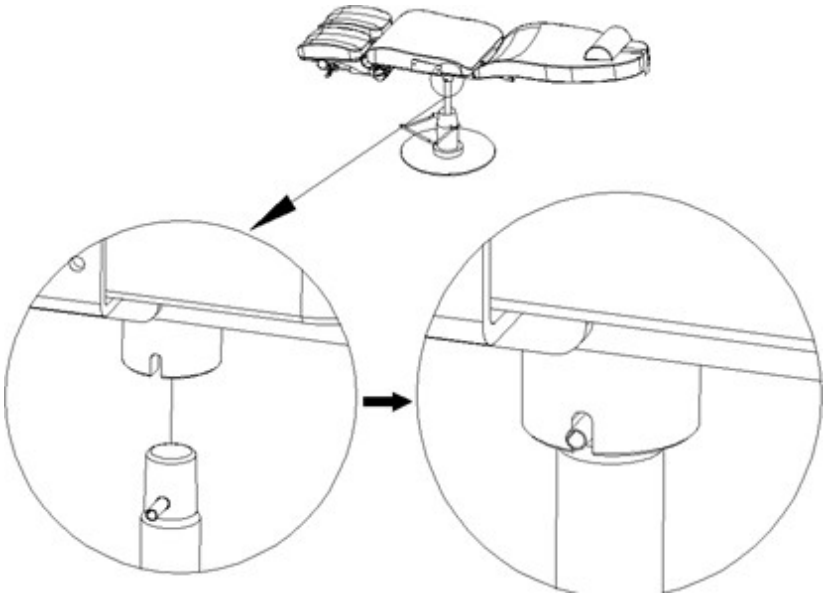

2. Alinee la barra del respaldo con el orificio del actuador. Inserte el perno tal y como se muestra y fíjelo con la abrazadera.

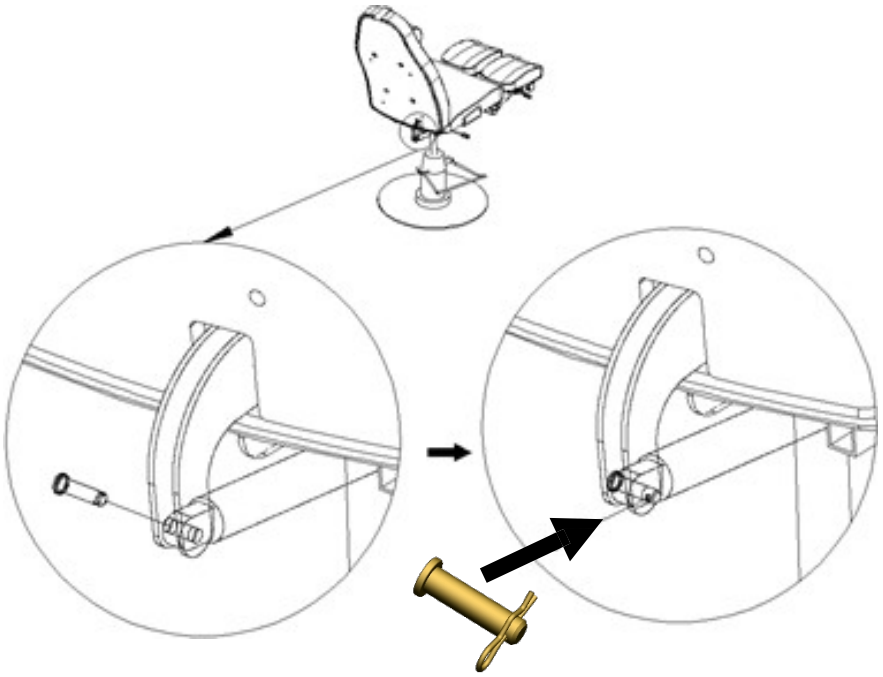


3. Monte los reposabrazos utilizando los tornillos como se muestra en la ilustración.

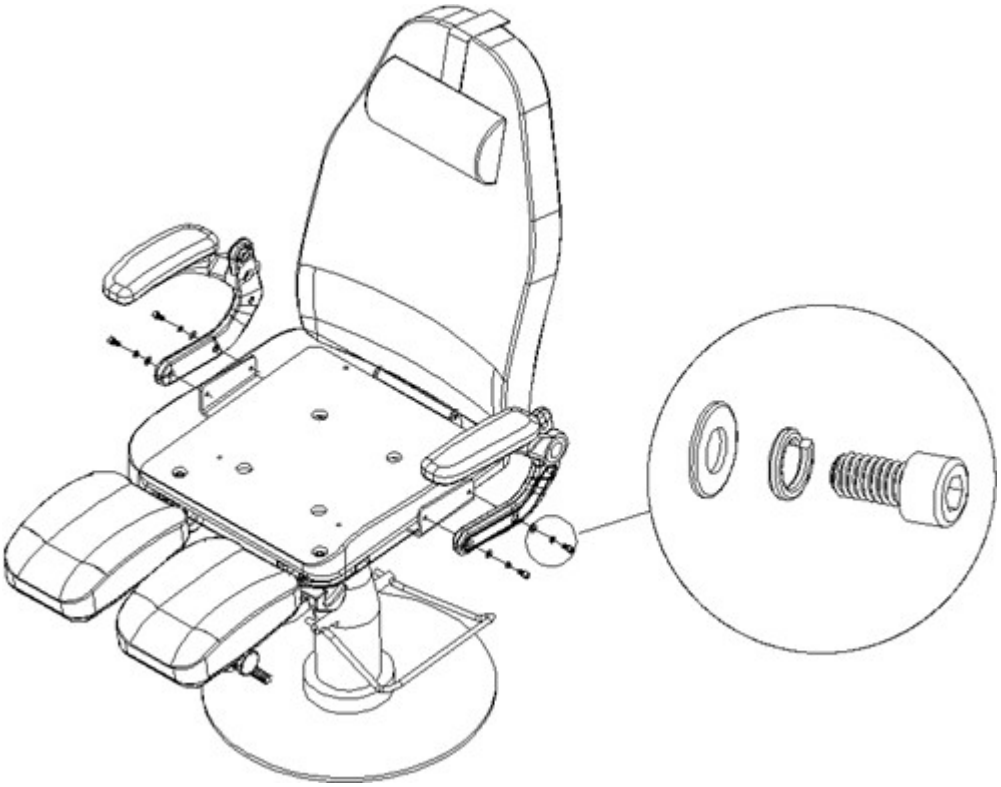


Funciones:


1. La altura del asiento puede ajustarse mediante la p a l a n c a . Al levantar la palanca se produce Bloqueando la rotación del asiento, presionando la palanca se baja el asiento.

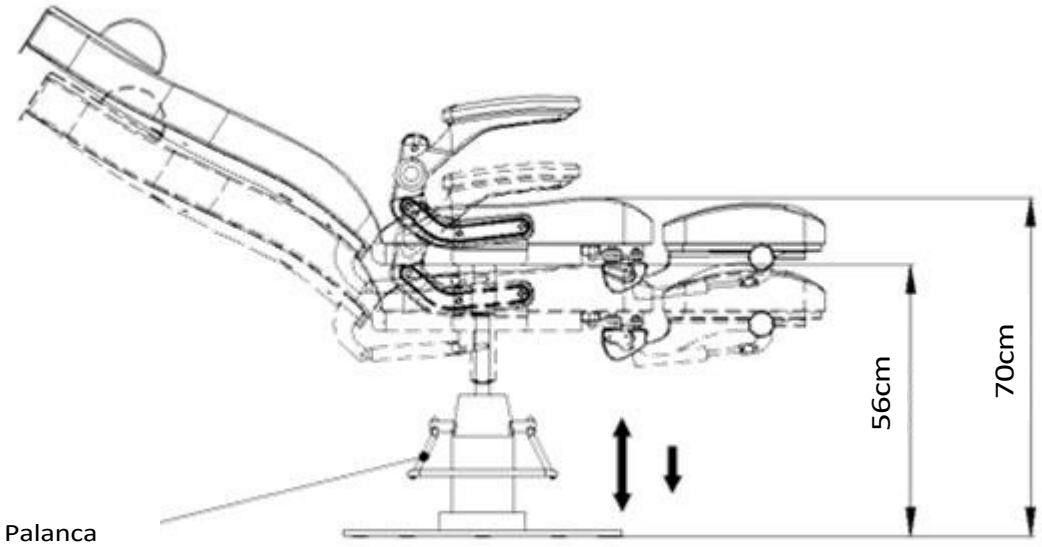

2. Para inclinar el respaldo presione la palanca e inclínese hacia atrás y el respaldo se inclinará hasta un ángulo conveniente.
   La inclinación máxima del respaldo es de 45 grados.

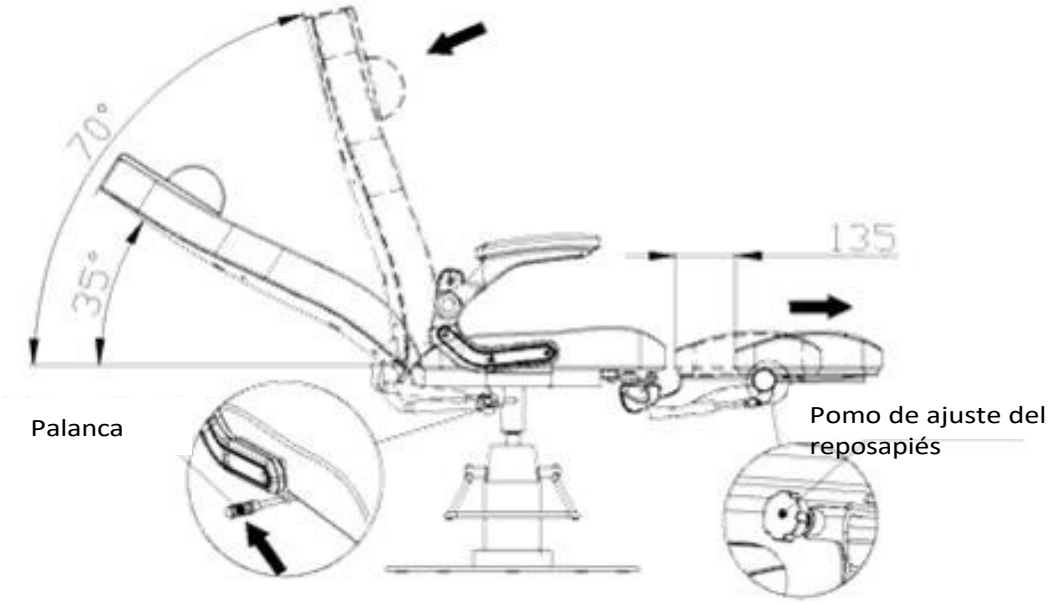


3. El reposapiés puede bloquearse en la posición de 30°, 60° o 90°.

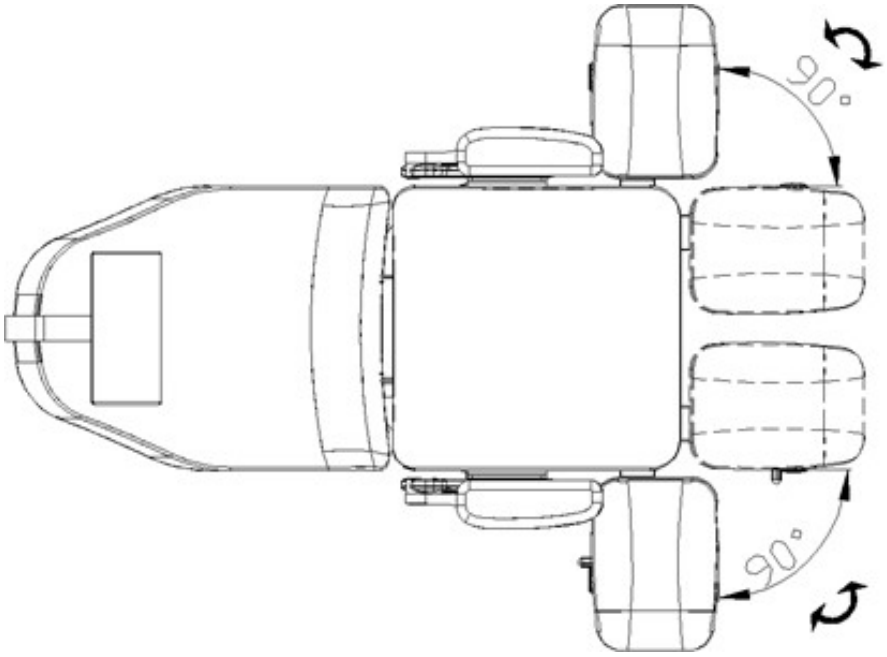

4. a) Utilice el mando y, al mismo tiempo, presione hacia abajo el reposapiés para inclinarlo hasta el ángulo deseado. Margen de inclinación: hasta 90°.

   b) El reposabrazos puede ajustarse de la posición horizontal a la vertical.

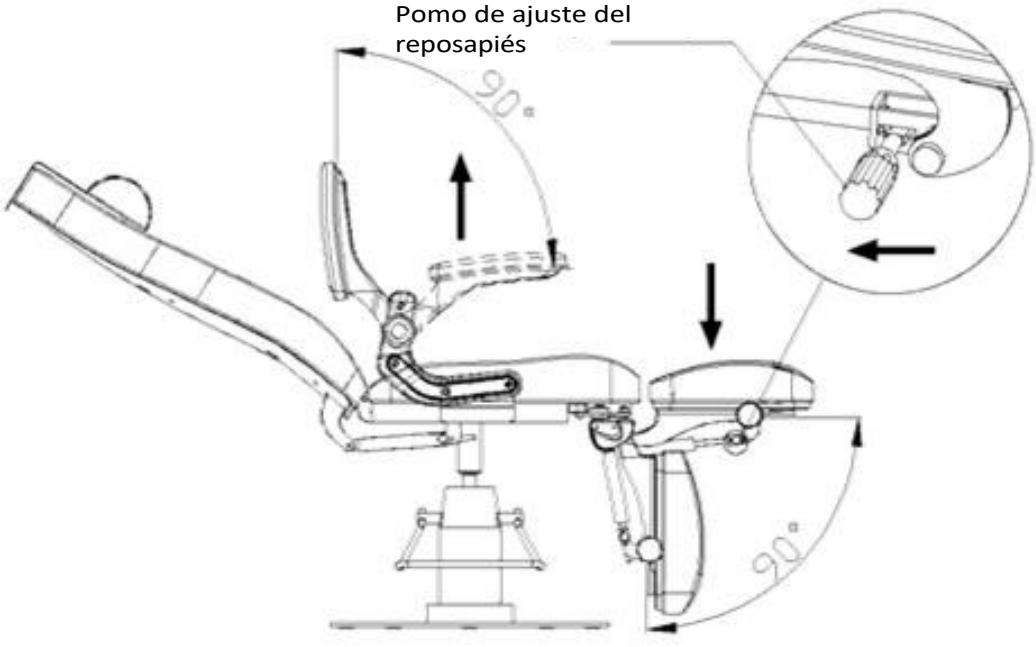

Precaución.

- Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del asiento sin la supervisión de un adulto.
- No introduzca la mano ni el pie en las hendiduras del asiento.
- No exponga el asiento a la luz solar directa.
- No empuje ni tire de la silla sobre suelos irregulares.
- No se ponga de pie sobre la silla.
- La silla no debe ser utilizada por personas con limitaciones físicas, deficiencias sensoriales o problemas mentales.

Limpieza y mantenimiento:

- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Para limpiar las zonas de difícil acceso o las esquinas con un cepillo pequeño.
- No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor . limpieza con una solución de detergente suave. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad. No exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del asiento

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en la unidad de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador / unidad de control.

Datos técnicos:

- Carga máxima 150kg
- Peso 56,5kg
- Cuero PU/PVC

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas - así,
para que no puedan entrar líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad en un carro, estante o vehículo inestable. La unidad podría dañarse si se cae
pueden producirse daños.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.

autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y luego
entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.
Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.