ACTIVESHOP®

# Návod na použitie

Hydraulické podiatrické kreslo Azzurro 713A




**Dovozca:**
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Skenovanie pre rôzne jazyky


CE

**Rozmery stoličky:**

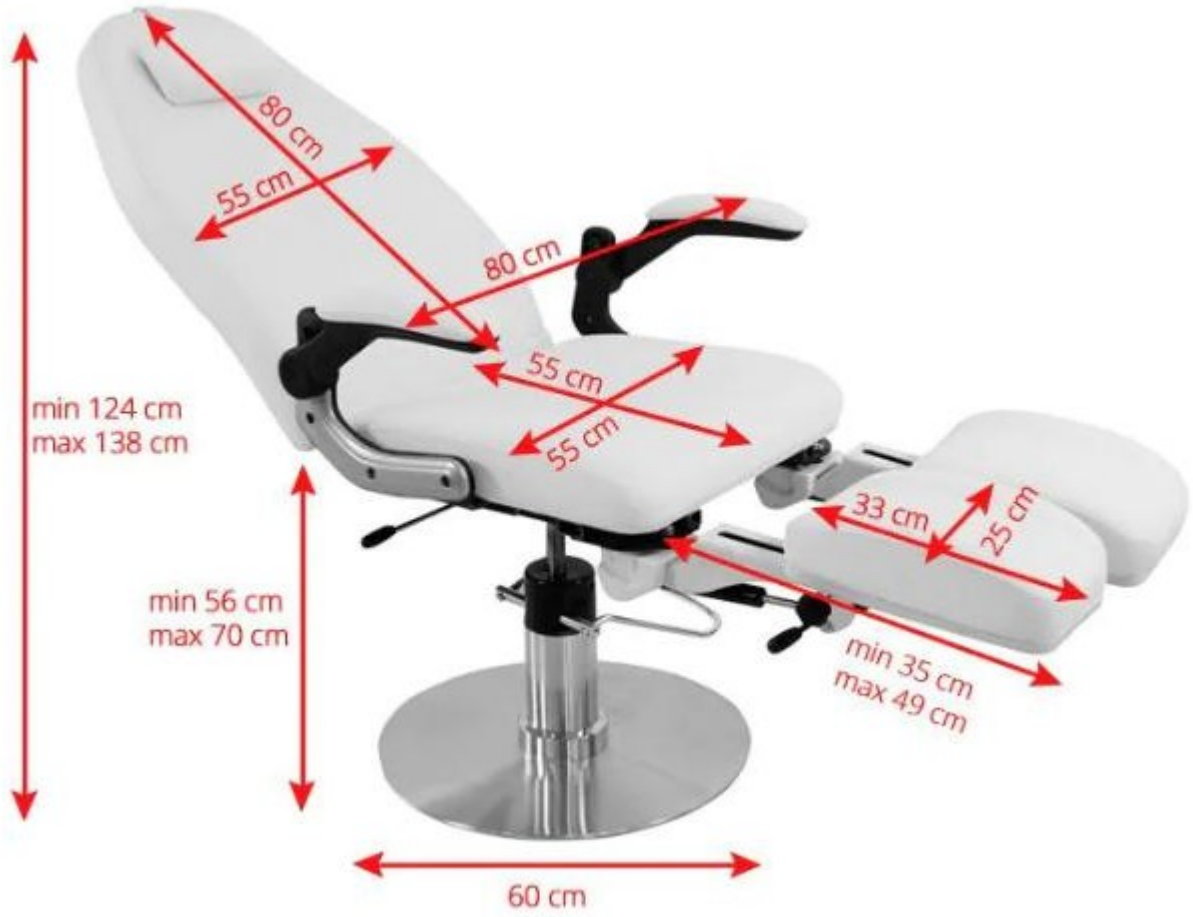



**Montáž:**


1. Zdvihnite páku pohonu do najvyššej polohy a potom nasaďte na drieku pohonu podľa obrázka.

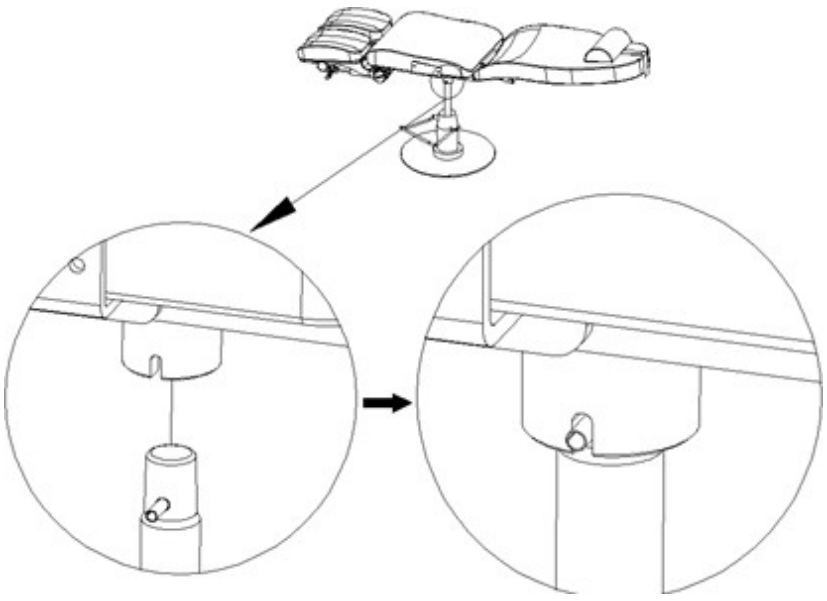

2. Zarovnajte tyč operadla s otvorom v pohone. Vložte skrutku podľa obrázka a potom ju zaistite pomocou svorky.

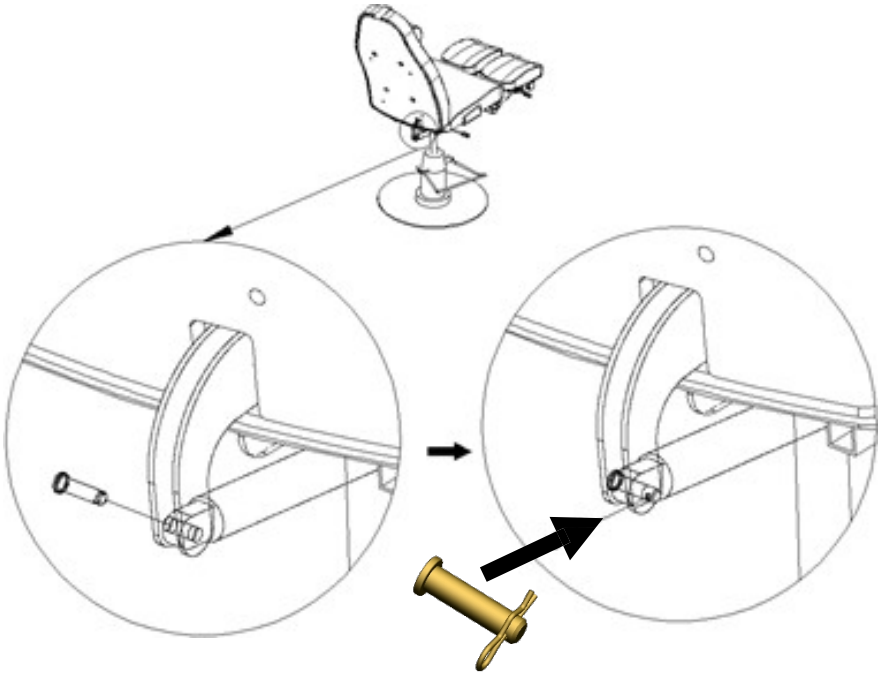


3. Namontujte opierky rúk pomocou skrutiek, ako je znázornené na obrázku.

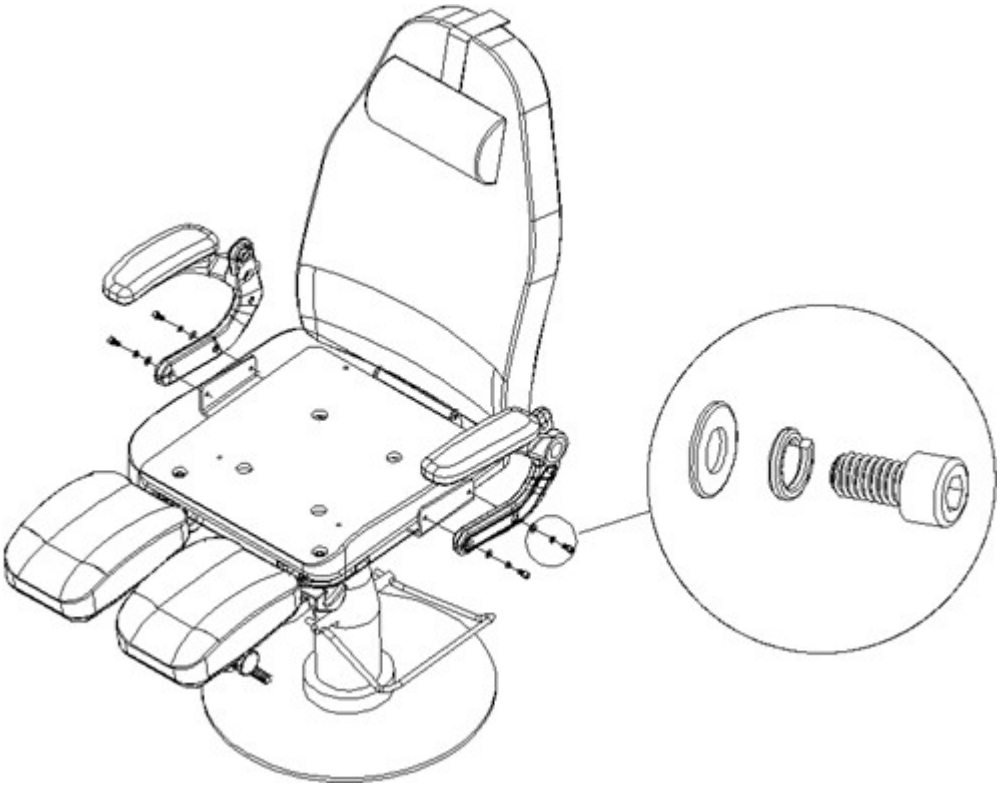


**Funkcie:**

1. Výšku sedadla možno nastaviť pomocou páky. Zdvihnutie páky spôsobí
   Po zablokovaní otáčania sedadla stlačením páčky sa sedadlo spustí.

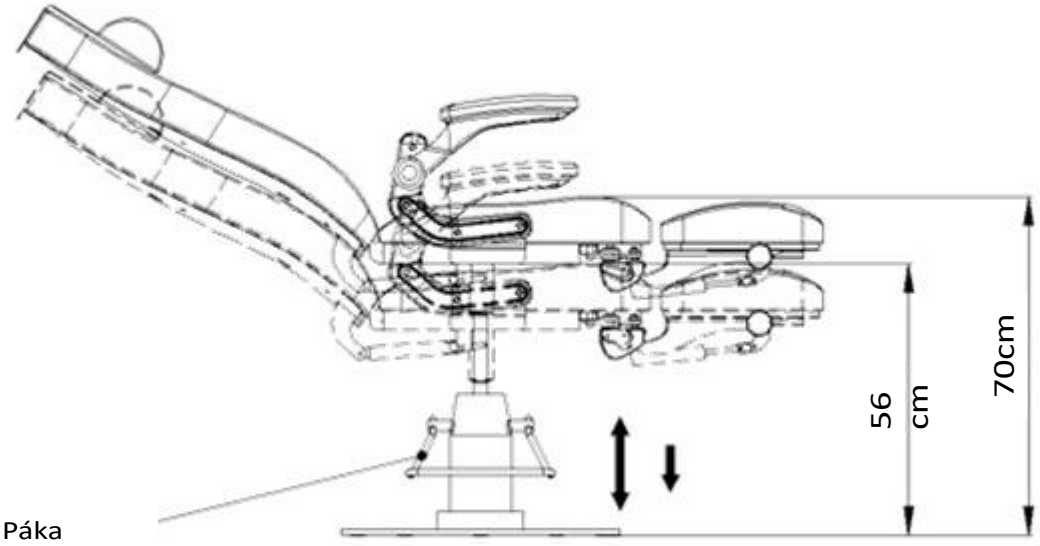


Páka


2. Ak chcete sklopiť operadlo, stlačte páku a oprite sa, operadlo sa sklopí do vhodného uhla.
   Maximálny sklon operadla je 45 stupňov.

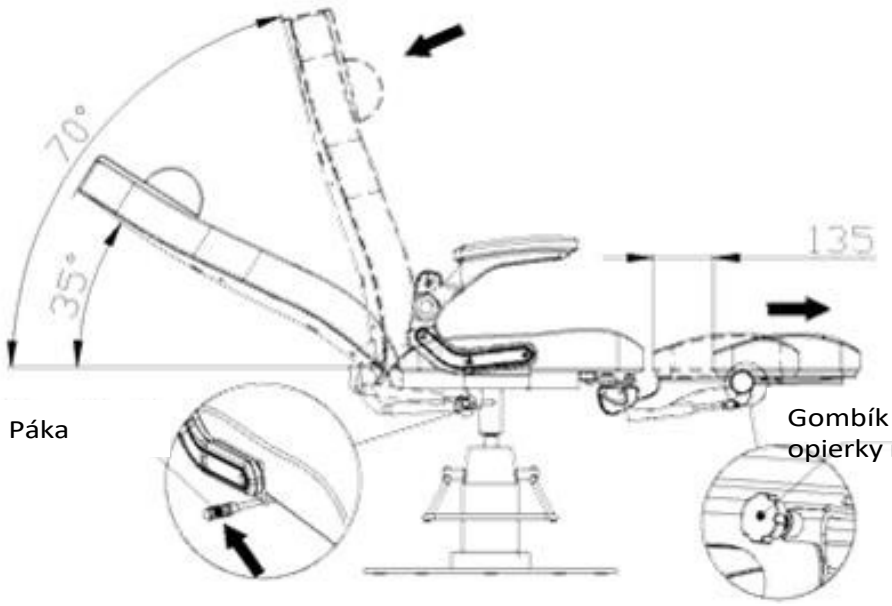


Páka


Gombík na nastavenie opierky nôh

3. Opierku nôh možno zablokovať v polohe 30°, 60° alebo 90°.

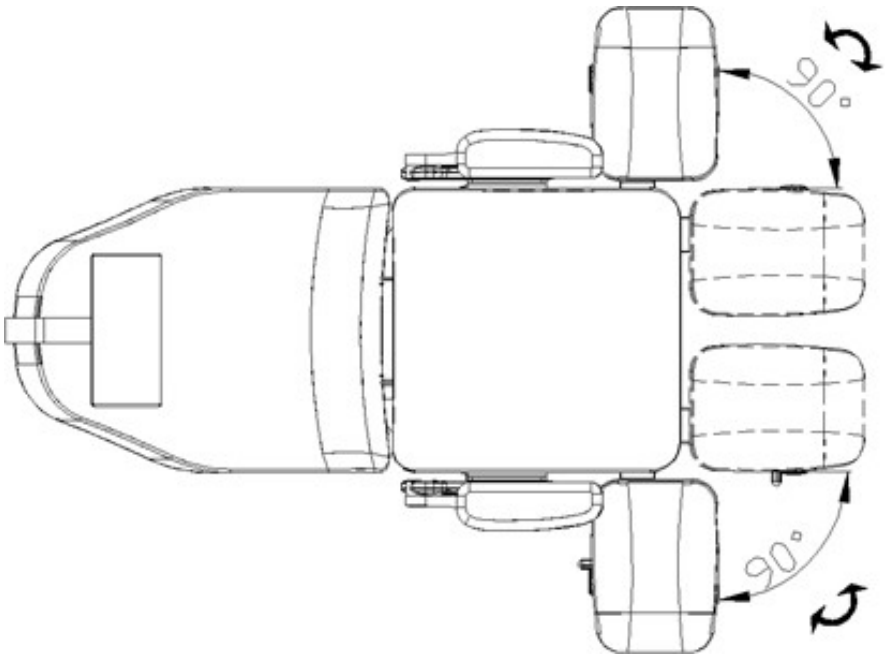


4. a) Pomocou gombíka a súčasným stlačením opierky nôh ju naklopte do požadovaného uhla. Rozsah naklonenia: do 90°.

   b) Podrúčku možno nastaviť z vodorovnej do zvislej polohy.

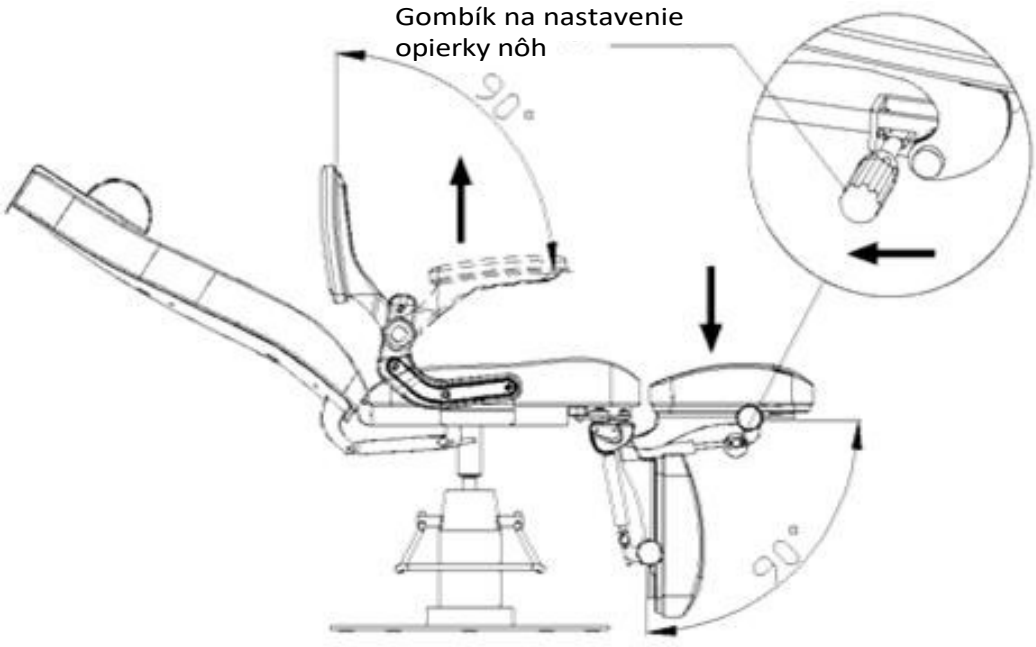

## Pozor.

- Zabezpečte, aby sa deti nehrali v blízkosti sedadla bez dozoru dospelej osoby.
- Nevkladajte ruky ani nohy do štrbín sedadla.
- Nevystavujte sedadlo priamemu slnečnému žiareniu.
- Netlačte ani neťahajte stoličku po nerovných podlahách.
- Nestojte na stoličke.
- Stoličku by nemali používať ľudia s fyzickými obmedzeniami, zmyslovými poruchami alebo mentálnymi problémami.

### Čistenie a údržba:

- Aby bol povrch stoličky v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

### I Kovové a plastové povrchy

- Ak chcete vyčistiť kovové a plastové povrchy, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupné miesta alebo rohy malou kefkou.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

### II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie . čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Čpavok a na odstránenie odolných škvŕn možno použiť väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

### III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti. N e v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

### IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

## Údržba

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku smie otvárať alebo vymieňať len skúsený alebo autorizovaný personál.

### Technické údaje:

- Maximálne zaťaženie 150 kg
- Hmotnosť 56,5 kg
- PU/PVC koža

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik ( spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - tzv, aby sa do jednotky nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže poškodiť, ak spadne môže dôjsť k poškodeniu.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k ).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

## POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných p o r ú c h kontaktujte autorizovaného servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

## LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a . Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.
Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdávať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

## SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.