# ACTIVESHOP®

# GEBRAUCHSANWEISUNG

Kosmetikstuhl hyd. Sillon 210



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl Rev.

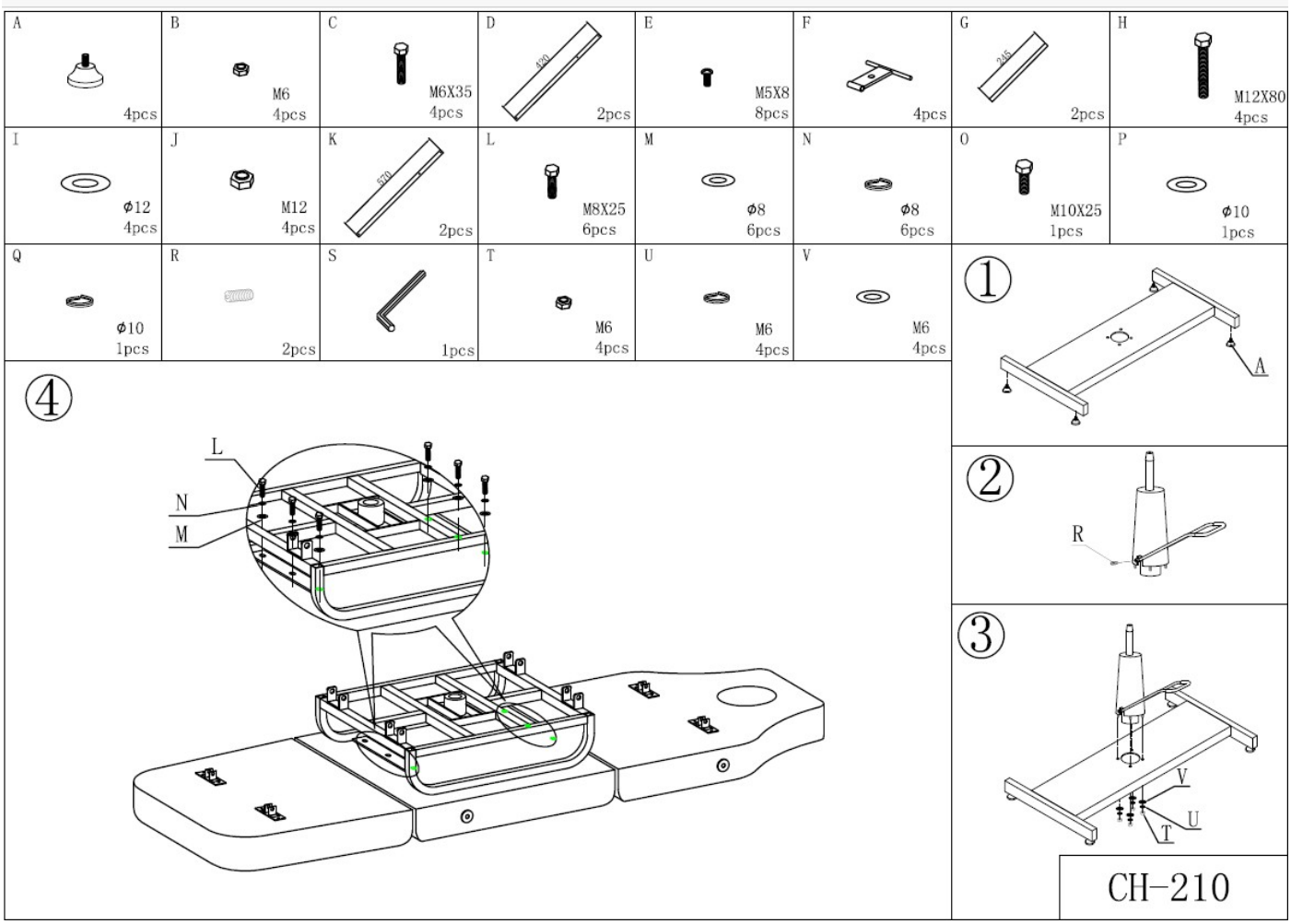
A/05/2025

Scan für verschiedene Sprachen

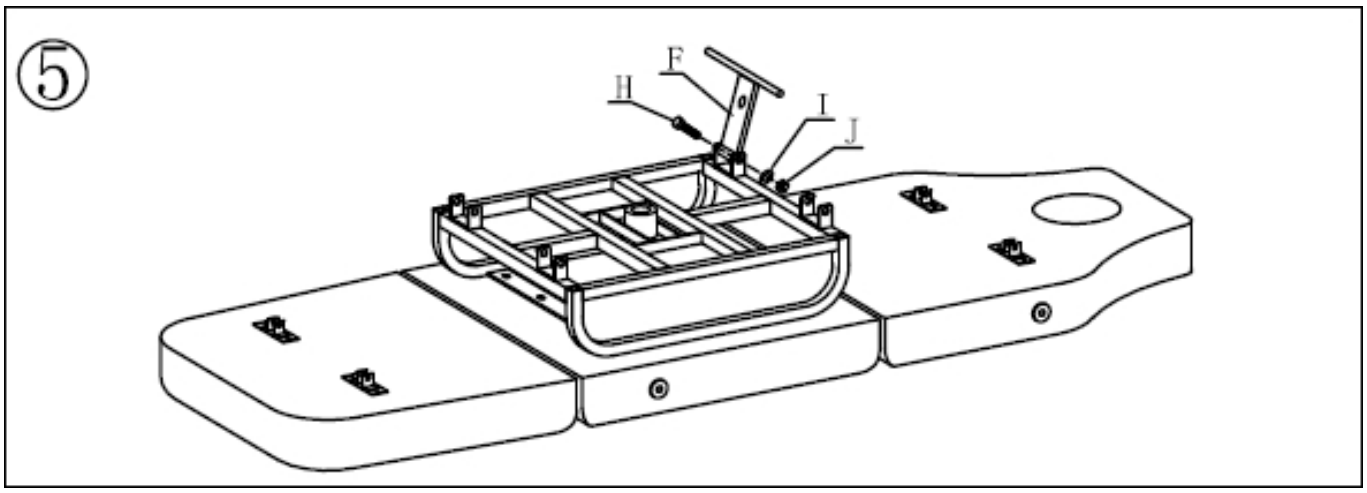
**Abmessungen:**



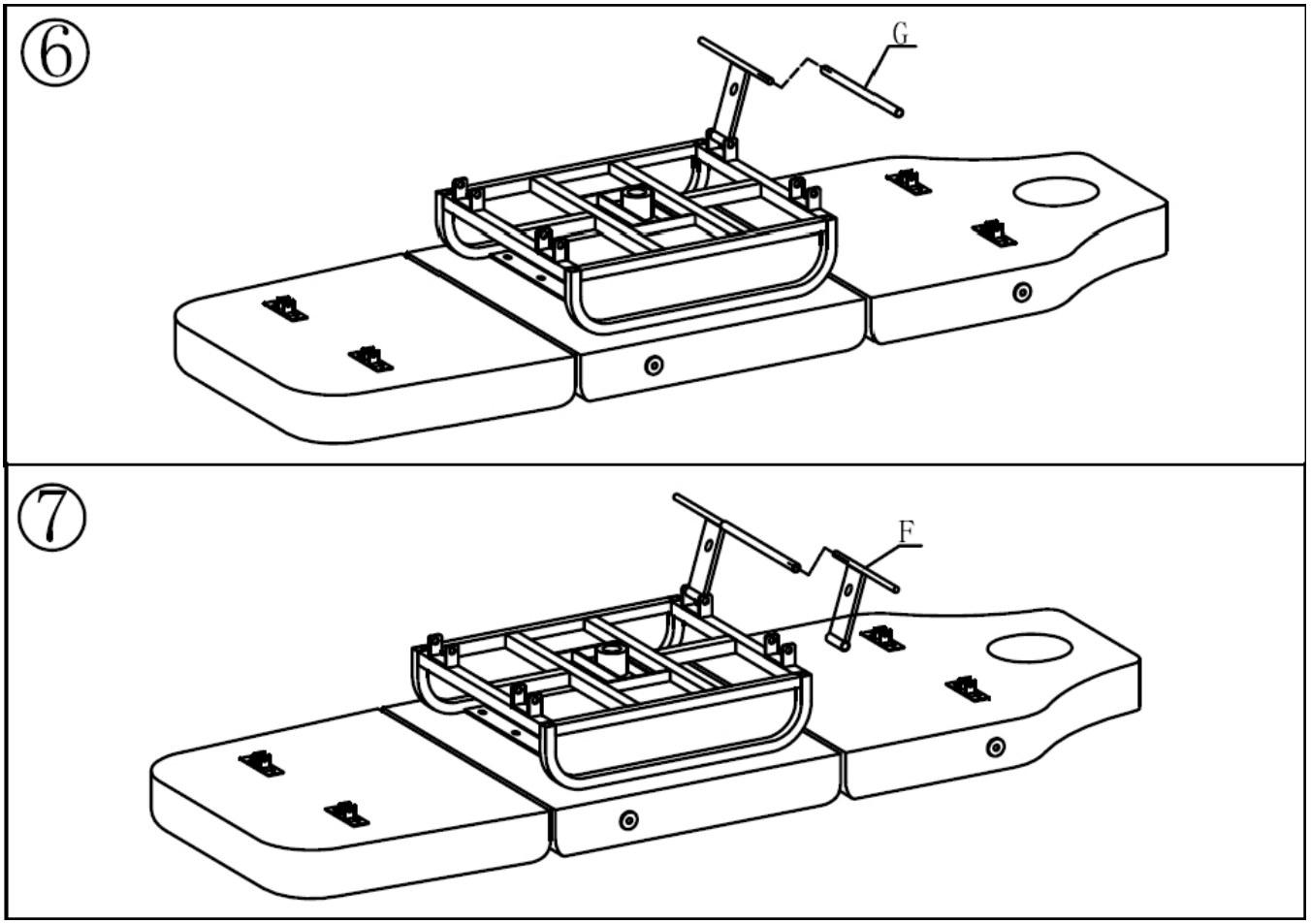

**Montage:**



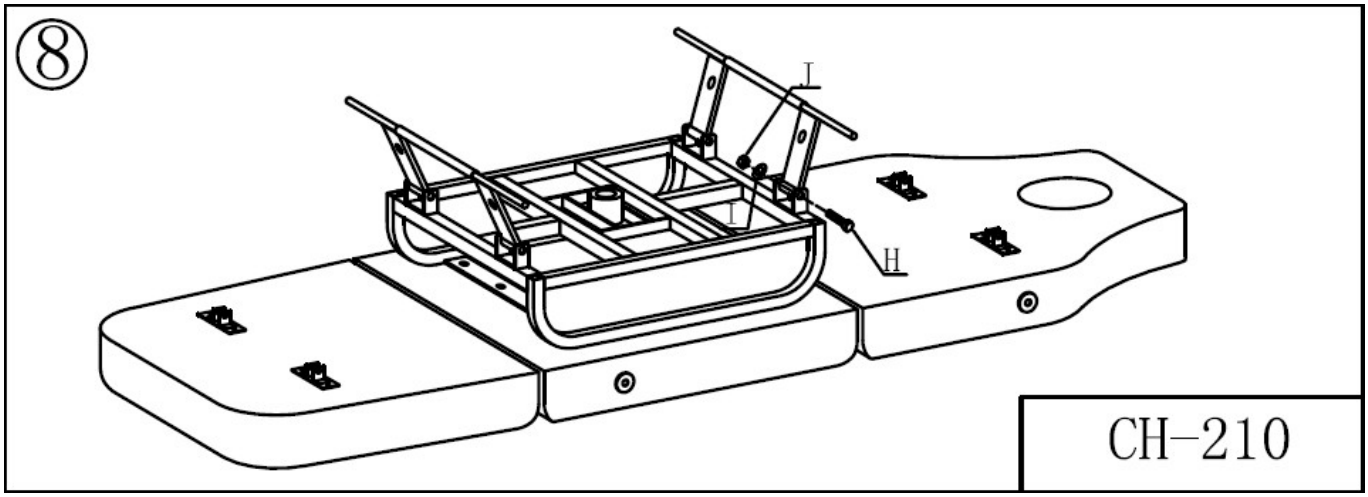
1. Schieben Sie die Unterlegscheiben in den Sockel des Stuhls.
2. Befestigen Sie den Hebel zur Höhenverstellung mit Hilfe des Elements R am Gasfederzylinder.
3. Setzen Sie den Gasdruckfeder auf die Basis des Stuhls und befestigen Sie ihn mit den Elementen V, U und T.
4. Setzen Sie den Metallrahmen des Sitzes auf die Unterseite des Stuhls und befestigen Sie ihn mit den Elementen L, M und N.



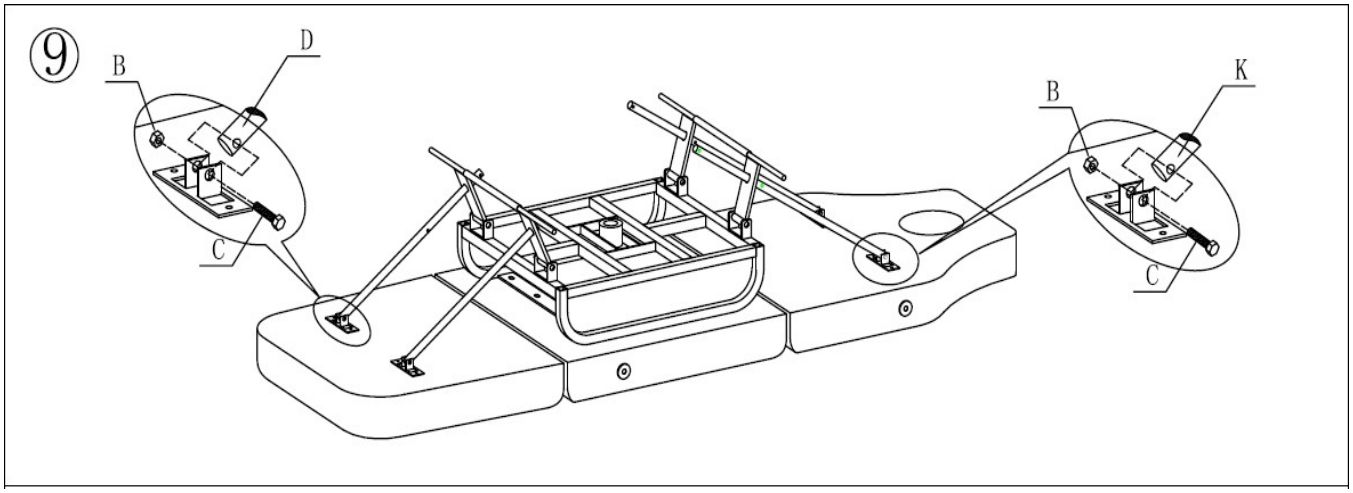

5. Montieren Sie das Element F, indem Sie es mit den Elementen I, J und H festziehen.



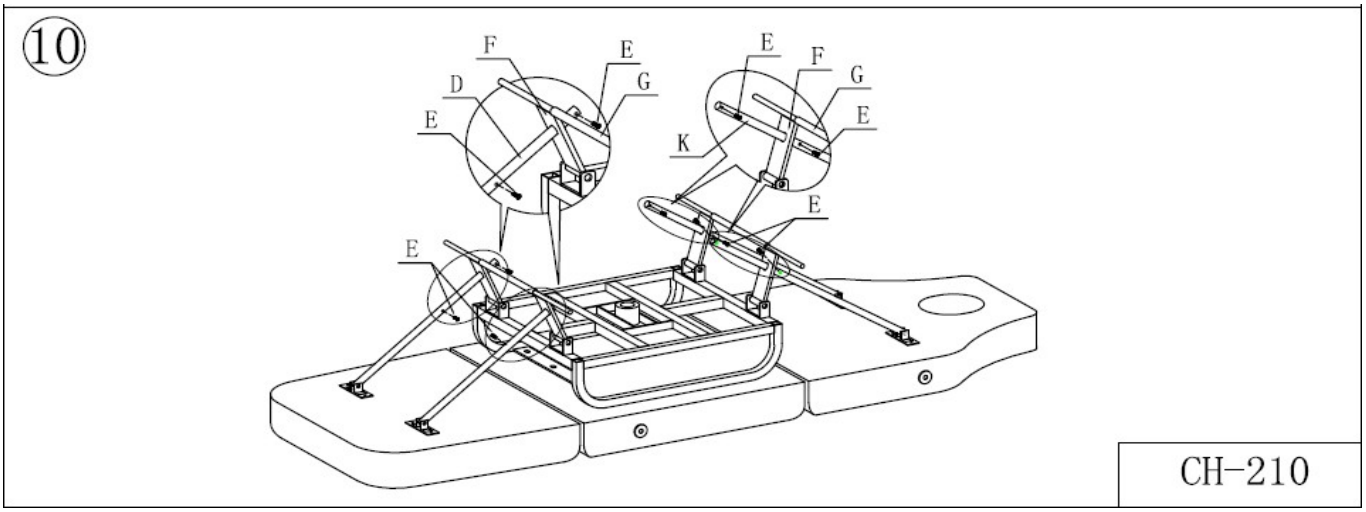

6,7. Verwenden Sie Element G, um zwei Elemente F miteinander zu verbinden.



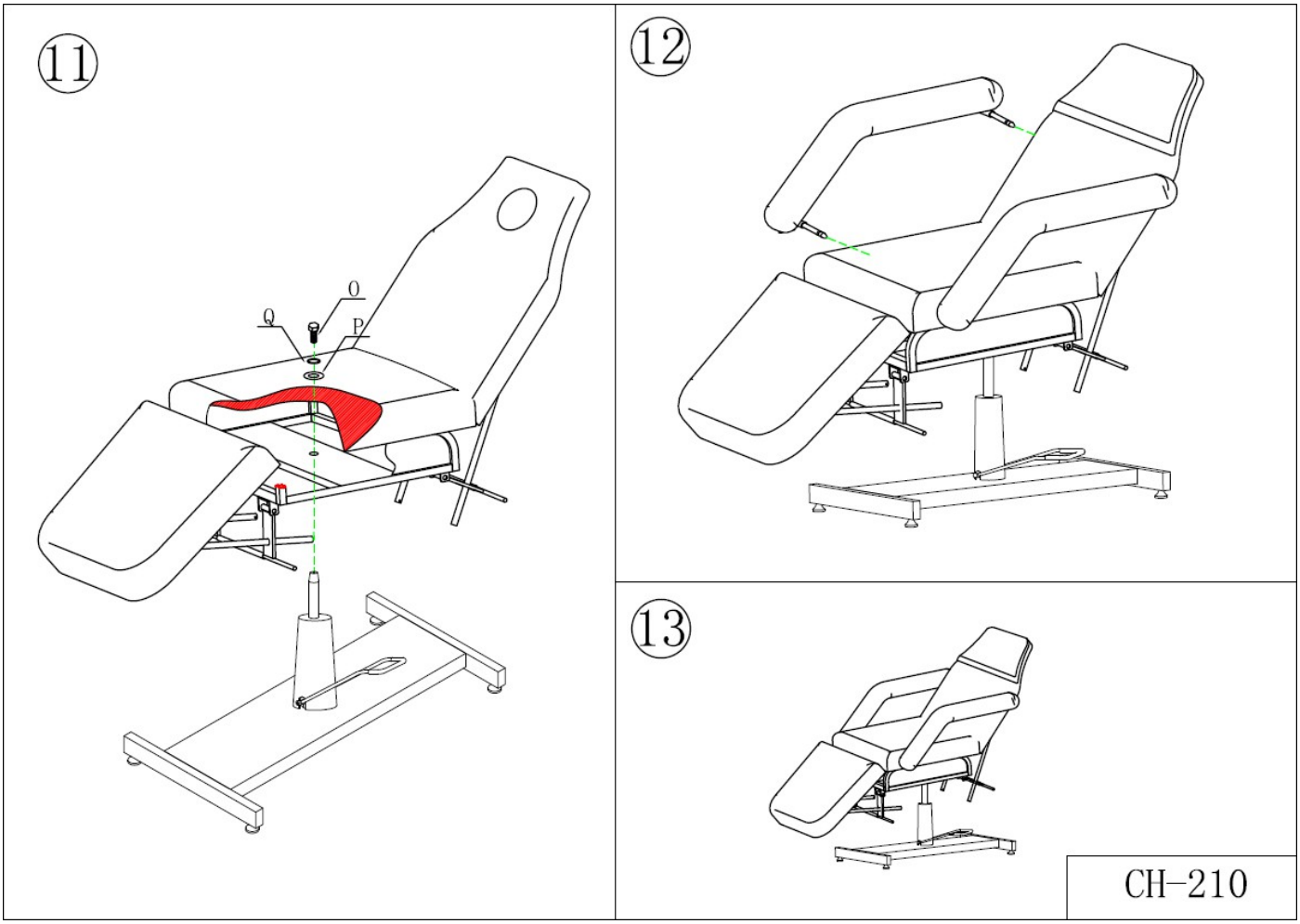

8. Befestigen Sie es mit den Elementen J und H und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.




9. Schieben Sie die Elemente D und K ein und schrauben Sie sie mit B und C fest.




10. Sichern Sie die Halterungen mit den Elementen E.




11. Setzen Sie den Sitz auf den Bolzen des Stellantriebs und befestigen Sie ihn mit den Elementen Q, P und O.

12. Schieben Sie die Armlehnen wie in der Abbildung gezeigt ein.

**Funktionen des Sessels:**

-Sessel anheben: Heben Sie den Sessel an, indem Sie auf den Hebel drücken

-Senkung des Sessels: Drücken Sie den Hebel nach unten, bis der Sessel vollständig abgesenkt ist

-Sitzdrehung sperren: Heben Sie den Hebel so weit wie möglich nach oben

## Achtung!

Setzen Sie sich nicht abrupt auf den Stuhl und werfen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Es ist verboten, den Stuhl zu verschieben oder zu transportieren, wenn sich Personen oder andere Lasten darauf befinden. Stehen Sie nicht mit den Füßen oder Knien auf dem Stuhl, schaukeln Sie nicht darauf, setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen und setzen Sie sich nicht zu mehreren Personen darauf.

**Reinigung und Desinfektion des Geräts:**

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, sollte sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

### I Metall- und Kunststoffoberflächen

Um Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente zu reinigen, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Für schwer zugängliche Stellen oder Ecken eignet sich eine kleine Bürste. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit für das Gerät. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

### II Edelstahloberflächen

Am besten eignet sich eine milde Reinigungslösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie chlorhaltige Lösungen.

### III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zum Reinigen keine Wasserdüsen (Dusche, Hochdruckreiniger).

- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel und Säuren zur Reinigung.

### IV Oberfläche des Sessels

- Wischen Sie die Oberfläche des Sessels gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und reiben Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch trocken.

### Pflege:

1. **Tägliche Reinigung**
   Entfernen Sie Staub mit einem weichen, trockenen Tuch.
2. **Entfernen von hartnäckigem Schmutz**
   Wie Sie wissen, ist es schwierig, hartnäckigen Schmutz mit einem normalen trockenen Tuch zu entfernen. In diesem Fall sollten Sie zunächst ein weiches Tuch mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel verwenden und anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.
3. **Die Verwendung von Benzol, Verdünnungsmitteln, Benzin oder anderen Lösungsmitteln ist verboten.**
   Diese Mittel können das Leder beschädigen oder zu Korrosion des Produkts führen.
4. **Lagerung und Betriebsbedingungen**
   Setzen Sie das Produkt keiner starken Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.

Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Stellen oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,

c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in eine Öffnung gelangen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.

Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

**ACHTUNG:**

Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, damit sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.

Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ENTSORGUNG DES GERÄTS



Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- u n d Elektronik-Altgeräte müssen Elektrogeräte separat gesammelt und anschließend an Sammelstellen abgegeben werden.

Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten. Auch am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie dem Recycling zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.