ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Sedia estetica elettrica Azzurro 803D 3 motori




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nell'area in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa adeguata.


Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.

Dimensioni dell'apparecchio:

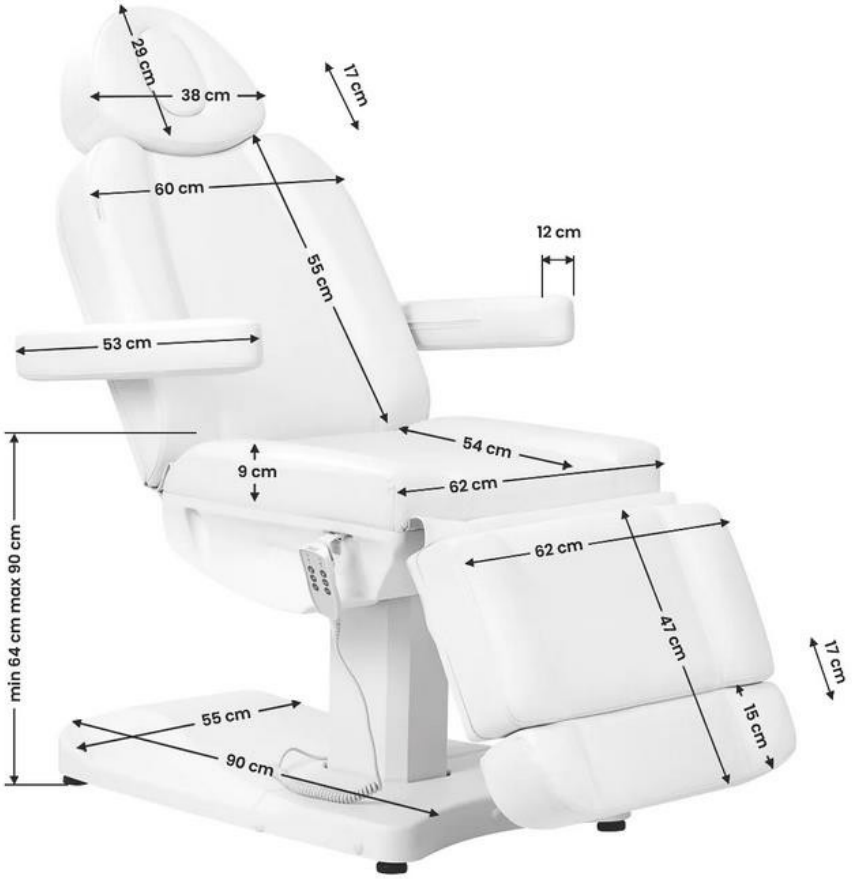



Struttura dell'apparecchio:

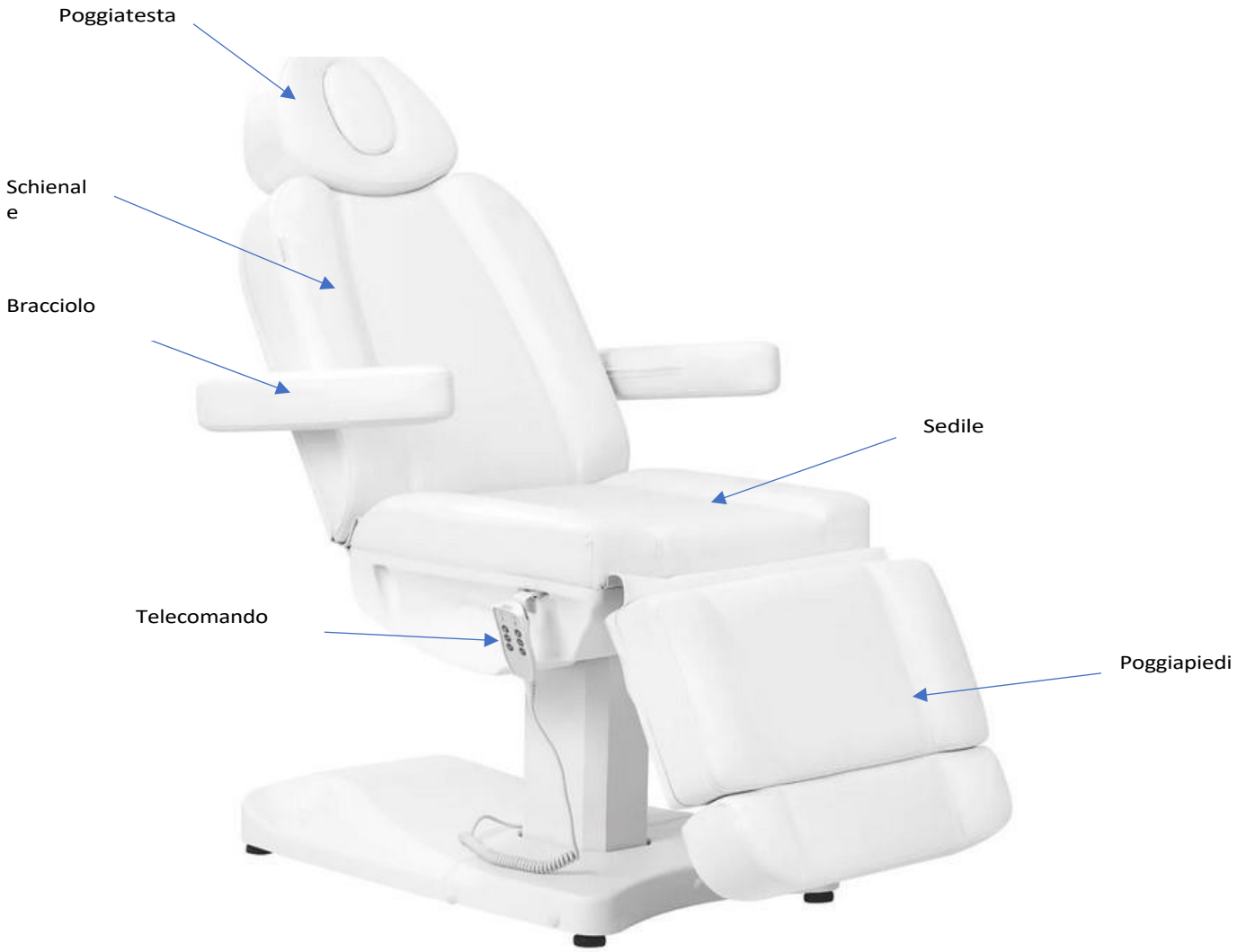

Attenzione:

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo e sul poggiapiedi.
3. Assicurarsi che la distanza tra le prese non superi i 2 metri.

Attenzione


1. Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Non legare il cavo di alimentazione all'unità. Sollevando o tirando il cavo di alimentazione si rischia di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
3. Rimuovere il cavo di alimentazione prima di spostare la poltrona elettrica, per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo il cavo di alimentazione originale.
5. Non permettere a una persona che non esegue il trattamento di controllare il telecomando.
6. Non collocare oggetti sotto la poltrona.
7. Assicurarsi che intorno alla poltrona vi sia spazio sufficiente per poterla piegare e dispiegare liberamente.

8. Assicurarsi che intorno al sedile non vi siano oggetti appuntiti o pericolosi che potrebbero danneggiare l'unità.
9. Non modificare il dispositivo da soli. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.


La poltrona dispone di un'opzione di controllo manuale tramite telecomando e di opzioni di controllo a pedale. L'altezza della poltrona, la posizione dello schienale e del poggiapiedi possono essere regolati a piacere.

Funzioni del telecomando:

1. Regolazione dell'altezza del sedile (tra 64-90 cm)
2. Regolazione dello schienale
3. Regolazione del poggiapiedi

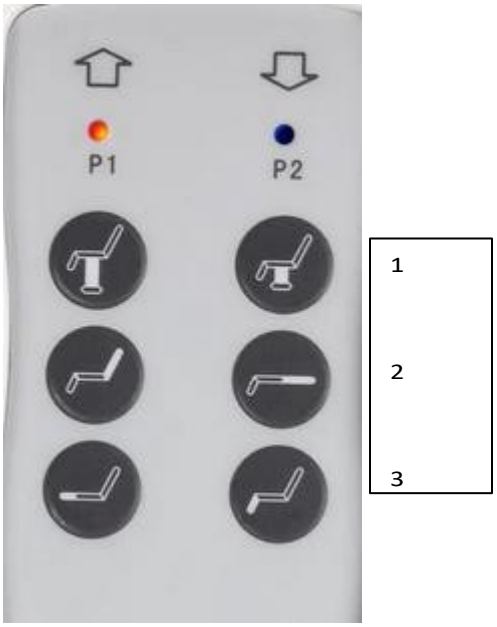


Funzioni del comando a pedale:

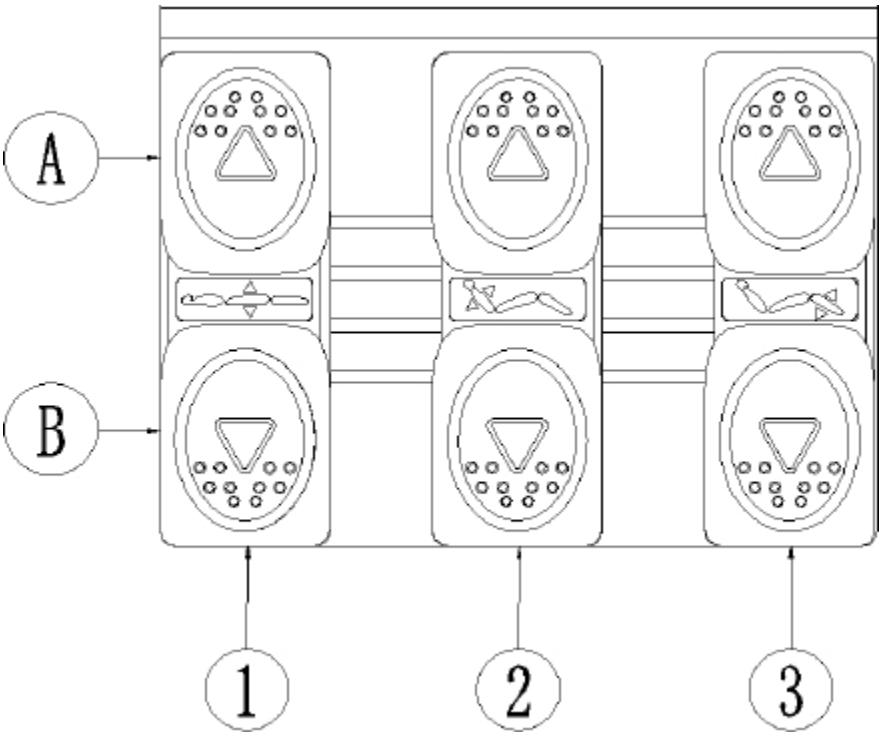

1. Regolazione dell'altezza del sedile. Premere A per alzare il sedile o B per abbassarlo.
2. Regolazione della posizione dello schienale. Premere A per alzare lo schienale o B per abbassarlo.
3. Regolazione del poggiapiedi. Premere A per alzare il poggiapiedi o B per abbassarlo.

Estensione del poggiapiedi

La poltrona dispone anche di un'opzione di estensione del poggiapiedi, che facilita l'esecuzione di trattamenti su persone più alte e migliora il comfort. La lunghezza massima dell'estensione del poggiapiedi è di circa 17 cm. La regolazione del poggiapiedi avviene tramite una manopola posta sul lato inferiore del poggiapiedi.

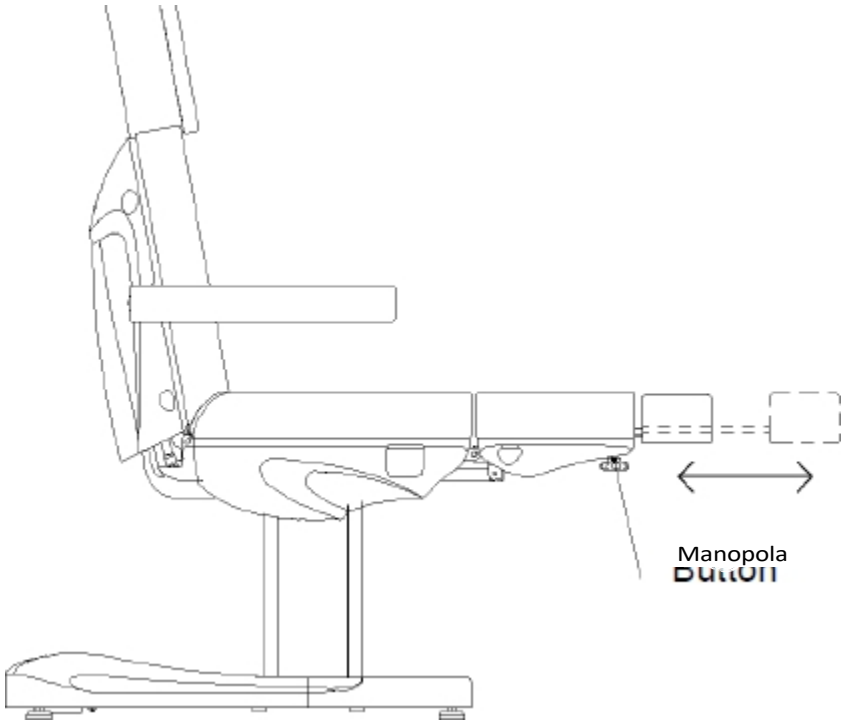


Installazione del bracciolo:

Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Farlo scorrere a destra o a sinistra in modo che si inserisca correttamente. Procedere allo stesso modo con l'altro bracciolo. Il bracciolo è perpendicolare al suolo (indipendentemente dall'angolo del sedile). Può essere ruotato di 180°.

Installazione del poggiatesta:

Far scorrere il poggiatesta nel foro situato nella parte superiore dello schienale. Quando il poggiatesta è all'altezza corretta, stringere la manovella situata sul retro per fissare il poggiatesta.
Per abbassare o estendere il poggiatesta, svitare la manovella, regolare il poggiatesta e serrare la manovella.

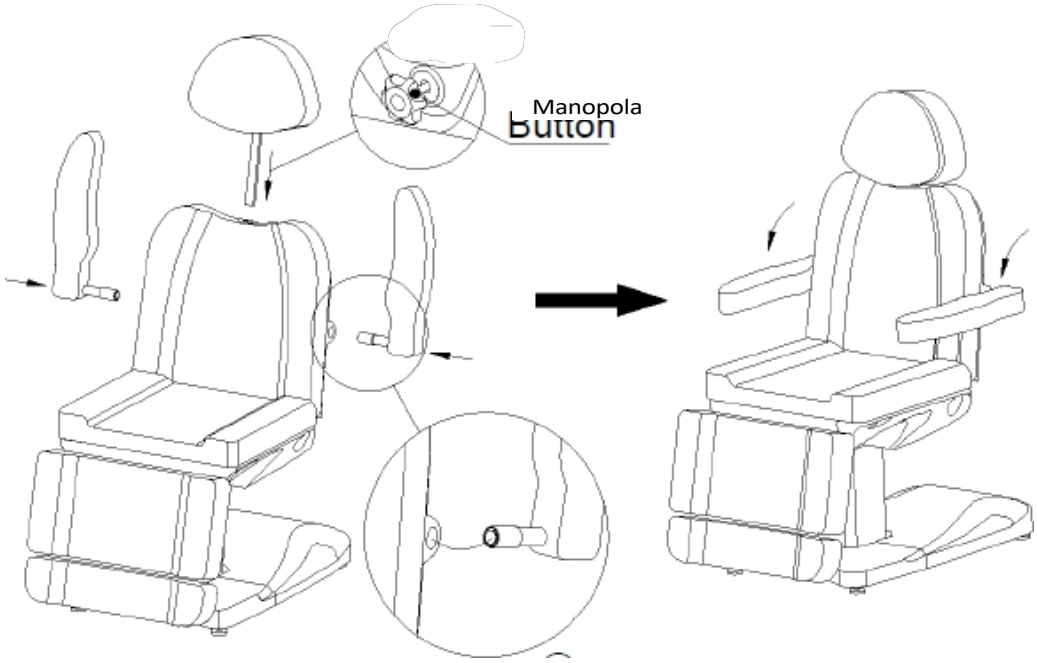

Pulizia e disinfezione dell'unità:

Scollegare l'unità prima di pulirla.

Per mantenere la superficie del sedile in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passate un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.

4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo attacco
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. Se gli accessori sono montati
5. Il normale funzionamento del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e contattare un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.
Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'utilizzo. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Metodo di soluzione
Nessuna risposta quando si premono i pulsanti del telecomando	1. Il pulsante di accensione si attiva o non si attiva. 2. Verificare che il pedale sia premuto al massimo. 3. Controllare che l'unità sia collegata alla presa di corrente. 4. Verificare che tutto sia stato collegato correttamente.	1. Provare a riavviare il pulsante di accensione. 2. Provare ad accendere gli altri pulsanti e vedere se funzionano. 3. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo. 4. Scollegare le spine e ricollegarle.
L'apparecchio emette strani rumori	Vite allentata	Serrare le viti

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Non installare o mettere in funzione il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che i liquidi non possano penetrare nel dispositivo.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
(a) è penetrato del liquido nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o emette strani suoni,

c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'unità.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti usati elettrici e elettronici usati elettriche devono essere raccolti separatamente e poi portati ai punti di raccolta delle

centri di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.