ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Azzurro 803D elektromos kozmetikai szék 3 motorral




Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai széket arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.


Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

A készülék méretei:

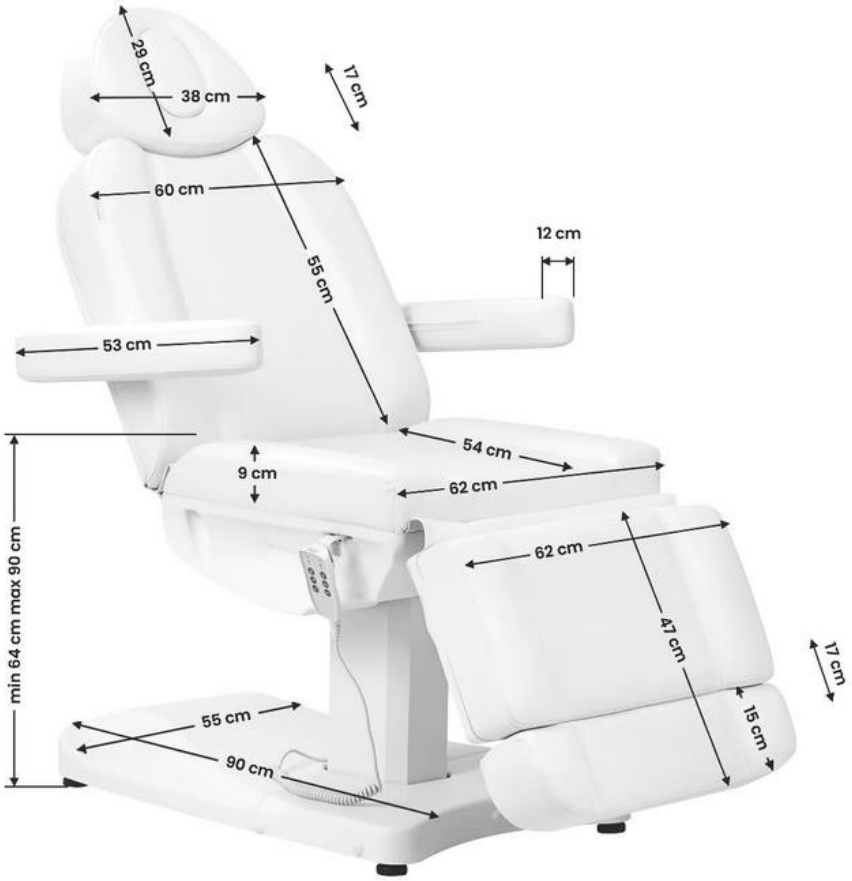



A készülék felépítése:

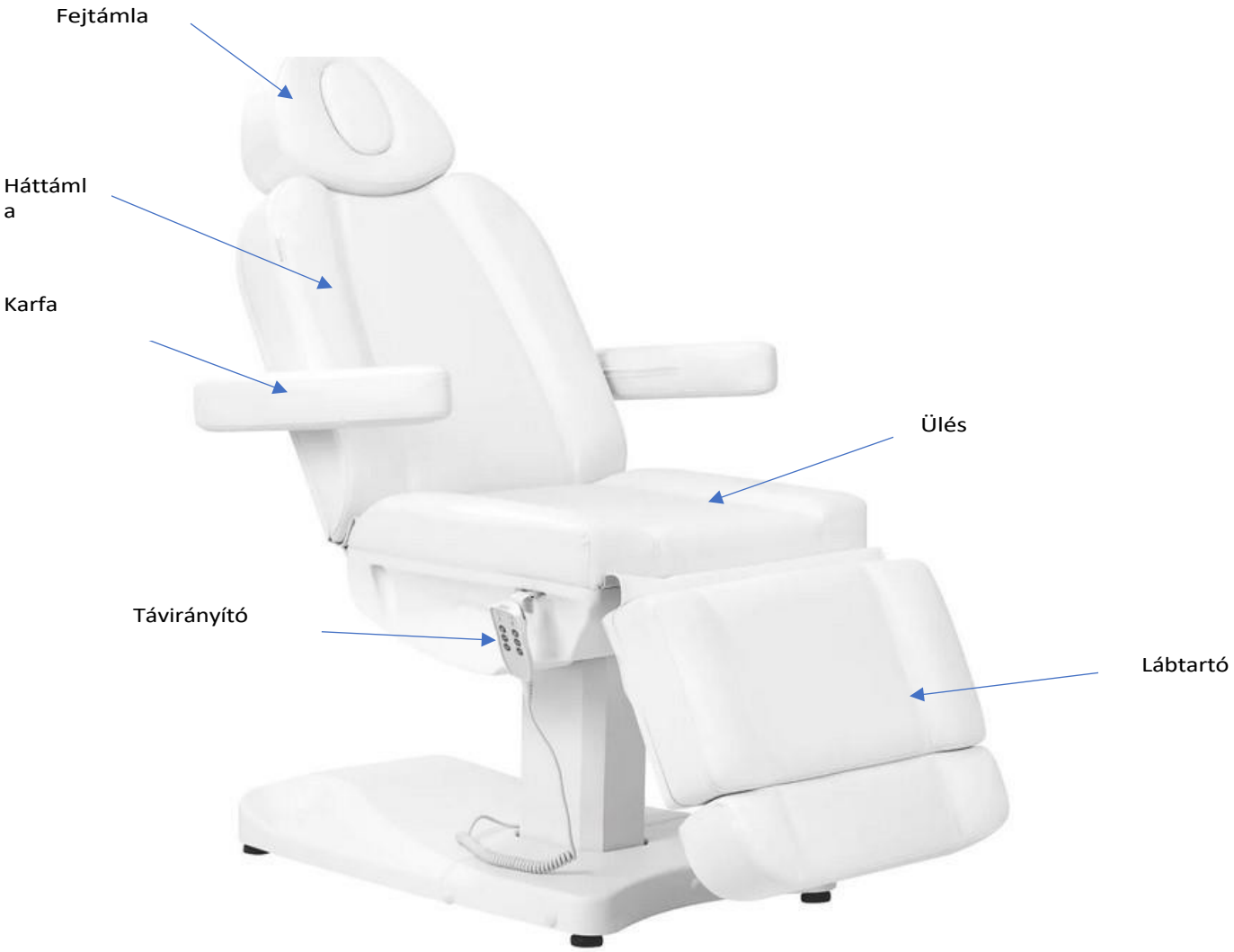

Figyelmeztetés:

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára és a lábtartóra.
3. Ügyeljen arra, hogy a lábtartók közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Figyelmeztetés


1. Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.
2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.
3. Az elektromos szépségfotel mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
5. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a kezelő távirányítót.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
7. Ügyeljen arra, hogy a szék körül elegendő szabad tér legyen, hogy szabadon össze- és széthajtható legyen.

8. Győződjön meg róla, hogy az ülés körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, a m e l y e k károsíthatják a készüléket.
9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a karosszék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.


A fotel rendelkezik kézi vezérlési lehetőséggel a távirányítóval, valamint lábvezérlési lehetőséggel. A fotel magassága, a háttámla és a lábtartó pozíciója igény szerint állítható.

Távvezérlő funkciók:

1. Ülésmagasság beállítása (64-90 cm között)
2. Háttámla beállítása
3. Lábtartó beállítása

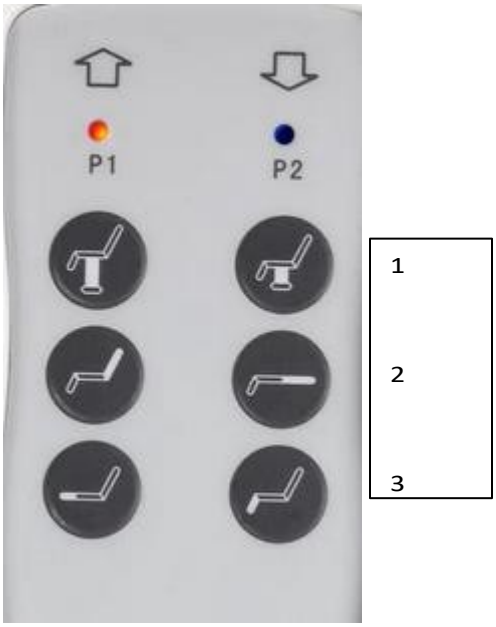


Lábvezérlő funkciók:

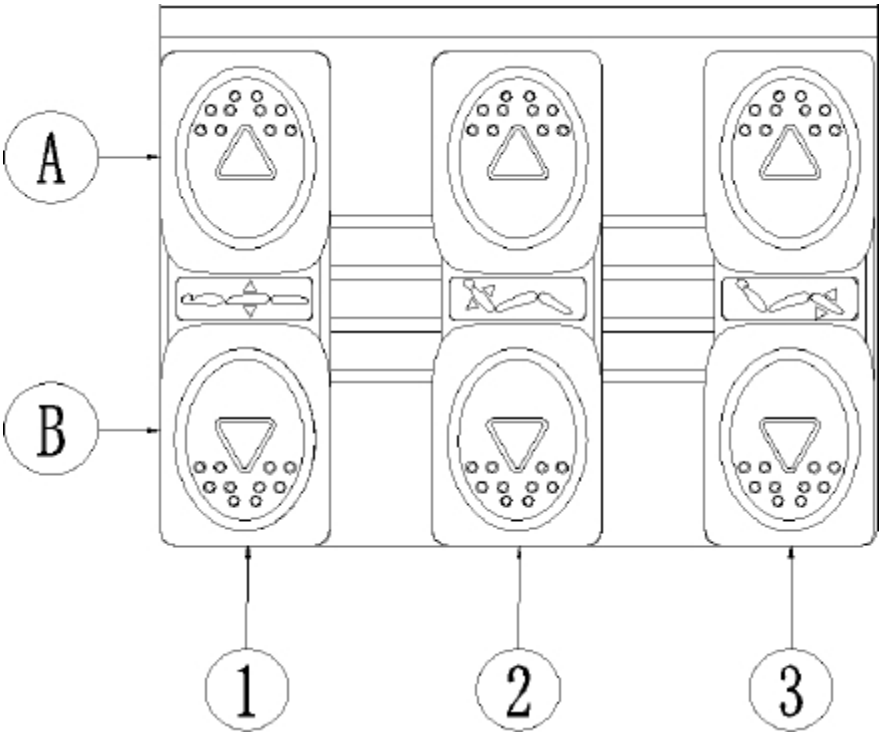

1. Az ülésmagasság beállítása. Nyomja meg az A gombot az ülés megemeléséhez vagy a B gombot az ülés leengedéséhez.
2. A háttámla pozíciójának beállítása. Nyomja meg az A gombot a háttámla megemeléséhez vagy a B gombot a háttámla leengedéséhez.
3. A lábtartó beállítása. Nyomja meg az A gombot a lábtartó felemeléséhez vagy a B gombot a lábtartó leengedéséhez.

Lábtartó meghosszabbítása

A székben lehetőség van a lábtartó meghosszabbítására is, ami megkönnyíti a kezelések elvégzését magasabb emberek nél, és javítja a kényelmet. A lábtartó meghosszabbításának maximális hossza körülbelül 17 cm. A lábtartó beállítása a lábtartó alján található gombbal történik.

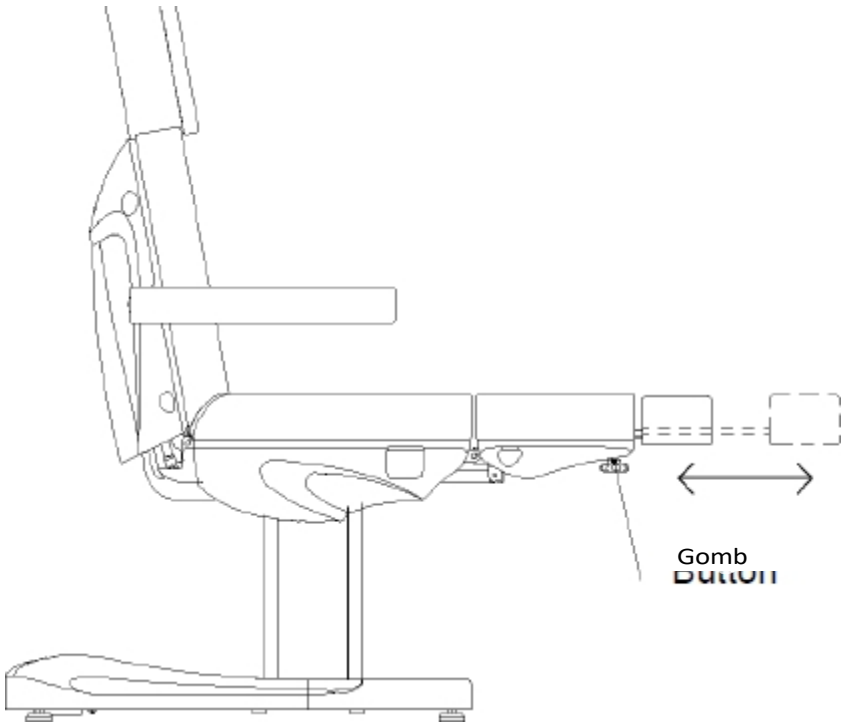


Karfatámasz felszerelése:

Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található furatba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Csúsztassa jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is. A kartámasz merőlegesen áll a talajra (függetlenül az ülés szögétől). Ez 180°-kal elforgatható.

A fejtámla felszerelése:

Csúsztassa a fejtámlát az üléstámla tetején található lyukba. Amikor a fejtámla a megfelelő magasságban van, húzza meg a háttámlánál található kurblit a fejtámla rögzítéséhez.
A fejtámla leengedéséhez vagy kinyújtásához csavarja ki a kurblit, állítsa be a fejtámlát, és húzza meg a kurblit.

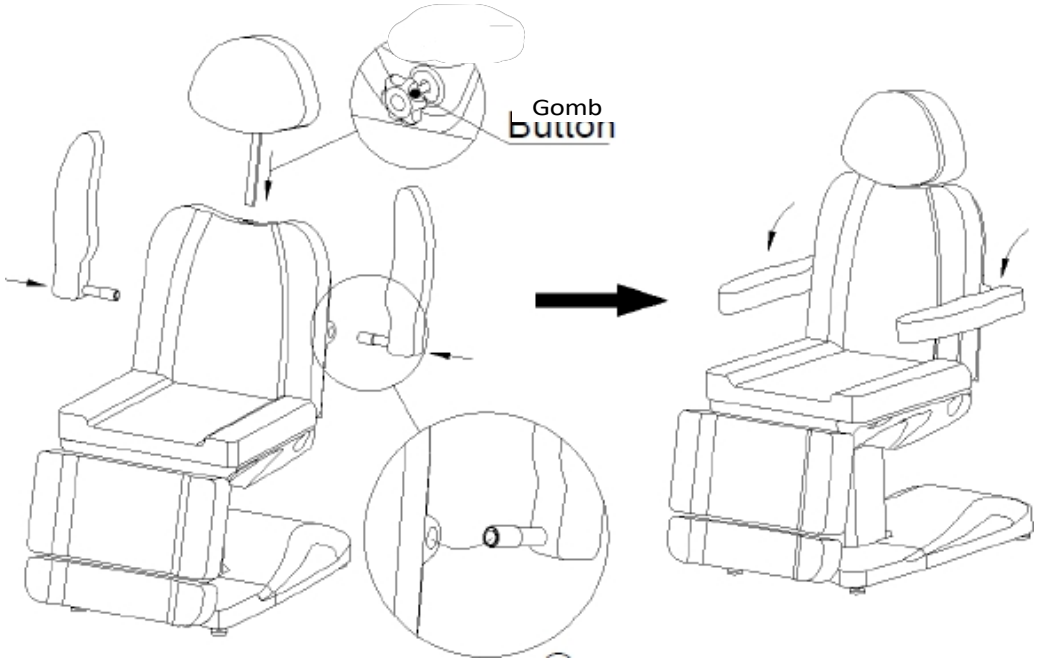

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.

Az ülés felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

A tisztítás enyhe tisztítószeres oldattal működik a legjobban. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne t e g y e ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.

4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. A vezérlődoboz és annak kábelezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.
Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt, és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldási módszer
Nincs válasz a távirányító gombjainak megnyomásakor	1. A bekapcsológomb működésbe lép vagy nem lép működésbe. 2. Ellenőrizze, hogy a pedál maximálisan le van-e nyomva. 3. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva. 4. Ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e csatlakoztatva.	1. Próbálja meg újraindítani a bekapcsológombot. 2. Próbálja meg bekapcsolni a többi gombot, és nézze meg, hogy működnek-e. 3. Húzza ki a készüléket és dugja be újra. 4. Húzza ki a dugókat és dugja be újra.
A készülék furcsa hangokat ad ki	Laza csavar	Húzza meg a csavarokat

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet tartani.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikus használt és elektronikus hulladékról szóló irányelvvel összhangban.
az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a gyűjtőhelyekre kell vinni, ahol

az elektronikai és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyekre. Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft. részére kell átadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.