ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Azzurro 803D elektrische cosmetische stoel 3 motoren



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

III


CE

Lees de instructies en voer de volgende stappen uit voordat u de cosmeticastoel in gebruik neemt:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de cosmeticastoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.
4. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.


Let op! Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.

Afmetingen van het apparaat:

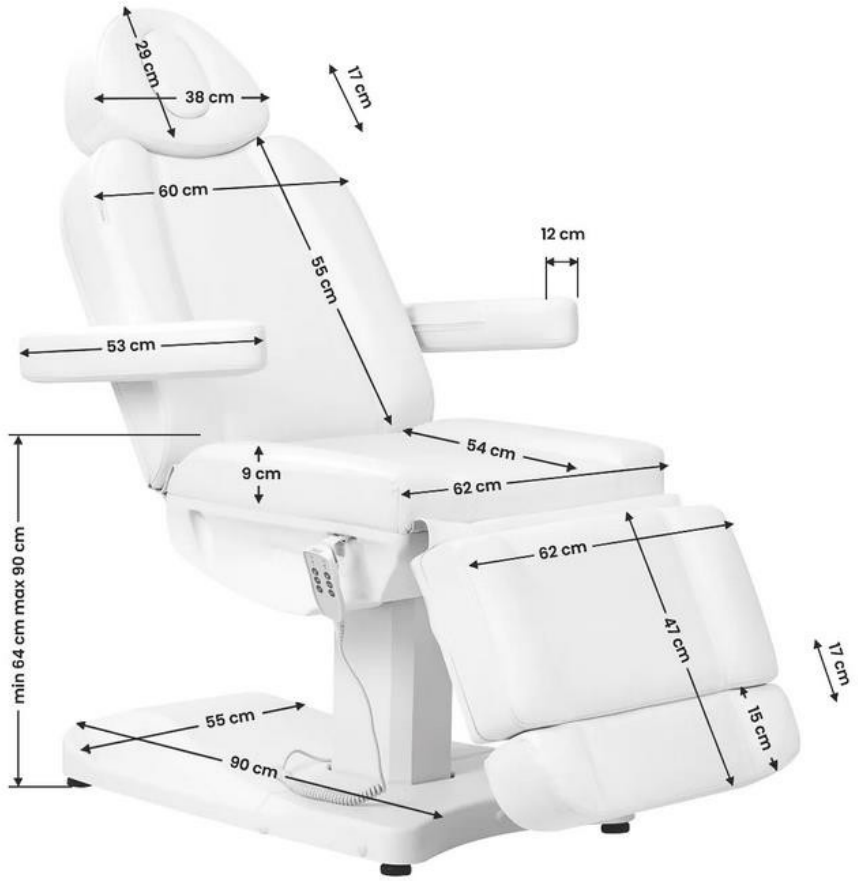



Constructie van het apparaat:

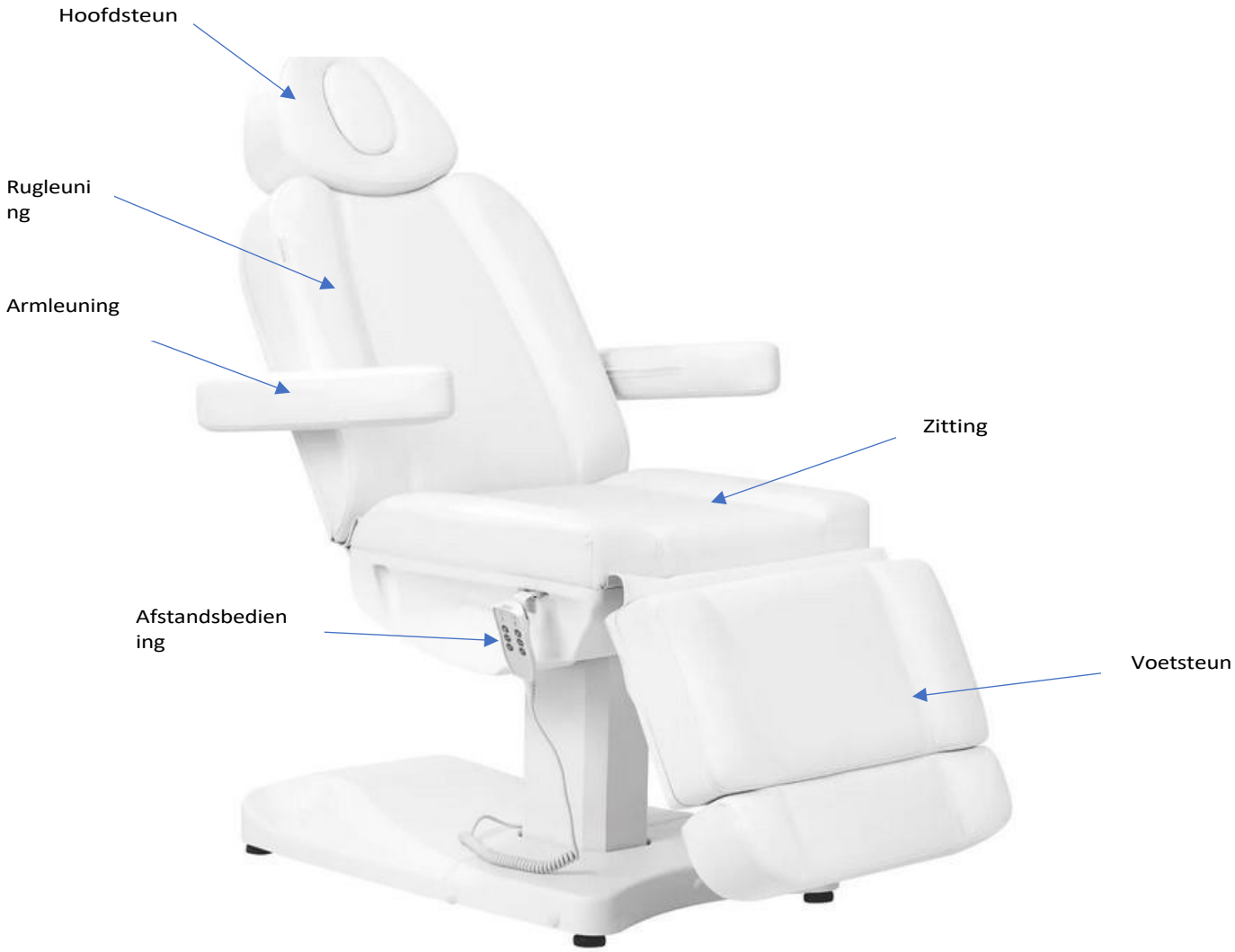

Waarschuwing:

1. De voetsteun is niet ontworpen om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Ga niet rechtstreeks op de arm- en voetsteun zitten.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen de stopcontacten niet meer dan 2 meter bedraagt.

Let op


1. Steek de stekker om veiligheidsredenen altijd in een geaard stopcontact.
2. Bind het netsnoer niet vast aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer gemakkelijk verwijderd kan worden in een noodsituatie.
3. Verwijder het netsnoer voordat u de elektrische schoonheidsstoel verplaatst, zodat het niet klem komt te zitten tussen bepaalde onderdelen van de stoel.
4. Als het netsnoer beschadigd is, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact, gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik alleen het originele netsnoer.
5. Laat de afstandsbediening niet bedienen door iemand die de behandeling niet uitvoert.
6. Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
7. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de stoel, zodat deze vrij in- en uitgeklapt kan worden.

8. Zorg ervoor dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen in de buurt van de stoel zijn die het apparaat kunnen beschadigen.
9. Pas het apparaat niet zelf aan. Als de fauteuil niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.


De stoel heeft een handbedieningsoptie met de afstandsbediening, evenals voetbedieningsopties. De hoogte van de stoel, de positie van de rugleuning en de voetsteun kunnen naar wens worden ingesteld.

Functies afstandsbediening:

1. Zithoogteverstelling (tussen 64-90 cm)
2. Rugleuning verstellen
3. Voetsteun verstelling

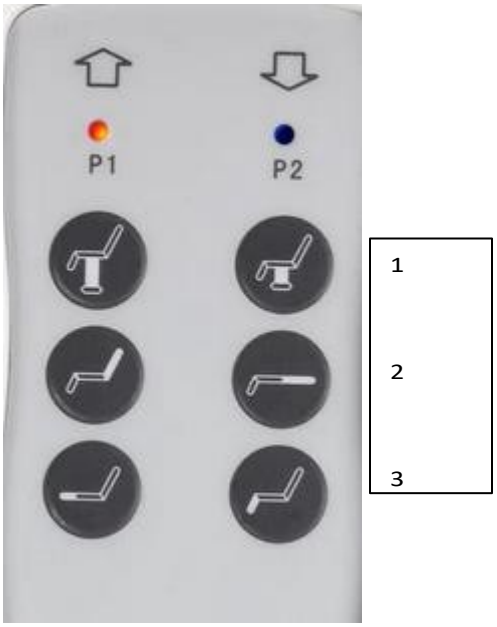


Functies van de voetschakelaar:

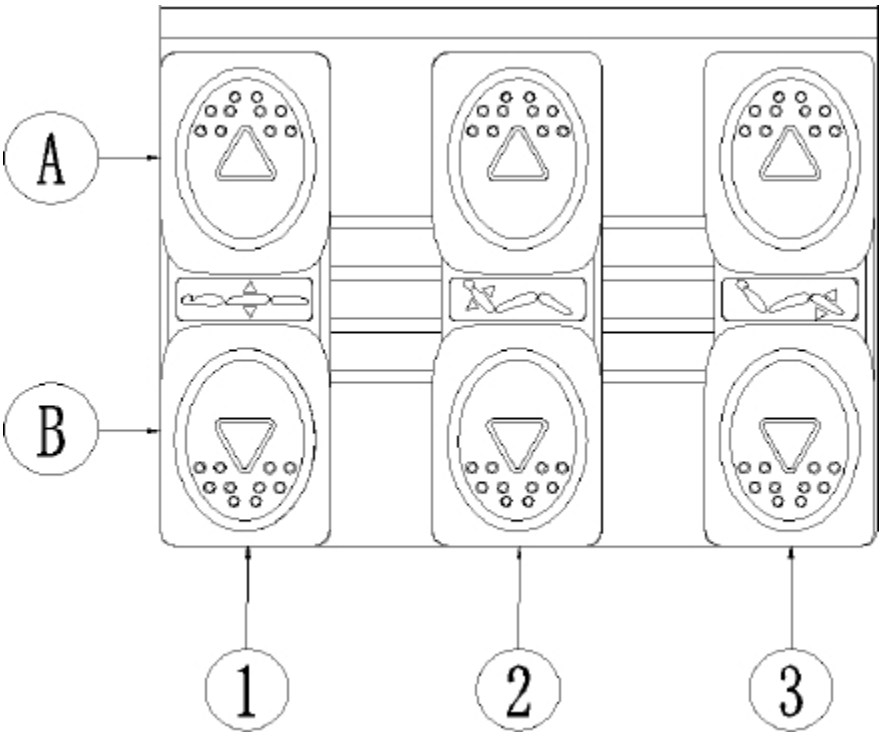

1. De zithoogte aanpassen. Druk op A om de stoel hoger te zetten of op B om de stoel lager te zetten.
2. De positie van de rugleuning aanpassen. Druk op A om de rugleuning omhoog te zetten of op B om de rugleuning omlaag te zetten.
3. De voetsteun aanpassen. Druk op A om de voetsteun omhoog te zetten of op B om de voetsteun omlaag te zetten.

Voetsteun verlengen

De stoel heeft ook een optie om de voetsteun te verlengen, waardoor het gemakkelijker wordt om behandelingen uit te voeren bij langere mensen en het comfort wordt verbeterd. De maximale lengte van de voetsteunverlenging is ongeveer 17 cm. De voetsteun wordt versteld door middel van een knop aan de onderkant van de voetsteun.

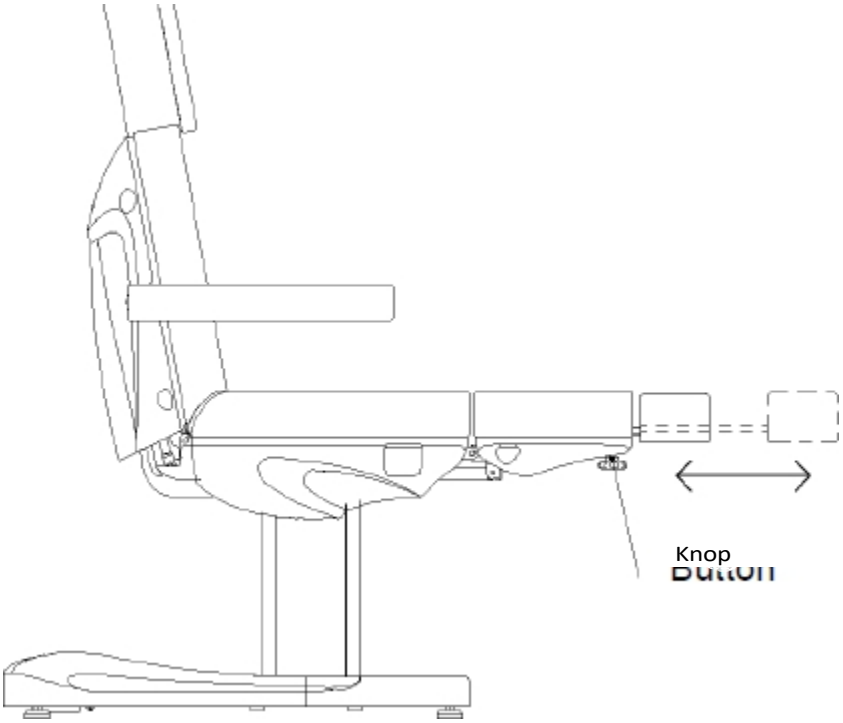


Armsteun installeren:

Schuif de armleuning in het gat dat zich aan de zijkant van de rugleuning bevindt. De armleuning moet stevig vastzitten. Schuif hem naar rechts of links zodat hij goed vastzit. Doe hetzelfde met de andere armsteun. De armsteun staat loodrecht op de grond (ongeacht de hoek van de stoel). Hij kan 180° gedraaid worden.

Installatie van de hoofdsteun:

Schuif de hoofdsteun in het gat bovenaan de rugleuning. Als de hoofdsteun op de juiste hoogte is, draai je de hendel aan de achterkant vast om de hoofdsteun vast te zetten.

Om de hoofdsteun te verlagen of te verlengen, draait u de draaihendel los, stelt u de hoofdsteun bij en draait u de draaihendel weer vast.

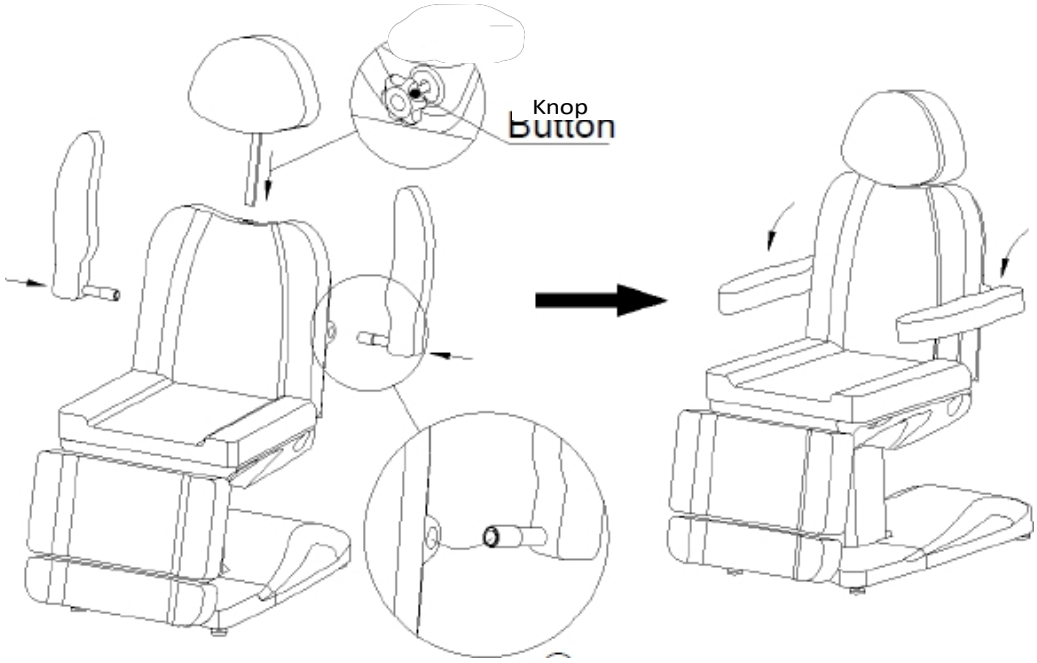

Het apparaat reinigen en desinfecteren

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Om het oppervlak van de stoel in goede staat te houden, moet deze regelmatig worden gereinigd. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om eens per maand een grondige desinfectie uit te voeren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal

Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging met vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant goedgekeurd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische cosmetische stoel of accessoires niet als ze niet goed werken.

4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de conditie en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:

1. Stroomkabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. De schakelkast en de bedrading ervan
4. Of er accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/bedieningseenheid openen of vervangen. Als een onderdeel van de apparatuur beschadigd is, trekt u de stekker uit het stopcontact en stopt u het gebruik. Breng vervolgens de servicedienst op de hoogte.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Geen reactie wanneer knoppen op de afstandsbediening worden ingedrukt	1. Aan/uit-knop werkt wel of niet. 2. Controleer of het pedaal maximaal is ingedrukt. 3. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. 4.Controleer of alles correct is aangesloten.	1. Probeer de aan/uit-knop opnieuw in te schakelen. 2. Probeer de andere knoppen in te schakelen en kijk of ze werken. 3. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit het opnieuw aan. 4. Haal de stekkers uit het stopcontact en sluit ze opnieuw aan.
Het apparaat maakt vreemde geluiden	Losse schroef	Draai de schroeven vast

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP Sp. z o.o. erkend servicecentrum:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het toestel.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikt elektrisch en elektronisch gebruikt elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en vervolgens naar inzamelpunten voor

inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.